



Medikationsmanagement

Zusammenstellung der DECOR-Informationen

Implementierungsleitfaden

Version vom 2019-09-16 09:42:55

PDF-Auszug vom 2019-09-16 09:50:55

Lizenzen

Dieses Programm ist freie Software: Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.

Dieses Programm wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Siehe <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

Der Inhalt dieser Spezifikation unterliegt möglicherweise anderen Urheber- und Markenrechten sowie Lizenzbestimmungen die hier nicht näher spezifiziert sind.

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind.

Haftungsansprüche gegen gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. vorliegt.

Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| 1 Projektinformation | 9 |
| 1.1 Projekt..... | 9 |
| 1.1.1 Weitere Projekt-Informationen..... | 9 |
| 1.1.2 Versionsinformationen..... | 9 |
| 2 Terminologien | 13 |
| 2.1 Value sets..... | 13 |
| 2.1.1 ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 13 |
| 2.1.2 ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25 - 2017-03-30 ref (aus Repository: pmp-)..... | 14 |
| 2.1.3 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 14 |
| 2.1.4 Administrative Gender (HL7 V3) 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-)..... | 15 |
| 2.1.5 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 16 |
| 2.1.6 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2016-10-05 ref (aus Repository: hl7de-)..... | 17 |
| 2.1.7 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2014-01-03 ref (aus Repository: hl7de-)..... | 40 |
| 2.1.8 BMP Dosiereinheit 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 - 2017-04-30 (V2.4) ref (aus Repository: pmp-)..... | 63 |
| 2.1.9 Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 65 |
| 2.1.10 Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 66 |
| 2.1.11 CriticalityObservationValue 2.16.840.1.113883.1.11.20549 - 2016-03-23 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 66 |
| 2.1.12 DispensableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14412 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)..... | 67 |
| 2.1.13 EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2018-05-09 ref (aus Repository: pmp-)..... | 75 |
| 2.1.14 EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2017-05-10 ref (aus Repository: pmp-)..... | 99 |
| 2.1.15 EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2018-05-09 ref (aus Repository: pmp-)..... | 120 |
| 2.1.16 EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2017-05-10 ref (aus Repository: pmp-)..... | 124 |

| | |
|--|-----|
| 2.1.17 Einnahmezeitpunkte 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20 - 2014-11-19 ref (aus Repository: pmp-) | 128 |
| 2.1.18 HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926 - 2014-06-09 ref (aus Repository: ccda-) | 128 |
| 2.1.19 Hauskomet-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.1 - 2018-09-11 21:05:52 ref (aus Repository: hauskomet-) | 129 |
| 2.1.20 Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3 - 2018-11-20 ref (aus Repository: hauskomet-) | 129 |
| 2.1.21 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 130 |
| 2.1.22 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 131 |
| 2.1.23 IPS Current Smoking Status 2.16.840.1.113883.11.22.59 - 2017-12-14 09:33:20 ref (aus Repository: hl7ips-) | 131 |
| 2.1.24 Laborparameter 1.2.276.0.76.11.431 - 2017-04-11 ref (aus Repository: hl7de-) | 132 |
| 2.1.25 Language 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-) | 155 |
| 2.1.26 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 178 |
| 2.1.27 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-) | 179 |
| 2.1.28 LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 180 |
| 2.1.29 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 181 |
| 2.1.30 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2013-01-31 ref (aus Repository: ccda-) | 182 |
| 2.1.31 LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 183 |
| 2.1.32 Medikationseintrag Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.2 - 2018-11-20 | 183 |
| 2.1.33 Medikationsmanagement-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.1 - 2019-02-02 | 184 |
| 2.1.34 ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 - 2017-12-17 (DEFN=UV=VO=1402-20171217) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 185 |
| 2.1.35 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 188 |
| 2.1.36 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 191 |
| 2.1.37 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 194 |
| 2.1.38 ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 194 |

| | |
|---|------------|
| 2.1.39 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 198 |
| 2.1.40 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 206 |
| 2.1.41 Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46 - 2015-11-17 ref (aus Repository: hl7de-) | 211 |
| 2.1.42 RoleClassAssociative 2.16.840.1.113883.1.11.19313 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 212 |
| 2.1.43 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 215 |
| 2.1.44 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 218 |
| 2.1.45 RoleStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15999 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) | 220 |
| 2.1.46 S_BMP_DARREICHUNGSFORM 1.2.276.0.76.11.454 - 2017-10-01 ref (aus Repository: kbvde-) | 221 |
| 2.1.47 S_BMP_DOSIEREINHEIT 1.2.276.0.76.11.455 - 2016-06-01 ref (aus Repository: kbvde-) | 233 |
| 2.1.48 S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT 1.2.276.0.76.11.451 - 2016-07-21 ref (aus Repository: kbvde-) | 235 |
| 2.1.49 TimingEvent 1.2.276.0.76.11.463 - 2018-09-11 21:05:52 ref (aus Repository: hl7de-) | 236 |
| 2.1.50 Vorbedingungen Medikation 1.2.276.0.76.11.453 - 2017-04-02 ref (aus Repository: hl7de-) | 237 |
| 2.1.51 Zeiteinheiten (UCUM) 1.2.276.0.76.11.452 - 2017-04-01 ref (aus Repository: hl7de-) | 238 |
| 3 Templates | 240 |
| 3.1 Transaktionsrepräsentierende Templates | 240 |
| 3.2 Templates | 240 |
| 3.2.1 Alkoholgebrauch 1.2.276.0.76.10.4291 - 2018-09-13 13:55:58 ref hl7de- | 240 |
| 3.2.2 Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 - 2019-02-10 | 242 |
| 3.2.3 Allergie/Unverträglichkeit Concern Act 1.2.276.0.76.10.4256 - 2017-06-04 ref hl7de- | 246 |
| 3.2.4 Allergie/Unverträglichkeit Observation 1.2.276.0.76.10.4257 - 2017-06-04 ref hl7de- | 248 |
| 3.2.5 Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015 - 2014-11-15 ref hl7de- | 258 |
| 3.2.6 CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012 - 2011-12-19 ref hl7de- | 260 |
| 3.2.7 Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025 - 2014-12-21 ref hl7de- | 262 |
| 3.2.8 Körpergröße (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 - 2019-02-09 | 265 |
| 3.2.9 Körpergewicht (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 - 2019-02-09 | 268 |
| 3.2.10 CDA Medikationsmanagement 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 - 2018-10-13 16:20:07 | 271 |
| 3.2.11 CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005-09-07 ref ad1bbr- | 293 |

| | |
|--|-----|
| 3.2.12 CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005-09-07 ref ad1bbr- | 296 |
| 3.2.13 CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007 - 2012-12-12 ref hl7de- | 297 |
| 3.2.14 CDA countryCode (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22 - 2019-06-25 14:11:57 | 297 |
| 3.2.15 CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006 - 2012-12-12 ref hl7de- | 298 |
| 3.2.16 CDA id 1.2.276.0.76.10.90004 - 2012-12-12 ref hl7de- | 299 |
| 3.2.17 CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008 - 2012-03-11 ref hl7de- | 300 |
| 3.2.18 CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002 - 2013-07-15 ref hl7de- | 301 |
| 3.2.19 CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009 - 2012-12-12 ref hl7de- | 302 |
| 3.2.20 CDA title 1.2.276.0.76.10.90005 - 2012-12-12 ref hl7de- | 303 |
| 3.2.21 CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003 - 2013-07-15 ref hl7de- | 304 |
| 3.2.22 Klinische Parameter (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 - 2019-02-09 | 305 |
| 3.2.23 Leistungsportler 1.2.276.0.76.10.4297 - 2019-02-09 ref hl7de- | 308 |
| 3.2.24 Kreatinin (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 - 2019-02-09 | 311 |
| 3.2.25 Kritikalität 1.2.276.0.76.10.4259 - 2017-06-04 ref hl7de- | 314 |
| 3.2.26 Datenübermittlung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 - 2019-08-22 10:32:07 | 316 |
| 3.2.27 Datenerfassung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.2 - 2018-11-02 | 317 |
| 3.2.28 Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2017-06-04 ref pmp- | 319 |
| 3.2.29 Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2011-12-19 ref pmp- | 322 |
| 3.2.30 Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2018-11-01 (mpp 2018) ref pmp- | 323 |
| 3.2.31 Erwarteter Geburtstermin 1.2.276.0.76.10.4255 - 2017-06-04 ref hl7de- | 330 |
| 3.2.32 Erweiterung Druckkennzeichen 1.2.276.0.76.10.90033 - 2019-02-09 | 332 |
| 3.2.33 Erweiterung Vorhabenerweiterung 1.2.276.0.76.10.90034 - 2019-02-09 | 334 |
| 3.2.34 Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 - 2018-11-20 ref hauskomet- | 336 |
| 3.2.35 Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 - 2018-09-07 ref hauskomet- ... | 339 |
| 3.2.36 CDA authenticator 1.2.276.0.76.10.2019 - 2014-08-25 ref hl7de- | 342 |
| 3.2.37 CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031 - 2014-12-17 ref pmp- | 345 |
| 3.2.38 CDA author (pmp) 1.2.276.0.76.10.2029 - 2014-09-17 ref pmp- | 348 |
| 3.2.39 CDA custodian (pmp) 1.2.276.0.76.10.2030 - 2014-09-17 ref pmp- | 352 |
| 3.2.40 CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020 - 2014-08-25 ref hl7de- | 355 |
| 3.2.41 CDA recordTarget (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 - 2019-02-09 | 358 |
| 3.2.42 CDA recordTarget (pmp) 1.2.276.0.76.10.2028 - 2017-06-04 ref pmp- | 365 |
| 3.2.43 CDA recordTarget (pmp) 1.2.276.0.76.10.2028 - 2014-09-17 ref pmp- | 370 |

| | |
|---|-----|
| 3.2.44 Gesundheitsbelange (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 - 2019-02-09 | 373 |
| 3.2.45 Wichtige Angaben 1.2.276.0.76.10.3042 - 2014-11-01 ref pmp- | 376 |
| 3.2.46 Laborergebnis 1.2.276.0.76.10.4254 - 2017-03-21 ref hl7de- | 378 |
| 3.2.47 Leistungserbringer-Kommentar 1.2.276.0.76.10.3133 - 2018-11-02 | 381 |
| 3.2.48 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2018-12-04 ref pmp- | 383 |
| 3.2.49 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2017-06-04 ref pmp- | 389 |
| 3.2.50 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2014-11-01 ref pmp- | 396 |
| 3.2.51 Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 - 2019-02-18 10:07:21 ref hauskomet- | 401 |
| 3.2.52 Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2017-06-04 ref pmp- | 404 |
| 3.2.53 Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2014-11-01 ref pmp- | 411 |
| 3.2.54 Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028 - 2017-06-04 ref pmp- | 416 |
| 3.2.55 Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024 - 2014-11-01 ref pmp- | 418 |
| 3.2.56 Ohne Medikation 1.2.276.0.76.10.4295 - 2019-01-27 ref pmp- | 421 |
| 3.2.57 Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2017-06-04 (mpp 2017) ref pmp- | 423 |
| 3.2.58 Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2014-11-01 (pmp 2014) ref pmp- | 429 |
| 3.2.59 Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 - 2018-11-02 | 431 |
| 3.2.60 Aktuelle Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 - 2019-02-09 | 452 |
| 3.2.61 Medikation Gruppierung (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 - 2019-02-09 | 455 |
| 3.2.62 AMTS Prüfung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 - 2019-02-12 | 458 |
| 3.2.63 Stillzeit (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 - 2019-02-09 | 459 |
| 3.2.64 CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011 - 2011-12-19 ref hl7de- | 462 |
| 3.2.65 Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024 - 2014-12-17 ref hl7de- | 464 |
| 3.2.66 Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026 - 2014-11-01 ref pmp- | 465 |
| 3.2.67 Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014 - 2014-03-12 10:18:42 ref hl7de- | 468 |
| 3.2.68 CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010 - 2011-12-19 ref hl7de- | 471 |
| 3.2.69 Personennamen 1.2.276.0.76.10.90030 - 2018-04-11 ref hl7de- | 472 |
| 3.2.70 Pflegerarzt (Kurator) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 - 2019-08-22 11:16:37 | 475 |
| 3.2.71 Bezug zur Therapie-Intention 1.2.276.0.76.10.4296 - 2019-01-27 ref pmp- | 479 |
| 3.2.72 Status Schwangerschaft (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 - 2019-02-09 | 480 |
| 3.2.73 Reaktion/Manifestation 1.2.276.0.76.10.4258 - 2017-06-04 ref hl7de- | 483 |
| 3.2.74 Grund für Medikation 1.2.276.0.76.10.4027 - 2016-01-31 ref pmp- | 485 |
| 3.2.75 Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 - 2019-07-16 12:58:04 | 488 |

| | |
|--|-----|
| 3.2.76 Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 - 2018-11-07 ref pmp- | 491 |
| 3.2.77 Bezug zu Abgabe des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4029 - 2014-12-21 ref pmp-..... | 493 |
| 3.2.78 RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020 - 2014-08-25 ref hl7de- | 496 |
| 3.2.79 Bezug zu Verordnung des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4028 - 2014-12-21 ref pmp- | 498 |
| 3.2.80 Sozialanamnese (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 - 2019-07-01 18:11:55 | 501 |
| 3.2.81 Tabakgebrauch 1.2.276.0.76.10.4290 - 2018-09-13 13:52:42 ref hl7de- | 507 |

1 Projektinformation

1.1 Projekt

Kein Project Beschreibung

1.1.1 Weitere Projekt-Informationen

| Eigenschaften | |
|---|------------------------|
| Prefix: medmgmt- | Standardsprache: de-DE |
| Publikationsort | Projekt-Übersicht |
| http://pub.art-decor.org/medmgmt/ | Projekt Index |
| Disclaimer | |
| <p>Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von gevko GmbH und HL7 Deutschland e. V. vorliegt.</p> | |
| Liste der Autoren | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrator ▪ Dr. Kai Heitmann ▪ Ralf Franke ▪ Alexander Bingel ▪ Marcus Hettlage ▪ Carmen Gaa ▪ Thies Eggers ▪ Andreas Mohr ▪ Ulrich Henning ▪ Daniel Roggors ▪ Frank Fixemer ▪ Gwenda Elmen ▪ Joerg Rupprecht ▪ Carl Schüler ▪ Rüdiger Hochscheidt | |

1.1.2 Versionsinformationen

| Datum | Von | Beschreibung |
|------------------------|--------------------|---|
| 2019-09-16 09:42:55 | Marcus Hettlage | Official Release Test Release |
| 2019-09-11 11:44:14 | Marcus Hettlage | Official Release: 1.01 |

Anpassungen im Zuge der Angleichung an dem Hauskomet-Datenformat (für die Sektion "Medikation"):

- Kategorie wird nicht mehr mittels dem moodCode-Attribut, sondern mittels der Hauskomet Kategorie angegeben.
- Kuratierender Pflegearzt hinzugefügt.
- TemplateId des adaptierten Elements übernommen.
- Template Mapping wurde angepasst.

2019-08-20 12:35:46 Marcus Hettlage

There have been changes to the following 9 issues since the last intermediate version or release.

- Issue 46 "Zielsetzung für komplexe Dosierangaben" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-04-15T15:06:24):

Die Musterbeispiele sind jetzt unter http://wiki.hl7.de/index.php?title=cdamedp:Komplexe_Dosierangaben eingestellt worden.

- Issue 47 "Medikationsmanagement heute und morgen" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:43:37):

Befund:

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Medikationsmanagement heute und morgen" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

Vorschlag:

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren

Nähere Erläuterung:

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 48 "Wirkstoff-Kodierungen und Wirkstoff-Verordnungen" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:51:59):

Befund:

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Wirkstoff-Kodierungen und Wirkstoff-Verordnungen" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

Vorschlag:

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

Nähere Erläuterung:

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 49 "Deutsche und internationale Kataloge am Beispiel der ATC-Klassifikation" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:54:36):

Befund:

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Deutsche und internationale Kataloge am Beispiel der ATC-Klassifikation" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

Vorschlag:

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

Die AG eMedikation bittet die Industriehersteller um eine Kommentierung (ggf. Änderungsvorschläge) zu folgenden Fragen:

1. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei der Umsetzung der jetzigen Normvorgabe ATC-DIMDI?
2. Gibt es andere Kataloge, die Sie als sinnvoll erachten?
3. Wie gehen Sie damit um, dass mehrere Kataloge existieren und genutzt werden können / müssen?

Nähere Erläuterung:

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

Siehe auch: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/arzneimittel/atc-klassifikation/>

- Issue 50 "Extensionen – Innovationsspielräume dauerhaft ermöglichen" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:56:03):

Befund:

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Extensionen – Innovationsspielräume dauerhaft ermöglichen" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

Vorschlag:

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

Nähere Erläuterung:

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 51 "Von der Papierwelt zur digitalen Welt: Zeilen-ID, Therapie-ID, Historische Medikation" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:57:04):

Befund:

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Von der Papierwelt zur digitalen Welt: Zeilen-ID, Therapie-ID, Historische Medikation" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

Vorschlag:

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

Nähere Erläuterung:

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 52 "Migrationspfade – der Weg zum konsolidierten Datenaustauschformat" with status "Offen". Letzte Ereignis (2019-02-13T11:58:09):

Befund:

Die AG eMedikation hat Überlegungen zum Thema "Migrationspfade – der Weg zum konsolidierten Datenaustauschformat" im Implementierungsleitfaden zusammengefasst.

Vorschlag:

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Thema im Kommentierungsverfahren.

Nähere Erläuterung:

Siehe entsprechendes Kapitel im Implementierungsleitfaden (Kapitel "Diskussion").

- Issue 53 "Typo / Tippfehler" with status "Geschlossen". Letzte Ereignis (2019-07-16T13:49:41):

Der Text wurde angepasst


- Issue 54 "Beispiel anpassen" with status "Geschlossen". Letzte Ereignis (2019-07-18T15:42:19):

Das Original wurde einer technischen Korrektur unterzogen.

2 Terminologien

2.1 Value sets


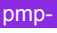

2.1.1 ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ref ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|
| Status | ● Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | ActStatus | Anzeigename | ActStatus |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Contains the names (codes) for each of the states in the state-machine of the RIM Act class. | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.14 - ActStatus - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-S | normal | normal | ActStatus |
| 1-L | aborted | aborted | ActStatus |
| 1-L | active | active | ActStatus |
| 1-L | cancelled | cancelled | ActStatus |
| 1-L | completed | completed | ActStatus |
| 1-L | held | held | ActStatus |
| 1-L | new | new | ActStatus |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1-L | suspended | suspended | ActStatus |
| 0-L | nullified | nullified | ActStatus |
| 0-L | obsolete | obsolete | ActStatus |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.2  **ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25 - 2017-03-30**  (aus Repository: pmp-)

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25   | Gültigkeit | 2017-03-30 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended | Anzeigename | ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended |
| 2 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.5.14 - ActStatus - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 0-L | completed | Completed | ActStatus |
| 0-L | aborted | Aborted | ActStatus |
| 0-L | active | Active | ActStatus |
| 0-L | suspended | Suspended | ActStatus |
| 0-L | UNK | Unknown | Null Flavor |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.3  **AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)**  (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-----------|--|-------------------|------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.1   | Gültigkeit | 2014-03-26 |
|-----------|--|-------------------|------------|


| | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------|
| | | Andere Versionen mit dieser Id: | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Administrative Gender (HL7 V3) vom 2013-01-31 ref ccda- AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 ref ad2bbr- | |
| Status | Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | AdministrativeGender | Anzeigename | AdministrativeGender |
| Beschreibung | <p>History description 2014-03-26: Lock all vau sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p>description:</p> <p>The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)</p> | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|------------------|-----------------------|
| 0-L | F | Female | Administrative Gender |
| 0-L | M | Male | Administrative Gender |
| 0-L | UN | Undifferentiated | Administrative Gender |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.4 **Administrative Gender (HL7 V3) 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2013-01-31** (aus Repository: ccda-)








| | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.1 ref ccda- | Gültigkeit | 2013-01-31 Andere Versionen mit dieser Id: |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26 ref ad2bbr- AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 ref ad2bbr- |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Status |  Definitiv | Versions-Label | |
| Name | AdministrativeGender | Anzeigename | Administrative Gender (HL7 V3) |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|------------------|-----------------------|
| 0-L | F | Female | Administrative Gender |
| 0-L | M | Male | Administrative Gender |
| 0-L | UN | Undifferentiated | Administrative Gender |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.5  **AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)  (aus Repository: ad2bbr-)**

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.1  ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  AdministrativeGenderDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-  Administrative Gender (HL7 V3) vom 2013-01-31  ccda- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | AdministrativeGender | Anzeigename | AdministrativeGender |
| Beschreibung |  description: The gender of a person used for administrative purposes (as opposed to clinical gender) | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|-----------------------|
| 0-L | F | Female | Administrative Gender |

| | | | |
|-----|----|------------------|-----------------------|
| 0-L | M | Male | Administrative Gender |
| 0-L | UN | Undifferentiated | Administrative Gender |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.6 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2016-10-05 (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 1.2.276.0.76.11.12   | Gültigkeit | 2016-10-05 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  Allergien und Unverträglichkeiten vom 2014-01-03   |
| Canonical URI | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/allergyintolerance-code | | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | AllergiesIntolerances | Anzeigename | Allergien und Unverträglichkeiten |
| Quell-Codesystem | 1.2.276.0.76.5.465 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.465 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|---------|---|--------------------|
| 0-L | I81502 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittel a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I81501 | Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I564 | Allergie gegen Nahrungsmittel | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I97198 | Allergische Reaktion durch Nahrungsmittel a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112579 | Eiprotein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112647 | Eiprotein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I120131 | Erdnussprotein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112580 | Erdnussöl-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112648 | Erdnussöl-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I116460 | Fisch-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116463 | Fischeiweiß-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116461 | Gelatine-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116459 | Hühnereiweiß-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24369 | Kuhmilchproteinintoleranz | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116796 | Kürbisfrüchte-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116465 | Leguminosen-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I29215 | Nahrungsmittelunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116462 | Nuss-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116353 | Rinderprotein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116795 | Sesamöl-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112576 | Soja-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112644 | Soja-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112577 | Sojaprotein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112645 | Sojaprotein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112641 | Sorbitol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112709 | Sorbitol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109560 | Sorbitolunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109981 | Überempfindlichkeit gegen Farbstoffe in Nahrungsmitteln | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109980 | Überempfindlichkeit gegen Konservierungsmittel | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109978 | Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittelzusatzstoffe | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112578 | Zimt-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--------------------------------------|--------------------|
| 0-L | I112646 | Zimt-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116464 | Zitrusfrüchte-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I87720 | Allergischer Schock | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I565 | Anaphylaktischer Schock | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I16144 | Anaphylaxie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I85981 | Herxheimer-Reaktion | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I80523 | Schock durch Arzneimittel | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74711 | Akutes essentielles Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74531 | Akutes Quincke-Ödem der Haut | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74712 | Akutes umschriebenes Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74721 | Akutes zirkumskriptes Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64438 | Allergisches angioneurotisches Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64444 | Allergisches Angioödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I96567 | Allergisches Glottisödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I566 | Angioneurotisches Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64441 | Angioneurotisches Ödem mit Urtikaria | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I567 | Angioödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I64445 | Angioödem mit Urtikaria | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I75170 | Bannister-Krankheit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I82080 | Larynxurtikaria | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I74718 | Periodisches Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I81969 | Quincke-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I568 | Quincke-Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I82079 | Urticaria gigantea | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119417 | AAE [Erworbenes Angioödem] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119795 | Erworbenes angioneurotisches Ödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119704 | Erworbenes Angioödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119898 | Erworbenes Bradykinin-induziertes Angioödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I119899 | Erworbenes nicht-Histamin-induziertes Angioödem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15529 | Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109613 | Allergie gegen Alkohol | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112601 | Allergie gegen echtes Karmin [E 120] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15530 | Allergische Diathese | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15533 | Allergische Reaktion | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112598 | Allurarot-Allergie [E 129] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112666 | Allurarot-Überempfindlichkeit [E 129] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112625 | Amaranth-Allergie [E 123] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112693 | Amaranth-Überempfindlichkeit [E 123] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112596 | Annatto-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112664 | Annatto-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I32389 | Arthus-Phänomen | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24895 | Atopie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112624 | Azorubin-Allergie [E 122] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112692 | Azorubin-Überempfindlichkeit [E 122] | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112623 | Benzalkoniumchlorid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112691 | Benzalkoniumchlorid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112594 | Benzoessäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112662 | Benzoessäure-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112622 | Benzolsulfonsäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112690 | Benzolsulfonsäure-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112621 | Benzylalkohol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112689 | Benzylalkohol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112620 | Bernsteinsäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112688 | Bernsteinsäure-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112597 | Braun-Allergie [E 155] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112665 | Braun-Überempfindlichkeit [E 155] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112618 | Brillantschwarz-Allergie [E 151] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112686 | Brillantschwarz-Überempfindlichkeit [E 151] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112590 | Butylhydroxyanisol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112658 | Butylhydroxyanisol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112619 | Butylhydroxytoluol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112687 | Butylhydroxytoluol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112587 | Carrageen-Allergie [E 407] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112655 | Carrageen-Überempfindlichkeit [E 407] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112617 | Cetylalkohol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112685 | Cetylalkohol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112639 | Chinazolin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112707 | Chinazolin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112616 | Chinolingelb-Allergie [E 104] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112684 | Chinolingelb-Überempfindlichkeit [E 104] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112615 | Chlorocresol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112683 | Chlorocresol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112638 | Chrysanthemen-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112706 | Chrysanthemen-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112600 | Cochenillerot-Allergie [E 124] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112668 | Cochenillerot-Überempfindlichkeit [E 124] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112637 | Doldengewächs-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112705 | Doldengewächs-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112614 | Erythrosin-Allergie [E 127] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112682 | Erythrosin-Überempfindlichkeit [E 127] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112483 | Ethanol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112352 | Ethanol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112612 | Formaldehyd-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112680 | Formaldehyd-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112591 | Gallate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112659 | Gallate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117140 | Gallussäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112613 | Gelborange-Allergie [E 110] | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112681 | Gelborange-Überempfindlichkeit [E 110] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112585 | Guarkernmehl-Allergie [E 412] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112653 | Guarkernmehl-Überempfindlichkeit [E 412] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112636 | Hamsterprotein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112704 | Hamsterprotein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115633 | Hyperergische Reaktion | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115638 | Hyperergische Reaktion gegen mikrobielle Allergene | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15536 | Hypersensibilität | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I32391 | Idiosynkrasie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112611 | Isopropylalkohol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112679 | Isopropylalkohol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109672 | Jodallergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112586 | Johannisbrotkernmehl-Allergie [E 410] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112654 | Johannisbrotkernmehl-Überempfindlichkeit [E 410] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15532 | Kaninchenallergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112583 | Karaya-Allergie [E 416] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112651 | Karaya-Überempfindlichkeit [E 416] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112635 | Korbblütler-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112703 | Korbblütler-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112602 | Kurkumin-Allergie [E 100] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112670 | Kurkumin-Überempfindlichkeit [E 100] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112595 | Litholrubin-Allergie [E 180] | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112663 | Litholrubin-Überempfindlichkeit [E 180] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112582 | Lysozym-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112650 | Lysozym-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112610 | Macrogolglycerolricinoleat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112678 | Macrogolglycerolricinoleat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112634 | Mausprotein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112702 | Mausprotein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I30749 | MCS [Multiple-Chemical-Sensitivity]-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15535 | Multiple Allergien | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15534 | Multiple-Chemical-Sensitivity [MCS]-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112609 | Natriumbenzoat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112677 | Natriumbenzoat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112608 | Natriumdisulfit-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112676 | Natriumdisulfit-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112607 | Natriumedetat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112675 | Natriumedetat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112633 | Nitroverbindungen-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112701 | Nitroverbindungen-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112632 | Norfluran-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112700 | Norfluran-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112593 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112661 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 0-L | I112606 | Parabene-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112674 | Parabene-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112631 | Phenolrot-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112699 | Phenolrot-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112605 | Ponceau-Allergie [E 124] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112673 | Ponceau-Überempfindlichkeit [E 124] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112604 | Propylenglycol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112672 | Propylenglycol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117141 | Propylgallate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112630 | Pyrrolidon-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112698 | Pyrrolidon-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112599 | Rot-Allergie [E 128] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112667 | Rot-Überempfindlichkeit [E 128] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112592 | Schwefeldioxid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112660 | Schwefeldioxid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116354 | Schwermetallüberempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112640 | Sorbinsäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112708 | Sorbinsäure-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112642 | Stearylalkohol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112710 | Stearylalkohol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112643 | Sulfit-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112711 | Sulfit-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112603 | Tartrazin-Allergie [E 102] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112671 | Tartrazin-Überempfindlichkeit [E 102] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I120132 | Thioharnstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112629 | Thionamid-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112697 | Thionamid-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112584 | Traganth-Allergie [E 413] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112652 | Traganth-Überempfindlichkeit [E 413] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112588 | Triammoniumcitrat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112656 | Triammoniumcitrat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112628 | Triarylmethan-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112696 | Triarylmethan-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112581 | Triethylcitrat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112649 | Triethylcitrat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112627 | Triphenylmethan-Farbstoff-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112695 | Triphenylmethan-Farbstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112626 | Tropasäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112694 | Tropasäure-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15531 | Unklare Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I32390 | Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116798 | Überempfindlichkeit durch 2-Phenoxyethanol | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116467 | Überempfindlichkeit durch Aspergillus-Extrakt | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116799 | Überempfindlichkeit durch E. coli-Protein | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112669 | Überempfindlichkeit durch echtes Karmin [E 120] | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116797 | Überempfindlichkeit durch Polysorbat 20 | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116466 | Überempfindlichkeit durch quaternäre Ammoniumverbindung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I15537 | Überempfindlichkeitsreaktion | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112589 | Zitronensäure-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112657 | Zitronensäure-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I90606 | Arthritis bei Überempfindlichkeitsreaktion a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I83174 | Abnorme Arzneimittelwirkung a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112538 | ACE-Hemmer-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112408 | ACE-Hemmer-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112539 | Aciclovir-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112409 | Aciclovir-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112540 | Acridin-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112410 | Acridin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112541 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112411 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I16017 | Adriblastinschädigung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112542 | Allergie gegen adrenerge Mittel | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112465 | Allergie gegen halogenierte Kohlenwasserstoffe | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109567 | Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112573 | Allergie gegen monoklonale Antikörper | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112457 | Allergie gegen normale humane Immunglobuline | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112507 | Allergie gegen trizyklische Antidepressiva | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89387 | Allergische Reaktion durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89388 | Allergische Reaktion durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I110486 | Allergisches Medikamentenexanthem | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112543 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112413 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112544 | Amantadin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112414 | Amantadin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112460 | Amid-Lokalanästhetika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112329 | Amid-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112545 | Amidin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112415 | Amidin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112536 | Aminochinoline-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112406 | Aminochinoline-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112546 | Aminoglykosid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112416 | Aminoglykosid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112547 | Amoxicillin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112417 | Amoxicillin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112548 | Amphotericin-B-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112418 | Amphotericin-B-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I676 | Analgetikaintoleranz | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I670 | Androgennebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112550 | Anthracen-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112420 | Anthracen-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112549 | Anthracyclin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112419 | Anthracyclin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I671 | Antiandrogen-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I110518 | Antibiotikaunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112551 | Anticholinergika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112421 | Anticholinergika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I691 | Antidiabetika-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112552 | Antihistaminika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112422 | Antihistaminika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I672 | Antiöstrogen-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I12827 | Arzneimittelallergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116801 | Arzneimittelbedingte Überhangeffekte | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109565 | Arzneimittelinduzierte Toleranzentwicklung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I73188 | Arzneimittelreaktion a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I697 | Arzneimittelunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I78497 | Arzneimittelüberempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112553 | Atropin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112423 | Atropin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112555 | Baldrianwurzel-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112425 | Baldrianwurzel-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112556 | Barbiturate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112426 | Barbiturate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112557 | Benzamid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112427 | Benzamid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112558 | Benzimidazol-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112428 | Benzimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112559 | Benzodiazepin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112429 | Benzodiazepin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112560 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112430 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112515 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112385 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112561 | Betablocker-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112431 | Betablocker-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112562 | Betalaktam-Antibiotika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112432 | Betalaktam-Antibiotika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112563 | Bisphosphonat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112433 | Bisphosphonat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112564 | Butyrophenon-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112434 | Butyrophenon-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112566 | Carbamat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112436 | Carbamat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--------------------------------------|--------------------|
| 0-L | I112567 | Carbamazepin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112437 | Carbamazepin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112568 | Carbapenem-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112438 | Carbapenem-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112569 | Cefotaxim-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112439 | Cefotaxim-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112570 | Cephalosporin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112440 | Cephalosporin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I692 | Chemotherapie-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112571 | Chinolin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112441 | Chinolin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112572 | Chinolon-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112442 | Chinolon-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I685 | Chlormadinonacetat-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112574 | Clindamycin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112444 | Clindamycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I673 | Cyproteronazetat-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117908 | Cytokine-Release-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112535 | Dacarbazin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112405 | Dacarbazin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112487 | Darbepoetin-alfa-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112356 | Darbepoetin-alfa-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I674 | Dehydroepiandrosteronsulfat-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112459 | Desirudin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112328 | Desirudin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I675 | Desogestrel-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I677 | DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112494 | Dihydropyridin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112364 | Dihydropyridin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112492 | Diphenylbutylpiperidin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112362 | Diphenylbutylpiperidin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115806 | DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms]-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I83175 | Drogenwirkung a.n.k. | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112489 | Erythromycin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112358 | Erythromycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112462 | Ester-Lokalanästhetika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112331 | Ester-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112485 | Estradiol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I678 | Estradiol-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112354 | Estradiol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I679 | Estriol-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I680 | Estron-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I681 | Ethinyl-Estradiol-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112481 | Fentanyl-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112350 | Fentanyl-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112479 | Filgrastim-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112348 | Filgrastim-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116805 | Flare-Phänomen durch Strahlentherapie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112477 | Fluorouracil-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112346 | Fluorouracil-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112475 | Gadodiamid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112344 | Gadodiamid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I682 | Gestagen-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109614 | Gesteigerte Empfindlichkeit auf ein Arzneimittel | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I683 | Glukokortikoid-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112471 | Glycopeptid-Antibiotika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112340 | Glycopeptid-Antibiotika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112469 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112338 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112504 | Harnstoff-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112374 | Harnstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112463 | Heparin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112332 | Heparin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112461 | Herzglykoside-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112330 | Herzglykoside-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112467 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I112336 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112453 | Hydantoin-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112322 | Hydantoin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112451 | Hydralazin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112320 | Hydralazin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89391 | Idiosynkrasie durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I89392 | Idiosynkrasie durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112449 | Imidazol-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112318 | Imidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112499 | Immunglobuline-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112369 | Immunglobuline-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112447 | Indometacin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112316 | Indometacin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112446 | Inhalationsanästhetika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112315 | Inhalationsanästhetika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I684 | Insulin-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116802 | Jodschnupfen | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I115859 | Kaliumthiocyanat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112565 | Kalziumantagonisten-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112435 | Kalziumantagonisten-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112575 | Koffein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112445 | Koffein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112473 | Kontrastmittel-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112342 | Kontrastmittel-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112448 | Kortikosteroid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112317 | Kortikosteroid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109566 | Kreuztoleranz | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112452 | Lidocain-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112321 | Lidocain-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112454 | Lincomycin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112323 | Lincomycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112456 | Lincosamid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112325 | Lincosamid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112458 | Lisinopril-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112327 | Lisinopril-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I698 | Lokalanästhetikaunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112450 | Lutein-Releasing-Hormone-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112319 | Lutein-Releasing-Hormone-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112464 | Macrogol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112333 | Macrogol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112554 | Makrolid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112468 | Makrolid-Antibiotika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112337 | Makrolid-Antibiotika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112424 | Makrolid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I12828 | Medikamentenallergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I696 | Medikamentenunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112472 | Mercaptopurin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112341 | Mercaptopurin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112470 | Methanolchinolin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112339 | Methanolchinolin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112476 | Metoprolol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112345 | Metoprolol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112478 | Muskelrelaxanzien-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112347 | Muskelrelaxanzien-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112480 | Mutterkornalkaloid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112349 | Mutterkornalkaloid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112482 | Nadroparin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112351 | Nadroparin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112484 | Natamycin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112353 | Natamycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24992 | Nebenwirkung oraler Kontrazeptiva | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112486 | Neomycin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112355 | Neomycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112488 | Neuroleptika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112357 | Neuroleptika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112490 | Nitrat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112359 | Nitrat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112491 | Nitrofurantoin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112361 | Nitrofurantoin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112498 | Nitroimidazol-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112368 | Nitroimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112493 | Nitrosoharnstoff-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112363 | Nitrosoharnstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I686 | Norethisteron-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I687 | Oxytocin-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112534 | Opiat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112404 | Opiat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24993 | Ovulationshemmernebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I24991 | Ovulationshemmerunverträglichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112533 | Oxycort-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112403 | Oxycort-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109417 | Oxytocin-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I12829 | Penicillin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112532 | Perchlorat-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112402 | Perchlorat-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112531 | Perubalsam-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112401 | Perubalsam-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112530 | Phenothiazin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |

| | | | |
|-----|---------|--|--------------------|
| 0-L | I112400 | Phenothiazin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112529 | Phenytoin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112399 | Phenytoin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112528 | Piperazin-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112398 | Piperazin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112527 | Piperidin-Derivate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112397 | Piperidin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112455 | Plasmaprotein-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112324 | Plasmaprotein-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112526 | Podophyllotoxin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112396 | Podophyllotoxin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112525 | Polymyxin-B-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112395 | Polymyxin-B-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112524 | Pravastatin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112394 | Pravastatin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112523 | Probenecid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112393 | Probenecid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I689 | Progesteron-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112522 | Propacetamol-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112392 | Propacetamol-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112521 | Prostaglandin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112391 | Prostaglandin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |



| | | | |
|-----|---------|---|--------------------|
| 0-L | I117241 | Purple-Glove-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112520 | Pyrazolon-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112390 | Pyrazolon-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112519 | Pyrethrin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112389 | Pyrethrin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112518 | Quecksilber-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112388 | Quecksilber-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I116803 | Rapamycin-Derivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112517 | Rifamycin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112387 | Rifamycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112516 | Salizylate-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112386 | Salizylate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I117244 | Scopolaminderivate-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112537 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112407 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I109557 | Serotonin-Syndrom | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I118673 | Streptomycin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112514 | Sulfasalazin-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112384 | Sulfasalazin-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112513 | Sulfonamid-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112383 | Sulfonamid-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112512 | Sulfonylharnstoff-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |



| | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 0-L | I112382 | Sulfonylharnstoff-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112511 | Sympathomimetika-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112381 | Sympathomimetika-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112466 | Tacrolimus-Allergie | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I112335 | Tacrolimus-Überempfindlichkeit | 1.2.276.0.76.5.465 |
| 0-L | I694 | Tamoxifen-Nebenwirkung | 1.2.276.0.76.5.465 |

Dieses Value Set beinhaltet 550 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.7 Allergien und Unverträglichkeiten 1.2.276.0.76.11.12 - 2014-01-03 (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 1.2.276.0.76.11.12   | Gültigkeit | 2014-01-03 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | AllergiesIntolerances | Anzeigename | Allergien und Unverträglichkeiten |
| 2 Quell-Codesysteme | 1.2.276.0.76.5.419 - Alpha-ID 2014 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.419 1.2.276.0.76.5.465 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.465 | | |

-  Allergien und Unverträglichkeiten vom 2016-10-05  

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|--------|---|---------------|
| 0-L | I81502 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittel a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I81501 | Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I564 | Allergie gegen Nahrungsmittel | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I97198 | Allergische Reaktion durch Nahrungsmittel a.n.k. | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|-----------------------------------|---------------|
| 0-L | I112579 | Eiprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112647 | Eiprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112580 | Erdnussöl-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112648 | Erdnussöl-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116460 | Fisch-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116463 | Fischeiweiß-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116461 | Gelatine-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116459 | Hühnereiweiß-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24369 | Kuhmilchproteinintoleranz | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116796 | Kürbisfrüchte-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116465 | Leguminosen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I29215 | Nahrungsmittelunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116462 | Nuss-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116353 | Rinderprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116795 | Sesamöl-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112576 | Soja-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112644 | Soja-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112577 | Sojaprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112645 | Sojaprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112641 | Sorbitol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112709 | Sorbitol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109560 | Sorbitolunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I109981 | Überempfindlichkeit gegen Farbstoffe in Nahrungsmitteln | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109980 | Überempfindlichkeit gegen Konservierungsmittel | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109978 | Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittelzusatzstoffe | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112578 | Zimt-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112646 | Zimt-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116464 | Zitrusfrüchte-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I87720 | Allergischer Schock | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I565 | Anaphylaktischer Schock | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I16144 | Anaphylaxie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I85981 | Herxheimer-Reaktion | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I80523 | Schock durch Arzneimittel | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74711 | Akutes essentielles Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74531 | Akutes Quincke-Ödem der Haut | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74712 | Akutes umschriebenes Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74721 | Akutes zirkumskriptes Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64438 | Allergisches angioneurotisches Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64444 | Allergisches Angioödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I96567 | Allergisches Glottisödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I566 | Angioneurotisches Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64441 | Angioneurotisches Ödem mit Urtikaria | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I567 | Angioödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I64445 | Angioödem mit Urtikaria | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|---------------|
| 0-L | I75170 | Bannister-Krankheit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I82080 | Larynxurtikaria | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I74718 | Periodisches Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I81969 | Quincke-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I568 | Quincke-Ödem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I82079 | Urticaria gigantea | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15529 | Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109613 | Allergie gegen Alkohol | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112601 | Allergie gegen echtes Karmin [E 120] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15530 | Allergische Diathese | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15533 | Allergische Reaktion | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112598 | Allurarot-Allergie [E 129] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112666 | Allurarot-Überempfindlichkeit [E 129] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112625 | Amaranth-Allergie [E 123] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112693 | Amaranth-Überempfindlichkeit [E 123] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112596 | Annatto-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112664 | Annatto-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I32389 | Arthus-Phänomen | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24895 | Atopie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112624 | Azorubin-Allergie [E 122] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112692 | Azorubin-Überempfindlichkeit [E 122] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112623 | Benzalkoniumchlorid-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112691 | Benzalkoniumchlorid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112594 | Benzoessäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112662 | Benzoessäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112622 | Benzolsulfonsäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112690 | Benzolsulfonsäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112621 | Benzylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112689 | Benzylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112620 | Bernsteinsäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112688 | Bernsteinsäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112597 | Braun-Allergie [E 155] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112665 | Braun-Überempfindlichkeit [E 155] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112618 | Brillantschwarz-Allergie [E 151] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112686 | Brillantschwarz-Überempfindlichkeit [E 151] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112590 | Butylhydroxyanisol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112658 | Butylhydroxyanisol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112619 | Butylhydroxytoluol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112687 | Butylhydroxytoluol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112587 | Carrageen-Allergie [E 407] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112655 | Carrageen-Überempfindlichkeit [E 407] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112617 | Cetylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112685 | Cetylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112639 | Chinazolin-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112707 | Chinazolin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112616 | Chinolingelb-Allergie [E 104] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112684 | Chinolingelb-Überempfindlichkeit [E 104] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112615 | Chlorocresol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112683 | Chlorocresol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112638 | Chrysanthemen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112706 | Chrysanthemen-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112600 | Cochenillerot-Allergie [E 124] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112668 | Cochenillerot-Überempfindlichkeit [E 124] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112637 | Doldengewächs-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112705 | Doldengewächs-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112614 | Erythrosin-Allergie [E 127] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112682 | Erythrosin-Überempfindlichkeit [E 127] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112483 | Ethanol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112352 | Ethanol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112612 | Formaldehyd-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112680 | Formaldehyd-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112591 | Gallate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112659 | Gallate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112613 | Gelborange-Allergie [E 110] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112681 | Gelborange-Überempfindlichkeit [E 110] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112585 | Guarkernmehl-Allergie [E 412] | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112653 | Guarkernmehl-Überempfindlichkeit [E 412] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112636 | Hamsterprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112704 | Hamsterprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115633 | Hyperergische Reaktion | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115638 | Hyperergische Reaktion gegen mikrobielle Allergene | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15536 | Hypersensibilität | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I32391 | Idiosynkrasie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112611 | Isopropylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112679 | Isopropylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109672 | Jodallergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112586 | Johannisbrotkernmehl-Allergie [E 410] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112654 | Johannisbrotkernmehl-Überempfindlichkeit [E 410] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15532 | Kaninchenallergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112583 | Karaya-Allergie [E 416] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112651 | Karaya-Überempfindlichkeit [E 416] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112635 | Korbblütler-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112703 | Korbblütler-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112602 | Kurkumin-Allergie [E 100] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112670 | Kurkumin-Überempfindlichkeit [E 100] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112595 | Litholrubin-Allergie [E 180] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112663 | Litholrubin-Überempfindlichkeit [E 180] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112582 | Lysozym-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112650 | Lysozym-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112610 | Macroglycerolricinoleat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112678 | Macroglycerolricinoleat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112634 | Mausprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112702 | Mausprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I30749 | MCS [Multiple-Chemical-Sensitivity]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15535 | Multiple Allergien | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15534 | Multiple-Chemical-Sensitivity [MCS]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112609 | Natriumbenzoat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112677 | Natriumbenzoat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112608 | Natriumdisulfit-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112676 | Natriumdisulfit-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112607 | Natriumedetat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112675 | Natriumedetat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112633 | Nitroverbindungen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112701 | Nitroverbindungen-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112632 | Norfluran-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112700 | Norfluran-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112593 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112661 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112606 | Parabene-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112674 | Parabene-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|---------------|
| 0-L | I112631 | Phenolrot-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112699 | Phenolrot-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112605 | Ponceau-Allergie [E 124] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112673 | Ponceau-Überempfindlichkeit [E 124] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112604 | Propylenglycol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112672 | Propylenglycol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112630 | Pyrrolidon-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112698 | Pyrrolidon-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112599 | Rot-Allergie [E 128] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112667 | Rot-Überempfindlichkeit [E 128] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112592 | Schwefeldioxid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112660 | Schwefeldioxid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116354 | Schwermetallüberempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112640 | Sorbinsäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112708 | Sorbinsäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112642 | Stearylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112710 | Stearylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112643 | Sulfit-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112711 | Sulfit-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112603 | Tartrazin-Allergie [E 102] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112671 | Tartrazin-Überempfindlichkeit [E 102] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112629 | Thionamid-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112697 | Thionamid-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112584 | Traganth-Allergie [E 413] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112652 | Traganth-Überempfindlichkeit [E 413] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112588 | Triammoniumcitrat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112656 | Triammoniumcitrat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112628 | Triarylmethan-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112696 | Triarylmethan-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112581 | Triethylcitrat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112649 | Triethylcitrat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112627 | Triphenylmethan-Farbstoff-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112695 | Triphenylmethan-Farbstoff-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112626 | Tropasäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112694 | Tropasäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15531 | Unklare Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I32390 | Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116798 | Überempfindlichkeit durch 2-Phenoxyethanol | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116467 | Überempfindlichkeit durch Aspergillus-Extrakt | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116799 | Überempfindlichkeit durch E. coli-Protein | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112669 | Überempfindlichkeit durch echtes Karmin [E 120] | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116797 | Überempfindlichkeit durch Polysorbat 20 | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116466 | Überempfindlichkeit durch quaternäre Ammoniumverbindung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I15537 | Überempfindlichkeitsreaktion | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112589 | Zitronensäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112657 | Zitronensäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I90606 | Arthritis bei Überempfindlichkeitsreaktion a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I83174 | Abnorme Arzneimittelwirkung a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112538 | ACE-Hemmer-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112408 | ACE-Hemmer-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112539 | Aciclovir-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112409 | Aciclovir-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112540 | Acridin-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112410 | Acridin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112541 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112411 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112542 | Allergie gegen adrenerge Mittel | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112465 | Allergie gegen halogenierte Kohlenwasserstoffe | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109567 | Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112573 | Allergie gegen monoklonale Antikörper | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112457 | Allergie gegen normale humane Immunglobuline | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112507 | Allergie gegen trizyklische Antidepressiva | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I89387 | Allergische Reaktion durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I89388 | Allergische Reaktion durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I110486 | Allergisches Medikamentenexanthem | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112543 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112413 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112544 | Amantadin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112414 | Amantadin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112460 | Amid-Lokalanästhetika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112329 | Amid-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112545 | Amidin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112415 | Amidin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112536 | Aminochinoline-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112406 | Aminochinoline-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112546 | Aminoglykosid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112416 | Aminoglykosid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112547 | Amoxicillin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112417 | Amoxicillin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112548 | Amphotericin-B-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112418 | Amphotericin-B-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I676 | Analgetikaintoleranz | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I670 | Androgennebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112550 | Anthracen-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112420 | Anthracen-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112549 | Anthracyclin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112419 | Anthracyclin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I671 | Antiandrogen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I110518 | Antibiotikaunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112551 | Anticholinergika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112421 | Anticholinergika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I691 | Antidiabetika-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112552 | Antihistaminika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112422 | Antihistaminika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I672 | Antiöstrogen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I12827 | Arzneimittelallergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116801 | Arzneimittelbedingte Überhangeffekte | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109565 | Arzneimittelinduzierte Toleranzentwicklung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I73188 | Arzneimittelreaktion a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I697 | Arzneimittelunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I78497 | Arzneimittelüberempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112553 | Atropin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112423 | Atropin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112555 | Baldrianwurzel-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112425 | Baldrianwurzel-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112556 | Barbiturate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112426 | Barbiturate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112557 | Benzamid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112427 | Benzamid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112558 | Benzimidazol-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112428 | Benzimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112559 | Benzodiazepin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112429 | Benzodiazepin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112560 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112430 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112515 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112385 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112561 | Betablocker-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112431 | Betablocker-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112562 | Betalaktam-Antibiotika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112432 | Betalaktam-Antibiotika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112563 | Bisphosphonat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112433 | Bisphosphonat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112564 | Butyrophenon-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112434 | Butyrophenon-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112566 | Carbamat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112436 | Carbamat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112567 | Carbamazepin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112437 | Carbamazepin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112568 | Carbapenem-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112438 | Carbapenem-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112569 | Cefotaxim-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112439 | Cefotaxim-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112570 | Cephalosporin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112440 | Cephalosporin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I692 | Chemotherapie-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112571 | Chinolin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112441 | Chinolin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112572 | Chinolon-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112442 | Chinolon-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I685 | Chlormadinonacetat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112574 | Clindamycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112444 | Clindamycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I673 | Cyproteronazetat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112535 | Dacarbazin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112405 | Dacarbazin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112487 | Darbepoetin-alfa-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112356 | Darbepoetin-alfa-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I674 | Dehydroepiandrosteronsulfat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112459 | Desirudin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112328 | Desirudin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I675 | Desogestrel-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I677 | DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112494 | Dihydropyridin-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112364 | Dihydropyridin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112492 | Diphenylbutylpiperidin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112362 | Diphenylbutylpiperidin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115806 | DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I83175 | Drogenwirkung a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112489 | Erythromycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112358 | Erythromycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112462 | Ester-Lokalanästhetika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112331 | Ester-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112485 | Estradiol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I678 | Estradiol-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112354 | Estradiol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I679 | Estriol-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I680 | Estron-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I681 | Ethinyl-Estradiol-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112481 | Fentanyl-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112350 | Fentanyl-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112479 | Filgrastim-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112348 | Filgrastim-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116805 | Flare-Phänomen durch Strahlentherapie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112477 | Fluorouracil-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112346 | Fluorouracil-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I112475 | Gadodiamid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112344 | Gadodiamid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I682 | Gestagen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109614 | Gesteigerte Empfindlichkeit auf ein Arzneimittel | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I683 | Glukokortikoid-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112471 | Glycopeptid-Antibiotika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112340 | Glycopeptid-Antibiotika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112469 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112338 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112504 | Harnstoff-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112374 | Harnstoff-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112463 | Heparin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112332 | Heparin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112461 | Herzglykoside-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112330 | Herzglykoside-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112467 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112336 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112453 | Hydantoin-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112322 | Hydantoin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112451 | Hydralazin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112320 | Hydralazin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I89391 | Idiosynkrasie durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I89392 | Idiosynkrasie durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112449 | Imidazol-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112318 | Imidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112499 | Immunglobuline-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112369 | Immunglobuline-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112447 | Indometacin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112316 | Indometacin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112446 | Inhalationsanästhetika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112315 | Inhalationsanästhetika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I684 | Insulin-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I116802 | Jodschnupfen | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I115859 | Kaliumthiocyanat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112565 | Kalziumantagonisten-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112435 | Kalziumantagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112575 | Koffein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112445 | Koffein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112473 | Kontrastmittel-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112342 | Kontrastmittel-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112448 | Kortikosteroid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112317 | Kortikosteroid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109566 | Kreuztoleranz | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112452 | Lidocain-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112321 | Lidocain-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112454 | Lincomycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112323 | Lincomycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112456 | Lincosamid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112325 | Lincosamid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112458 | Lisinopril-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112327 | Lisinopril-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I698 | Lokalanästhetikaunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112450 | Lutein-Releasing-Hormone-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112319 | Lutein-Releasing-Hormone-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112464 | Macrogol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112333 | Macrogol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112554 | Makrolid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112468 | Makrolid-Antibiotika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112337 | Makrolid-Antibiotika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112424 | Makrolid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I12828 | Medikamentenallergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I696 | Medikamentenunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112472 | Mercaptopurin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112341 | Mercaptopurin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112470 | Methanolchinolin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112339 | Methanolchinolin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112476 | Metoprolol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112345 | Metoprolol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112478 | Muskelrelaxanzien-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112347 | Muskelrelaxanzien-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112480 | Mutterkornalkaloid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112349 | Mutterkornalkaloid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112482 | Nadroparin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112351 | Nadroparin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112484 | Natamycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112353 | Natamycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24992 | Nebenwirkung oraler Kontrazeptiva | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112486 | Neomycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112355 | Neomycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112488 | Neuroleptika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112357 | Neuroleptika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112490 | Nitrat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112359 | Nitrat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112491 | Nitrofurantoin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112361 | Nitrofurantoin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112498 | Nitroimidazol-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112368 | Nitroimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112493 | Nitrosoharnstoff-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112363 | Nitrosoharn-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I686 | Norethistosteron-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I687 | Ocytocin-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112534 | Opiate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112404 | Opiate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24993 | Ovulationshemmernebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I24991 | Ovulationshemmerunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112533 | Oxicam-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112403 | Oxicam-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109417 | Oxytozin-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I12829 | Penicillin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112532 | Perchlorat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112402 | Perchlorat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112531 | Perubalsam-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112401 | Perubalsam-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112530 | Phenothiazin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112400 | Phenothiazin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112529 | Phenytoin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112399 | Phenytoin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112528 | Piperazin-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112398 | Piperazin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112527 | Piperidin-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112397 | Piperidin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112455 | Plasmaprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112324 | Plasmaprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112526 | Podophyllotoxin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112396 | Podophyllotoxin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112525 | Polymyxin-B-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112395 | Polymyxin-B-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112524 | Pravastatin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112394 | Pravastatin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112523 | Probenecid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112393 | Probenecid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I689 | Progesteron-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112522 | Propacetamol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112392 | Propacetamol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112521 | Prostaglandin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112391 | Prostaglandin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112520 | Pyrazolon-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112390 | Pyrazolon-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112519 | Pyrethrin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112389 | Pyrethrin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112518 | Quecksilber-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112388 | Quecksilber-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |


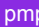

| | | | |
|-----|---------|---|---------------|
| 0-L | I116803 | Rapamycin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112517 | Rifamycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112387 | Rifamycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112516 | Salizylate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112386 | Salizylate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112537 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112407 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I109557 | Serotonin-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112514 | Sulfasalazin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112384 | Sulfasalazin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112513 | Sulfonamid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112383 | Sulfonamid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112512 | Sulfonylharnstoff-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112382 | Sulfonylharnstoff-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112511 | Sympathomimetika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112381 | Sympathomimetika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112466 | Tacrolimus-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112335 | Tacrolimus-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I694 | Tamoxifen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112510 | Terbutalin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112380 | Terbutalin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112509 | Tetracyclin-Allergie | Alpha-ID 2014 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------------|
| 0-L | I112508 | Tetracyclin-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112378 | Tetracyclin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112379 | Tetracyclin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112506 | Thiamin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112376 | Thiamin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112505 | Thiazid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112375 | Thiazid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112503 | Thioxanthen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112373 | Thioxanthen-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I690 | Thyreostatika-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
| 0-L | I112501 | Thyreotropin-Releasing-Hormon-Allergie | Alpha-ID 2014 |

Dieses Value Set beinhaltet 529 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.8  **BMP Dosiereinheit 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 - 2017-04-30 (V2.4)**  (aus Repository: pmp-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23   | Gültigkeit | 2017-04-30 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | V2.4 |
| Name | BMPDosiereinheit | Anzeigename | BMP Dosiereinheit |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4 - pmp-codesystem-4 - urn:oid:2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4 | | |


| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Beschreibung |
|------------|------|-------------|------------------|--------------|
| 0-L | # | Messlöffel | pmp-codesystem-4 | Messlöffel |
| 0-L | 0 | Messbecher | pmp-codesystem-4 | Messbecher |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 0-L | 1 | Stück | pmp-codesystem-4 | Stück |
| 0-L | 2 | Pkg. | pmp-codesystem-4 | Packungen |
| 0-L | 3 | Flasche | pmp-codesystem-4 | Flasche |
| 0-L | 4 | Beutel | pmp-codesystem-4 | Beutel |
| 0-L | 5 | Hub | pmp-codesystem-4 | Hub |
| 0-L | 6 | Tropfen | pmp-codesystem-4 | Tropfen |
| 0-L | 7 | Teelöffel | pmp-codesystem-4 | Teelöffel |
| 0-L | 8 | Esstlöffel | pmp-codesystem-4 | Esstlöffel |
| 0-L | 9 | E | pmp-codesystem-4 | Einheiten |
| 0-L | a | Tasse | pmp-codesystem-4 | Tasse |
| 0-L | b | Applikatorfüllung | pmp-codesystem-4 | Applikatorfüllung |
| 0-L | c | Augenbadewanne | pmp-codesystem-4 | Augenbadewanne |
| 0-L | d | Dosierbriefchen | pmp-codesystem-4 | Dosierbriefchen |
| 0-L | e | Dosierpipette | pmp-codesystem-4 | Dosierpipette |
| 0-L | f | Dosierspritze | pmp-codesystem-4 | Dosierspritze |
| 0-L | g | Einzelndosis | pmp-codesystem-4 | Einzelndosis |
| 0-L | h | Glas | pmp-codesystem-4 | Glas |
| 0-L | i | Likörglas | pmp-codesystem-4 | Likörglas |
| 0-L | j | Messkappe | pmp-codesystem-4 | Messkappe |
| 0-L | k | Messschale | pmp-codesystem-4 | Messschale |
| 0-L | l | Mio E | pmp-codesystem-4 | Million Einheiten |
| 0-L | m | Mio IE | pmp-codesystem-4 | Million Internationale Einheiten |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|---|
| 0-L | n | Pipettenteilstrich | pmp-codesystem-4 | Pipettenteilstrich |
| 0-L | o | Sprühstoß | pmp-codesystem-4 | Sprühstoß |
| 0-L | p | IE | pmp-codesystem-4 | Internationale Einheiten, Immunisierungseinheit oder Insulineinheit |
| 0-L | q | cm | pmp-codesystem-4 | Zentimeter |
| 0-L | r | l | pmp-codesystem-4 | Liter |
| 0-L | s | ml | pmp-codesystem-4 | Milliliter |
| 0-L | t | g | pmp-codesystem-4 | Gramm |
| 0-L | u | kg | pmp-codesystem-4 | Kilogramm |
| 0-L | v | mg | pmp-codesystem-4 | Milligramm |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.9 ○ Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.171 ref ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> ○ CountryDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 ref ad2bbr- |
| Status | ○ Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | Country | Anzeigename | Country |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Countries of the world. ISO 3166, part 1, alpha-3 set. | | |

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

| Codesystem Name | Codesystem Id | Codesystem Version |
|---|----------------|--------------------|
| ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-3 | 1.0.3166.1.2.3 | |

2.1.10 Country 2.16.840.1.113883.1.11.171 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.171 ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> CountryDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26 ad2bbr- |
| Status | Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | Country | Anzeigename | Country |
| Beschreibung | description: Countries of the world. ISO 3166, part 1, alpha-3 set. | | |

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

| Codesystem Name | Codesystem Id | Codesystem Version |
|---|----------------|--------------------|
| ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-3 | 1.0.3166.1.2.3 | |




2.1.11 CriticalityObservationValue 2.16.840.1.113883.1.11.20549 - 2016-03-23 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.20549 ad2bbr- | Gültigkeit | 2016-03-23 |
| Status | Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | CriticalityObservationValue | Anzeigename | CriticalityObservationValue |
| Beschreibung | description: Recommended values for criticality observations | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.1063 - Observation Value - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationValue | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|-------|------------------------------|-------------------|
| 1-L | CRITH | high criticality | Observation Value |
| 1-L | CRITL | low criticality | Observation Value |
| 1-L | CRITU | unable to assess criticality | Observation Value |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.12 DispensableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14412 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.14412  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | DispensableDrugForm | Anzeigename | DispensableDrugForm |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.85 - Orderable Drug Form - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-orderableDrugForm | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1-A | _GasDrugForm | GasDrugForm | Orderable Drug Form |
| 2-L | GASINHL | Gas for Inhalation | Orderable Drug Form |
| 1-A | _GasLiquidMixture | GasLiquidMixture | Orderable Drug Form |
| 2-S | AER | Aerosol | Orderable Drug Form |
| 3-L | BAINHL | Breath Activated Inhaler | Orderable Drug Form |
| 3-L | INHLSOL | Inhalant Solution | Orderable Drug Form |

| | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------|
| 3-L | MDINHL | Metered Dose Inhaler | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASSPRY | Nasal Spray | Orderable Drug Form |
| 2-L | DERMSPRY | Dermal Spray | Orderable Drug Form |
| 2-S | FOAM | Foam | Orderable Drug Form |
| 3-L | FOAMAPL | Foam with Applicator | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECFORM | Rectal foam | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGFOAM | Vaginal foam | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGFOAMAPL | Vaginal foam with applicator | Orderable Drug Form |
| 2-L | RECSPRY | Rectal Spray | Orderable Drug Form |
| 2-L | VAGSPRY | Vaginal Spray | Orderable Drug Form |
| 1-A | _GasSolidSpray | GasSolidSpray | Orderable Drug Form |
| 2-S | INHL | Inhalant | Orderable Drug Form |
| 3-L | BAINHLPWD | Breath Activated Powder Inhaler | Orderable Drug Form |
| 3-L | INHLPWD | Inhalant Powder | Orderable Drug Form |
| 3-L | MDINHLPWD | Metered Dose Powder Inhaler | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASINHL | Nasal Inhalant | Orderable Drug Form |
| 3-L | ORINHL | Oral Inhalant | Orderable Drug Form |
| 2-L | PWDSPRY | Powder Spray | Orderable Drug Form |
| 2-L | SPRYADAPT | Spray with Adaptor | Orderable Drug Form |
| 1-A | _Liquid | Liquid | Orderable Drug Form |
| 2-S | LIQCLN | Liquid Cleanser | Orderable Drug Form |
| 3-L | LIQSOAP | Medicated Liquid Soap | Orderable Drug Form |

| | | | |
|-----|---------|--------------------------------|---------------------|
| 3-L | SHMP | Shampoo | Orderable Drug Form |
| 2-S | OIL | Oil | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPOIL | Topical Oil | Orderable Drug Form |
| 2-S | SOL | Solution | Orderable Drug Form |
| 3-S | DROP | Drops | Orderable Drug Form |
| 4-L | NDROP | Nasal Drops | Orderable Drug Form |
| 4-L | OPDROP | Ophthalmic Drops | Orderable Drug Form |
| 4-L | ORDROP | Oral Drops | Orderable Drug Form |
| 4-L | OTDROP | Otic Drops | Orderable Drug Form |
| 3-L | IPSOL | Intraperitoneal Solution | Orderable Drug Form |
| 3-S | IRSOL | Irrigation Solution | Orderable Drug Form |
| 4-L | DOUCHE | Douche | Orderable Drug Form |
| 4-L | ENEMA | Enema | Orderable Drug Form |
| 4-L | OPIRSOL | Ophthalmic Irrigation Solution | Orderable Drug Form |
| 3-L | IVSOL | Intravenous Solution | Orderable Drug Form |
| 3-S | ORALSOL | Oral Solution | Orderable Drug Form |
| 4-L | ORDROP | Oral Drops | Orderable Drug Form |
| 4-L | ELIXIR | Elixir | Orderable Drug Form |
| 4-L | RINSE | Mouthwash/Rinse | Orderable Drug Form |
| 4-L | SYRUP | Syrup | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECSOL | Rectal Solution | Orderable Drug Form |
| 3-S | TOPSOL | Topical Solution | Orderable Drug Form |

| | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 4-L | LIN | Liniment | Orderable Drug Form |
| 4-L | MUCTOPSOL | Mucous Membrane Topical Solution | Orderable Drug Form |
| 4-L | TINC | Tincture | Orderable Drug Form |
| 1-A | LiquidLiquidEmulsion | LiquidLiquidEmulsion | Orderable Drug Form |
| 2-S | CRM | Cream | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASCRM | Nasal Cream | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPCRM | Ophthalmic Cream | Orderable Drug Form |
| 3-L | ORCRM | Oral Cream | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTCRM | Otic Cream | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECCRM | Rectal Cream | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPCRM | Topical Cream | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGCRM | Vaginal Cream | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGCRMPL | Vaginal Cream with Applicator | Orderable Drug Form |
| 2-S | LTN | Lotion | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPLTN | Topical Lotion | Orderable Drug Form |
| 2-S | OINT | Ointment | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASOINT | Nasal Ointment | Orderable Drug Form |
| 3-L | OINTAPL | Ointment with Applicator | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPOINT | Ophthalmic Ointment | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTOINT | Otic Ointment | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECOINT | Rectal Ointment | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPOINT | Topical Ointment | Orderable Drug Form |

| | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3-S | VAGOINT | Vaginal Ointment | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGOINTAPL | Vaginal Ointment with Applicator | Orderable Drug Form |
| 1-A | _LiquidSolidSuspension | LiquidSolidSuspension | Orderable Drug Form |
| 2-S | GEL | Gel | Orderable Drug Form |
| 3-L | GELAPL | Gel with Applicator | Orderable Drug Form |
| 3-L | NASGEL | Nasal Gel | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPGEL | Ophthalmic Gel | Orderable Drug Form |
| 3-L | OTGEL | Otic Gel | Orderable Drug Form |
| 3-L | TOPGEL | Topical Gel | Orderable Drug Form |
| 3-L | URETHGEL | Urethral Gel | Orderable Drug Form |
| 3-S | VAGGEL | Vaginal Gel | Orderable Drug Form |
| 4-L | VGELAPL | Vaginal Gel with Applicator | Orderable Drug Form |
| 2-S | PASTE | Paste | Orderable Drug Form |
| 3-L | PUD | Pudding | Orderable Drug Form |
| 3-L | TPASTE | Toothpaste | Orderable Drug Form |
| 2-S | SUSP | Suspension | Orderable Drug Form |
| 3-L | ITSUSP | Intrathecal Suspension | Orderable Drug Form |
| 3-L | OPSUSP | Ophthalmic Suspension | Orderable Drug Form |
| 3-S | ORSUSP | Oral Suspension | Orderable Drug Form |
| 4-S | ERSUSP | Extended-Release Suspension | Orderable Drug Form |
| 5-L | ERSUSP12 | 12 Hour Extended-Release Suspension | Orderable Drug Form |
| 5-L | ERSUSP24 | 24 Hour Extended Release Suspension | Orderable Drug Form |







| | | | |
|-----|----------------|----------------------------|---------------------|
| 3-L | OTSUSP | Otic Suspension | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECSUSP | Rectal Suspension | Orderable Drug Form |
| 1-A | _SolidDrugForm | SolidDrugForm | Orderable Drug Form |
| 2-S | BAR | Bar | Orderable Drug Form |
| 3-S | BARSOAP | Bar Soap | Orderable Drug Form |
| 4-L | MEDBAR | Medicated Bar Soap | Orderable Drug Form |
| 3-L | CHEWBAR | Chewable Bar | Orderable Drug Form |
| 2-L | BEAD | Beads | Orderable Drug Form |
| 2-L | CAKE | Cake | Orderable Drug Form |
| 2-L | CEMENT | Cement | Orderable Drug Form |
| 2-L | CRYS | Crystals | Orderable Drug Form |
| 2-L | DISK | Disk | Orderable Drug Form |
| 2-L | FLAKE | Flakes | Orderable Drug Form |
| 2-L | GRAN | Granules | Orderable Drug Form |
| 2-L | GUM | ChewingGum | Orderable Drug Form |
| 2-S | PAD | Pad | Orderable Drug Form |
| 3-L | MEDPAD | Medicated Pad | Orderable Drug Form |
| 2-S | PATCH | Patch | Orderable Drug Form |
| 3-S | TPATCH | Transdermal Patch | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH16 | 16 Hour Transdermal Patch | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH24 | 24 Hour Transdermal Patch | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATH2WK | Biweekly Transdermal Patch | Orderable Drug Form |











| | | | |
|-----|----------|---|---------------------|
| 4-L | TPATH72 | 72 Hour Transdermal Patch | Orderable Drug Form |
| 4-L | TPATHWK | Weekly Transdermal Patch | Orderable Drug Form |
| 2-L | PELLET | Pellet | Orderable Drug Form |
| 2-S | PILL | Pill | Orderable Drug Form |
| 3-S | CAP | Capsule | Orderable Drug Form |
| 4-S | ORCAP | Oral Capsule | Orderable Drug Form |
| 5-S | ENTCAP | Enteric Coated Capsule | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERENTCAP | Extended Release Enteric Coated Capsule | Orderable Drug Form |
| 5-S | ERCAP | Extended Release Capsule | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERENTCAP | Extended Release Enteric Coated Capsule | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERCAP12 | 12 Hour Extended Release Capsule | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERCAP24 | 24 Hour Extended Release Capsule | Orderable Drug Form |
| 3-S | TAB | Tablet | Orderable Drug Form |
| 4-S | ORTAB | Oral Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-S | BUCTAB | Buccal Tablet | Orderable Drug Form |
| 6-L | SRBUCTAB | Sustained Release Buccal Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-L | CAPLET | Caplet | Orderable Drug Form |
| 5-L | CHEWTAB | Chewable Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-L | CPTAB | Coated Particles Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-L | DISINTAB | Disintegrating Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-L | DRTAB | Delayed Release Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-S | ECTAB | Enteric Coated Tablet | Orderable Drug Form |

| | | | |
|-----|-----------|--|---------------------|
| 6-L | ERECTAB | Extended Release Enteric Coated Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-S | ERTAB | Extended Release Tablet | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERECTAB | Extended Release Enteric Coated Tablet | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERTAB12 | 12 Hour Extended Release Tablet | Orderable Drug Form |
| 6-L | ERTAB24 | 24 Hour Extended Release Tablet | Orderable Drug Form |
| 5-L | ORTROCHE | Lozenge/Oral Troche | Orderable Drug Form |
| 5-L | SLTAB | Sublingual Tablet | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGTAB | Vaginal Tablet | Orderable Drug Form |
| 2-S | POWD | Powder | Orderable Drug Form |
| 3-S | TOPPWD | Topical Powder | Orderable Drug Form |
| 4-L | RECPWD | Rectal Powder | Orderable Drug Form |
| 4-L | VAGPWD | Vaginal Powder | Orderable Drug Form |
| 2-S | SUPP | Suppository | Orderable Drug Form |
| 3-L | RECSUPP | Rectal Suppository | Orderable Drug Form |
| 3-L | URETHSUPP | Urethral suppository | Orderable Drug Form |
| 3-L | VAGSUPP | Vaginal Suppository | Orderable Drug Form |
| 2-S | SWAB | Swab | Orderable Drug Form |
| 3-L | MEDSWAB | Medicated swab | Orderable Drug Form |
| 2-L | WAFER | Wafer | Orderable Drug Form |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.13  EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2018-05-09  (aus Repository: )

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27   | Gültigkeit | 2018-05-09 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  EDQMDoseForm vom 2017-05-10   |
| Canonical URI | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/edqm-darreichungsform | | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | EDQMDoseForm | Anzeigename | EDQMDoseForm |
| Beschreibung | EDQM Dose Forms | | |
| Quell-Codesystem | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations |
|------------|----------|----------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 10101000 | Oral drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| 0-L | 10102000 | Oral drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Suspension |
| 0-L | 10103000 | Oral drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Emulsion |
| 0-L | 10104000 | Oral liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit zum Einnehmen |
| 0-L | 10105000 | Oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 10106000 | Oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 10107000 | Oral emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Emulsion zum Einnehmen |
| 0-L | 10108000 | Oral gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Gel zum Einnehmen |
| 0-L | 10109000 | Oral paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Paste zum Einnehmen |
| 0-L | 10110000 | Powder for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 10111000 | Powder for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 10112000 | Granules for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 10113000 | Granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 10114000 | Powder and solvent for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 10115000 | Powder and solvent for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 10116000 | Lyophilisate for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension |
| 0-L | 10117000 | Syrup | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sirup |
| 0-L | 10118000 | Powder for syrup | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung eines Sirups |
| 0-L | 10119000 | Granules for syrup | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat zur Herstellung eines Sirups |
| 0-L | 10120000 | Soluble tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 10121000 | Dispersible tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 10122000 | Herbal tea | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Arzneitee |
| 0-L | 10201000 | Oral powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zum Einnehmen |
| 0-L | 10202000 | Instant herbal tea | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Teeaufgusspulver |
| 0-L | 10203000 | Effervescent powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausepulver |
| 0-L | 10204000 | Granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat |
| 0-L | 10205000 | Effervescent granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausegranulat |
| 0-L | 10206000 | Gastro-resistant granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistentes Granulat |
| 0-L | 10207000 | Prolonged-release granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardgranulat |
| 0-L | 10208000 | Modified-release granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Granulat mit veränderter Wirkstofffreisetzung |

| | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10209000 | Cachet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Oblatenkapsel |
| 0-L | 10210000 | Capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel |
| 0-L | 10211000 | Capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel |
| 0-L | 10212000 | Gastro-resistant capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Hartkapsel |
| 0-L | 10213000 | Gastro-resistant capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Weichkapsel |
| 0-L | 10214000 | Chewable capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel zum Zerbeißen |
| 0-L | 10215000 | Prolonged-release capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel, retardiert |
| 0-L | 10216000 | Prolonged-release capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel, retardiert |
| 0-L | 10217000 | Modified-release capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| 0-L | 10218000 | Modified-release capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| 0-L | 10219000 | Tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette |
| 0-L | 10220000 | Coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: überzogene Tablette |
| 0-L | 10221000 | Film-coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Filmtablette |
| 0-L | 10222000 | Effervescent tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Brausetablette |
| 0-L | 10223000 | Orodispersible tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schmelztablette |
| 0-L | 10224000 | Oral lyophilisate | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zum Einnehmen |
| 0-L | 10225000 | Gastro-resistant tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Tablette |
| 0-L | 10226000 | Prolonged-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardtablette |
| 0-L | 10227000 | Modified-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| 0-L | 10228000 | Chewable tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kautablette |
| 0-L | 10229000 | Medicated chewing-gum | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiges Kaugummi |
| 0-L | 10230000 | Oral gum | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lutschpastille |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 10231000 | Pillules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Streukügelchen |
| 0-L | 10236100 | Orodispersible film | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schmelzfilm |
| 0-L | 10301000 | Gargle | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gurgellösung |
| 0-L | 10302000 | Concentrate for gargle | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Gurgellösung |
| 0-L | 10303000 | Gargle, powder for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Gurgellösung |
| 0-L | 10304000 | Gargle, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Gurgellösung |
| 0-L | 10305000 | Oromucosal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10306000 | Oromucosal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10307000 | Oromucosal drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tropfen zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10308000 | Oromucosal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spray zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10309000 | Sublingual spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sublingualspray |
| 0-L | 10310000 | Mouthwash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Mundwasser |
| 0-L | 10311000 | Mouthwash, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung eines Mundwassers |
| 0-L | 10312000 | Gingival solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Anwendung am Zahnfleisch |
| 0-L | 10313000 | Oromucosal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10314000 | Oromucosal paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Paste zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10314005 | Oromucosal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Salbe zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10314010 | Oromucosal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Creme zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 10314011 | Buccal film | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Buccalfilm |
| 0-L | 10315000 | Gingival gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur Anwendung am Zahnfleisch |
| 0-L | 10316000 | Gingival paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Paste zur Anwendung am Zahnfleisch |
| 0-L | 10317000 | Oromucosal capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kapsel zur Anwendung in der Mundhöhle |






















| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10318000 | Sublingual tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sublingualtablette |
| 0-L | 10319000 | Muco-adhesive buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: mucoadhäsive Buccaltablette |
| 0-L | 10320000 | Buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Buccaltablette |
| 0-L | 10321000 | Lozenge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lutschtablette |
| 0-L | 10322000 | Compressed lozenge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lutschtablette, gepresst |
| 0-L | 10323000 | Pastille | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pastille |
| 0-L | 10401000 | Periodontal powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur periodontalen Anwendung |
| 0-L | 10402000 | Dental gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalgel |
| 0-L | 10403000 | Dental stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalstift |
| 0-L | 10404000 | Dental insert | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Insert für Parodontaltaschen |
| 0-L | 10405000 | Dental powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalpulver |
| 0-L | 10406000 | Dental solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentallösung |
| 0-L | 10407000 | Dental suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalsuspension |
| 0-L | 10408000 | Dental emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalemulsion |
| 0-L | 10409000 | Toothpaste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Zahnpaste |
| 0-L | 10410000 | Periodontal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur periodontalen Anwendung |
| 0-L | 10411000 | Periodontal insert | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Insert zur periodontalen Anwendung |
| 0-L | 10501000 | Bath additive | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Badezusatz |
| 0-L | 10502000 | Cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Creme |
| 0-L | 10503000 | Gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel |
| 0-L | 10504000 | Ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Salbe |
| 0-L | 10505000 | Cutaneous paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Paste zur Anwendung auf der Haut |

| | | | | |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10506000 | Medicated plaster | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiges Pflaster |
| 0-L | 10507000 | Cutaneous foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schaum zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10508000 | Shampoo | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Shampoo |
| 0-L | 10509000 | Cutaneous spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung |
| 0-L | 10510000 | Cutaneous spray, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension |
| 0-L | 10511000 | Cutaneous spray, powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver-Spray zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10512000 | Cutaneous liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10513000 | Cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10514000 | Concentrate for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10515000 | Cutaneous suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10516000 | Cutaneous emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10517000 | Cutaneous powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10517500 | Cutaneous patch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kutanes Pflaster |
| 0-L | 10518000 | Solution for iontophoresis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Iontophorese |
| 0-L | 10519000 | Transdermal patch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: transdermales Pflaster |
| 0-L | 10520000 | Collodion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: filmbildende Flüssigkeit |
| 0-L | 10521000 | Medicated nail lacquer | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiger Nagellack |
| 0-L | 10521500 | Nail solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10522000 | Poultice | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Umschlagpaste |
| 0-L | 10523000 | Cutaneous stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Stift zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 10524000 | Cutaneous sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schwämmchen zur Anwendung auf der Haut |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 10525000 | Impregnated dressing | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: imprägnierter Verband |
| 0-L | 10539500 | Scrub | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10546500 | Transdermal spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: transdermales Spray, Lösung |
| 0-L | 10547000 | Transdermal system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: transdermales System |
| 0-L | 10548000 | Solution for skin-prick test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pricktestlösung |
| 0-L | 10549000 | Solution for skin-scratch test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Scratchtestlösung |
| 0-L | 10550000 | Plaster for provocation test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pflaster für Provokationstest |
| 0-L | 10601000 | Eye cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augencreme |
| 0-L | 10602000 | Eye gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augengel |
| 0-L | 10603000 | Eye ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augensalbe |
| 0-L | 10604000 | Eye drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen, Lösung |
| 0-L | 10604500 | Eye drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen, Emulsion |
| 0-L | 10605000 | Eye drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfensuspension |
| 0-L | 10606000 | Eye drops, powder and solvent for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung von Augentropfen |
| 0-L | 10607000 | Eye drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Augentropfensuspension |
| 0-L | 10608000 | Eye drops, solvent for reconstitution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung von Augentropfen |
| 0-L | 10609000 | Eye drops, prolonged-release | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen mit verlängerter Wirkungsdauer |
| 0-L | 10610000 | Eye lotion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augenbad |
| 0-L | 10611000 | Eye lotion, solvent for reconstitution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung eines Augenbades |
| 0-L | 10612000 | Ophthalmic insert | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augeninsert |
| 0-L | 10613000 | Ophthalmic strip | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Teststreifen zur Anwendung am Auge |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 10701000 | Ear cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrencreme |
| 0-L | 10702000 | Ear gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohregel |
| 0-L | 10703000 | Ear ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrensalbe |
| 0-L | 10704000 | Ear drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen, Lösung |
| 0-L | 10705000 | Ear drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen, Suspension |
| 0-L | 10706000 | Ear drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentropfen, Emulsion |
| 0-L | 10707000 | Ear drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Ohrentropfensuspension |
| 0-L | 10708000 | Ear powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenpulver |
| 0-L | 10709000 | Ear spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray, Lösung |
| 0-L | 10710000 | Ear spray, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray, Suspension |
| 0-L | 10711000 | Ear spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspray, Emulsion |
| 0-L | 10712000 | Ear wash, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspüllösung |
| 0-L | 10713000 | Ear wash, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenspülung, Emulsion |
| 0-L | 10714000 | Ear tampon | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrentampon |
| 0-L | 10715000 | Ear stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Ohrenstäbchen |
| 0-L | 10801000 | Nasal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasencreme |
| 0-L | 10802000 | Nasal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasengel |
| 0-L | 10803000 | Nasal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasensalbe |
| 0-L | 10804000 | Nasal drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen, Lösung |
| 0-L | 10805000 | Nasal drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen, Suspension |
| 0-L | 10806000 | Nasal drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasentropfen, Emulsion |




















| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10807000 | Nasal powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenpulver |
| 0-L | 10808000 | Nasal spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenspray, Lösung |
| 0-L | 10809000 | Nasal spray, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenspray, Suspension |
| 0-L | 10810000 | Nasal spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenspray, Emulsion |
| 0-L | 10811000 | Nasal wash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenspülung |
| 0-L | 10812000 | Nasal stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Nasenstift |
| 0-L | 10900500 | Intravaginal ring | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10901000 | Vaginal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalcreme |
| 0-L | 10902000 | Vaginal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalgel |
| 0-L | 10903000 | Vaginal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalsalbe |
| 0-L | 10904000 | Vaginal foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalschaum |
| 0-L | 10905000 | Vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginallösung |
| 0-L | 10906000 | Vaginal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalsuspension |
| 0-L | 10907000 | Vaginal emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalemulsion |
| 0-L | 10908000 | Tablet for vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Herstellung einer Vaginallösung |
| 0-L | 10909000 | Pessary | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginalzäpfchen |
| 0-L | 10910000 | Vaginal capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hartkapsel zur vaginalen Anwendung |
| 0-L | 10911000 | Vaginal capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Weichkapsel zur vaginalen Anwendung |
| 0-L | 10912000 | Vaginal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Vaginaltablette |
| 0-L | 10913000 | Effervescent vaginal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Schaumovula |
| 0-L | 10914000 | Medicated vaginal tampon | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Wirkstoffhaltiger Vaginaltampon |
| 0-L | 10915000 | Vaginal delivery system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: vaginales Wirkstofffreisetzungssystem |

| | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 10916000 | Vaginal sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Schwämmchen |
| 0-L | 11001000 | Rectal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalcreme |
| 0-L | 11002000 | Rectal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalgel |
| 0-L | 11003000 | Rectal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalsalbe |
| 0-L | 11004000 | Rectal foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalschaum |
| 0-L | 11005000 | Rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektallösung |
| 0-L | 11006000 | Rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalsuspension |
| 0-L | 11007000 | Rectal emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalemulsion |
| 0-L | 11008000 | Concentrate for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Rektallösung |
| 0-L | 11009000 | Powder for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Rektallösung |
| 0-L | 11010 | Oral drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tropfen zum Einnehmen |
| 0-L | 11010000 | Powder for rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Rektalsuspension |
| 0-L | 11011000 | Tablet for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tablette zur Herstellung einer Rektallösung |
| 0-L | 11012000 | Tablet for rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tablette zur Herstellung einer Rektalsuspension |
| 0-L | 11013000 | Suppository | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Zäpfchen |
| 0-L | 11014000 | Rectal capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektalkapsel |
| 0-L | 11015000 | Rectal tampon | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Rektaltampon |
| 0-L | 11050 | Oral liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit zum Einnehmen |
| 0-L | 11101000 | Nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung für einen Vernebler |
| 0-L | 11102000 | Nebuliser suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Suspension für einen Vernebler |
| 0-L | 11103000 | Powder for nebuliser suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension für einen Vernebler |























| | | | | |
|-----|----------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 11104000 | Powder for nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler |
| 0-L | 11105000 | Nebuliser emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion für einen Vernebler |
| 0-L | 11106000 | Pressurised inhalation, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Druckgasinhalation, Lösung |
| 0-L | 11107000 | Pressurised inhalation, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Druckgasinhalation, Suspension |
| 0-L | 11108000 | Pressurised inhalation, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Druckgasinhalation, Emulsion |
| 0-L | 11109000 | Inhalation powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Inhalation |
| 0-L | 11110000 | Inhalation powder, hard capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation |
| 0-L | 11111000 | Inhalation powder, pre-dispensed | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: einzeldosiertes Pulver zur Inhalation |
| 0-L | 11112000 | Inhalation vapour, powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 11113000 | Inhalation vapour, capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Kapsel zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 11114000 | Inhalation vapour, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 11115000 | Inhalation vapour, tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Tablette zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 11116000 | Inhalation vapour, ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Salbe zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 11117000 | Inhalation vapour, liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 11118000 | Inhalation gas | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Inhalationsgas |
| 0-L | 11201000 | Solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionslösung |
| 0-L | 11202000 | Suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionssuspension |
| 0-L | 11203000 | Emulsion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion zur Injektion |
| 0-L | 11204000 | Gel for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Gel zur Injektion |
| 0-L | 11205000 | Powder for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 11206000 | Powder for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension |

| | | | | |
|-----|----------|---|------------------------|---|
| 0-L | 11207000 | Powder and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 11208000 | Powder and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension |
| 0-L | 11209000 | Concentrate for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 11210000 | Solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Infusionslösung |
| 0-L | 11210500 | Solution for infusion in administration system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Infusionslösung im Applikationssystem |
| 0-L | 11211000 | Emulsion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Emulsion zur Infusion |
| 0-L | 11212000 | Powder for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 11213000 | Concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 11214000 | Powder and solvent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 11214500 | Lyophilisate and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 11215000 | Lyophilisate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 11216000 | Solvent for parenteral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia |
| 0-L | 11217000 | Lyophilisate for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 11218000 | Lyophilisate for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension |
| 0-L | 11301000 | Implant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Implantat |
| 0-L | 11302000 | Implantation tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette zur Implantation |
| 0-L | 11303000 | Implantation chain | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Kette zur Implantation |
| 0-L | 11303500 | Implantation suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Suspension zur Implantation |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 11304000 | Powder and solvent for implantation paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Dispersionsmittel zur Herstellung einer Paste für Implantate |
| 0-L | 11401000 | Solution for peritoneal dialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Peritonealdialyselösung |
| 0-L | 11402000 | Solution for haemofiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Hämofiltrationslösung |
| 0-L | 11403000 | Solution for haemodiafiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Hämodiafiltrationslösung |
| 0-L | 11404000 | Solution for haemodialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Hämodialyselösung |
| 0-L | 11405000 | Concentrate for haemodialysis solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Hämodialyselösung |
| 0-L | 11501000 | Solution for intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| 0-L | 11502000 | Bladder irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Blasenspüllösung |
| 0-L | 11503000 | Powder for bladder irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Blasenspüllösung |
| 0-L | 11504000 | Urethral gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Gel zur Anwendung in der Harnröhre |
| 0-L | 11505000 | Urethral stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Stäbchen zur Anwendung in der Harnröhre |
| 0-L | 11601000 | Endotracheopulmonary instillation, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation |
| 0-L | 11602000 | Endotracheopulmonary instillation, powder for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation |
| 0-L | 11603000 | Endotracheopulmonary instillation, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Suspension zur endotracheopulmonalen Instillation |
| 0-L | 11604000 | Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation |
| 0-L | 11701000 | Endocervical gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Gel zur endozervikalen Anwendung |
| 0-L | 11702000 | Powder and solvent for endocervical gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung eines Gels zur endozervikalen Anwendung |
| 0-L | 11901000 | Intrauterine delivery system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem |
| 0-L | 11902000 | Intrauterine solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Lösung zur intrauterinen Anwendung |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 11903000 | Intrauterine suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Suspension zur intrauterinen Anwendung |
| 0-L | 11904000 | Intrauterine emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Emulsion zur intrauterinen Anwendung |
| 0-L | 11905000 | Intrauterine tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Tablette zur intrauterinen Anwendung |
| 0-L | 11906000 | Intrauterine capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Kapsel zur intrauterinen Anwendung |
| 0-L | 12004000 | Nebulisation solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung für einen Vernebler |
| 0-L | 12100 | Capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Kapsel |
| 0-L | 12100500 | Absorbable coated sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 12101000 | Denture lacquer | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lack für die Gebisskontaktfläche |
| 0-L | 12102000 | Anticoagulant and preservative solution for blood | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Stabilisatorlösung für Blutkonserven |
| 0-L | 12103000 | Solution for blood fraction modification | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung zur Modifikation einer Blutfraktion |
| 0-L | 12104000 | Wound stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Wundstäbchen |
| 0-L | 12105000 | Radiopharmaceutical precursor | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Markerzubereitung |
| 0-L | 12106000 | Radionuclide generator | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Radionuklidgenerator |
| 0-L | 12107000 | Kit for radiopharmaceutical preparation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Kit für ein radioaktives Arzneimittel |
| 0-L | 12108000 | Gastroenteral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung zur gastrointestinalen Anwendung |
| 0-L | 12109000 | Dispersion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dispersion |
| 0-L | 12109500 | Fibrin sealant-powder and solvent for fibrin sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 12110000 | Gastroenteral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Suspension zur gastrointestinalen Anwendung |
| 0-L | 12111000 | Gastroenteral emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Emulsion zur gastrointestinalen Anwendung |
| 0-L | 12112000 | Solution for organ preservation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Organkonservierungslösung |
| 0-L | 12113000 | Irrigation solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Spüllösung |

| | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|--|
| 0-L | 12114000 | Stomach irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Magenspülflüssigkeit |
| 0-L | 12115000 | Sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gewebekleber |
| 0-L | 12115500 | Solution of perfusion of organs | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 12116000 | Powder and solvent for sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber |
| 0-L | 12117000 | Impregnated pad | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Imprägnierter Tampon |
| 0-L | 12118000 | Living tissue equivalent | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: lebendes Gewebeäquivalent |
| 0-L | 12119000 | Medicated sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiges Schwämmchen |
| 0-L | 12120 | Gastro-resistant capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: magensaftresistente Kapsel |
| 0-L | 12120000 | Intestinal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gel zur intestinalen Anwendung |
| 0-L | 12130000 | Medicated thread | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: wirkstoffhaltiger Faden |
| 0-L | 12131000 | Solution for provocation test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Provokationstestlösung |
| 0-L | 12150 | Prolonged-release capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Retardkapsel |
| 0-L | 12200 | Tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tablette |
| 0-L | 12301000 | Medicinal gas, compressed | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet |
| 0-L | 12302000 | Medicinal gas, cryogenic | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas zur medizinischen Anwendung, kälteverflüssigt |
| 0-L | 12303000 | Medicinal gas, liquefied | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas zur medizinischen Anwendung, verflüssigt |
| 0-L | 13050 | Oromucosal liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 13220 | Lozenge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lutschtablette |
| 0-L | 14050 | Dental liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dentalflüssigkeit |
| 0-L | 15090 | Cutaneous spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 15130 | Cutaneous liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 16040 | Eye drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Augentropfen |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 17040 | Ear drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Ohrentropfen |
| 0-L | 17090 | Ear spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Ohrenspray |
| 0-L | 17120 | Ear wash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Ohrenspülung |
| 0-L | 18040 | Nasal drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasentropfen |
| 0-L | 18080 | Nasal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Nasenspray |
| 0-L | 19050 | Vaginal liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit zur vaginalen Anwendung |
| 0-L | 19100 | Vaginal capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Vaginalkapsel |
| 0-L | 20050 | Enema | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Klistier |
| 0-L | 21010 | Nebuliser liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit für einen Vernebler |
| 0-L | 21060 | Pressurised inhalation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Druckgasinhalation |
| 0-L | 21100 | Inhalation powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Inhalation |
| 0-L | 21140 | Inhalation vapour | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Dampf zur Inhalation |
| 0-L | 22010 | Injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Injektion |
| 0-L | 22050 | Powder for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektionszubereitung |
| 0-L | 22090 | Sterile concentrate | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: steriles Konzentrat |
| 0-L | 22100 | Infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Infusion |
| 0-L | 22120 | Powder for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 26010 | Endotracheopulmonary instillation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Lösung zur endotracheopulmonalen Instillation |
| 0-L | 29020 | Intrauterine liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit zur intrauterinen Anwendung |
| 0-L | 30047500 | Pouch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Beutelchen |
| 0-L | 31030 | Blood fraction modifier | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Zubereitung zur Modifikation einer Blutfraktion |
| 0-L | 31080 | Gastroenteral liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Flüssigkeit zur gastrointestinalen Anwendung |

| | | | | |
|-----|----------|---|------------------------|---|
| 0-L | 50001000 | Chewable/dispersible tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Kautablette/Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50001250 | Coated granules in sachet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Befilmtes Granulat im Beutel |
| 0-L | 50001500 | Concentrate and diluent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50002000 | Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 50003000 | Concentrate and solvent for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 50004000 | Concentrate and solvent for cutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50005000 | Concentrate and solvent for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50006000 | Concentrate and solvent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 50007000 | Concentrate and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 50008000 | Concentrate and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension |
| 0-L | 50009000 | Concentrate for cutaneous spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung eines Sprays zur Anwendung auf der Haut, Emulsion |
| 0-L | 50009300 | Concentrate for dispersion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion |
| 0-L | 50009500 | Concentrate for emulsion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Emulsion zur Infusion |
| 0-L | 50010000 | Concentrate for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 50011000 | Concentrate for oral/rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen /Rektallösung |
| 0-L | 50012000 | Concentrate for peritoneal dialysis solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 50013000 | Concentrate for solution for intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50013500 | Concentrate for spray emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Konzentrat zur Herstellung eines Sprays, Emulsion |
| 0-L | 50014000 | Concentrate for suspension for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50015000 | Cutaneous and nasal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50015300 | Cutaneous/oromucosal/oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50015400 | Cutaneous/oromucosal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50015500 | Cutaneous spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Emulsion |
| 0-L | 50016000 | Cutaneous spray, ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Spray zur Anwendung auf der Haut, Salbe |
| 0-L | 50017000 | Dental paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Dentalpaste |
| 0-L | 50018000 | Ear/eye drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Augen-/Ohrentropfen, Lösung |
| 0-L | 50019000 | Ear/eye ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Augen-/Ohrensalbe |
| 0-L | 50020000 | Ear/eye/nose drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50020500 | Effervescent buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50021000 | Emulsion for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion zur Injektion/Infusion |
| 0-L | 50021500 | Emulsion and suspension for emulsion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion und Suspension zur Herstellung einer Emulsion zur Injektion |
| 0-L | 50022000 | Endosinusal wash, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Nebenhöhlenspülung, Suspension |
| 0-L | 50023000 | Eye drops, solution in single-dose container | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis |
| 0-L | 50023500 | Film coated gastro-resistant tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50024000 | Gargle/mouthwash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Gurgellösung/Mundspülung |
| 0-L | 50025000 | Gastro-resistant coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50026000 | Gastro-resistant granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |

| | | | | |
|-----|----------|---|------------------------|--|
| 0-L | 50026250 | Gastro-resistant prolonged-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50026500 | Granules and solvent for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Granulat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50027000 | Granules and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Granulat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension |
| 0-L | 50028000 | Granules for oral and rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50029000 | Granules for oral drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50029250 | Granules for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Granulat zum Eingeben über das Trinkwasser |
| 0-L | 50029500 | Granules for vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Granulat zur Herstellung einer Vaginallösung |
| 0-L | 50029600 | Hard capsule with gastro-resistant pellets | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50029700 | Herbal tea in bag | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Arzneitee im Beutel |
| 0-L | 50030000 | Inhalation powder, tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Tablette mit Pulver zur Inhalation |
| 0-L | 50031000 | Inhalation vapour, effervescent tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Brausetablette zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 50032000 | Inhalation vapour, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Emulsion zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation |
| 0-L | 50033000 | Inhalation vapour, impregnated pad | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Dampf zur Inhalation, imprägnierter Einsatz |
| 0-L | 50033300 | Intrauterine foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Schaum zur intrauterinen Anwendung |
| 0-L | 50033500 | Intravitreal implant in applicator | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: intravitreales Implantat im Applikator |
| 0-L | 50034000 | Liquefied gas for dental use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50035000 | Modified-release film-coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50036000 | Modified-release granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Granulat mit veränderter Wirkstofffreisetzung zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50036100 | Muco-adhesive buccal prolonged-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|---|
| 0-L | 50036500 | Nasal/oromucosal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zur nasalen Anwendung/Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 50037000 | Nasal spray and oromucosal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50037250 | Nasal spray, solution in single-dose container | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis |
| 0-L | 50037750 | Oral drops, liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Tropfen zum Einnehmen, Flüssigkeit |
| 0-L | 50038000 | Oral/rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Suspension zum Einnehmen/Rektalsuspension |
| 0-L | 50038500 | Oral solution/concentrate for nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zum Einnehmen/ Konzentrat zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler |
| 0-L | 50039000 | Oromucosal patch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pflaster zur Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 50039300 | Oromucosal powder in pouch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulverbeutelchen zur Anwendung in Mundhöhle |
| 0-L | 50039500 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle/im Rachenraum und am Kehlkopf |
| 0-L | 50040000 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50041000 | Pillules in single-dose container | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Streukügelchen im Einzeldosisbehältnis |
| 0-L | 50041500 | Powder and solution for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Lösung zur Herstellung einer Injektionslösung |
| 0-L | 50042000 | Powder and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 50043000 | Powder for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 50044000 | Powder and solvent for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 50044500 | Powder and solvent for dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionsdispersion |

| | | | | |
|-----|----------|---|------------------------|--|
| 0-L | 50045000 | Powder and solvent for endosinusal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung in den Nebenhöhlen |
| 0-L | 50045500 | Powder and solvent for epilesional solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zum Auftragen auf die Wunde |
| 0-L | 50046000 | Powder and solvent for gingival gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung eines Gels zur Anwendung am Zahnfleisch |
| 0-L | 50047000 | Powder and solvent for instillation solution for intraocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intraokularen Instillation |
| 0-L | 50047500 | Powder and solvent for intravesical solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| 0-L | 50047700 | Powder and solvent for nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung für einen Vernebler |
| 0-L | 50048000 | Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension |
| 0-L | 50048250 | Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung in einer Fertigspritze |
| 0-L | 50048300 | Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension in einer Fertigspritze |
| 0-L | 50048500 | Powder and suspension for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension |
| 0-L | 50048600 | Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver, Dispersion und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion |
| 0-L | 50048750 | Powder for concentrate for dispersion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionsdispersion |
| 0-L | 50049000 | Powder for concentrate for haemodialysis solution, | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Hämodialyselösung |
| 0-L | 50049100 | Powder for concentrate for intravesical suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Suspension zur intravesikalen Anwendung |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 50049250 | Powder for concentrate for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
| 0-L | 50049270 | Powder for dental solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Dentallösung |
| 0-L | 50049300 | Powder for epilesional solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Auftragen auf die Wunde |
| 0-L | 50049500 | Powder for implantation suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension zur Implantation |
| 0-L | 50050000 | Powder for intravesical solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung |
| 0-L | 50051000 | Powder for intravesical suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspensionen zur intravesikalen Anwendung |
| 0-L | 50051100 | Powder for mouth wash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50052000 | Powder for oral/rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen/Rektalsuspension |
| 0-L | 50053000 | Powder for solution for injection or infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung |
| 0-L | 50053500 | Powder for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
| 0-L | 50054000 | Powder for solution for intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50055000 | Powder for solution for nasal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50055500 | Prolonged-release film-coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50056000 | Prolonged-release granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Retardgranulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50056500 | Radiopharmaceutical precursor, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Markerzubereitung, Lösung |
| 0-L | 50057000 | Solution for haemodialysis/haemofiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | ☞ Preferred: Hämodialyselösung/Hämofiltrationslösung |
| 0-L | 50058000 | Solution for infusion and oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 50059000 | Solution for injection/concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50060000 | Solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektions-/Infusionslösung |
| 0-L | 50060100 | Solution for injection in cartridge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionslösung in einer Patrone |
| 0-L | 50060200 | Solution for injection in pre-filled pen | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionslösung im Fertigpen |
| 0-L | 50060300 | Solution for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionslösung in einer Fertigspritze |
| 0-L | 50060400 | Solution for injection in pre-filled syringe with automatic needle guard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50060500 | Solution for injection/infusion in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektions-/Infusionslösung in einer Fertigspritze |
| 0-L | 50061000 | Solution for intraperitoneal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50061300 | Solution for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser |
| 0-L | 50061500 | Solution for sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Lösung für Gewebekleber |
| 0-L | 50061600 | Solvent for nasal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50062000 | Suspension and effervescent granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Suspension und Brausegranulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| 0-L | 50062500 | Suspension and solution for spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Suspension und Lösung zur Herstellung eines Sprays |
| 0-L | 50063000 | Suspension for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50063100 | Suspension for injection in cartridge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionssuspension in einer Patrone |
| 0-L | 50063200 | Suspension for injection in pre-filled pen | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionssuspension in einem Fertigpen |
| 0-L | 50063300 | Suspension for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Injektionssuspension in einer Fertigspritze |
| 0-L | 50063500 | Suspension for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Suspension zum Eingeben über das Trinkwasser |
| 0-L | 50064000 | Tablet and solvent for rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Tabletten und Lösungsmittel zur Herstellung einer Rektalsuspension |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 50065000 | Tablet and powder for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Tabletten und Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| 0-L | 50066000 | Tablet for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50070000 | Oral suspension for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 50071000 | Powder and solvent for dental gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung eines Dentalgels |
| 0-L | 50072000 | Powder for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser |
| 0-L | 50073000 | Powder for solution for intraocular irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung einer Lösung zur intraokularen Anwendung |
| 0-L | 50074000 | Solvent for solution for intraocular irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intraokularen Anwendung |
| 0-L | 50076000 | Solvent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung |
| 0-L | 50077000 | Dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Dispersion zur Injektion |
| 0-L | 50078000 | Gas and solvent for dispersion for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Gas und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionsdispersion |
| 0-L | 50079000 | Concentrate for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
| 0-L | 50080000 | Powder and solvent for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung |
| 0-L | 50081000 | Inhalation solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Lösung zur Inhalation |
| 0-L | 50082000 | Oral drops, powder for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Pulver zur Herstellung von Tropfen zum Einnehmen, Suspension |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.14 ○ EDQMDoseForm 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 - 2017-05-10 ref (aus Repository: pmp-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 ref pmp- | Gültigkeit | 2017-05-10 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> ● EDQMDoseForm vom 2018-05-09 ref pmp- |
| Status | ● Entwurf | Versions-Label | |
| Name | EDQMDoseForm | Anzeigename | EDQMDoseForm |
| Quell-Codesystem | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 0-L | 10101000 | Oral drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10102000 | Oral drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10103000 | Oral drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10104000 | Oral liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10105000 | Oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10106000 | Oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10107000 | Oral emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10108000 | Oral gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10109000 | Oral paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10110000 | Powder for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10111000 | Powder for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10112000 | Granules for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10113000 | Granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10114000 | Powder and solvent for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 10115000 | Powder and solvent for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10116000 | Lyophilisate for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10117000 | Syrup | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10118000 | Powder for syrup | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10119000 | Granules for syrup | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10120000 | Soluble tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10121000 | Dispersible tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10122000 | Herbal tea | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10201000 | Oral powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10202000 | Instant herbal tea | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10203000 | Effervescent powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10204000 | Granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10205000 | Effervescent granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10206000 | Gastro-resistant granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10207000 | Prolonged-release granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10208000 | Modified-release granules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10209000 | Cachet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10210000 | Capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10211000 | Capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10212000 | Gastro-resistant capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10213000 | Gastro-resistant capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10214000 | Chewable capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 10215000 | Prolonged-release capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10216000 | Prolonged-release capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10217000 | Modified-release capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10218000 | Modified-release capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10219000 | Tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10220000 | Coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10221000 | Film-coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10222000 | Effervescent tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10223000 | Orodispersible tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10224000 | Oral lyophilisate | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10225000 | Gastro-resistant tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10226000 | Prolonged-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Retardtablette |
| 0-L | 10227000 | Modified-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10228000 | Chewable tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10229000 | Medicated chewing-gum | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10230000 | Oral gum | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10231000 | Pillules | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10236100 | Orodispersible film | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10301000 | Gargle | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10302000 | Concentrate for gargle | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10303000 | Gargle, powder for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |
| 0-L | 10304000 | Gargle, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | |

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10305000 | Oromucosal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10306000 | Oromucosal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10307000 | Oromucosal drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10308000 | Oromucosal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10309000 | Sublingual spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10310000 | Mouthwash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10311000 | Mouthwash, tablet for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10312000 | Gingival solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10313000 | Oromucosal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314000 | Oromucosal paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314005 | Oromucosal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314010 | Oromucosal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10314011 | Buccal film | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10315000 | Gingival gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10316000 | Gingival paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10317000 | Oromucosal capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10318000 | Sublingual tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10319000 | Muco-adhesive buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10320000 | Buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10321000 | Lozenge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10322000 | Compressed lozenge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10323000 | Pastille | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------|
| 0-L | 10401000 | Periodontal powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10402000 | Dental gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10403000 | Dental stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10404000 | Dental insert | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10405000 | Dental powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10406000 | Dental solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10407000 | Dental suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10408000 | Dental emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10409000 | Toothpaste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10410000 | Periodontal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10411000 | Periodontal insert | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10501000 | Bath additive | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10502000 | Cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10503000 | Gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10504000 | Ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10505000 | Cutaneous paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10506000 | Medicated plaster | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10507000 | Cutaneous foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10508000 | Shampoo | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10509000 | Cutaneous spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10510000 | Cutaneous spray, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10511000 | Cutaneous spray, powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10512000 | Cutaneous liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10513000 | Cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10514000 | Concentrate for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10515000 | Cutaneous suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10516000 | Cutaneous emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10517000 | Cutaneous powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10517500 | Cutaneous patch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10518000 | Solution for iontophoresis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10519000 | Transdermal patch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10520000 | Collodion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10521000 | Medicated nail lacquer | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10521500 | Nail solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10522000 | Poultice | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10523000 | Cutaneous stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10524000 | Cutaneous sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10525000 | Impregnated dressing | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10539500 | Scrub | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10546500 | Transdermal spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10547000 | Transdermal system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10548000 | Solution for skin-prick test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10549000 | Solution for skin-scratch test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10550000 | Plaster for provocation test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 10601000 | Eye cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10602000 | Eye gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10603000 | Eye ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10604000 | Eye drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10604500 | Eye drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10605000 | Eye drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10606000 | Eye drops, powder and solvent for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10607000 | Eye drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10608000 | Eye drops, solvent for reconstitution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10609000 | Eye drops, prolonged-release | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10610000 | Eye lotion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10611000 | Eye lotion, solvent for reconstitution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10612000 | Ophthalmic insert | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10613000 | Ophthalmic strip | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10701000 | Ear cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10702000 | Ear gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10703000 | Ear ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10704000 | Ear drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10705000 | Ear drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10706000 | Ear drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10707000 | Ear drops, powder and solvent for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10708000 | Ear powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|-------------------------|------------------------|
| 0-L | 10709000 | Ear spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10710000 | Ear spray, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10711000 | Ear spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10712000 | Ear wash, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10713000 | Ear wash, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10714000 | Ear tampon | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10715000 | Ear stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10801000 | Nasal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10802000 | Nasal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10803000 | Nasal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10804000 | Nasal drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10805000 | Nasal drops, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10806000 | Nasal drops, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10807000 | Nasal powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10808000 | Nasal spray, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10809000 | Nasal spray, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10810000 | Nasal spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10811000 | Nasal wash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10812000 | Nasal stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10900500 | Intravaginal ring | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10901000 | Vaginal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10902000 | Vaginal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|
| 0-L | 10903000 | Vaginal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10904000 | Vaginal foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10905000 | Vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10906000 | Vaginal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10907000 | Vaginal emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10908000 | Tablet for vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10909000 | Pessary | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10910000 | Vaginal capsule, hard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10911000 | Vaginal capsule, soft | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10912000 | Vaginal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10913000 | Effervescent vaginal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10914000 | Medicated vaginal tampon | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10915000 | Vaginal delivery system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 10916000 | Vaginal sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11001000 | Rectal cream | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11002000 | Rectal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11003000 | Rectal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11004000 | Rectal foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11005000 | Rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11006000 | Rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11007000 | Rectal emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11008000 | Concentrate for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------|
| 0-L | 11009000 | Powder for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11010 | Oral drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11010000 | Powder for rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11011000 | Tablet for rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11012000 | Tablet for rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11013000 | Suppository | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11014000 | Rectal capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11015000 | Rectal tampon | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11050 | Oral liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11101000 | Nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11102000 | Nebuliser suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11103000 | Powder for nebuliser suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11104000 | Powder for nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11105000 | Nebuliser emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11106000 | Pressurised inhalation, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11107000 | Pressurised inhalation, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11108000 | Pressurised inhalation, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11109000 | Inhalation powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11110000 | Inhalation powder, hard capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11111000 | Inhalation powder, pre-dispensed | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11112000 | Inhalation vapour, powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11113000 | Inhalation vapour, capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 11114000 | Inhalation vapour, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11115000 | Inhalation vapour, tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11116000 | Inhalation vapour, ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11117000 | Inhalation vapour, liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11118000 | Inhalation gas | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11201000 | Solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11202000 | Suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11203000 | Emulsion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11204000 | Gel for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11205000 | Powder for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11206000 | Powder for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11207000 | Powder and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11208000 | Powder and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11209000 | Concentrate for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11210000 | Solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11210500 | Solution for infusion in administration system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11211000 | Emulsion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11212000 | Powder for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11213000 | Concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11214000 | Powder and solvent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11214500 | Lyophilisate and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11215000 | Lyophilisate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 11216000 | Solvent for parenteral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11217000 | Lyophilisate for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11218000 | Lyophilisate for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11301000 | Implant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11302000 | Implantation tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11303000 | Implantation chain | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11303500 | Implantation suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11304000 | Powder and solvent for implantation paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11401000 | Solution for peritoneal dialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11402000 | Solution for haemofiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11403000 | Solution for haemodiafiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11404000 | Solution for haemodialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11405000 | Concentrate for haemodialysis solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11501000 | Solution for intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11502000 | Bladder irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11503000 | Powder for bladder irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11504000 | Urethral gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11505000 | Urethral stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11601000 | Endotracheopulmonary instillation, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11602000 | Endotracheopulmonary instillation, powder for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11603000 | Endotracheopulmonary instillation, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11604000 | Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 11701000 | Endocervical gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11702000 | Powder and solvent for endocervical gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11901000 | Intrauterine delivery system | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11902000 | Intrauterine solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11903000 | Intrauterine suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11904000 | Intrauterine emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11905000 | Intrauterine tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 11906000 | Intrauterine capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12004000 | Nebulisation solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12100 | Capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12100500 | Absorbable coated sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12101000 | Denture lacquer | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12102000 | Anticoagulant and preservative solution for blood | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12103000 | Solution for blood fraction modification | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12104000 | Wound stick | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12105000 | Radiopharmaceutical precursor | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12106000 | Radionuclide generator | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12107000 | Kit for radiopharmaceutical preparation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12108000 | Gastroenteral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12109000 | Dispersion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12109500 | Fibrin sealant-powder and solvent for fibrin sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12110000 | Gastroenteral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------|
| 0-L | 12111000 | Gastroenteral emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12112000 | Solution for organ preservation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12113000 | Irrigation solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12114000 | Stomach irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12115000 | Sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12115500 | Solution of perfusion of organs | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12116000 | Powder and solvent for sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12117000 | Impregnated pad | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12118000 | Living tissue equivalent | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12119000 | Medicated sponge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12120 | Gastro-resistant capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12120000 | Intestinal gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12130000 | Medicated thread | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12131000 | Solution for provocation test | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12150 | Prolonged-release capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12200 | Tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12301000 | Medicinal gas, compressed | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12302000 | Medicinal gas, cryogenic | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 12303000 | Medicinal gas, liquefied | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 13050 | Oromucosal liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 13220 | Lozenge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 14050 | Dental liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|------------------------|
| 0-L | 15090 | Cutaneous spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 15130 | Cutaneous liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 16040 | Eye drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 17040 | Ear drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 17090 | Ear spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 17120 | Ear wash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 18040 | Nasal drops | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 18080 | Nasal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 19050 | Vaginal liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 19100 | Vaginal capsule | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20050 | Enema | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21010 | Nebuliser liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21060 | Pressurised inhalation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21100 | Inhalation powder | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 21140 | Inhalation vapour | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22010 | Injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22050 | Powder for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22090 | Sterile concentrate | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22100 | Infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 22120 | Powder for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 26010 | Endotracheopulmonary instillation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 29020 | Intrauterine liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 30047500 | Pouch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 31030 | Blood fraction modifier | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 31080 | Gastroenteral liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50001000 | Chewable/dispersible tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50001250 | Coated granules in sachet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50001500 | Concentrate and diluent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50002000 | Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50003000 | Concentrate and solvent for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50004000 | Concentrate and solvent for cutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50005000 | Concentrate and solvent for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50006000 | Concentrate and solvent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50007000 | Concentrate and solvent for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50008000 | Concentrate and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50009000 | Concentrate for cutaneous spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50009300 | Concentrate for dispersion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50009500 | Concentrate for emulsion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50010000 | Concentrate for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50011000 | Concentrate for oral/rectal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50012000 | Concentrate for peritoneal dialysis solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50013000 | Concentrate for solution for intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50013500 | Concentrate for spray emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50014000 | Concentrate for suspension for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50015000 | Cutaneous and nasal ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015300 | Cutaneous/oromucosal/oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015400 | Cutaneous/oromucosal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50015500 | Cutaneous spray, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50016000 | Cutaneous spray, ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50017000 | Dental paste | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50018000 | Ear/eye drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50019000 | Ear/eye ointment | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50020000 | Ear/eye/nose drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50020500 | Effervescent buccal tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50021000 | Emulsion for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50021500 | Emulsion and suspension for emulsion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50022000 | Endosinusal wash, suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50023000 | Eye drops, solution in single-dose container | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50023500 | Film coated gastro-resistant tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50024000 | Gargle/mouthwash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50025000 | Gastro-resistant coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50026000 | Gastro-resistant granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50026250 | Gastro-resistant prolonged-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50026500 | Granules and solvent for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50027000 | Granules and solvent for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50028000 | Granules for oral and rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50029000 | Granules for oral drops, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029250 | Granules for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029500 | Granules for vaginal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029600 | Hard capsule with gastro-resistant pellets | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50029700 | Herbal tea in bag | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50030000 | Inhalation powder, tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50031000 | Inhalation vapour, effervescent tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50032000 | Inhalation vapour, emulsion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50033000 | Inhalation vapour, impregnated pad | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50033300 | Intrauterine foam | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50033500 | Intravitreal implant in applicator | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50034000 | Liquefied gas for dental use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50035000 | Modified-release film-coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50036000 | Modified-release granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50036100 | Muco-adhesive buccal prolonged-release tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50036500 | Nasal/oromucosal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50037000 | Nasal spray and oromucosal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50037250 | Nasal spray, solution in single-dose container | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50037750 | Oral drops, liquid | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50038000 | Oral/rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50038500 | Oral solution/concentrate for nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50039000 | Oromucosal patch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|---|------------------------|
| 0-L | 50039300 | Oromucosal powder in pouch | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50039500 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50040000 | Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50041000 | Pillules in single-dose container | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50041500 | Powder and solution for solution for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50042000 | Powder and solvent for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50043000 | Powder for concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50044000 | Powder and solvent for cutaneous solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50044500 | Powder and solvent for dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50045000 | Powder and solvent for endosinusal solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50045500 | Powder and solvent for epilecional solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50046000 | Powder and solvent for gingival gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50047000 | Powder and solvent for instillation solution for intraocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50047500 | Powder and solvent for intravesical solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50047700 | Powder and solvent for nebuliser solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048000 | Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048250 | Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048300 | Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048500 | Powder and suspension for suspension for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048600 | Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50048750 | Powder for concentrate for dispersion for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049000 | Powder for concentrate for haemodialysis solution, | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |





| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50049100 | Powder for concentrate for intravesical suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049250 | Powder for concentrate for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049270 | Powder for dental solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049300 | Powder for epilesional solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50049500 | Powder for implantation suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50050000 | Powder for intravesical solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50051000 | Powder for intravesical suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50051100 | Powder for mouth wash | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50052000 | Powder for oral/rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50053000 | Powder for solution for injection or infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50053500 | Powder for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50054000 | Powder for solution for intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50055000 | Powder for solution for nasal spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50055500 | Prolonged-release film-coated tablet | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50056000 | Prolonged-release granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50056500 | Radiopharmaceutical precursor, solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50057000 | Solution for haemodialysis/haemofiltration | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50058000 | Solution for infusion and oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50059000 | Solution for injection/concentrate for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060000 | Solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060100 | Solution for injection in cartridge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060200 | Solution for injection in pre-filled pen | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |





| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50060300 | Solution for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060400 | Solution for injection in pre-filled syringe with automatic needle guard | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50060500 | Solution for injection/infusion in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061000 | Solution for intraperitoneal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061300 | Solution for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061500 | Solution for sealant | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50061600 | Solvent for nasal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50062000 | Suspension and effervescent granules for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50062500 | Suspension and solution for spray | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063000 | Suspension for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063100 | Suspension for injection in cartridge | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063200 | Suspension for injection in pre-filled pen | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063300 | Suspension for injection in pre-filled syringe | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50063500 | Suspension for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50064000 | Tablet and solvent for rectal suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50065000 | Tablet and powder for oral solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50066000 | Tablet for oral suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50070000 | Oral suspension for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50071000 | Powder and solvent for dental gel | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50072000 | Powder for use in drinking water | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50073000 | Powder for solution for intraocular irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50074000 | Solvent for solution for intraocular irrigation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 50076000 | Solvent for solution for infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50077000 | Dispersion for injection | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50078000 | Gas and solvent for dispersion for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50079000 | Concentrate for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50080000 | Powder and solvent for solution for injection/infusion | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50081000 | Inhalation solution | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 50082000 | Oral drops, powder for suspension | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |























Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.15  **EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2018-05-09**  (aus Repository: pmp-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26  pmp- | Gültigkeit | 2018-05-09 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  EDQMRouteofAdministration vom 2017-05-10  pmp- |
| Canonical URI | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/edqm-routeofadministration | | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | EDQMRouteofAdministration | Anzeigename | EDQMRouteofAdministration |
| Quell-Codesystem | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations |
|------------|----------|---------------|------------------------|---|
| 0-L | 20001000 | Auricular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Anwendung am Ohr |
| 0-L | 20002500 | Buccal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Buccale Anwendung |
| 0-L | 20003000 | Cutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Anwendung auf der Haut |
| 0-L | 20004000 | Dental use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: dentale Anwendung |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|------------------------|---|
| 0-L | 20006000 | Endocervical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: endozervikale Anwendung |
| 0-L | 20007000 | Endosinusal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung in den Nebenhöhlen |
| 0-L | 20008000 | Endotracheopulmonary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: endotracheopulmonale Anwendung |
| 0-L | 20009000 | Epidural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: epidurale Anwendung |
| 0-L | 20010000 | Epileisional use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zum Auftragen auf die Wunde |
| 0-L | 20011000 | Extraamniotic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: extraamniotische Anwendung |
| 0-L | 20011500 | Extracorporeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: extrakorporale Anwendung |
| 0-L | 20013000 | Gastroenteral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: gastrointestinale Anwendung |
| 0-L | 20013500 | Gastric use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Anwendung mittels Magensonde |
| 0-L | 20014000 | Gingival use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung am Zahnfleisch |
| 0-L | 20015000 | Hemodialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Hämodialyse |
| 0-L | 20015500 | Implantation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Implantation |
| 0-L | 20020000 | Inhalation use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Inhalation |
| 0-L | 20021000 | Intestinal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intestinale Anwendung |
| 0-L | 20022000 | Intraamniotic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraamniotische Anwendung |
| 0-L | 20023000 | Intraarterial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraarterielle Anwendung |
| 0-L | 20024000 | Intraarticular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intraartikuläre Anwendung |
| 0-L | 20025000 | Intrabursal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrabursale Anwendung |
| 0-L | 20026000 | Intracardiac use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intracardiale Anwendung |
| 0-L | 20026500 | Intracartilaginous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrakartilaginäre Anwendung |
| 0-L | 20027000 | Intracavernous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: intrakavernöse Anwendung |
| 0-L | 20027010 | Intracerebral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Intrazerebrale Anwendung |

| | | | | |
|-----|----------|----------------------|------------------------|--|
| 0-L | 20028000 | Intracervical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intrazervikale Anwendung |
| 0-L | 20028500 | Intracisternal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intracisternale Anwendung |
| 0-L | 20029000 | Intracoronary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intrakoronare Anwendung |
| 0-L | 20030000 | Intradermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intradermale Anwendung |
| 0-L | 20031000 | Intradiscal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intradiskale Anwendung |
| 0-L | 20031500 | Intraepidermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intraepidermale Anwendung |
| 0-L | 20032000 | Intralesional use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intraläsionale Anwendung |
| 0-L | 20033000 | Intralymphatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intralymphatische Anwendung |
| 0-L | 20035000 | Intramuscular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intramuskuläre Anwendung |
| 0-L | 20036000 | Intraocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intraokulare Anwendung |
| 0-L | 20036500 | Intraosseous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intraossäre Anwendung |
| 0-L | 20037000 | Intrapericardial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Intraperikardial |
| 0-L | 20038000 | Intraperitoneal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intraperitoneale Anwendung |
| 0-L | 20039000 | Intrapleural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intrapleurale Anwendung |
| 0-L | 20039500 | Intraprostatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intraprostatiche Anwendung |
| 0-L | 20041000 | Intrasternal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intrasternale Anwendung |
| 0-L | 20042000 | Intrathecal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intrathekale Anwendung |
| 0-L | 20043000 | Intratumoral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intratumorale Anwendung |
| 0-L | 20044000 | Intrauterine use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intrauterine Anwendung |
| 0-L | 20045000 | Intravenous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intravenöse Anwendung |
| 0-L | 20046000 | Intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: intravesikale Anwendung |
| 0-L | 20047000 | Intravitreal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |  Preferred: Intravitreal |

| | | | | |
|-----|----------|--|------------------------|--|
| 0-L | 20047500 | Iontophoresis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Iontophorese |
| 0-L | 20048000 | Laryngopharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Anwendung im Rachen und am Kehlkopf |
| 0-L | 20049000 | Nasal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: nasale Anwendung |
| 0-L | 20050000 | Nebulisation use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zum Vernebeln |
| 0-L | 20051000 | Ocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung am Auge |
| 0-L | 20053000 | Oral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zum Einnehmen |
| 0-L | 20054000 | Oromucosal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Anwendung in der Mundhöhle |
| 0-L | 20055000 | Oropharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur Anwendung im Mund- und Rachenraum |
| 0-L | 20056000 | Paravertebral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: paravertebrale Anwendung |
| 0-L | 20057000 | Periarticular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: periartikuläre Anwendung |
| 0-L | 20058000 | Perineural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: perineurale Anwendung |
| 0-L | 20059000 | Periodontal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: zur periodontalen Anwendung |
| 0-L | 20059300 | Periosseous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: perioossäre Anwendung |
| 0-L | 20059500 | Posterior juxtascleral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: posteriore juxtasclerale Anwendung |
| 0-L | 20061000 | Rectal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: rektale Anwendung |
| 0-L | 20061500 | Retrobulbar use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: retrobulbäre Anwendung |
| 0-L | 20062000 | Route of administration not applicable | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Art der Anwendung nicht spezifizierbar |
| 0-L | 20063000 | Skin scarification | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Einritzen der Haut |
| 0-L | 20065000 | Subconjunctival use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: subkonjunktivale Anwendung |
| 0-L | 20066000 | Subcutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: subkutane Anwendung |
| 0-L | 20067000 | Sublingual use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: Sublingual |
| 0-L | 20067500 | Submucosal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | Preferred: submuköse Anwendung |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------|------------------------|--|
| 0-L | 20070000 | Transdermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: transdermale Anwendung |
| 0-L | 20071000 | Urethral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: Anwendung in der Harnröhre |
| 0-L | 20072000 | Vaginal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | 🇩🇪 Preferred: vaginale Anwendung |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.16 ○ EDQMRouteofAdministration 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 - 2017-05-10 ^{ref} (aus Repository: pmp-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 ^{ref} pmp- | Gültigkeit | 2017-05-10 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status | 🟡 Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none"> 🟡 EDQMRouteofAdministration vom 2018-05-09 ^{ref} pmp- |
| Name | EDQMRouteofAdministration | Anzeigename | EDQMRouteofAdministration |
| Quell-Codesystem | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 - urn:oid:0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|----------|--------------------------|------------------------|
| 0-L | 20001000 | Auricular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20002500 | Buccal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20003000 | Cutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20004000 | Dental use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20006000 | Endocervical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20007000 | Endosinusal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20008000 | Endotracheopulmonary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20009000 | Epidural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20010000 | EpileSIONal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|------------------------|------------------------|
| 0-L | 20011000 | Extraamniotic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20011500 | Extracorporeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20013000 | Gastroenteral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20013500 | Gastric use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20014000 | Gingival use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20015000 | Hemodialysis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20015500 | Implantation | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20020000 | Inhalation use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20021000 | Intestinal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20022000 | Intraamniotic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20023000 | Intraarterial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20024000 | Intraarticular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20025000 | Intrabursal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20026000 | Intracardiac use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20026500 | Intracartilaginous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20027000 | Intracavernous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20027010 | Intracerebral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20028000 | Intracervical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20028500 | Intracisternal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20029000 | Intracoronary use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20030000 | Intradermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20031000 | Intradiscal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| 0-L | 20031500 | Intraepidermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20032000 | Intralesional use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20033000 | Intralymphatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20035000 | Intramuscular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20036000 | Intraocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20036500 | Intraosseous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20037000 | Intrapericardial use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20038000 | Intraperitoneal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20039000 | Intrapleural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20039500 | Intraprostatic use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20041000 | Intrasternal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20042000 | Intrathecal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20043000 | Intratumoral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20044000 | Intrauterine use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20045000 | Intravenous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20046000 | Intravesical use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20047000 | Intravitreal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20047500 | Iontophoresis | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20048000 | Laryngopharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20049000 | Nasal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20050000 | Nebulisation use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20051000 | Ocular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

| | | | |
|-----|----------|--|------------------------|
| 0-L | 20053000 | Oral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20054000 | Oromucosal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20055000 | Oropharyngeal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20056000 | Paravertebral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20057000 | Periarticular use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20058000 | Perineural use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20059000 | Periodontal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20059300 | Periosseous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20059500 | Posterior juxtasclear use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20061000 | Rectal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20061500 | Retrobulbar use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20062000 | Route of administration not applicable | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20063000 | Skin scarification | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20065000 | Subconjunctival use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20066000 | Subcutaneous use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20067000 | Sublingual use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20067500 | Submucosal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20070000 | Transdermal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20071000 | Urethral use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |
| 0-L | 20072000 | Vaginal use | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.




2.1.17 Einnahmezeitpunkte 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20 - 2014-11-19 (aus Repository: pmp-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20   | Gültigkeit | 2014-11-19 |
| Canonical URI | http://fhir.de/ValueSet/medikationsplanplus/einnahmezeitpunkte | | |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | |
| Name | Einnahmezeitpunkte | Anzeigename | Einnahmezeitpunkte |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.139 - <i>TimingEvent</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|-------------|
| 0-L | CM | Morgens | TimingEvent |
| 0-L | CD | Mittags | TimingEvent |
| 0-L | CV | Abends | TimingEvent |
| 0-L | HS | zur Nacht | TimingEvent |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.18 HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926 - 2014-06-09 (aus Repository: ccda-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.16926   | Gültigkeit | 2014-06-09 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | |
| Name | HL7BasicConfidentialityKind | Anzeigename | HL7 BasicConfidentialityKind |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.25 - <i>Confidentiality</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-----------------|-----------------|
| 0-L | N | normal | Confidentiality |
| 0-L | R | restricted | Confidentiality |
| 0-L | V | very restricted | Confidentiality |



Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.19 Hauskomet-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.1 - 2018-09-11 21:05:52 (aus Repository: hauskomet-)

| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.1  hauskomet- | Gültigkeit | 2018-09-11 21:05:52 | |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | |
| Name | Hauskometcodes | Anzeigename | Hauskomet-Codes | |
| Beschreibung | Codes für das Projekt Hauskomet, für die keine oder keine Linzenzfreien Standardcodes gefunden wurden | | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 - hauskomet-codesystem-1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 | | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations |
| 0-L | AMTSCHK | AMTS-Check | hauskomet-codesystem-1 | |
| 0-L | COMPTATHL | Leistungssportler | hauskomet-codesystem-1 | |
| 0-L | NOC | NOC | hauskomet-codesystem-1 | |
| 0-L | HKKAT | Hauskomet Kategorie | hauskomet-codesystem-1 | |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.








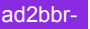


2.1.20 Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3 - 2018-11-20 (aus Repository: hauskomet-)

| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3  hauskomet- | Gültigkeit | 2018-11-20 |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Hauskometkategorie | Anzeigename | Hauskomet Kategorie |
| Beschreibung | Hauskomet Kategorie | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2 - hauskomet-codesystem-2 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2 | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |

| | | | |
|-----|-----|-------------|------------------------|
| 0-L | ADD | Hinzufügung | hauskomet-codesystem-2 |
| 0-L | STK | Bestand | hauskomet-codesystem-2 |
| 0-L | CHG | Änderung | hauskomet-codesystem-2 |
| 0-L | DEL | Löschung | hauskomet-codesystem-2 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.








2.1.21  **HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)**  (aus Repository: )

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.11526   | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  Language vom 2013-01-31    HumanLanguageDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26   |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | HumanLanguage  | Anzeigename | HumanLanguage |
| Beschreibung | <p>History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p>description:</p> <p>Codes for the representation of the names of human languages.</p> | | |

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

| Codesystem Name | Codesystem Id | Codesystem Version |
|---|-------------------------|--------------------|
| <i>Tags for the Identification of Languages</i> | 2.16.840.1.113883.6.121 | |




2.1.22  HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)  (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.11526  ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  HumanLanguageDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-  Language vom 2013-01-31  ccda- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | HumanLanguage | Anzeigename | HumanLanguage |
| Beschreibung |  description: Codes for the representation of the names of human languages. | | |

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

| Codesystem Name | Codesystem Id | Codesystem Version |
|--|-------------------------|--------------------|
| Tags for the Identification of Languages | 2.16.840.1.113883.6.121 | |

2.1.23  IPS Current Smoking Status 2.16.840.1.113883.11.22.59 - 2017-12-14 09:33:20  (aus Repository: hl7ips-)




| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.11.22.59  hl7ips- | Gültigkeit | 2017-12-14 09:33:20 |
| Canonical URI | http://hl7.org/fhir/uv/ips/ValueSet/current-smoking-status-uv-ips | | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | IPSCurrentSmokingStatus | Anzeigename | IPS Current Smoking Status |
| Beschreibung |  Value Set based on HL7 Vocab TC and Structured Doc consensus (per CDC submission 7/12/2012 for smoking status term) | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - http://loinc.org | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Ordinal | Codesystem |
|------------|-----------|--------------------------|---------|--|
| 0-L | LA18976-3 | Current every day smoker | 1 | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|---|--|
| 0-L | LA18977-1 | Current some day smoker | 2 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L | LA15920-4 | Former smoker | 3 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L | LA18978-9 | Never smoker | 4 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L | LA18979-7 | Smoker, current status unknown | 5 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L | LA18980-5 | Unknown if ever smoked | 6 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L | LA18981-3 | Heavy tobacco smoker | 7 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-L | LA18982-1 | Light tobacco smoker | 8 | Logical Observation Identifier Names and Codes |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.24  **Laborparameter 1.2.276.0.76.11.431 - 2017-04-11**  (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------|
| Id | 1.2.276.0.76.11.431   | Gültigkeit | 2017-04-11 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Laborparameter | Anzeigename | Laborparameter |
| Beschreibung | Liste der in Laborparameter in Deutschland. Dieses Vaue Set ist abgeleitet vom Value Set "ELGA Laborparameter" (siehe http://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--elgabbr-?id=1.2.40.0.34.10.44) mit freundlicher Genehmigung der ELGA GmbH. Sie wurde angepasst an und ergänzt um die deutschen Gegebenheiten | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - http://loinc.org | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|--------------------------|----------------------|--|
| 0-S | X_BLUTGRUPPEN SEROLOGIE1 | Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTGRUPPEN SEROLOGIE2 | Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 883-9 | Blutgruppe AB0 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BLUTGRUPPEAB0KONTR | Blutgruppe AB0 Kontr | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------------------|----------------------|--|
| 2-L | 57743-7 | Blutgruppe AB0 Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51892-8 | Blutgruppe AB0 /BCO | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14580-5 | Blutgruppe AB0 Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 882-1 | Blutgruppe AB0 + Rh | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BLUTGRABORHKONTR | Blutgr. AB0+Rh Kontr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BLUTGRUPPEABORHBT | Blutgruppe AB0+Rh Bt | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34474-7 | Blutgr. AB0+Rh /BCO | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19057-9 | Blutgr. AB0+Rh Neug. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10331-7 | Rhesusfaktor | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_RHESUSFAKTORKONTR | Rhesusfaktor Kontr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34961-3 | Rhesusfaktor Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14906-2 | Rhesusfaktor /BCO | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14908-8 | Rhesusfaktor Neugeb. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 890-4 | Blutgr. AK-Screen | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 888-8 | Blutgruppen AK-Diff. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 906-8 | Blutgruppen AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 907-6 | EK. Blutgr. AG-Best. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1250-0 | Kreuzprobe (major) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1007-4 | DCT polyspez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55776-9 | DCT IgG-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55775-1 | DCT IgA-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55777-7 | DCT IgM-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|
| 2-L | 56471-6 | DCT C3c-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55774-4 | DCT C3d-spez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1008-2 | ICT polyspez. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34477-0 | BG. AK-Diff.Elution | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 61406-5 | Blutgr.-AK Titer | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13310-8 | Blutgr. K-Antigen | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 972-0 | Blutgr. Dweak-AG | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1303-7 | BG-Serumgegenprobe | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 817-7 | Blutgr. A AK | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 913-4 | Blutgr. B AK | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 975-3 | Anti-D | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14658-9 | Kälteagglutinine Ttr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 5097-1 | Kälteagglutinine ql | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19066-0 | Kommentar Blutgruppenserologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HLADIAGNOSTIK | HLA-Diagnostik | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42675-9 | HLA-Antigene | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4821-5 | HLA-B27 ql. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26028-1 | HLA-B27 (Flowzytom.) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45023-9 | HLA Typ Zöliakie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HPADIAGNOSTIK | HPA-Diagnostik | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50604-8 | HPA-Befund | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | X_BLUTGASANALYTIK | Blutgasanalytik | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------|--|
| 1-S | X_BLUTGASANALYSEARTERIELL | Blutgasanalyse arteriell | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24336-0 | BGA Anf. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2744-1 | pH art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2019-8 | pCO2 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2703-7 | pO2 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19214-6 | pO2-50 art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2714-4 | Oxygen.Hämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 72326-2 | Shunt-Vol. fkt. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2708-6 | O2-Sättigung art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 59413-5 | O2-Sättigung art. pT | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1925-7 | Base excess art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19235-1 | SBEC art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1960-4 | Bikarbonat art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19230-2 | Bikarbonat Std. BA | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2518-9 | Laktat art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32717-1 | Natrium art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32713-0 | Kalium art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34581-9 | Calcium ion. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41650-3 | Chlorid art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 73581-1 | Anionenlücke 4P art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 59827-6 | Bilirubin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41651-1 | Glucose art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|--|
| 2-L | 21232-4 | Kreatinin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32354-3 | Hct art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEARTERIELL | Hb-Derivate arteriell | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30313-1 | Hämoglobin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19225-2 | Deoxy.Hämoglob. art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2030-5 | Carboxyhämoglob. art | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2615-3 | Methämoglobin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINART | Sulfhämoglobin art. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTGASANALYSEVENOS | Blutgasanalyse venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24339-4 | BGA Anf. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2746-6 | pH ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2021-4 | pCO2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2705-2 | pO2 ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19216-1 | pO2-50 venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2716-9 | Oxygen.Hämoglob. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2711-0 | O2-Sättigung ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1927-3 | Base excess ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14627-4 | Bikarbonat ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19232-8 | Bikarbonat Std. BV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2519-7 | Laktat ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39791-9 | Natrium ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39789-3 | Kalium ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|--|
| 2-L | 41649-5 | Chlorid ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 73578-7 | Anionenlücke 4P ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 59828-4 | Bilirubin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41652-9 | Glucose ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41654-5 | Hct ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEVENOS | Hb-Derivate venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30350-3 | Hämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19227-8 | Deoxy.Hämoglob. ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2032-1 | CO-Hämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2617-9 | Methämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINVEN | Sulfhämoglobin ven. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTGASANALYSEKAPILLAR | Blutgasanalyse kapillär | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24337-8 | BGA Anf. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2745-8 | pH Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2020-6 | pCO2 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2704-5 | pO2 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19215-3 | pO2-50 Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50211-2 | F-Shuntvolumen Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2709-4 | O2-Sättigung Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1926-5 | Base excess Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19236-9 | SBEC Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1961-2 | Bikarbonat Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 2-L | 19239-3 | Laktat Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39792-7 | Natrium Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 39790-1 | Kalium Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41644-6 | Calcium ion. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51590-8 | Chlorid Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 48421-2 | CRP Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BILIRUBINKAP | Bilirubin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32016-8 | Glucose Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KREATININKAP | Kreatinin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42908-4 | Hct Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEKAPILLAR | Hb-Derivate kapillär | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30352-9 | Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2715-1 | Oxygen.Hämoglob. Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19226-0 | Deoxy.Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2031-3 | CO-Hämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2616-1 | Methämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINKAP | Sulfhämoglobin Kap. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_HBDERIVATEGEMISCHTVENOSRECHTSHERZKATHETER | Hb-Derivate, gemischtvenös (Rechtsherzkatheter) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30351-1 | Hämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34969-6 | Oxygen.Hämoglob. Gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19228-6 | Deoxy.Hämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41648-7 | CO-Hämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------|--|
| 2-L | 41607-3 | Methämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_SULFHAMOGLOBINGEV | Sulfhämoglobin gev. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19213-8 | pH gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19212-0 | pCO2 gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19211-2 | pO2 gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19217-9 | pO2-50 gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19224-5 | O2-Sättigung gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19234-4 | Base excess gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19229-4 | Bikarbonat gemischt venös | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BGASONSTIGES | BGA Sonstiges | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8310-5 | Körpertemperatur | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19993-5 | Beatmungswert (FIO2) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20124-4 | Ventilationsmodus | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 3151-8 | O2-Zufuhr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KOMMENTARBGA | Kommentar BGA | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11558-4 | pH Blut | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45847-1 | Sauerstofftherapie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 49701-6 | pH temperaturkorrigiert /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2947-0 | Natrium/B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 6298-4 | Kalium/B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1994-3 | Calcium ionisiert/B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 38483-4 | Kreatinin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|------------------|----------------------|--|
| 2-L | 19991-9 | AaD02 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11559-2 | Oxyhämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20564-1 | O2-Sättigung gem. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 2713-6 | O2-Sättigung ber. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4536-9 | Deoxyhämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55782-7 | Hämoglobin /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11557-6 | pCO2 /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11556-8 | pO2 /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34705-4 | pCO2 tem.-korr. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19254-2 | pO2 temp.-korr. /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11555-0 | Base excess /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 41276-7 | Anionenlücke /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1959-6 | Bikarbonat /B | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 0-S | X_HAMATOLOGIE | Hämatologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_BLUTBILD | Blutbild | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57021-8 | Blutbild | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BLUTBILD37GRAD | Blutbild 37 Grad | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57782-5 | Blutbild+Man. Diff. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55429-5 | kleines Blutbild | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50262-5 | Retikulozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26464-8 | Leukozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26515-7 | Thrombozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 2-L | 778-1 | Thrombozyten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26453-1 | Erythrozyten | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 718-7 | Hämoglobin | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20570-8 | Hämatokrit | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30428-7 | MCV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28539-5 | MCH | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28540-3 | MCHC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30385-9 | RDW-CV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30384-2 | RDW-SD | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14196-0 | Retikulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4679-7 | Retikulozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40665-2 | Retikulozyt. abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 31112-6 | Retikulozyt. rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32349-3 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32350-1 | Mittelfraktion (Mono, Eo, Baso) rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32154-7 | Baso+Eo+Mono abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32155-4 | Baso+Eo+Mono rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26499-4 | Neutroph. Gran. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 53115-2 | Unreife neutrophile Granulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26474-7 | Lymphozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33830-1 | Lymphoblasten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34926-6 | Promonozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|----------------------|--|
| 2-L | 26484-6 | Monozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26449-9 | Eosinophile Gr. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26444-0 | Basophile Gr.abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51584-1 | Gran., unreife abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 17789-9 | LUC abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26511-6 | Neutroph. Gran. rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26478-8 | Lymphozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33831-9 | Lymphoblasten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26485-3 | Monozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26450-7 | Eosinophile Gr. rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30180-4 | Basophile Gr.rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 38518-7 | Gran., unreife rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 17788-1 | LUC rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51588-2 | Granulozyten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 753-4 | Neutroph.Gr.abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 768-2 | Segmentkern. abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 763-3 | Stabkernige abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 739-3 | Metamyeloz. abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 748-4 | Myelozyten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 781-5 | Promyelozyt. abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 708-8 | Blasten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 732-8 | Lymphozyten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| 2-L | X_AKTLYMPHOZABSMI | Akt.Lymphoz.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 734-4 | Atyp.Lymphoz.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24105-9 | Atypische Lymphozyten neoplastisch abs. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34993-6 | Kernschatten abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 35082-7 | LGL abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24103-4 | Plasmazellen abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33834-3 | Plasm.Lymphoz.ab.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 6863-5 | Prolymphozyt.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24107-5 | Haarzellen abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33856-6 | Sezary-Zel. abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13599-6 | Promonozyten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 743-5 | Monozyten abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 712-0 | Eosinoph.Gr.abs. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 705-4 | Basophile Gr.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51585-8 | Sonstige Zel.abs.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 769-0 | Segmentkern. rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 764-1 | Stabkernige rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28541-1 | Metamyeloz. rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 749-2 | Myelozyten rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 783-1 | Promyelozyt. rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 709-6 | Blasten rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 737-7 | Lymphozyten rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|------------------|---|--|
| 2-L | X_AKTLYMPHOZRELM | Akt.Lymphoz.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 735-1 | Atyp.Lymphoz.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24104-2 | Atypische Lymphozyten neoplastisch rel. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 733-6 | Atyp.Lymphoz.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34992-8 | Kernschatten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7798-2 | Kernschatten ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11275-5 | LGL rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13047-6 | Plasmazellen rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40743-7 | Plasmazellen ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33835-0 | Plasm.Lymphoz.rl.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 6746-2 | Prolymphozyt.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24106-7 | Haarzellen rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33857-4 | Sezary-Zel. rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 744-3 | Monozyten rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 714-6 | Eosinoph.Gr.rel. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 707-0 | Basophile Gr.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51586-6 | Sonstige Zel.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51644-3 | Megakar.kerne ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 5908-9 | Riesenthromb. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7796-6 | Thromboz.aggr.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51640-1 | Thro.anisozyt.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 738-5 | Makrozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|----------------------|--|
| 2-L | 51645-0 | Mikromegakary.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 765-8 | Hypersegment. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 803-7 | Toxische Gran.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10378-8 | Polychromasie ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 779-9 | Poikilozytose ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 741-9 | Mikrozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10376-2 | Megalozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 802-9 | Kugelnzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 728-6 | Hypochromasie ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7793-3 | Howell-Jolly. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51630-2 | Fragmentozyt.rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 800-3 | Fragmentozyt. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51638-5 | Ery.aggregate ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11274-8 | Elliptozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7790-9 | Echinozyten ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51589-0 | Dyserythrop. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10377-0 | Bleistiftzel. ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 703-9 | Basoph.Tüpfelung mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51583-3 | Anulozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 702-1 | Anisozytose ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51582-5 | Anisochromas.ql.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51639-3 | Akanthozyten rel.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|--------------------------|--|
| 2-L | 7789-1 | Akanthozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7791-7 | Tränenzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10381-2 | Target-Zellen mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7797-4 | Geldrollenb. ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 10380-4 | Stomatozyten ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 801-1 | Sichelzellen ql. mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30392-5 | Normoblast.(NRBC)ab. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 771-6 | Normoblasten (NRBC) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 19048-8 | Normoblast.(NRBC)Rt. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 772-4 | Normobl.(NRBC)ab.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18309-5 | Normobl.(NRBC)Rt.mi. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 5909-7 | Blutausstr. Interpr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42810-2 | Retikulozyten Hb | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 31111-8 | RPI | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51636-9 | IRF(Ret.,unreif)abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33516-6 | IRF(Ret.,unreif)rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51634-4 | Reti,mittelreif abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34420-0 | Reti,mittelreif rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51635-1 | Reti., reif abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34419-2 | Reti., reife rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51643-5 | HLSc-Reti. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51642-7 | HLSc-Reti. rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|-------------------------------------|--|
| 2-L | 51637-7 | Thrombokrit | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 28542-9 | MPV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32623-1 | MPV (Mittleres Thrombozytenvolumen) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 48386-7 | Riesenthrombozyten Ratio | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32207-3 | PDW-SD | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51631-0 | PDW-CV | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51632-8 | Retik.Thromboz.abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51633-6 | Retik.Thromboz.rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40741-1 | PLTCLU | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50794-7 | Osm.E.R.Hämol.beginn | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50795-4 | Osm.E.R.Totalhämol. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 34964-7 | Osmot.E.R. Interpr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 12710-0 | Hämoglobinopath. Scr | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4546-8 | Hämoglobin A | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4547-6 | Hämoglobin A1 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4551-8 | Hämoglobin A2 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4621-9 | Hämoglobin S | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 4579-9 | Hämoglobin F | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 1783-0 | Alk.Phosphataseindex | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33249-4 | Hyperchromasie ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 774-0 | Ovalozyten ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7795-8 | Pappenheimer-Körper ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|--------------------------|--|--|
| 2-L | 18312-9 | Thrombozytensatellitose ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 33216-3 | Ungranulierte Thrombozyten ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50672-5 | Toxische Vakuolisierung ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18311-1 | Pelger-Huet-Zellen ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 60526-1 | Pseudo Pelger Huet-Zellen ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 71369-3 | Dysplastische neutrophile Granulopoese ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 7792-5 | Döhle-Körper ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11281-3 | Auerstäbchen ql. mikr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_KNOCHENMARKMORPHOLOGIE | Knochenmark Morphologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 74222-1 | Material /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 66119-9 | Biopsie /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 48807-2 | Ausstriche /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 38519-5 | KM Morphologie | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 74232-0 | Zellreichtum /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11128-6 | Segm.Gran. rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11103-9 | Stabk.Gran. rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11111-2 | Metamyeloz.rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11114-6 | Myelozyten rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11120-3 | Promyeloz. rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11113-8 | Myeloblasten rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11108-8 | Lymphozyten rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11118-7 | Plasmaz. rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 2-L | 11112-0 | Monozyten rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11106-2 | Eos.Gran.rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11105-4 | Basoph.Gran.rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11150-0 | Blasten rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51579-1 | Normoblast. rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51629-4 | Makroblast. rel. /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11124-5 | Proerythrobl.rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11110-4 | Megakaryozy.rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51580-9 | Makrophagen rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51581-7 | Sonst.Zellen rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51268-1 | CD23 Zellen rel./KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 13513-7 | Eisenfärbung /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11016-3 | Esterase-Fbg (unsp.) | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9786-5 | PAS-Färbung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11018-9 | POX(Peroxidase)-Fbg | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11020-5 | Saure-Phosphat.-Fbg n. Tartrathemmung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11019-7 | Sudan-Schwarz-Fbg | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 51628-6 | KM-Befundinterpr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57764-3 | KM mikr. Bef.-Intpr. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40687-6 | Myelopoetische Zellen /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11115-3 | Neutrophile Granulozyten /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 40689-2 | Erythropoetische Zellen /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|--|
| 2-L | 11107-0 | Atypische Lymphozyten /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 11138-5 | Myelo-/Erythropoese /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50726-9 | Retikulumzellen /KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 1-S | X_IMMUNPHANOTYPISIERUNG | Immunphänotypisierung | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45270-6 | Ak. Leukämiepanel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 45269-8 | Chr.Leukämiepanel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54225-8 | Immunstatus | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 49120-9 | Immundefizienz Verl. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54228-2 | CLL Panel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54229-0 | T-Zell Panel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54227-4 | Ak. Lymphompanel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54226-6 | Lymphompanel FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEBLUT | Flowzytometrie Blut | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEBAL | Flowzytometrie BAL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEL | Flowzytometrie /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIEKM | Flowzytometrie KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_FLOWZYTOMETRIESM | Flowzytometrie SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 55164-8 | PNH-Diagnostik | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_STAMMZELL34LEU | Stammzell.(34+)[Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14136-6 | Stammzell.(34+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD64AGDNEGRAN | CD64 AG-D.[Ne.Gran.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD64AGZAHLGRAN | CD64 AG-Zahl/Gran. | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|------------------|----------------------|--|
| 2-L | X_HLADRAGDMONOZ | HLA-DR AG-D.[Monoz.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30364-4 | Lymphozyten abs. FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30365-1 | Lymphozyten rel. FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_MONOZYTENABSFC | Monozyten abs. FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_MONOZYTENRELFC | Monozyten rel. FC | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30394-1 | Granulozyten abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 30395-8 | Granulozyten rel. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8116-6 | B-Zellen (19+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8122-4 | T-Zellen (3+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 24467-3 | Helfer-T-Z.(4+) abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14135-8 | Zytotox.T-Z.(8+)abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 54218-3 | CD4/CD8-Ratio | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26568-6 | aktiv.T-Z.(DR+)abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9728-7 | NK-Zellen abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 42188-3 | NK-like T-Zell. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LEU | B-Zellen (19+) [Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LY | B-Zellen (19+) [Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LY | T-Zellen (3+) [Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFERTZ4LY | Helfer-T-Z.(4+) [Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTOXTZ8LY | Zytotox.T-Z.(8+)[Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTIVTZDRLY | aktiv.T-Z.(DR+)[Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLY | NK-Zellen [Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|--------------------|----------------------|--|
| 2-L | X_NKLIKETZELLENLY | NK-like T-Zellen[Ly] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD20ZELLENLEU | CD20+ Zellen [Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9558-8 | CD20+ Zellen abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD195BZ | CD19+5+ [BZ] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9561-2 | CD19+5+ abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD1923BZ | CD19+23+ [BZ] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD1923ABS | CD19+23+ abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 60436-3 | CD19+25+ [BZ] abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD19KAPPABZ | CD19+kappa+ [BZ] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50664-2 | CD19+kappa+ abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD19LAMBDAZ | CD19+lambda+ [BZ] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50665-9 | CD19+lambda+ abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLRATIOBZELLEN | K/L-Ratio [B-Zellen] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLONALEPOPULLEU | Klonale Popul. [Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLONALEPOPULABS | Klonale Popul. abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_KLONALEPOPLEUKM | Klonale Pop.[Leu]/KM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26997-7 | CD3+25+ [Ly] abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD52ZELLENLEU | CD52+ Zellen [Leu] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD52ZELLENABS | CD52+ Zellen abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD52AGEXPATHP | CD52 AG-Ex.[path.P.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD41AGEXPRTHRO | CD41 AG-Expr.[Thro.] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_PAC1THROMBOZYTEN | PAC-1+[Thrombozyten] | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|------------------|----------------------|--|
| 2-L | X_BZELLEN19LYSM | B-Zellen(19+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LYSM | T-Zellen(3+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4LYSM | Helf-T-Z.(4+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8LYSM | Zytot.T-Z(8+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18266-7 | CD4/CD8-Ratio /SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 57740-3 | HLA-DR rel. /SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTTZDRLYSM | akt.T-Z.(DR+)[Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLYSM | NK-Zellen [Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZLYSM | NK-like T-Z. [Ly]/SM | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19ABSBL | B-Zellen(19+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3ABSBL | T-Zellen(3+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4ABSBL | Helf-T-Z.(4+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8ABSBL | Zytot.T-Z(8+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD4CD8RATIOBL | CD4/CD8-Ratio /BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTTZDRABSBL | akt.T-Z.(DR+)abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENABSBL | NK-Zellen abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZABSBL | NK-like T-Z. abs./BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LYBL | B-Zellen(19+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LYBL | T-Zellen(3+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4LYBL | Helf-T-Z.(4+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8LYBL | Zytot.T-Z(8+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_AKTTZDRLYBL | akt.T-Z.(DR+)[Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|------------------|---|--|
| 2-L | X_NKZELLENLYBL | NK-Zellen [Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKLIKETZLYBL | NK-like T-Z. [Ly]/BL | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_BZELLEN19LYL | B-Zellen(19+)[Ly] /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_TZELLEN3LYL | T-Zellen(3+)[Ly] /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_HELFTZ4LYL | Helf-T-Z.(4+)[Ly] /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_ZYTOTTZ8LYL | Zytot.T-Z(8+)[Ly] /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_CD4CD8RATIOIOL | CD4/CD8-Ratio /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | X_NKZELLENLYL | NK-Zellen [Ly] /L | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 69052-9 | Befundint.Immunphän. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8124-0 | T-Lymphozyten [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8117-4 | B-Lymphozyten [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8123-2 | Helferzellen [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8101-8 | Suppressorzellen [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 18408-5 | aktivierte T-Zellen [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8112-5 | NK-Zellen [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 17135-5 | zytotox T-Zellen [Lympho] | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26858-1 | zytotox T-Zellen abs. | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 32760-1 | Beschriebene Population /Sondermaterial | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 20592-2 | CD19 /Sondermaterial | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9559-6 | CD5 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8132-3 | CD5 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 27071-0 | CD45 | Logical Observation Identifier Names and Codes |

| | | | |
|-----|---------|-------|--|
| 2-L | 25165-2 | CD23 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9554-7 | CD10 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 21013-8 | CD22 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 26728-6 | CD38 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 8126-5 | CD38 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9555-4 | CD11c | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 31123-3 | CD25 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 14113-5 | CD56 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 9563-8 | CD7 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 50972-9 | CD138 | Logical Observation Identifier Names and Codes |
| 2-L | 27011-6 | CD14 | Logical Observation Identifier Names and Codes |

Dieses Value Set beinhaltet 4730 Codes. Um die Publikationsgröße überschaubar zu halten, wird nur eine Auswahl (500 Codes) des ganzen Sets von Codes gezeigt.

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.25  Language 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2013-01-31  (aus Repository: cdda-)

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.11526  cdda- | Gültigkeit | 2013-01-31 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none">  HumanLanguageDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-  HumanLanguageDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr- |
| Name | Language | Anzeigenname | Language |

| Quell-Codesystem | | 2.16.840.1.113883.6.121 - Tags for the Identification of Languages - urn:oid:2.16.840.1.113883.6.121 | |
|------------------|------|--|--|
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-L | aa | Afar | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ab | Abkhazian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ace | Achinese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ach | Acoli | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ada | Adangme | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ady | Adyghe; Adygei | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ae | Avestan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | af | Afrikaans | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | afa | Afro-Asiatic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | afh | Afrihili | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ain | Ainu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ak | Akan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | akk | Akkadian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ale | Aleut | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | alg | Algonquian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | alt | Southern Altai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | am | Amharic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | an | Aragonese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ang | English, Old (ca.450-1100) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | anp | Angika | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | apa | Apache languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ar | Arabic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arc | Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arn | Mapudungun; Mapuche | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arp | Arapaho | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | art | Artificial (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | arw | Arawak | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | as | Assamese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ath | Athapascan languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | aus | Australian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | av | Avaric | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | awa | Awadhi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ay | Aymara | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | az | Azerbaijani | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ba | Bashkir | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bad | Banda languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bai | Bamileke languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bal | Baluchi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ban | Balinese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bas | Basa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bat | Baltic (Other) | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|-----------------|--|
| 0-L | be | Belarusian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bej | Beja; Bedawiyet | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bem | Bemba | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ber | Berber (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bg | Bulgarian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bh | Bihari | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bho | Bhojpuri | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bi | Bislama | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bik | Bikol | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bin | Bini; Edo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bla | Siksika | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bm | Bambara | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bn | Bengali | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bnt | Bantu (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bo | Tibetan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | br | Breton | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bra | Braj | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bs | Bosnian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | btk | Batak languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bua | Buriat | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | bug | Buginese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | byn | Blin; Bilin | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | ca | Catalan; Valencian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cad | Caddo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cai | Central American Indian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | car | Galibi Carib | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cau | Caucasian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ce | Chechen | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ceb | Cebuano | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cel | Celtic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ch | Chamorro | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chb | Chibcha | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chg | Chagatai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chk | Chuukese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chm | Mari | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chn | Chinook jargon | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cho | Choctaw | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chp | Chipewyan; Dene Suline | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chr | Cherokee | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | chy | Cheyenne | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cmc | Chamic languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | co | Corsican | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cop | Coptic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cpe | Creoles and pidgins, English based (Other) | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | cpf | Creoles and pidgins, French-based (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cpp | Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cr | Cree | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | crp | Creoles and pidgins (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cs | Czech | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | csb | Kashubian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cus | Cushitic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cv | Chuvash | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | cy | Welsh | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | da | Danish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dak | Dakota | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dar | Dargwa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | day | Land Dayak languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | de | German | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | del | Delaware | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | den | Slave (Athapascan) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dgr | Dogrib | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | din | Dinka | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | doi | Dogri | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dra | Dravidian (Other) | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|------------------------------|--|
| 0-L | dsb | Lower Sorbian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dua | Duala | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dum | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dyu | Dyula | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | dz | Dzongkha | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ee | Ewe | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | efi | Efik | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | egy | Egyptian (Ancient) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | eka | Ekajuk | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | el | Greek, Modern (1453-) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | elx | Elamite | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | en | English | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | enm | English, Middle (1100-1500) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | eo | Esperanto | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | es | Spanish; Castilian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | et | Estonian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | eu | Basque | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ewo | Ewondo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fa | Persian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fan | Fang | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fat | Fanti | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|-------------------------------|--|
| 0-L | ff | Fulah | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fi | Finnish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fil | Filipino; Pilipino | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fiu | Finno-Ugrian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fj | Fijian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fo | Faroese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fon | Fon | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fr | French | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | frm | French, Middle (ca.1400-1600) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fro | French, Old (842-ca.1400) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | frf | Northern Frisian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | frs | Eastern Frisian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fur | Friulian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | fy | Western Frisian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ga | Irish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gaa | Ga | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gay | Gayo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gba | Gbaya | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gd | Gaelic; Scottish Gaelic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gem | Germanic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gez | Geez | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gil | Gilbertese | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|------------------------------------|--|
| 0-L | gl | Galician | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gmh | German, Middle High (ca.1050-1500) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gn | Guarani | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | goh | German, Old High (ca.750-1050) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gon | Gondi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gor | Gorontalo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | got | Gothic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | grb | Grebo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | grc | Greek, Ancient (to 1453) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gsw | Swiss German; Alemannic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gu | Gujarati | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gv | Manx | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | gwi | Gwich'in | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ha | Hausa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hai | Haida | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | haw | Hawaiian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | he | Hebrew | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hi | Hindi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hil | Hiligaynon | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | him | Himachali | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hit | Hittite | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hmn | Hmong | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | ho | Hiri Motu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hr | Croatian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hsb | Upper Sorbian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ht | Haitian; Haitian Creole | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hu | Hungarian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hup | Hupa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hy | Armenian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | hz | Herero | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | iba | Iban | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | id | Indonesian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ie | Interlingue; Occidental | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ig | Igbo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ii | Sichuan Yi; Nuosu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ijo | Ijo languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ik | Inupiaq | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ilo | Iloko | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | inc | Indic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ine | Indo-European (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | inh | Ingush | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | io | Ido | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ira | Iranian (Other) | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|---------------------|--|
| 0-L | iro | Iroquoian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | is | Icelandic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | it | Italian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | iu | Inuktitut | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ja | Japanese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jbo | Lojban | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jpr | Judeo-Persian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jrb | Judeo-Arabic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | jv | Javanese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ka | Georgian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kaa | Kara-Kalpak | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kab | Kabyle | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kac | Kachin; Jingpho | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kam | Kamba | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kar | Karen languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kaw | Kawi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kbd | Kabardian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kg | Kongo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kha | Khasi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | khi | Khoisan (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kho | Khotanese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ki | Kikuyu; Gikuyu | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|------|--|--|
| 0-L | kj | Kuanyama; Kwanyama | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kk | Kazakh | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kl | Kalaallisut; Greenlandic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | km | Central Khmer | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kmb | Kimbundu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kn | Kannada | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ko | Korean | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kok | Konkani | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kos | Kosraean | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kpe | Kpelle | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kr | Kanuri | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | krc | Karachay-Balkar | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | krl | Karelian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kro | Kru languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kru | Kurukh | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ks | Kashmiri | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ku | Kurdish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kum | Kumyk | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | kut | Kutenai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | Komi | Tags for the Identification of Languages | |
| 0-L | kw | Cornish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ky | Kirghiz; Kyrgyz | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|----------------------------------|--|
| 0-L | la | Latin | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lad | Ladino | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lah | Lahnda | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lam | Lamba | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lez | Lezghian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lg | Ganda | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | li | Limburgan; Limburger; Limburgish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ln | Lingala | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lo | Lao | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lol | Mongo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | loz | Lozi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lt | Lithuanian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lu | Luba-Katanga | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lua | Luba-Lulua | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lui | Luiseno | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lun | Lunda | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | luo | Luo (Kenya and Tanzania) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lus | Lushai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | lv | Latvian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mad | Madurese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mag | Magahi | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--------------------------|--|
| 0-L | mai | Maithili | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mak | Makasar | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | man | Mandingo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | map | Austronesian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mas | Masai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mdf | Moksha | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mdr | Mandar | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | men | Mende | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mg | Malagasy | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mga | Irish, Middle (900-1200) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mh | Marshallese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mi | Maori | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mic | Mi?kmaq; Micmac | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | min | Minangkabau | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mis | Uncoded languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mk | Macedonian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mkh | Mon-Khmer (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ml | Malayalam | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mn | Mongolian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mnc | Manchu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mni | Manipuri | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mno | Manobo languages | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | mo | Moldavian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | moh | Mohawk | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mos | Mossi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mr | Marathi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ms | Malay | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mt | Maltese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mul | Multiple languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mun | Munda languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mus | Creek | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mwł | Mirandese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | mwr | Marwari | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | my | Burmese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | myn | Mayan languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | myv | Erzya | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | na | Nauru | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nah | Nahuatl languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nai | North American Indian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nap | Neapolitan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nb | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nd | Ndebele, North; North Ndebele | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nds | Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ne | Nepali | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|---|--|
| 0-L | new | Nepal Bhasa; Newari | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ng | Ndonga | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nia | Nias | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nic | Niger-Kordofanian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | niu | Niuean | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nl | Dutch; Flemish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nn | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | no | Norwegian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nog | Nogai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | non | Norse, Old | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nqo | N?Ko | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nr | Ndebele, South; South Ndebele | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nso | Pedi; Sepedi; Northern Sotho | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nub | Nubian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nv | Navajo; Navaho | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nwc | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nym | Nyamwezi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nyn | Nyankole | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nyo | Nyoro | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | nzi | Nzima | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | oc | Occitan (post 1500); Provençal | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--------------------------------|--|
| 0-L | oj | Ojibwa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | om | Oromo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | or | Oriya | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | os | Ossetian; Ossetic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | osa | Osage | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ota | Turkish, Ottoman (1500-1928) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | oto | Otomian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pa | Panjabi; Punjabi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | paa | Papuan (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pag | Pangasinan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pal | Pahlavi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pam | Pampanga; Kapampangan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pap | Papiamento | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pau | Palauan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | peo | Persian, Old (ca.600-400 B.C.) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | phi | Philippine (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | phn | Phoenician | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pi | Pali | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pl | Polish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pon | Pohnpeian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pra | Prakrit languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pro | Provençal, Old (to 1500) | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|---------|---------------------------------------|--|
| 0-L | ps | Pushto; Pashto | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | pt | Portuguese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | qaa-qtz | Reserved for local use | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | qu | Quechua | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | raj | Rajasthani | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rap | Rapanui | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rar | Rarotongan; Cook Islands Maori | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rm | Romansh | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rn | Rundi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ro | Romanian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | roa | Romance (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rom | Romany | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ru | Russian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rup | Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | rw | Kinyarwanda | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sa | Sanskrit | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sad | Sandawe | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sah | Yakut | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sai | South American Indian (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sal | Salishan languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sam | Samaritan Aramaic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sas | Sasak | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|------------------------|--|
| 0-L | sat | Santali | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sc | Sardinian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | scn | Sicilian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sco | Scots | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sd | Sindhi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | se | Northern Sami | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sel | Selkup | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sem | Semitic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sg | Sango | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sga | Irish, Old (to 900) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sgn | Sign Languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | shn | Shan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | si | Sinhala; Sinhalese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sid | Sidamo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sio | Siouan languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sit | Sino-Tibetan (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sk | Slovak | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sl | Slovenian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sla | Slavic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sm | Samoan | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sma | Southern Sami | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | smi | Sami languages (Other) | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|----------------------|--|
| 0-L | smj | Lule Sami | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | smn | Inari Sami | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sms | Skolt Sami | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sn | Shona | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | snk | Soninke | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | so | Somali | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sog | Sogdian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | son | Songhai languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sq | Albanian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sr | Serbian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | srn | Sranan Tongo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | srr | Serer | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ss | Swati | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ssa | Nilo-Saharan (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | st | Sotho, Southern | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | su | Sundanese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | suk | Sukuma | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sus | Susu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sux | Sumerian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sv | Swedish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | sw | Swahili | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | syc | Classical Syriac | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|-----------------------|--|
| 0-L | syr | Syriac | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ta | Tamil | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tai | Tai (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | te | Telugu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tem | Timne | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ter | Tereno | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tet | Tetum | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tg | Tajik | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | th | Thai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ti | Tigrinya | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tig | Tigre | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tiv | Tiv | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tk | Turkmen | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tkl | Tokelau | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tl | Tagalog | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tlh | Klingon; tlhIngan-Hol | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tli | Tlingit | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tmh | Tamashek | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tn | Tswana | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | to | Tonga (Tonga Islands) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tog | Tonga (Nyasa) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tpi | Tok Pisin | Tags for the Identification of Languages |









| | | | |
|-----|-----|----------------|--|
| 0-L | tr | Turkish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ts | Tsonga | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tsi | Tsimshian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tt | Tatar | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tum | Tumbuka | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tup | Tupi languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tut | Altaic (Other) | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tvl | Tuvalu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tw | Twi | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ty | Tahitian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | tyv | Tuvinian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | udm | Udmurt | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ug | Uighur; Uyghur | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | uga | Ugaritic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | uk | Ukrainian | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | umb | Umbundu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | und | Undetermined | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ur | Urdu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | uz | Uzbek | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | vai | Vai | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ve | Venda | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | vi | Vietnamese | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|--|
| 0-L | vo | Volapük | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | vot | Votic | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wa | Walloon | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wak | Wakashan languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wal | Walamo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | war | Waray | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | was | Washo | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wen | Sorbian languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | wo | Wolof | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | xal | Kalmyk; Oirat | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | xh | Xhosa | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yao | Yao | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yap | Yapese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yi | Yiddish | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | yo | Yoruba | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | ypk | Yupik languages | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | za | Zhuang; Chuang | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zap | Zapotec | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zbl | Blissymbols; Blissymbolics; Bliss | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zen | Zenaga | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zh | Chinese | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | znd | Zande languages | Tags for the Identification of Languages |

| | | | |
|-----|-----|--|--|
| 0-L | zu | Zulu | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zun | Zuni | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zxx | No linguistic content | Tags for the Identification of Languages |
| 0-L | zza | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki | Tags for the Identification of Languages |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.










2.1.26  **LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)**  (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.12249  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  LanguageAbilityMode vom 2013-01-31    LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | LanguageAbilityMode | Anzeigename | LanguageAbilityMode |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A value representing the method of expression of the language. <i>Example:</i> Expressed spoken, expressed written, expressed signed, received spoken, received written, received signed. | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.60 - <i>Language Ability Mode</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-L | ESGN | Expressed signed | Language Ability Mode |

| | | | |
|-----|------|-------------------|-----------------------|
| 0-L | ESP | Expressed spoken | Language Ability Mode |
| 0-L | EWR | Expressed written | Language Ability Mode |
| 0-L | RSGN | Received signed | Language Ability Mode |
| 0-L | RSP | Received spoken | Language Ability Mode |
| 0-L | RWR | Received written | Language Ability Mode |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.27  **LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2013-01-31**  (aus Repository: ccda-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.12249   | Gültigkeit | 2013-01-31 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none">  LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26    LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26   |
| Name | LanguageAbilityMode | Anzeigename | LanguageAbilityMode |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.60 - <i>Language Ability Mode</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------------|-----------------------|
| 0-L | ESGN | Expressed signed | Language Ability Mode |
| 0-L | ESP | Expressed spoken | Language Ability Mode |
| 0-L | EWR | Expressed written | Language Ability Mode |
| 0-L | RSGN | Received signed | Language Ability Mode |

| | | | |
|-----|-----|------------------|-----------------------|
| 0-L | RSP | Received spoken | Language Ability Mode |
| 0-L | RWR | Received written | Language Ability Mode |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.28  **LanguageAbilityMode 2.16.840.1.113883.1.11.12249 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)  (aus Repository: ad2bbr-)**

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.12249  ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  LanguageAbilityModeDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr-  LanguageAbilityMode vom 2013-01-31  ccda- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | LanguageAbilityMode | Anzeigename | LanguageAbilityMode |
| Beschreibung |  description: A value representing the method of expression of the language. <i>Example:</i> Expressed spoken, expressed written, expressed signed, received spoken, received written, received signed. | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.60 - <i>Language Ability Mode</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityMode | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------------|-----------------------|
| 0-L | ESGN | Expressed signed | Language Ability Mode |
| 0-L | ESP | Expressed spoken | Language Ability Mode |
| 0-L | EWR | Expressed written | Language Ability Mode |
| 0-L | RSGN | Received signed | Language Ability Mode |

| | | | |
|-----|-----|------------------|-----------------------|
| 0-L | RSP | Received spoken | Language Ability Mode |
| 0-L | RWR | Received written | Language Ability Mode |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.29 **LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)**


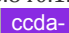


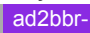


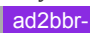

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.12199 ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> LanguageAbilityProficiency vom 2013-01-31 ccda- LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26 ad2bbr- |
| Status | Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | LanguageAbilityProficiency | Anzeigename | LanguageAbilityProficiency |
| Beschreibung | History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A value representing the level of proficiency in a language. <i>Example:</i> Excellent, good, fair, poor. | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| 0-L | E | Excellent | Language Ability Proficiency |
| 0-L | F | Fair | Language Ability Proficiency |
| 0-L | G | Good | Language Ability Proficiency |

| | | | |
|-----|---|------|------------------------------|
| 0-L | P | Poor | Language Ability Proficiency |
|-----|---|------|------------------------------|

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.



2.1.30  **LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2013-01-31**  (aus Repository: ccda-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.12199   | Gültigkeit | 2013-01-31 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26    LanguageAbilityProficiencyDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26   |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | |
| Name | LanguageAbilityProficiency | Anzeigename | LanguageAbilityProficiency |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| 0-L | E | Excellent | Language Ability Proficiency |
| 0-L | F | Fair | Language Ability Proficiency |
| 0-L | G | Good | Language Ability Proficiency |
| 0-L | P | Poor | Language Ability Proficiency |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.31 ○ LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.1.11.12199 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ^{ref} (aus Repository: ad2bbr-)

| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.12199 ^{ref} ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|------------|------|-------------|------------|-----|---|-----------|------------------------------|-----|---|------|------------------------------|-----|---|------|------------------------------|-----|---|------|------------------------------|
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | LanguageAbilityProficiency | Anzeigename | LanguageAbilityProficiency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | <p> description: A value representing the level of proficiency in a language. <i>Example:</i> Excellent, good, fair, poor.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.61 - Language Ability Proficiency - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-LanguageAbilityProficiency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Level/ Typ</th> <th>Code</th> <th>Anzeigename</th> <th>Codesystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-L</td> <td>E</td> <td>Excellent</td> <td>Language Ability Proficiency</td> </tr> <tr> <td>0-L</td> <td>F</td> <td>Fair</td> <td>Language Ability Proficiency</td> </tr> <tr> <td>0-L</td> <td>G</td> <td>Good</td> <td>Language Ability Proficiency</td> </tr> <tr> <td>0-L</td> <td>P</td> <td>Poor</td> <td>Language Ability Proficiency</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | 0-L | E | Excellent | Language Ability Proficiency | 0-L | F | Fair | Language Ability Proficiency | 0-L | G | Good | Language Ability Proficiency | 0-L | P | Poor | Language Ability Proficiency |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-L | E | Excellent | Language Ability Proficiency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-L | F | Fair | Language Ability Proficiency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-L | G | Good | Language Ability Proficiency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-L | P | Poor | Language Ability Proficiency | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.32 ○ Medikationseintrag Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.2 - 2018-11-20


| | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.2 | Gültigkeit | 2018-11-20 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Name | Medikationseintragskategorie | Anzeigename | Medikationseintrag Kategorie |
| Beschreibung | Medikationseintrag Kategorie | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.2 - medmgmt-codesystem-2 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.2 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|----------------------|
| 0-L | ADD | Hinzufügung | medmgmt-codesystem-2 |
| 0-L | STK | Bestand | medmgmt-codesystem-2 |
| 0-L | CHG | Änderung | medmgmt-codesystem-2 |
| 0-L | DEL | Löschung | medmgmt-codesystem-2 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.


2.1.33 Medikationsmanagement-Codes 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.1 - 2019-02-02

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.11.1 | Gültigkeit | 2019-02-02 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Medikationsmanagementcodes | Anzeigename | Medikationsmanagement-Codes |
| Beschreibung | Codes für das Medikationsmanagement, für die keine oder keine Linzenzfreen Standardcodes gefunden wurden | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 - medmgmt-codesystem-1 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations |
|------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------|
| 0-L | AMTSCHK | AMTS-Check | medmgmt-codesystem-1 | |
| 0-L | COMPTATHL | Leistungssportler | medmgmt-codesystem-1 | |
| 0-L | NOC | NOC | medmgmt-codesystem-1 | |
| 0-L | DANG | Datenangaben | medmgmt-codesystem-1 | |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.34 ○ ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 - 2017-12-17 (DEFN=UV=VO=1402-20171217) ref (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.78 ref ad2bbr- | Gültigkeit | 2017-12-17 |
| Status | ● Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1402-20171217 |
| Name | ObservationInterpretation | Anzeigename | ObservationInterpretation |
| Beschreibung | <p> History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p>description:</p> <p>One or more codes specifying a rough qualitative interpretation of the observation, such as "normal", "abnormal", "below normal", "change up", "resistant", "susceptible", etc.</p> <p><i>Discussion:</i> These interpretation codes are sometimes called "abnormal flags", however, the judgment of normalcy is just one of the common rough interpretations, and is often not relevant. For example, the susceptibility interpretations are not about "normalcy", and for any observation of a pathologic condition, it does not make sense to state the normalcy, since pathologic conditions are never considered "normal."</p> | | |

| | |
|-------------------------|---|
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.83 - Observation Interpretation - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation |
|-------------------------|---|

| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> | | <input type="button" value="Alles einklappen"/> | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-A | _GeneticObservationInterpretation | GeneticObservationInterpretation | Observation Interpretation |
| 1-L | CAR | Carrier | Observation Interpretation |
| 1-L | Carrier | Carrier | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationChange | ObservationInterpretationChange | Observation Interpretation |
| 1-L | B | Better | Observation Interpretation |
| 1-L | D | Significant change down | Observation Interpretation |
| 1-L | U | Significant change up | Observation Interpretation |
| 1-L | W | Worse | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationExceptions | ObservationInterpretationExceptions | Observation Interpretation |






| | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1-L | < | Off scale low | Observation Interpretation |
| 1-L | > | Off scale high | Observation Interpretation |
| 1-L | AC | Anti-complementary substances present | Observation Interpretation |
| 1-L | IE | Insufficient evidence | Observation Interpretation |
| 1-L | QCF | Quality control failure | Observation Interpretation |
| 1-L | TOX | Cytotoxic substance present | Observation Interpretation |
| 0-A | _ObservationInterpretationNormality | ObservationInterpretationNormality | Observation Interpretation |
| 1-S | A | Abnormal | Observation Interpretation |
| 2-S | AA | Critical abnormal | Observation Interpretation |
| 3-L | HH | Critical high | Observation Interpretation |
| 3-L | LL | Critical low | Observation Interpretation |
| 2-S | H | High | Observation Interpretation |
| 3-S | H> | Significantly high | Observation Interpretation |
| 4-L | HH | Critical high | Observation Interpretation |
| 3-S | HU | Significantly high | Observation Interpretation |
| 4-L | HH | Critical high | Observation Interpretation |
| 2-S | L | Low | Observation Interpretation |
| 3-S | L< | Significantly low | Observation Interpretation |
| 4-L | LL | Critical low | Observation Interpretation |
| 3-S | LU | Significantly low | Observation Interpretation |
| 4-L | LL | Critical low | Observation Interpretation |
| 1-L | N | Normal | Observation Interpretation |

| | | | |
|-----|--|---|----------------------------|
| 0-A | _ObservationInterpretationSusceptibility | ObservationInterpretationSusceptibility | Observation Interpretation |
| 1-L | IE | Insufficient evidence | Observation Interpretation |
| 1-L | I | Intermediate | Observation Interpretation |
| 1-L | MS | moderately susceptible | Observation Interpretation |
| 1-L | NCL | No CLSI defined breakpoint | Observation Interpretation |
| 1-L | NS | Non-susceptible | Observation Interpretation |
| 1-S | R | Resistant | Observation Interpretation |
| 2-L | SYN-R | Synergy - resistant | Observation Interpretation |
| 1-S | S | Susceptible | Observation Interpretation |
| 2-L | SDD | Susceptible-dose dependent | Observation Interpretation |
| 2-L | SYN-S | Synergy - susceptible | Observation Interpretation |
| 1-L | VS | very susceptible | Observation Interpretation |
| 0-S | EX | outside threshold | Observation Interpretation |
| 1-L | HX | above high threshold | Observation Interpretation |
| 1-L | LX | below low threshold | Observation Interpretation |
| 0-L | HM | Hold for Medical Review | Observation Interpretation |
| 0-A | ObservationInterpretationDetection | ObservationInterpretationDetection | Observation Interpretation |
| 1-S | IND | Indeterminate | Observation Interpretation |
| 2-L | E | Equivocal | Observation Interpretation |
| 1-S | NEG | Negative | Observation Interpretation |
| 2-L | ND | Not detected | Observation Interpretation |
| 1-S | POS | Positive | Observation Interpretation |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 2-L | DET | Detected | Observation Interpretation |
| 0-A | ObservationInterpretationExpectation | ObservationInterpretationExpectation | Observation Interpretation |
| 1-L | EXP | Expected | Observation Interpretation |
| 1-L | UNE | Unexpected | Observation Interpretation |
| 0-L | OBX | Interpretation qualifiers in separate OBX segments | Observation Interpretation |
| 0-A | ReactivityObservationInterpretation | ReactivityObservationInterpretation | Observation Interpretation |
| 1-L | NR | Non-reactive | Observation Interpretation |
| 1-S | RR | Reactive | Observation Interpretation |
| 2-L | WR | Weakly reactive | Observation Interpretation |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.35  ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)  (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10267  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  ParticipationFunctionDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | ParticipationFunction | Anzeigename | ParticipationFunction |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (CWE). | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.88 - Participation Function - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationFunction | | |





| Alles ausklappen | | Alles einklappen | |
|------------------|--|--|------------------------|
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-A | _AuthorizedParticipationFunction | AuthorizedParticipationFunction | Participation Function |
| 1-A | _AuthorizedReceiverParticipationFunction | AuthorizedReceiverParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | AUCG | caregiver information receiver | Participation Function |
| 2-L | AULR | legitimate relationship information receiver | Participation Function |
| 2-L | AUTM | care team information receiver | Participation Function |
| 2-L | AUWA | work area information receiver | Participation Function |
| 1-A | _ConsenterParticipationFunction | ConsenterParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | GRDCON | legal guardian consent author | Participation Function |
| 2-L | POACON | healthcare power of attorney consent author | Participation Function |
| 2-L | PRCON | personal representative consent author | Participation Function |
| 2-L | PROMSK | authorized provider masking author | Participation Function |
| 2-L | SUBCON | subject of consent author | Participation Function |
| 1-A | _OverrideParticipationFunction | OverrideParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | AUCOV | consent override | Participation Function |
| 2-L | AUEMROV | emergency override | Participation Function |
| 0-A | _CoverageParticipationFunction | CoverageParticipationFunction | Participation Function |
| 1-A | _PayorParticipationFunction | PayorParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | CLMADJ | claims adjudication | Participation Function |
| 2-L | ENROLL | enrollment broker | Participation Function |
| 2-L | FFSMGT | ffs management | Participation Function |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2-L | MCMGT | managed care management | Participation Function |
| 2-L | PROVMGT | provider management | Participation Function |
| 2-L | UMGT | utilization management | Participation Function |
| 1-A | _SponsorParticipationFunction | SponsorParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | FULINRD | fully insured | Participation Function |
| 2-L | SELFINRD | self insured | Participation Function |
| 1-A | _UnderwriterParticipationFunction | UnderwriterParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | PAYORCNTR | payor contracting | Participation Function |
| 2-L | REINS | reinsures | Participation Function |
| 2-L | RETROCES | retrocessionaires | Participation Function |
| 2-L | SUBCTRRT | subcontracting risk | Participation Function |
| 2-L | UNDERWRTNG | underwriting | Participation Function |
| 0-L | ADMPHYS | admitting physician | Participation Function |
| 0-L | ANEST | anesthesist | Participation Function |
| 0-L | ANRS | anesthesia nurse | Participation Function |
| 0-L | ASSEMBLER | assembly software | Participation Function |
| 0-L | ATTPHYS | attending physician | Participation Function |
| 0-L | COMPOSER | composer software | Participation Function |
| 0-L | DISPHYS | discharging physician | Participation Function |
| 0-L | FASST | first assistant surgeon | Participation Function |
| 0-L | MDWF | midwife | Participation Function |
| 0-L | NASST | nurse assistant | Participation Function |

| | | | |
|-----|----------|--------------------------|------------------------|
| 0-L | PCP | primary care physician | Participation Function |
| 0-L | PRISURG | primary surgeon | Participation Function |
| 0-L | REVIEWER | reviewer | Participation Function |
| 0-L | RNDPHYS | rounding physician | Participation Function |
| 0-L | SASST | second assistant surgeon | Participation Function |
| 0-L | SNRS | scrub nurse | Participation Function |
| 0-L | TASST | third assistant | Participation Function |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.36  ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)  (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10267   | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | ParticipationFunction | Anzeigename | ParticipationFunction |
| Beschreibung |  description: This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (CWE). | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.88 - Participation Function - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationFunction | | |

Alles ausklappen | Alles einklappen




| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|--|---|------------------------|
| 0-A | _AuthorizedParticipationFunction | AuthorizedParticipationFunction | Participation Function |
| 1-A | _AuthorizedReceiverParticipationFunction | AuthorizedReceiverParticipationFunction | Participation Function |

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|------------------------|
| 2-L | AUCG | caregiver information receiver | Participation Function |
| 2-L | AULR | legitimate relationship information receiver | Participation Function |
| 2-L | AUTM | care team information receiver | Participation Function |
| 2-L | AUWA | work area information receiver | Participation Function |
| 1-A | _ConsenterParticipationFunction | ConsenterParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | GRDCON | legal guardian consent author | Participation Function |
| 2-L | POACON | healthcare power of attorney consent author | Participation Function |
| 2-L | PRCON | personal representative consent author | Participation Function |
| 2-L | PROMSK | authorized provider masking author | Participation Function |
| 2-L | SUBCON | subject of consent author | Participation Function |
| 1-A | _OverrideParticipationFunction | OverrideParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | AUCOV | consent override | Participation Function |
| 2-L | AUEMROV | emergency override | Participation Function |
| 0-A | _CoverageParticipationFunction | CoverageParticipationFunction | Participation Function |
| 1-A | _PayorParticipationFunction | PayorParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | CLMADJ | claims adjudication | Participation Function |
| 2-L | ENROLL | enrollment broker | Participation Function |
| 2-L | FFSMGT | ffs management | Participation Function |
| 2-L | MCMGT | managed care management | Participation Function |
| 2-L | PROVMGT | provider management | Participation Function |
| 2-L | UMGT | utilization management | Participation Function |
| 1-A | _SponsorParticipationFunction | SponsorParticipationFunction | Participation Function |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2-L | FULINRD | fully insured | Participation Function |
| 2-L | SELFINRD | self insured | Participation Function |
| 1-A | _UnderwriterParticipationFunction | UnderwriterParticipationFunction | Participation Function |
| 2-L | PAYORCNTR | payor contracting | Participation Function |
| 2-L | REINS | reinsures | Participation Function |
| 2-L | RETROCES | retrocessionaires | Participation Function |
| 2-L | SUBCTRTR | subcontracting risk | Participation Function |
| 2-L | UNDERWRTNG | underwriting | Participation Function |
| 0-L | ADMPHYS | admitting physician | Participation Function |
| 0-L | ANEST | anesthetist | Participation Function |
| 0-L | ANRS | anesthesia nurse | Participation Function |
| 0-L | ATTPHYS | attending physician | Participation Function |
| 0-L | DISPHYS | discharging physician | Participation Function |
| 0-L | FASST | first assistant surgeon | Participation Function |
| 0-L | MDWF | midwife | Participation Function |
| 0-L | NASST | nurse assistant | Participation Function |
| 0-L | PCP | primary care physician | Participation Function |
| 0-L | PRISURG | primary surgeon | Participation Function |
| 0-L | RNDPHYS | rounding physician | Participation Function |
| 0-L | SASST | second assistant surgeon | Participation Function |
| 0-L | SNRS | scrub nurse | Participation Function |
| 0-L | TASST | third assistant | Participation Function |



Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.


2.1.37 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10282  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | ParticipationSignature | Anzeigename | ParticipationSignature |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying whether and how the participant has attested his participation through a signature and or whether such a signature is needed. <i>Examples:</i> A surgical Procedure act object (representing a procedure report) requires a signature of the performing and responsible surgeon, and possibly other participants. (See also: Participation.signatureText.) | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.89 - Participation Signature - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationSignature | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-L | I | intended | Participation Signature |
| 0-L | S | signed | Participation Signature |
| 0-L | X | required | Participation Signature |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.38 ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10901  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |

| Name | ParticipationType | | Anzeigename | ParticipationType |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Beschreibung |  <p>History description 2014-03-26: Lock all vauve sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26</p> <p>description:</p> <p>A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. Each of its values implies specific constraints on the Roles undertaking the participation.</p> | | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.90 - ParticipationType - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> | <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | |
| 0-S | PART | Participation | ParticipationType | |
| 1-A | _ParticipationAncillary | ParticipationAncillary | ParticipationType | |
| 2-L | ADM | admitter | ParticipationType | |
| 2-L | ATND | attender | ParticipationType | |
| 2-L | CALLBCK | callback contact | ParticipationType | |
| 2-L | CON | consultant | ParticipationType | |
| 2-L | DIS | discharger | ParticipationType | |
| 2-L | ESC | escort | ParticipationType | |
| 2-L | REF | referrer | ParticipationType | |
| 1-A | _ParticipationInformationGenerator | ParticipationInformationGenerator | ParticipationType | |
| 2-L | AUT | author (originator) | ParticipationType | |
| 2-L | INF | informant | ParticipationType | |
| 2-S | TRANS | Transcriber | ParticipationType | |
| 3-L | ENT | data entry person | ParticipationType | |

| | | | |
|-----|---------|-----------------------|-------------------|
| 2-L | WIT | witness | ParticipationType |
| 1-L | CST | custodian | ParticipationType |
| 1-S | DIR | direct target | ParticipationType |
| 2-L | ALY | analyte | ParticipationType |
| 2-L | BBY | baby | ParticipationType |
| 2-L | CAT | catalyst | ParticipationType |
| 2-S | CSM | consumable | ParticipationType |
| 2-S | DEV | device | ParticipationType |
| 3-L | NRD | non-reuseable device | ParticipationType |
| 3-L | RDV | reusable device | ParticipationType |
| 2-L | DON | donor | ParticipationType |
| 2-L | EXPAGNT | ExposureAgent | ParticipationType |
| 2-S | EXPART | ExposureParticipation | ParticipationType |
| 3-L | EXPTRGT | ExposureTarget | ParticipationType |
| 3-L | EXSRC | ExposureSource | ParticipationType |
| 2-L | PRD | product | ParticipationType |
| 2-S | SBJ | subject | ParticipationType |
| 3-L | SPC | specimen | ParticipationType |
| 1-S | IND | indirect target | ParticipationType |
| 2-L | BEN | beneficiary | ParticipationType |
| 2-L | CAGNT | causative agent | ParticipationType |
| 2-L | COV | coverage target | ParticipationType |






| | | | |
|-----|------|-------------------------------|-------------------|
| 2-L | GUAR | guarantor party | ParticipationType |
| 2-L | HLD | holder | ParticipationType |
| 2-L | RCT | record target | ParticipationType |
| 2-L | RCV | receiver | ParticipationType |
| 1-S | IRCP | information recipient | ParticipationType |
| 2-L | NOT | urgent notification contact | ParticipationType |
| 2-L | PRCP | primary information recipient | ParticipationType |
| 2-L | REFB | Referred By | ParticipationType |
| 2-L | REFT | Referred to | ParticipationType |
| 2-L | TRC | tracker | ParticipationType |
| 1-S | LOC | location | ParticipationType |
| 2-L | DST | destination | ParticipationType |
| 2-L | ELOC | entry location | ParticipationType |
| 2-L | ORG | origin | ParticipationType |
| 2-L | RML | remote | ParticipationType |
| 2-L | VIA | via | ParticipationType |
| 1-S | PRF | performer | ParticipationType |
| 2-L | DIST | distributor | ParticipationType |
| 2-L | PPRF | primary performer | ParticipationType |
| 2-L | SPRF | secondary performer | ParticipationType |
| 1-L | RESP | responsible party | ParticipationType |
| 1-S | VRF | verifier | ParticipationType |

| | | | |
|-----|--------|---------------------|-------------------|
| 2-L | AUTHEN | authenticator | ParticipationType |
| 2-L | LA | legal authenticator | ParticipationType |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.39 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)

 (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.19563  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  PersonalRelationshipRoleTypeDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | PersonalRelationshipRoleType | Anzeigename | PersonalRelationshipRoleType |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of personal relationships between two living subjects. <i>Example:</i> Parent, sibling, unrelated friend, neighbor | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.111 - Role Code - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode | | |

[Alles ausklappen](#) [Alles einklappen](#)

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|-----------|---------------|------------|
| 1-S | FAMMEMB | family member | Role Code |
| 2-S | CHILD | child | Role Code |
| 3-S | CHLDADOPT | adopted child | Role Code |

| | | | |
|-----|----------|------------------------|-----------|
| 4-L | DAUADOPT | adopted daughter | Role Code |
| 4-L | SONADOPT | adopted son | Role Code |
| 3-S | CHLDFOST | foster child | Role Code |
| 4-L | DAUFOST | foster daughter | Role Code |
| 4-L | SONFOST | foster son | Role Code |
| 3-S | DAUC | daughter | Role Code |
| 4-L | DAUADOPT | adopted daughter | Role Code |
| 4-L | DAUFOST | foster daughter | Role Code |
| 4-L | DAU | natural daughter | Role Code |
| 4-L | STPDAU | stepdaughter | Role Code |
| 3-S | NCHILD | natural child | Role Code |
| 4-L | DAU | natural daughter | Role Code |
| 4-L | SON | natural son | Role Code |
| 3-S | SONC | son | Role Code |
| 4-L | SONADOPT | adopted son | Role Code |
| 4-L | SONFOST | foster son | Role Code |
| 4-L | SON | natural son | Role Code |
| 4-L | STPSON | stepson | Role Code |
| 3-S | STPCHLD | step child | Role Code |
| 4-L | STPDAU | stepdaughter | Role Code |
| 4-L | STPSON | stepson | Role Code |
| 2-S | EXT | extended family member | Role Code |

| | | | |
|-----|-----------|----------------------------|-----------|
| 3-S | AUNT | aunt | Role Code |
| 4-L | MAUNT | maternal aunt | Role Code |
| 4-L | PAUNT | paternal aunt | Role Code |
| 3-S | COUSN | cousin | Role Code |
| 4-L | MCOUSN | maternal cousin | Role Code |
| 4-L | PCOUSN | paternal cousin | Role Code |
| 3-S | GGRPRN | great grandparent | Role Code |
| 4-S | GGRFTH | great grandfather | Role Code |
| 5-L | MGGRFTH | maternal great-grandfather | Role Code |
| 5-L | PGGRFTH | paternal great-grandfather | Role Code |
| 4-S | GGRMTH | great grandmother | Role Code |
| 5-L | MGGRMTH | maternal great-grandmother | Role Code |
| 5-L | PGGRMTH | paternal great-grandmother | Role Code |
| 4-S | MGGRPRN | maternal great-grandparent | Role Code |
| 5-L | MGGRFTH | maternal great-grandfather | Role Code |
| 5-L | MGGRMTH | maternal great-grandmother | Role Code |
| 4-S | PGGRPRN | paternal great-grandparent | Role Code |
| 5-L | PGGRFTH | paternal great-grandfather | Role Code |
| 5-L | PGGRMTH | paternal great-grandmother | Role Code |
| 3-S | GRNDCHILD | grandchild | Role Code |
| 4-L | GRNDDAU | granddaughter | Role Code |
| 4-L | GRNDSON | grandson | Role Code |

| | | | |
|-----|-----------|----------------------|-----------|
| 3-S | GRPRN | grandparent | Role Code |
| 4-S | GRFTH | grandfather | Role Code |
| 5-L | MGRFTH | maternal grandfather | Role Code |
| 5-L | PGRFTH | paternal grandfather | Role Code |
| 4-S | GRMTH | grandmother | Role Code |
| 5-L | MGRMTH | maternal grandmother | Role Code |
| 5-L | PGRMTH | paternal grandmother | Role Code |
| 4-S | MGRPRN | maternal grandparent | Role Code |
| 5-L | MGRFTH | maternal grandfather | Role Code |
| 5-L | MGRMTH | maternal grandmother | Role Code |
| 4-S | PGRPRN | paternal grandparent | Role Code |
| 5-L | PGRFTH | paternal grandfather | Role Code |
| 5-L | PGRMTH | paternal grandmother | Role Code |
| 3-S | INLAW | inlaw | Role Code |
| 4-S | CHLDINLAW | child-in-law | Role Code |
| 5-L | DAUINLAW | daughter in-law | Role Code |
| 5-L | SONINLAW | son in-law | Role Code |
| 4-S | PRNINLAW | parent in-law | Role Code |
| 5-L | FTHINLAW | father-in-law | Role Code |
| 5-L | MTHINLAW | mother-in-law | Role Code |
| 4-S | SIBINLAW | sibling in-law | Role Code |
| 5-L | BROINLAW | brother-in-law | Role Code |

| | | | |
|-----|----------|-------------------------|-----------|
| 5-L | SISINLAW | sister-in-law | Role Code |
| 3-S | NIENEPH | niece/nephew | Role Code |
| 4-L | NEPHEW | nephew | Role Code |
| 4-L | NIECE | niece | Role Code |
| 3-S | UNCLE | uncle | Role Code |
| 4-L | MUNCLE | maternal uncle | Role Code |
| 4-L | PUNCLE | paternal uncle | Role Code |
| 2-S | PRN | parent | Role Code |
| 3-S | ADOPTP | adoptive parent | Role Code |
| 4-L | ADOPTF | adoptive father | Role Code |
| 4-L | ADOPTM | adoptive mother | Role Code |
| 3-S | FTH | father | Role Code |
| 4-L | ADOPTF | adoptive father | Role Code |
| 4-L | FTHFOST | foster father | Role Code |
| 4-S | NFTH | natural father | Role Code |
| 5-L | NFTHF | natural father of fetus | Role Code |
| 4-L | STPFTH | stepfather | Role Code |
| 3-S | MTH | mother | Role Code |
| 4-L | ADOPTM | adoptive mother | Role Code |
| 4-L | GESTM | gestational mother | Role Code |
| 4-L | MTHFOST | foster mother | Role Code |
| 4-S | NMTH | natural mother | Role Code |

| | | | |
|-----|----------|-------------------------|-----------|
| 5-L | NMTHF | natural mother of fetus | Role Code |
| 4-L | STPMTH | stepmother | Role Code |
| 3-S | NPRN | natural parent | Role Code |
| 4-S | NFTH | natural father | Role Code |
| 5-L | NFTHF | natural father of fetus | Role Code |
| 4-S | NMTH | natural mother | Role Code |
| 5-L | NMTHF | natural mother of fetus | Role Code |
| 3-S | PRNFOST | foster parent | Role Code |
| 4-L | FTHFOST | foster father | Role Code |
| 4-L | MTHFOST | foster mother | Role Code |
| 3-S | STPPRN | step parent | Role Code |
| 4-L | STPFTH | stepfather | Role Code |
| 4-L | STPMTH | stepmother | Role Code |
| 2-S | SIB | sibling | Role Code |
| 3-S | BRO | brother | Role Code |
| 4-L | HBRO | half-brother | Role Code |
| 4-S | NBRO | natural brother | Role Code |
| 5-S | TWINBRO | twin brother | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 4-L | STPBRO | stepbrother | Role Code |
| 3-S | HSIB | half-sibling | Role Code |






| | | | |
|-----|----------|------------------------|-----------|
| 4-L | HBRO | half-brother | Role Code |
| 4-L | HSIS | half-sister | Role Code |
| 3-S | NSIB | natural sibling | Role Code |
| 4-S | NBRO | natural brother | Role Code |
| 5-S | TWINBRO | twin brother | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 4-S | NSIS | natural sister | Role Code |
| 5-S | TWINSIS | twin sister | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister | Role Code |
| 4-S | TWIN | twin | Role Code |
| 5-S | TWINBRO | twin brother | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 5-S | TWINSIS | twin sister | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister | Role Code |
| 5-S | FTWIN | fraternal twin | Role Code |
| 6-L | FTWINBRO | fraternal twin brother | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister | Role Code |
| 5-S | ITWIN | identical twin | Role Code |

| | | | |
|-----|----------|------------------------|-----------|
| 6-L | ITWINBRO | identical twin brother | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister | Role Code |
| 3-S | SIS | sister | Role Code |
| 4-L | HSIS | half-sister | Role Code |
| 4-S | NSIS | natural sister | Role Code |
| 5-S | TWINSIS | twin sister | Role Code |
| 6-L | FTWINSIS | fraternal twin sister | Role Code |
| 6-L | ITWINSIS | identical twin sister | Role Code |
| 4-L | STPSIS | stepsister | Role Code |
| 3-S | STPSIB | step sibling | Role Code |
| 4-L | STPBRO | stepbrother | Role Code |
| 4-L | STPSIS | stepsister | Role Code |
| 2-S | SIGOTHR | significant other | Role Code |
| 3-L | DOMPART | domestic partner | Role Code |
| 3-L | FMRSPS | former spouse | Role Code |
| 3-S | SPS | spouse | Role Code |
| 4-L | HUSB | husband | Role Code |
| 4-L | WIFE | wife | Role Code |
| 1-L | FRND | unrelated friend | Role Code |
| 1-L | NBOR | neighbor | Role Code |
| 1-L | ONESELF | self | Role Code |
| 1-L | ROOM | Roommate | Role Code |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.40  **PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)**

 (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.19563  ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  PersonalRelationshipRoleTypeDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | PersonalRelationshipRoleType | Anzeigename | PersonalRelationshipRoleType |
| Beschreibung |  description: Types of personal relationships between two living subjects. <i>Example:</i> Parent, sibling, unrelated friend, neighbor | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.111 - Role Code - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode | | |

[Alles ausklappen](#) [Alles einklappen](#)

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|-----------|------------------|------------|
| 1-S | FAMMEMB | Family Member | Role Code |
| 2-S | CHILD | Child | Role Code |
| 3-S | CHLDADOPT | adopted child | Role Code |
| 4-L | DAUADOPT | adopted daughter | Role Code |
| 4-L | SONADOPT | adopted son | Role Code |
| 3-S | CHLDFOST | foster child | Role Code |

| | | | |
|-----|-----------|---------------------------|-----------|
| 4-L | DAUFOST | foster daughter | Role Code |
| 4-L | SONFOST | foster son | Role Code |
| 3-S | CHLDINLAW | child in-law | Role Code |
| 4-L | DAUINLAW | daughter in-law | Role Code |
| 4-L | SONINLAW | son in-law | Role Code |
| 3-S | DAUC | Daughter | Role Code |
| 4-L | DAUADOPT | adopted daughter | Role Code |
| 4-L | DAUFOST | foster daughter | Role Code |
| 4-L | DAU | natural daughter Daughter | Role Code |
| 4-L | STPDAU | stepdaughter | Role Code |
| 3-S | NCHILD | natural child | Role Code |
| 4-L | DAU | natural daughter Daughter | Role Code |
| 4-L | SON | natural son Son | Role Code |
| 3-S | SONC | son | Role Code |
| 4-L | SONADOPT | adopted son | Role Code |
| 4-L | SONFOST | foster son | Role Code |
| 4-L | SON | natural son Son | Role Code |
| 4-L | STPSON | stepson | Role Code |
| 3-S | STPCHLD | step child | Role Code |
| 4-L | STPDAU | stepdaughter | Role Code |
| 4-L | STPSON | stepson | Role Code |
| 2-S | EXT | extended family member | Role Code |

| | | | |
|-----|-----------|--------------------------|-----------|
| 3-S | AUNT | aunt | Role Code |
| 4-L | MAUNT | MaternalAunt | Role Code |
| 4-L | PAUNT | PaternalAunt | Role Code |
| 3-S | COUSN | cousin | Role Code |
| 4-L | MCOUSN | MaternalCousin | Role Code |
| 4-L | PCOUSN | PaternalCousin | Role Code |
| 3-S | GGRPRN | great grandparent | Role Code |
| 4-L | GGRFTH | great grandfather | Role Code |
| 4-L | GGRMTH | great grandmother | Role Code |
| 4-L | MGGRFTH | MaternalGreatgrandfather | Role Code |
| 4-L | MGGRMTH | MaternalGreatgrandmother | Role Code |
| 4-L | MGGRPRN | MaternalGreatgrandparent | Role Code |
| 4-L | PGGRFTH | PaternalGreatgrandfather | Role Code |
| 4-L | PGGRMTH | PaternalGreatgrandmother | Role Code |
| 4-L | PGGRPRN | PaternalGreatgrandparent | Role Code |
| 3-S | GRNDCHILD | grandchild | Role Code |
| 4-L | GRNDDAU | granddaughter | Role Code |
| 4-L | GRNDSO | grandson | Role Code |
| 3-S | GRPRN | Grandparent | Role Code |
| 4-L | GRFTH | Grandfather | Role Code |
| 4-L | GRMTH | Grandmother | Role Code |
| 4-L | MGRFTH | MaternalGrandfather | Role Code |







| | | | |
|-----|----------|-------------------------|-----------|
| 4-L | MGRMTH | MaternalGrandmother | Role Code |
| 4-L | MGRPRN | MaternalGrandparent | Role Code |
| 4-L | PGRFTH | PaternalGrandfather | Role Code |
| 4-L | PGRMTH | PaternalGrandmother | Role Code |
| 4-L | PGRPRN | PaternalGrandparent | Role Code |
| 3-S | NIENEPH | niece/nephew | Role Code |
| 4-L | NEPHEW | nephew | Role Code |
| 4-L | NIECE | niece | Role Code |
| 3-S | UNCLE | uncle | Role Code |
| 4-L | MUNCLE | MaternalUncle | Role Code |
| 4-L | PUNCLE | PaternalUncle | Role Code |
| 2-S | PRN | Parent | Role Code |
| 3-L | FTH | Father | Role Code |
| 3-L | MTH | Mother | Role Code |
| 3-S | NPRN | natural parent | Role Code |
| 4-S | NFTH | natural father | Role Code |
| 5-L | NFTHF | natural father of fetus | Role Code |
| 4-L | NMTH | natural mother | Role Code |
| 3-S | PRNINLAW | parent in-law | Role Code |
| 4-L | FTHINLAW | father-in-law | Role Code |
| 4-L | MTHINLAW | mother-in-law | Role Code |
| 3-S | STPPRN | step parent | Role Code |

| | | | |
|-----|----------|-------------------|-----------|
| 4-L | STPFTH | stepfather | Role Code |
| 4-L | STPMTH | stepmother | Role Code |
| 2-S | SIB | Sibling | Role Code |
| 3-L | BRO | Brother | Role Code |
| 3-S | HSIB | half-sibling | Role Code |
| 4-L | HBRO | half-brother | Role Code |
| 4-L | HSIS | half-sister | Role Code |
| 3-S | NSIB | natural sibling | Role Code |
| 4-L | NBRO | natural brother | Role Code |
| 4-L | NSIS | natural sister | Role Code |
| 3-S | SIBINLAW | sibling in-law | Role Code |
| 4-L | BROINLAW | brother-in-law | Role Code |
| 4-L | SISINLAW | sister-in-law | Role Code |
| 3-L | SIS | Sister | Role Code |
| 3-S | STPSIB | step sibling | Role Code |
| 4-L | STPBRO | stepbrother | Role Code |
| 4-L | STPSIS | stepsister | Role Code |
| 2-S | SIGOTHR | significant other | Role Code |
| 3-L | DOMPART | domestic partner | Role Code |
| 3-S | SPS | spouse | Role Code |
| 4-L | HUSB | husband | Role Code |
| 4-L | WIFE | wife | Role Code |

| | | | |
|-----|------|------------------|-----------|
| 1-L | FRND | unrelated friend | Role Code |
| 1-L | NBOR | neighbor | Role Code |
| 1-L | ROOM | Roommate | Role Code |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.




2.1.41 Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46 - 2015-11-17 (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.11.46  hl7de- | Gültigkeit | 2015-11-17 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none">  Schwangerschafts-Status vom 2015-09-18  hl7de-  Schwangerschafts-Status vom 2015-03-03  hl7de- |
| Name | Pregnancystatus | Anzeigename | Schwangerschafts-Status |
| 2 Quell-Codesysteme | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-----------------------------|---------------------------|
| 0-L | 1 | Patient ist schwanger | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 |
| 0-L | 0 | Patient ist nicht schwanger | 1.2.276.0.76.3.1.195.5.46 |
| 0-L | UNK | Unbekannt | Null Flavor |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.42  RoleClassAssociative 2.16.840.1.113883.1.11.19313 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)  (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.19313  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | RoleClassAssociative | Anzeigename | RoleClassAssociative |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vau e sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A general association between two entities that is neither partitive nor ontological. | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.110 - Role Class - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass | | |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1-A | _RoleClassMutualRelationship | RoleClassMutualRelationship | Role Class |
| 2-A | _RoleClassRelationshipFormal | RoleClassRelationshipFormal | Role Class |
| 3-L | AFFL | affiliate | Role Class |
| 3-S | AGNT | agent | Role Class |
| 4-S | ASSIGNED | assigned entity | Role Class |
| 5-L | COMPAR | commissioning party | Role Class |
| 5-L | SGNOFF | signing authority or officer | Role Class |
| 4-S | CON | contact | Role Class |
| 5-L | ECON | emergency contact | Role Class |
| 5-L | NOK | next of kin | Role Class |
| 4-L | GUARD | guardian | Role Class |

| | | | |
|-----|---------|--------------------------------|------------|
| 3-L | CIT | citizen | Role Class |
| 3-S | COVPTY | covered party | Role Class |
| 4-L | CLAIM | claimant | Role Class |
| 4-S | NAMED | named insured | Role Class |
| 5-L | DEPEN | dependent | Role Class |
| 5-L | INDIV | individual | Role Class |
| 5-L | SUBSCR | subscriber | Role Class |
| 4-L | PROG | program eligible | Role Class |
| 3-L | CRINV | clinical research investigator | Role Class |
| 3-L | CRSPNSR | clinical research sponsor | Role Class |
| 3-S | EMP | employee | Role Class |
| 4-L | MIL | military person | Role Class |
| 3-L | GUAR | guarantor GuarantorRole | Role Class |
| 3-S | INVSBJ | Investigation Subject | Role Class |
| 4-L | CASEBJ | Case Subject | Role Class |
| 4-L | RESBJ | research subject | Role Class |
| 3-S | LIC | licensed entity | Role Class |
| 4-L | NOT | notary public | Role Class |
| 4-L | PROV | healthcare provider | Role Class |
| 3-L | PAT | patient | Role Class |
| 3-L | PAYEE | payee | Role Class |
| 3-L | PAYOR | invoice payor | Role Class |

| | | | |
|-----|-------------------|--|------------|
| 3-L | POLHOLD | policy holder | Role Class |
| 3-L | QUAL | qualified entity | Role Class |
| 3-L | SPNSR | coverage sponsor | Role Class |
| 3-L | STD | student | Role Class |
| 3-L | UNDWRT | underwriter | Role Class |
| 2-L | CAREGIVER | caregiver | Role Class |
| 2-L | PRS | personal relationship | Role Class |
| 1-A | _RoleClassPassive | RoleClassPassive | Role Class |
| 2-L | ACCESS | access | Role Class |
| 2-S | ADJY | adjacency | Role Class |
| 3-S | CONC | connection | Role Class |
| 4-L | BOND | molecular bond | Role Class |
| 4-L | CONY | continuity | Role Class |
| 2-L | ADMM | Administerable Material | Role Class |
| 2-L | BIRTHPL | birthplace | Role Class |
| 2-L | DEATHPLC | place of death | Role Class |
| 2-S | DST | distributed material | Role Class |
| 3-L | RET | retailed material | Role Class |
| 2-S | EXLOC | event location | Role Class |
| 3-S | SDLOC | service delivery location | Role Class |
| 4-L | DSDLLOC | dedicated service delivery location health care facility | Role Class |
| 4-L | ISDLOC | incidental service delivery location | Role Class |

| | | | |
|-----|----------|------------------------|------------|
| 2-L | EXPR | exposed entity | Role Class |
| 2-L | HLD | held entity | Role Class |
| 2-L | HLTHCHRT | health chart | Role Class |
| 2-L | IDENT | identified entity | Role Class |
| 2-S | MANU | manufactured product | Role Class |
| 3-L | THER | therapeutic agent | Role Class |
| 2-L | MNT | maintained entity | Role Class |
| 2-L | OWN | owned entity | Role Class |
| 2-L | RGPR | regulated product | Role Class |
| 2-L | TERR | territory of authority | Role Class |
| 2-L | USED | used entity | Role Class |
| 2-L | WRTE | warranted product | Role Class |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.43  **RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323)**

 (aus Repository: [ad2bbr-](#))

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.19316  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  RoleClassMutualRelationshipDEFN=UV=VO=1099-20110726 - vom 2011-07-26  ad2bbr- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | RoleClassMutualRelationship | Anzeigename | RoleClassMutualRelationship |
| Beschreibung |  | | |

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be *de facto* behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children).

Quell-Codesystem

2.16.840.1.113883.5.110 - Role Class - <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass>

Alles ausklappen

Alles einklappen

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1-A | _RoleClassRelationshipFormal | RoleClassRelationshipFormal | Role Class |
| 2-L | AFFL | affiliate | Role Class |
| 2-S | AGNT | agent | Role Class |
| 3-S | ASSIGNED | assigned entity | Role Class |
| 4-L | COMPAR | commissioning party | Role Class |
| 4-L | SGNOFF | signing authority or officer | Role Class |
| 3-S | CON | contact | Role Class |
| 4-L | ECON | emergency contact | Role Class |
| 4-L | NOK | next of kin | Role Class |
| 3-L | GUARD | guardian | Role Class |
| 2-L | CIT | citizen | Role Class |
| 2-S | COVPTY | covered party | Role Class |
| 3-L | CLAIM | claimant | Role Class |
| 3-S | NAMED | named insured | Role Class |






| | | | |
|-----|---------|--------------------------------|------------|
| 4-L | DEPEN | dependent | Role Class |
| 4-L | INDIV | individual | Role Class |
| 4-L | SUBSCR | subscriber | Role Class |
| 3-L | PROG | program eligible | Role Class |
| 2-L | CRINV | clinical research investigator | Role Class |
| 2-L | CRSPNSR | clinical research sponsor | Role Class |
| 2-S | EMP | employee | Role Class |
| 3-L | MIL | military person | Role Class |
| 2-L | GUAR | guarantor GuarantorRole | Role Class |
| 2-S | INVSBJ | Investigation Subject | Role Class |
| 3-L | CASEBJ | Case Subject | Role Class |
| 3-L | RESBJ | research subject | Role Class |
| 2-S | LIC | licensed entity | Role Class |
| 3-L | NOT | notary public | Role Class |
| 3-L | PROV | healthcare provider | Role Class |
| 2-L | PAT | patient | Role Class |
| 2-L | PAYEE | payee | Role Class |
| 2-L | PAYOR | invoice payor | Role Class |
| 2-L | POLHOLD | policy holder | Role Class |
| 2-L | QUAL | qualified entity | Role Class |
| 2-L | SPNSR | coverage sponsor | Role Class |
| 2-L | STD | student | Role Class |

| | | | |
|-----|-----------|-----------------------|------------|
| 2-L | UNDWRT | underwriter | Role Class |
| 1-L | CAREGIVER | caregiver | Role Class |
| 1-L | PRS | personal relationship | Role Class |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.44  **RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726)**

 (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.19316  ad2bbr- | Gültigkeit | 2011-07-26 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none">  RoleClassMutualRelationshipDEFN=UV=VO=1360-20160323 - vom 2014-03-26  ad2bbr- |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1099-20110726 |
| Name | RoleClassMutualRelationship | Anzeigename | RoleClassMutualRelationship |
| Beschreibung |  description: A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be <i>de facto</i> behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children). | | |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.110 - Role Class - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleClass | | |

Alles ausklappen | Alles einklappen




| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1-A | _RoleClassRelationshipFormal | RoleClassRelationshipFormal | Role Class |
| 2-L | AFFL | affiliate | Role Class |
| 2-S | AGNT | agent | Role Class |

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|------------|
| 3-S | ASSIGNED | assigned entity | Role Class |
| 4-L | COMPAR | commissioning party | Role Class |
| 4-L | SGNOFF | signing authority or officer | Role Class |
| 3-S | CON | contact | Role Class |
| 4-L | ECON | emergency contact | Role Class |
| 4-L | NOK | next of kin | Role Class |
| 3-L | GUARD | guardian | Role Class |
| 2-L | CIT | citizen | Role Class |
| 2-S | COVPTY | covered party | Role Class |
| 3-L | CLAIM | claimant | Role Class |
| 3-S | NAMED | named insured | Role Class |
| 4-L | DEPEN | dependent | Role Class |
| 4-L | INDIV | individual | Role Class |
| 4-L | SUBSCR | subscriber | Role Class |
| 3-L | PROG | program eligible | Role Class |
| 2-L | CRINV | clinical research investigator | Role Class |
| 2-L | CRSPNSR | clinical research sponsor | Role Class |
| 2-S | EMP | employee | Role Class |
| 3-L | MIL | military person | Role Class |
| 2-L | GUAR | guarantor GuarantorRole | Role Class |
| 2-S | INVSBJ | Investigation Subject | Role Class |
| 3-L | CASEBJ | Case Subject | Role Class |

| | | | |
|-----|-----------|-----------------------|------------|
| 3-L | RESBJ | research subject | Role Class |
| 2-S | LIC | licensed entity | Role Class |
| 3-L | NOT | notary public | Role Class |
| 3-L | PROV | healthcare provider | Role Class |
| 2-L | PAT | patient | Role Class |
| 2-L | PAYEE | payee | Role Class |
| 2-L | PAYOR | invoice payor | Role Class |
| 2-L | POLHOLD | policy holder | Role Class |
| 2-L | QUAL | qualified entity | Role Class |
| 2-L | SPNSR | coverage sponsor | Role Class |
| 2-L | STD | student | Role Class |
| 2-L | UNDWRT | underwriter | Role Class |
| 1-L | CAREGIVER | caregiver | Role Class |
| 1-L | PRS | personal relationship | Role Class |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.45 RoleStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15999 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) (aus Repository: ad2bbr-)

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.1.11.15999  ad2bbr- | Gültigkeit | 2014-03-26 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
| Name | RoleStatus | Anzeigename | RoleStatus |
| Beschreibung |  History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | | |

| description: | | | |
|--|------------|--|-------------|
| Codes representing the defined possible states of an Role, as defined by the Role class state machine. | | | |
| Quell-Codesystem | | 2.16.840.1.113883.5.1068 - Role Status - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleStatus | |
| Alles ausklappen | | Alles einklappen | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
| 0-S | normal | normal | Role Status |
| 1-L | active | active | Role Status |
| 1-L | cancelled | cancelled | Role Status |
| 1-L | pending | pending | Role Status |
| 1-L | suspended | suspended | Role Status |
| 1-L | terminated | terminated | Role Status |
| 0-L | nullified | nullified | Role Status |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.46 ○ S_BMP_DARREICHUNGSFORM 1.2.276.0.76.11.454 - 2017-10-01 ref (aus Repository: kbvde-)

| Id | 1.2.276.0.76.11.454 ref kbvde- | Gültigkeit | 2017-10-01 |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Status | ● Definitiv | Versions-Label | |
| Name | S_BMP_DARREICHUNGSFORM | Anzeigename | S_BMP_DARREICHUNGSFORM |
| Beschreibung | Die Schlüsseltabelle enthält eine Liste von kodierten Darreichungsformen, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (Anhang 3 zu Anlage 3 Vereinbarung BMP). Die Spalte "IFA-Code" wird im Attribut "V", die Spalte "Kurztext" im Attribut "DN", die Spalte "Bezeichnung der IFA" im Attribut "bezeichnungIFA" und die Spalte "Hinweis empfohlen" im Attribut "hinweis" abgebildet. | | |
| Quell-Codesystem | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 | | |
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | AEO | Öl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AMP | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | APA | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ASN | Salbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ASO | Salbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ATO | Tropf | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ATR | AuTropf | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUB | AuBad | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUC | AuCreme | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUG | AuGel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | AUS | AuSalbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BAD | Bad | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BAL | Balsam | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BAN | Bandage | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BEU | Beutel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BIN | Binden | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BON | Bonbons | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BPL | Platte | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BRE | Brei | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | BTA | BrTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | CRE | Creme | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DFL | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | DIL | Dilut | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DIS | DIS | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DKA | Dragees | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DOS | Spray | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DRA | Dragees | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DRM | Dragees | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DSC | Schaum | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | DSS | Spray | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EDP | Pipette | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EIN | Einreib | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ELE | Elektr | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ELI | Elixier | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EMU | Emul | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ESS | Essenz | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ESU | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | EXT | Extrakt | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FBE | Beutel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FBW | Einreib | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FDA | Drag | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FER | Spritze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FET | Salbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FLA | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | FLE | Flüss | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FLU | Flüss | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FMR | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FOL | Folie | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FRB | FRB | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FSE | Seife | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | FTA | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GEL | Gel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GLI | GLI | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GLO | Globuli | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GMR | Gran | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GPA | Platte | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GRA | Gran | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GSE | Saft | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | GUL | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HAS | Handsch | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HKM | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HKP | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HPI | InhKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | HVW | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFA | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFB | Beutel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | IFF | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFK | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFL | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IFS | Set | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IHA | InhAmp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IHP | InhPulv | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IIL | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IKA | InhKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ILO | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IMP | Impl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INF | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INH | Inhalat | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INI | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INL | InhLös | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | INS | Tee | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IST | Instill | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ISU | Susp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | IUP | Spirale | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KAN | Kanüle | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KAP | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KAT | KAT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KDA | KauDrag | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | KEG | Kegel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KER | Kerne | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KGU | Kaug | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KII | Konz | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KKS | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KLI | Klist | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KLT | KlisTbl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KMP | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KMR | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KOD | Kondom | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KOM | Kompr | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KON | Konz | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KPG | KombiPg | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KRI | KRI | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KSS | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KSU | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | KTA | KauTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LAN | Lanz | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LII | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LIQ | Flüss | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LOE | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LOT | Lotion | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | LOV | LOV | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LSE | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LTA | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LUP | LUP | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | LUT | LuTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MIL | Milch | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MIX | Mixtur | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MRG | RetGran | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MRP | Pellets | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MTA | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | MUW | MUW | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAG | NasGel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAO | NasÖl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAS | NasSpr | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NAW | NAW | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NDS | NasSpr | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NSA | NSalbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | NTR | NTropf | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OCU | OCU | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OEL | Öl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OHT | OTropf | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | OVU | Ovula | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | PAS | Pastill | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PEL | Pellets | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PEN | Pen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PER | Perlen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PFL | Pflast | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PFT | Pflast | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PHI | Pulver | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIF | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PII | Pulver | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIJ | Pulver | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIK | Pulver | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PIV | PIV | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLE | Pulver | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLF | PLF | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLG | PLG | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLH | PLH | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLI | PLI | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLK | PLK | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PLV | PLV | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PPL | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PRS | PRS | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PSE | Saft | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | PST | Paste | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PUD | Puder | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | PUL | Pulver | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RED | RetDrag | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | REK | RetKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RET | RetTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RGR | RetGran | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RKA | RekKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RSC | Schaum | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | RUT | RetTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SAF | Saft | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SAL | Salbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SAM | Salbe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SCH | Schaum | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SEI | Seife | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SHA | Shampoo | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SIR | Sirup | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SMF | SMF | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SMT | SMT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SMU | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPA | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPF | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | SPL | Lösung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SPR | Spray | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SRI | Spritze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SSU | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STA | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STB | Stäbch | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STI | Stifte | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | STR | Streif | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUB | Subst | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUE | Susp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUP | Supp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUS | Susp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUT | SubTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SUV | Susp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | SWA | Schwamm | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TAB | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TAE | Tafel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TAM | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TEE | Tee | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TEI | Tropfen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TES | Test | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TIN | Tinktur | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |



| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | TKA | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TMR | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TON | Tonikum | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TPN | Tampon | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TPO | Tamp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRA | TrAmp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRI | TRI | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRO | Tropfen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRS | TRS | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TRT | TrTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSA | Saft | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSD | TSD | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSS | TSS | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TST | Test | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TSY | TSY | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TTR | Test | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TUB | Tube | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TUE | Tücher | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | TUP | Tupfer | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | UTA | Tabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VAL | VagLös | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VAR | VagRing | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | VCR | VagCrem | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VER | Verband | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VGE | VagGel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VKA | VagKaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VLI | Vlies | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VOV | VagOvul | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VST | VagStäb | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VSU | VagSupp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | VTA | VagTabl | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WAT | Watte | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WGA | Gaze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WKA | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WKM | Kaps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | WUE | Würfel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XDG | Gel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XDS | Spray | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XFE | Festig. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XGM | Maske | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XHS | Spül. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XNC | Creme | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XPK | Pflege | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | XTC | Creme | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------------------------|
| 0-L | ZAM | Amp | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZBU | Bürste | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZCR | Zahncr. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZGE | Zahngel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZKA | ZerbKps | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |
| 0-L | ZPA | Zahnp. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.40 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.47 S_BMP_DOSIEREINHEIT 1.2.276.0.76.11.455 - 2016-06-01 (aus Repository: kbvde-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.11.455  kbvde- | Gültigkeit | 2016-06-01 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | |
| Name | S_BMP_DOSIEREINHEIT | Anzeigename | S_BMP_DOSIEREINHEIT |
| Beschreibung | Die Schlüsseltable enthält eine Liste von kodierten Dosiereinheiten, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (vgl. Anhang 4 zu Anlage 3 Vereinbarung BMP). Die Spalte "Code" wird im Attribut "V", die Spalte "Einheit Ausdruck" im Attribut "DN", die Spalte "Bedeutung" im Attribut "bedeutung" und die Spalte "Einheit durch AM-Datenbanken unterstützt" im Attribut "unterstuetzt" abgebildet. | | |
| Quell-Codesystem | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 | | |



| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| 0-L | # | Messlöffel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 0 | Messbecher | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 1 | Stück | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 2 | Pkg. | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 3 | Flasche | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |

| | | | |
|-----|---|--------------------|---------------------------|
| 0-L | 4 | Beutel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 5 | Hub | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 6 | Tropfen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 7 | Teelöffel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 8 | Esslöffel | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | 9 | E | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | a | Tasse | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | b | Applikatorfüllung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | c | Augenbadewanne | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | d | Dosierbriefchen | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | e | Dosierpipette | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | f | Dosierspritze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | g | Einzelosis | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | h | Glas | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | i | Likörglas | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | j | Messkappe | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | k | Messschale | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | l | Mio E | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | m | Mio IE | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | n | Pipettenteilstrich | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | o | Sprühstoß | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | p | IE | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |

| | | | |
|-----|---|----|---------------------------|
| 0-L | q | cm | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | r | l | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | s | ml | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | t | g | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | u | kg | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |
| 0-L | v | mg | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.48 S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT 1.2.276.0.76.11.451 - 2016-07-21 (aus Repository: kbvde-)



| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.11.451  kbvde- | Gültigkeit | 2016-07-21 |
| Status |  Definitiv | Versions-Label | |
| Name | S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT | Anzeigename | S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT |
| Beschreibung | Die Schlüsseltabelle enthält eine Liste kodierter Zwischenüberschriften, die im Rahmen der Spezifikation zum bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V zu verwenden sind (vgl. Tabelle 6 in Anlage 3 Vereinbarung BMP). | | |
| Quell-Codesystem | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 0-L | 411 | Bedarfsmedikation | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 412 | Dauermedikation | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 413 | Intramuskuläre Anwendung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 414 | Besondere Anwendung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 415 | Intravenöse Anwendung | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 416 | Anwendung unter die Haut | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |

| | | | |
|-----|-----|---|---------------------------|
| 0-L | 417 | Fertigspritze | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 418 | Selbstmedikation | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 419 | Allergiehinweise | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 421 | Wichtige Hinweise | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 422 | Wichtige Angaben | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 423 | zu besonderen Zeiten anzuwendende Medikamente | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |
| 0-L | 424 | zeitlich befristet anzuwendende Medikamente | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.42 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.49  **TimingEvent 1.2.276.0.76.11.463 - 2018-09-11 21:05:52**  (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.11.463  hl7de- | Gültigkeit | 2018-09-11 21:05:52 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | TimingEvent | Anzeigename | TimingEvent |
| Beschreibung | Original TimingEvent Value Set von HL7 mit deutschen Designationen | | |
| 2 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.5.139 - <i>TimingEvent</i> - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1</i> | | |

| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> | | <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
|---|------|---|-------------|--|--------------|--|--|
| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung | | |
| 0-L | AC | AC | TimingEvent |  vor der Mahlzeit (vom lat. ante cibus) | | | |
| 0-L | ACD | ACD | TimingEvent |  vor dem Mittagessen (vom lat. ante cibus diurnus) | | | |
| 0-L | ACM | ACM | TimingEvent |  vor dem Frühstück (vom lat. ante cibus matutinus) | | | |
| 0-L | ACV | ACV | TimingEvent |  vor dem Abendessen (vom lat. ante cibus vespertinus) | | | |
| 0-S | C | C | TimingEvent |  Mahlzeit (vom lat. cibus) | | | |

| | | | | |
|-----|------|------|---------------------------------------|--|
| 1-L | CD | CD | TimingEvent | Mittagessen (vom llat. cibus diurnus) |
| 1-L | CM | CM | TimingEvent | Frühstück (vom lat. cibus matutinus) |
| 1-L | CV | CV | TimingEvent | Abendessen (vom llat. cibus vespertinus) |
| 0-L | HS | HS | TimingEvent | Vor dem Schlafengehen (einer regulären Phase Schlaf, also kein Nickerchen) |
| 0-L | IC | IC | TimingEvent | zwischen Mahlzeiten (vom lat. inter cibus) |
| 0-L | ICD | ICD | TimingEvent | zwischen Mittagessen und Abendessen |
| 0-L | ICM | ICM | TimingEvent | zwischen Frühstück und Mittagessen |
| 0-L | ICV | ICV | TimingEvent | zwischen Abendessen und vor dem Schlafengehen |
| 0-L | PC | PC | TimingEvent | nach der Mahlzeit (vom lat. post cibus) |
| 0-L | PCD | PCD | TimingEvent | nach dem Mittagessen (vom lat. post cibus diurnus) |
| 0-L | PCM | PCM | TimingEvent | nach dem Frühstück (vom lat. post cibus matutinus) |
| 0-L | PCV | PCV | TimingEvent | nach dem Abendessen (vom lat. post cibus vespertinus) |
| 0-L | WAKE | WAKE | TimingEvent | Nach dem Aufwachen von einer regulären Phase Schlaf |
| 0-L | NOC | NOC | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 | In der Nacht |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.50 Vorbedingungen Medikation 1.2.276.0.76.11.453 - 2017-04-02 (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.11.453 hl7de- | Gültigkeit | 2017-04-02 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> Vorbedingungen Medikation vom 2017-04-01 hl7de- |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | VorbedingungenMedikation | Anzeigename | Vorbedingungen Medikation |

| | |
|----------------------------|--|
| 2 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.5.4 - Act Code - http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode 1.2.276.0.76.5.478 - urn:oid:1.2.276.0.76.5.478 |
|----------------------------|--|

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------------------------|--------------------|
| 0-L | PRN | bei Bedarf | Act Code |
| 1-L | AF | bei Anfall | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | LN | bei Luftnot | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | DI | bei Durchfall | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | SM | bei Schmerzen | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | JK | bei Juckreiz | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | KS | bei Kopfschmerzen | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | FI | bei Fieber | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | HF | bei hohem Fieber | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | FS | bei Fieber und/oder Schmerzen | 1.2.276.0.76.5.478 |
| 1-L | HS | bei Husten | 1.2.276.0.76.5.478 |

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

2.1.51 Zeiteinheiten (UCUM) 1.2.276.0.76.11.452 - 2017-04-01 (aus Repository: hl7de-)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.11.452 hl7de- | Gültigkeit | 2017-04-01 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Zeiteinheiten | Anzeigename | Zeiteinheiten (UCUM) |
| Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.8 - Unified Code for Units of Measure - http://unitsofmeasure.org | | |

| Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
|------------|------|-------------|-----------------------------------|
| 0-L | a | Year | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | h | Hour | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | min | Minute | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | mo | Month | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | s | Second | Unified Code for Units of Measure |
| 0-L | wk | Week | Unified Code for Units of Measure |

















Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3 Templates

3.1 Transaktionsrepräsentierende Templates

3.2 Templates

3.2.1 Alkoholgebrauch 1.2.276.0.76.10.4291 - 2018-09-13 13:55:58 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4291 ref hl7de- | Gültigkeit | 2018-09-13 13:55:58 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|--|---------------------|--|---|---|---------------------|--|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Alkoholgebrauch | Anzeigename | Alkoholgebrauch | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4291 | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1114</td> <td> Alkohol</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1114 |  Alkohol |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1114 |  Alkohol |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23</td> <td>Containment</td> <td> Sozialanamnese (medmgmt)</td> <td>2019-07-01 18:11:55</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | |

Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.22.4.35 *IPS Social History Alcohol Use* (2017-06-29) [ref hl7ips-](#)




Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.38 *Social History Observation (V3)* (2015-08-01) [ref ccda-](#)

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel


```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.22.4.35"/>
  <id root="1.2.3.999" extension="__example only__"/>
  <code code="74013-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Alcoholic drinks per day"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime>
    <low value="20170719113711"/>
  </effectiveTime>
  <value xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/>
</observation>
```
















Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--------------------|--------|------|----------------------|-------------|
| hl7:observation | | | | | (Alk...uch) |
|  medgmt-dataelement-1114  Alkohol  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Alk...uch) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4291 | |
| hl7:id | II | 0 .. * | | | (Alk...uch) |
| hl7:code | CD.IPS (preferred) | 1 .. 1 | R | | (Alk...uch) |














| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|--------|---------|------|-------------------------------|-------------|
| @code | | 0 ... 1 | F | 74013-4 | |
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:translation | | 0 ... * | R | | (Alk...uch) |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | (Alk...uch) |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 ... 1 | R | | (Alk...uch) |
| hl7:value | PQ | 1 ... 1 | R | | (Alk...uch) |
| @xsi:type | cs | 1 ... 1 | F | PQ | |
| @unit | cs | 1 ... 1 | F | /d | |

3.2.2 Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 - 2019-02-10





| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | Gültigkeit | 2019-02-10 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | AllergienUnvertraeglichkeitenmedgmt | Anzeigename | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) |
| Beschreibung | Beschreibung der Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten und deren Manifestationen (Reaktion) und Kritikalität | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | | |
| Label | saurpmp | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |

| <p>Assoziiert mit</p> | <p>Assoziiert mit 1 Konzept</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 225 936 260">Id</th> <th data-bbox="936 225 1780 260">Name</th> <th data-bbox="1780 225 2063 260">Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 272 936 328">medmgmt-dataelement-1031</td> <td data-bbox="936 272 1780 328">  Allergien/Unverträglichkeiten </td> <td data-bbox="1780 272 2063 328">  Datensatz eMedikation v2019 </td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1031 |  Allergien/Unverträglichkeiten |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---------------------|---------|-----|------|---------|----------------------|-------------|--|---------|-----------------------|-----------|---|------------|
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1031 |  Allergien/Unverträglichkeiten |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Benutzt von / Benutzt</p> | <p>Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 2 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 435 1086 470">Benutzt von</th> <th data-bbox="1086 435 1227 470">als</th> <th data-bbox="1227 435 1861 470">Name</th> <th data-bbox="1861 435 2063 470">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 499 1086 534">2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td data-bbox="1086 499 1227 534">Containment</td> <td data-bbox="1227 499 1861 534">  CDA Medikationsmanagement </td> <td data-bbox="1861 499 2063 534">2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 555 1086 590">Benutzt</th> <th data-bbox="1086 555 1227 590">als</th> <th data-bbox="1227 555 1861 590">Name</th> <th data-bbox="1861 555 2063 590">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 606 1086 641">1.2.276.0.76.10.4256</td> <td data-bbox="1086 606 1227 641">Containment</td> <td data-bbox="1227 606 1861 641">  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act </td> <td data-bbox="1861 606 2063 641">DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 657 1086 692">1.2.276.0.76.10.90034</td> <td data-bbox="1086 657 1227 692">Inklusion</td> <td data-bbox="1227 657 1861 692">  Erweiterung Vorhabenerweiterung </td> <td data-bbox="1861 657 2063 692">2019-02-09</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | Benutzt | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.4256 | Containment |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | DYNAMIC | 1.2.276.0.76.10.90034 | Inklusion |  Erweiterung Vorhabenerweiterung | 2019-02-09 |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4256 | Containment |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.90034 | Inklusion |  Erweiterung Vorhabenerweiterung | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beziehung</p> | <p>Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3040 <i>Allergien und Unverträglichkeiten</i> (2017-06-04) ref pmp-</p> <p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beispiel</p> | <p>Beispiel</p> <pre data-bbox="660 890 2063 1369"> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3040"/> <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"/> <title>Allergien und Unverträglichkeiten</title> <text> <list> <item ID="alg">Allergie: Penizillin</item> <item ID="int">Unverträglichkeit: Laktose</item> </list> </text> <entry typeCode="COMP"> <!-- .. --> </entry> </section> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Alles ausklappen | | Alles einklappen | | | |
|---|---------|---|------|---|---------|
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:section | | | | | saurpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> 📍 medmgmt-dataelement-1031 🟡 Allergien/Unverträglichkeiten 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | DOCSECT | |
| @moodCode | cs | 0 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | | | saurpmp |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | |
| hl7:code | CE | 1 ... 1 | M | | saurpmp |
| @code | | 1 ... 1 | F | 48765-2 | |
| @codeSystem | CONF | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:title | ST | 1 ... 1 | M | | saurpmp |
| | CONF | Elementinhalt muss "Allergien und Unverträglichkeiten" sein | | | |
| hl7:text | SD.TEXT | 1 ... 1 | M | | saurpmp |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4256 <i>Allergie/Unverträglichkeit Concern Act</i> (DYNAMIC) | saurpmp |
| wo [hl7:act [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4256']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| Eingefügt | | 0 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90034 <i>Erweiterung Vorhabenerweiterung</i> (2019-02-09) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|--------|------|---|---------|
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | saurpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <p>  medmgmt-dataelement-1220  Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019 </p> <p> medmgmt-dataelement-1226  Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019 </p> <p> medmgmt-dataelement-1223  Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019 </p> </div> | | | | | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | |
| medmgmt:extension | | | | | saurpmp |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | saurpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <p>  medmgmt-dataelement-1227  Identifikation  Datensatz eMedikation v2019 </p> </div> | | | | | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| medmgmt:extension | | | | | saurpmp |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | saurpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <p>  medmgmt-dataelement-1228  Wert  Datensatz eMedikation v2019 </p> </div> | | | | | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |











3.2.3 Allergie/Unverträglichkeit Concern Act 1.2.276.0.76.10.4256 - 2017-06-04 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4256 ref hl7de- | Gültigkeit | 2017-06-04 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Allergyconcernact | Anzeigename | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4256 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | Containment  | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement |
| | Benutzt | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.4257 | Containment  | Allergie/Unverträglichkeit Observation |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 CDA Act (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.30 (2014-06-09) ref ? | | |
| Beispiel | <pre> Beispiel <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4256"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="5a2ac5fc-0c85-4223-baee-c2e254803975"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6"/> <statusCode code="active"/> <!-- This is the time stamp for when the allergy was first documented as a concern--> <effectiveTime> <low value="20140104123506"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4257 Allergy / Intolerance Observation --> </pre> | | |

| </entryRelationship> </act> | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------|------|--|--------------|
| Alles ausklappen | | Alles einklappen | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:act | | | | | (All... act) |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | ACT | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (All... act) |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4256 | |
| hl7:id | II | 1 ... * | M | | (All... act) |
| hl7:code | CV | 1 ... 1 | M | | (All... act) |
| @code | | 1 ... 1 | F | CONC | |
| @codeSystem | CONF | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.6 (HL7ActClass) | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | R | | (All... act) |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 ... 1 | M | | (All... act) |
| hl7:low | TS | 1 ... 1 | M | | (All... act) |
| hl7:high | TS | 0 ... 1 | | | (All... act) |
| hl7:entryRelationship | | 1 ... * | M | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4257 Allergie/Unverträglichkeit Observation (DYNAMIC) | (All... act) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|----|--------|------|--------------|-------|
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4257']]] | | | | | |
| @typeCode | | 1 .. 1 | F | SUBJ | |

3.2.4 Allergie/Unverträglichkeit Observation 1.2.276.0.76.10.4257 - 2017-06-04 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4257 ref hl7de- | Gültigkeit | 2017-06-04 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Allergyintoleranceobservation | Anzeigename | Allergie/Unverträglichkeit Observation |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4257 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 4 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.4256 | Containment |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16  | |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | |  CDA Medikationsmanagement |
| | | | 2017-06-04 |
| | | | 2019-02-10 |
| | | | 2018-10-13 16:20:07 |
| | Benutzt | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.90025 | Inklusion |  Author (Body) |
| 1.2.276.0.76.10.90020 | Inklusion |  RelatedEntity (Body) | |
| 1.2.276.0.76.10.4258 | Containment |  Reaktion/Manifestation | |
| 1.2.276.0.76.10.4259 | Containment |  Kritikalität | |
| | | DYNAMIC | |
| | | DYNAMIC | |
| | | DYNAMIC | |
| | | DYNAMIC | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.7 <i>Allergy - Intolerance Observation (V2)</i> (2014-06-09) ref ccda- | | |

Beispiel

Antibiotika-Allergie bekannt seit 2010

```

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4257"/>
  <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4adc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/>
  <code code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime>

    <low value="2010"/>
  </effectiveTime>
  <participant typeCode="CSM">

    <participantRole classCode="MANU">

      <playingEntity classCode="MMAT">

        <code code="A07AA" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName="Antibiotikum">

          <originalText>

            <reference value="#alg-1"/>
          </originalText>
        </code>
      </playingEntity>
    </participantRole>
  </participant>
</observation>

```

Beispiel

Keine Kontrastmittel-Allergie/Unverträglichkeit bekannt (negationInd=true)

```

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">

  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4257"/>
  <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4adc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/>
  <code code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime nullFlavor="NA"/>
  <participant typeCode="CSM">

    <participantRole classCode="MANU">

      <playingEntity classCode="MMAT">

        <code code="V08" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName="Kontrastmittel">

          <originalText>

            <reference value="#alg-2"/>
          </originalText>
        </code>
      </playingEntity>
    </participantRole>
  </participant>
</observation>

```

| | |
|----------|---|
| | <pre> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation> </pre> |
| Beispiel | <p>Sonstige Allergie: Hühnereiweiss (Der Freitext steht im zugehörigen Section.text, hier referenziert durch #alg-4)</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4257"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4adc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#alg-4"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation> </pre> |
| Beispiel | <p>Allergie: ja, Allergen nicht näher bezeichnet (im zugehörigen Section.text, hier referenziert durch #alg-4, kann der Text 'ja, n.n.b.' o.ä. wiedergegeben werden)</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4257"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="55dc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9aab"/> <code code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> </pre> |

| | |
|-----------------|--|
| | <pre> <code code="ALGN" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.52" displayName="Allergen"> <originalText> <reference value="#alg-4"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation> </pre> |
| <p>Beispiel</p> | <p>Keine Allergie/Unverträglichkeit bekannt (negationInd=true)</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4257"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4adc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/> <statusCode code="completed"/> <!-- N/A - author/time records when this assertion was made --> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> </observation> </pre> |
| <p>Beispiel</p> | <p>Allergie/Unverträglichkeit nicht erfragt (nullFlavor=NASK)</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" nullFlavor="NASK"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4257"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4adc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/> <statusCode code="completed"/> <!-- N/A - author/time records when this assertion was made --> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> </observation> </pre> |













Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----|---------|------|--------------|--------------|
| hl7:observation | | | | | (All... ion) |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | OBS | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|--------|---------|------|---|-------------|
| @negationInd | bl | 0 ... 1 | | | |
| @nullFlavor | cs | 0 ... 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NASK" sein | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4257 | |
| hl7:id | II | 1 ... * | M | | (All...ion) |
| hl7:code | CV | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| | CONF | | | @code muss "ALG" sein @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.5.4" sein oder @code muss "OINT" sein @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.5.4" sein | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 ... 1 | R | | (All...ion) |
| hl7:low | TS | 0 ... 1 | R | | (All...ion) |
| hl7:high | TS | 0 ... 1 | R | | (All...ion) |
| hl7:value | CD | 0 ... 1 | C | Code für die Allergie/Intoleranz | (All...ion) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.12 <i>Allergien und Unverträglichkeiten</i> (DYNAMIC) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|------|---------|------|---|-------------|
| Auswahl | | 0 ... 1 | | Angabe, woher die Information zur Allergie oder Unverträglichkeit des Patienten stammt Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> hl7:author[hl7:assignedAuthor] hl7:informant[hl7:relatedEntity[@classCode]] hl7:participant[@typeCode='AUT'] | |
| hl7:author | | | | Autor dieser Information ist ein Gesundheitsdienstleister | (All...ion) |
| | | | | Autor der Information ist ein Gesundheitsdienstleister <pre> <author> <time value="20131221"/> <assignedAuthor> <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/> <assignedPerson> <name> <given qualifier="IN">Jan H.</given> <family>Ausarz</family> </name> </assignedPerson> </assignedAuthor> </author> </pre> | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90025 <i>Author (Body)</i> (DYNAMIC) | |
| @typeCode | | 0 ... 1 | F | AUT | |
| @contextControlCode | | 0 ... 1 | F | OP | |
| hl7:functionCode | CE | 0 ... 1 | | | (All...ion) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:time | TS | 1 ... 1 | R | | (All...ion) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|------|---------|------|---|-------------|
| hl7:assignedAuthor | | 1 ... 1 | R | | (All...ion) |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 ... * | R | | (All...ion) |
| hl7:code | CE | 0 ... 1 | | | (All...ion) |
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) | |
| hl7:addr | AD | 0 ... * | | | (All...ion) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (All...ion) |
| hl7:assignedPerson | | 0 ... 1 | | | (All...ion) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (All...ion) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (All...ion) |










| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---------------------|--|---------|------|--|--|--|
| |  medmgmt-dataelement-1013 medmgmt-dataelement-1010 medmgmt-dataelement-1208 medmgmt-dataelement-1012 | | |  Institutskennzeichen Apotheke  BSNR  Apotheken-IDF  Institutskennzeichen Krankenhaus |  Datensatz eMedikation v2019  Datensatz eMedikation v2019  Datensatz eMedikation v2019  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 1 ... 1 | M | | (All...ion) | |
| |  medmgmt-dataelement-1014 | | |  Name Institution |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | | | (All...ion) | |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | | | (All...ion) | |
| h17:informant | | 0 ... 1 | | Informant dieser Information ist eine Kontaktperson/Angehöriger des Patienten | (All...ion) | |
| @typeCode | | 0 ... 1 | F | INF | | |
| @contextControlCode | | 0 ... 1 | F | OP | | |
| Beispiel | | | | Informant dieser Information ist eine Kontaktperson/Angehöriger des Patienten <pre> <informant> <relatedEntity classCode="CON"> <relatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> ... </name> </relatedPerson> </relatedEntity> </informant> </pre> | | |
| h17:relatedEntity | | 1 ... 1 | M | | (All...ion) | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90020 RelatedEntity (Body) (DYNAMIC) | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|--------|--------|------|--|-------------|
| @classCode | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | | | Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 <i>RoleClassMutualRelationship</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:code | CE | 0 .. 1 | | | (All...ion) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 <i>PersonalRelationshipRoleType</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:addr | AD | 0 .. * | | | (All...ion) |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | (All...ion) |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 0 .. 1 | | | (All...ion) |
| hl7:relatedPerson | | 0 .. 1 | | | (All...ion) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 .. 1 | M | | (All...ion) |
| hl7:participant | | | | Autor dieser Information ist der Patient | (All...ion) |
| wo [<i>@typeCode=AUT</i>] | | | | | |
| @typeCode | | 1 .. 1 | F | AUT | |
| Beispiel | | | | Autor der Information ist der Patient <participant typeCode="AUT"> | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|--|-------------|
| | | | | <participantRole classCode="PAT"/> </participant> | |
| hl7:time | TS | 0 ... 1 | R | | (All...ion) |
| hl7:participantRole | | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | PAT | |
| hl7:participant | | 0 ... 1 | C | | (All...ion) |
| wo [@typeCode='CSM'] | | | | | |
| @typeCode | | 1 ... 1 | F | CSM | |
| hl7:participantRole | | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | MANU | |
| hl7:playingEntity | | 1 ... 1 | M | | (All...ion) |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | MMAT | |
| hl7:code | CE | 1 ... 1 | R | Auslösendes Agens: Substanzen (ATC) | (All...ion) |
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) | |
| | Schematron assert | role | ● error | | |
| | | test | | hl7:value[@code] or hl7:participant/hl7:participantRole | |
| | | Meldung | | Wenn das observation/value Element und mit einem Code versehen ist, dann MUSS das observation/participant Element weggelassen werden | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4258 <i>Reaktion/Manifestation</i> (DYNAMIC) | (All...ion) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|----|---------|------|---|-------------|
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4258']]] | | | | | |
| @typeCode | | 1 ... 1 | F | MFST | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4259 <i>Kritikalität (DYNAMIC)</i> | (All...ion) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4259']]] | | | | | |
| @typeCode | | 1 ... 1 | F | SUBJ | |

3.2.5  Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015 - 2014-11-15 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4015 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-11-15 |
|--|---|---|----------------------------------|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | AnnotationComment | Anzeigename | Annotation Comment |
| Beschreibung | Kommentar/Hinweis | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4015 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.4254 | Containment  | Laborergebnis |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment  | Medikation (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |  | Medikation Gruppierung (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  |  | Aktuelle Medikation (medmgmt) |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |  | CDA Medikationsmanagement | |
| | | | 2017-03-21 |
| | | | 2018-11-02 |
| | | | 2019-02-09 |
| | | | 2019-02-09 |
| | | | 2018-10-13 16:20:07 |












| | |
|------------------|--|
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.40 <i>Befundtext (Anmerkungen und Kommentare)-deprecated</i> (DYNAMIC) ref elga- |
| | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 <i>Comment</i> (DYNAMIC) ref epsos- |

Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|------|---------|------|---|-----------------|
| hl7:act | | | | Dieses Template dient für die Angabe von Kommentaren, Hinweisen oder Instruktionen, die im Kontext als zugehörig erachtet werden. | (Ann ...ent) |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | ACT | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | R | | (Ann ...ent) |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4015 | |
| hl7:code | CD | 1 ... 1 | M | | (Ann ...ent) |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | 48767-8 | |
| @codeSystem | | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| @displayName | | 1 ... 1 | F | Annotation Comment | |
| @codeSystemName | | 1 ... 1 | F | LOINC | |
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Ann ...ent) |
| hl7:reference | URL | 1 ... 1 | | | (Ann ...ent) |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | (Ann ...ent) |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| | CONF | | | @value ist "completed" | |

3.2.6  CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012 - 2011-12-19 ref hl7de-






| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90012 ref hl7de- | Gültigkeit | 2011-12-19 | |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | | |
| Name | AssignedEntityElements | Anzeigename | CDA Assigned Entity Elements | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 9 Templates, Benutzt 2 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 1.2.276.0.76.10.2019 | Inklusion  | CDA authenticator | 2014-08-25 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| | 1.2.276.0.76.10.2020 | Inklusion  | CDA legalAuthenticator | 2014-08-25 |
| | 1.2.276.0.76.10.90014 | Inklusion  | Performer (Body) | 2014-03-12 10:18:42 |
| | 1.2.276.0.76.10.4029 |  | Bezug zu Abgabe des Medikaments | 2014-12-21 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 |  | AMTS Prüfung | 2019-02-12 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 |  | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | |
| Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90010 | Inklusion  | CDA Person Elements | DYNAMIC | |

1.2.276.0.76.10.90011

Inklusion  CDA Organization Elements

DYNAMIC

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:id | II | 1 ... * | R | | (Ass...nts) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | R | | (Ass...nts) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | R | | (Ass...nts) |
| hl7:assignedPerson | | 1 ... 1 | M | | (Ass...nts) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Ass...nts) |
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (Ass...nts) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (Ass...nts) |
|  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------|-----|---------|------|--|-------------|
| | | | | medmgmt-dataelement-1208 Apotheken-IDF Datensatz eMedikation v2019 | |
| | | | | medmgmt-dataelement-1012 Institutskennezeichen Krankenhaus Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 1 ... 1 | M | | (Ass...nts) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1014 Name Institution Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Ass...nts) |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Ass...nts) |

3.2.7 Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025 - 2014-12-21 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.90025 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-12-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------|---------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------|--|------------|----------------------|--|--|------------|---|--|---|------------|--|
| Status | Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | AuthorBody | Anzeigename | Author (Body) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Template CDA Author (Body) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 2 Templates | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4028</td> <td>Inklusion </td> <td>Bezug zu Verordnung des Medikaments</td> <td>2014-12-21</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4257</td> <td>Inklusion </td> <td>Allergie/Unverträglichkeit Observation</td> <td>2017-06-04</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4256</td> <td></td> <td>Allergie/Unverträglichkeit Concern Act</td> <td>2017-06-04</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16</td> <td></td> <td>Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)</td> <td>2019-02-10</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.4028 | Inklusion | Bezug zu Verordnung des Medikaments | 2014-12-21 | 1.2.276.0.76.10.4257 | Inklusion | Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 | 1.2.276.0.76.10.4256 | | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4028 | Inklusion | Bezug zu Verordnung des Medikaments | 2014-12-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4257 | Inklusion | Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4256 | | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90010 | Inklusion | CDA Person Elements | DYNAMIC | |
| 1.2.276.0.76.10.90011 | Inklusion | CDA Organization Elements | DYNAMIC | |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|------|---|------|--------------|-------------|
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | AUT | |
| @contextControlCode | | 0 .. 1 | F | OP | |
| h17:functionCode | CE | 0 .. 1 | | | (Aut...ody) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMIC) | | | |
| h17:time | TS | 1 .. 1 | R | | (Aut...ody) |
| h17:assignedAuthor | | 1 .. 1 | R | | (Aut...ody) |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| h17:id | II | 1 .. * | R | | (Aut...ody) |
| h17:code | CE | 0 .. 1 | | | (Aut...ody) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------------------------|------|---|-------------|----------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|------|---|-----------------------------|--------------------------|---|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:addr | AD | 0 ... * | | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:assignedPerson | | 0 ... 1 | | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:id | II | 0 ... * | | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>☉ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>●</td> <td>Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>●</td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>●</td> <td>BSNR</td> <td>●</td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>●</td> <td>Apotheken-IDF</td> <td>●</td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td>●</td> <td>Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td>●</td> <td>Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> | | | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1013 | ● | Institutskennzeichen Apotheke | ● | Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● | BSNR | ● | Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● | Apotheken-IDF | ● | Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1012 | ● | Institutskennzeichen Krankenhaus | ● | Datensatz eMedikation v2019 |
| ☉ medmgmt-dataelement-1013 | ● | Institutskennzeichen Apotheke | ● | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1010 | ● | BSNR | ● | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1208 | ● | Apotheken-IDF | ● | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1012 | ● | Institutskennzeichen Krankenhaus | ● | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:name | ON | 1 ... 1 | M | | (Aut...ody) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------|-----|--------------------------|------|------------------|-------------------------------|
| | 📍 | medmgmt-dataelement-1014 | 🟡 | Name Institution | 🟡 Datensatz eMedikation v2019 |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Aut...ody) |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Aut...ody) |

3.2.8 🟡 Körpergröße (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 - 2019-02-09

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status | 🟡 Entwurf | Versions-Label | |
| Name | BodyHeightmedmgmt | Anzeigename | Körpergröße (medmgmt) |
| Beschreibung | Körpergröße | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 3 Konzepte | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1028 | 🟡 Körpergröße | 🟡 Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1029 | 🟡 Wert | 🟡 Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1030 | 🟡 Datum | 🟡 Datensatz eMedikation v2019 | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | | | Version |

| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | Containment | | Klinische Parameter (medmgmt) | 2019-02-09 |
|---|-------------|------|-------------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion | | Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 |

Beziehung

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4262 *Körpergröße* (2017-08-01) [ref hl7de-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4262"/>
  <code code="8302-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Body height"/>
  <text>
    <reference value="#gro"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="PQ" value="181" unit="cm"/>
</observation>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|-----------------|----|--------------------------|------|--------------|---------------|-----------------------------|
| hl7:observation | | | | | (Bod ... gmt) | |
| | | medmgmt-dataelement-1028 | | Körpergröße | | Datensatz eMedikation v2019 |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | OBS | | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | EVN | | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Bod ... gmt) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|--------|------|---|------------------|
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 | |
| hl7:id | II | 0 .. * | R | | (Bod ... gmt) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Bod ... gmt) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 8302-2 | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Bod ... gmt) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | | | (Bod ... gmt) |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Bod ... gmt) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 .. 1 | M | | (Bod ... gmt) |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e6ffe6; padding: 5px;"> 📍 medmgmt-dataelement-1030 🕒 Datum 📁 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:value | PQ | 1 .. 1 | R | | (Bod ... gmt) |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e6ffe6; padding: 5px;"> 📍 medmgmt-dataelement-1029 🕒 Wert 📁 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|---|--------|---------|---|---------------|
| | CONF | | | @unit ist "cm" | |
| | Schematron assert | | role | error | |
| | | | test | not(hl7:value/@value='0') | |
| | | | Meldung | Die Körpergröße muss größer 0 sein. | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | (Bod ... gmt) |
| | <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1189 Kennzeichen BMP Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1334 Erweiterung Druckkennzeichen Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1209 Druckkennzeichen Geschlecht Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 .. 1 | M | | (Bod ... gmt) |
| @value | bl | 1 .. 1 | R | | |

3.2.9 Körpergewicht (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 - 2019-02-09

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | BodyWeightmedmgmt | Anzeigename | Körpergewicht (medmgmt) |
| Beschreibung | Körpergewicht | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |

Assoziiert mit

Assoziiert mit 3 Konzepte

| Id | Name | Datensatz |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1025 | Körpergewicht | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1026 | Wert | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1027 | Datum | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template

| Benutzt von | als | Name | Version |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | Containment | Klinische Parameter (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

| Benutzt | als | Name | Version |
|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion | Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 |

Beziehung

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4016 *Körpergewicht* (2014-11-01) [ref hl7de-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel

Beispiel

```

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4016"/>
  <code code="29463-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Body weight"/>
  <text>
    <reference value="#gew"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="PQ" value="89" unit="kg"/>
</observation>
                
```

Alles ausklappen

Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|--------|------|---|-----------------|
| hl7:observation | | | | | (Bod ...gmt) |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 📍 medmgmt-dataelement-1025 🟡 Körpergewicht 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Bod ...gmt) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 | |
| hl7:id | II | 0 .. * | R | | (Bod ...gmt) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Bod ...gmt) |
| @code | | 1 .. 1 | F | 29463-7 | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Bod ...gmt) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | | | (Bod ...gmt) |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Bod ...gmt) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 .. 1 | M | | (Bod ...gmt) |
| <div style="border: 1px solid green; background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 📍 medmgmt-dataelement-1027 🟡 Datum 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |






















| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|--------|------|---|-----------------|
| hl7:value | PQ | 1 .. 1 | R | | (Bod ...gmt) |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1026 🟡 Wert 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> CONF @unit ist "kg" </div> | | | | | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | (Bod ...gmt) |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1189 🟡 Kennzeichen BMP 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1334 🟡 Erweiterung Druckkennzeichen 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1209 🟡 Druckkennzeichen Geschlecht 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 .. 1 | M | | (Bod ...gmt) |
| @value | bl | 1 .. 1 | R | | |


3.2.10 🟡 CDA Medikationsmanagement 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 - 2018-10-13 16:20:07

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Gültigkeit | 2018-10-13 16:20:07 |
| Status | 🟡 Entwurf | Versions-Label | |
| Name | CDAMedikationsmanagement | Anzeigename | CDA Medikationsmanagement |
| Beschreibung | CDA Dokument für Medikationsmanagement | | |
| Kontext | Pfadname / | | |
| Klassifikation | CDA Document Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |

Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 22 Templates

Benutzt von / Benutzt

| Benutzt | als | Name | Version |
|---|-------------|---|---------|
| 1.2.276.0.76.10.90002 | Inklusion |  CDA realmCode | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90003 | Inklusion |  CDA typeId | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90004 | Inklusion |  CDA id | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90005 | Inklusion |  CDA title | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90006 | Inklusion |  CDA effectiveTime | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90007 | Inklusion |  CDA confidentialityCode | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90008 | Inklusion |  CDA languageCode | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90009 | Inklusion |  CDA setId and versionNumber | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | Inklusion |  CDA recordTarget (medmgmt) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.2029 | Inklusion |  CDA author (pmp) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.2031 | Inklusion |  CDA author software (pmp) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.2030 | Inklusion |  CDA custodian (pmp) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.2020 | Inklusion |  CDA legalAuthenticator | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.2019 | Inklusion |  CDA authenticator | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | Inklusion |  Pflegearzt (Kurator) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.3133 | Containment |  Leistungserbringer-Kommentar | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | Containment |  Klinische Parameter (medmgmt) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | Containment |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | Containment |  Gesundheitsbelange (medmgmt) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | Containment |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | DYNAMIC |

| | |
|-----------|--|
| | 1.2.276.0.76.10.3042 Containment  Wichtige Angaben DYNAMIC |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.1024 <i>Patientenbezogener Medikationsplan Plus</i> (2017-07-07) ref pmp- Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.1014 <i>Patientenbezogener Medikationsplan CDA document</i> (2014-10-20) ref pmp- Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.1 <i>CDA ClinicalDocument</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <ClinicalDocument> <!-- CDA Header --> <realmCode code="DE"/> <typeId root="1.2.276.0.76.10.90003" extension="POCD_HD000040"/> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1"/> <id extension=" " root=" "/> <code code="77603-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.extended Document"/> <title>Medikationsplan 2014-12-08 12:34:56</title> <effectiveTime value="20141008123456"/> <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> <languageCode code="de-DE"/> <setId extension=" " root=" "/> <versionNumber value="1"/> <recordTarget> <!-- .. --> </recordTarget> <author> <!-- .. --> </author> <custodian> <!-- .. --> </custodian> <legalAuthenticator> <!-- .. --> </legalAuthenticator> <authenticator> </pre> |

```

<!-- .. -->
</authenticator>
<!-- CDA Body -->

<component>

  <structuredBody>

    <component>












      <!-- .. -->

    </component>
  </structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen



















| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|----|---|------|---|-------------|
| hl7:ClinicalDocument | | | | | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i> | | 1 .. 1 | M | von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC) | |
| hl7:realmCode | CS | 1 .. 1 | M | | CDAr...Code |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1108 🌐 Länderkennzeichen (für die Nutzung) 🌐 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @code | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | | CONF | | @code muss "DE" sein | |
| <i>Beispiel</i> | | <code><realmCode code="DE"/></code> | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | 1 .. 1 | M | von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC) | |
| hl7:typeId | II | 1 .. 1 | M | | CDAtypeId |
| @extension | | 1 .. 1 | F | POCD_HD000040 | |
| @root | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.1.3 | |



| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----------------|--|------|---|-------------|
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | |
| | Beispiel | <code><templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1"/></code> | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC) | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 77603-9 | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| <i>Eingefügt</i> | | 1 .. 1 | | von 1.2.276.0.76.10.90005 CDA title (DYNAMIC) | |
| | Beispiel | <code><title>Medikationsplan vom 8. Juli 2018</title></code> | | | |
| hl7:title | ST | 1 .. 1 | | | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC) | |
| hl7:effectiveTime | TS.DATETIME.MIN | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90007 CDA confidentialityCode (DYNAMIC) | |
| hl7:confidentialityCode | CE | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentialityKind (DYNAMIC) | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC) | |
| hl7:languageCode | CS.LANG | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1109  Sprachkennzeichen  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|---------|---|------|--------------|-------------|
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:setId | II | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| hl7:versionNumber | INT.POS | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1107  Versionsnummer des Formats  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| <i>Eingefügt</i> von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 CDA recordTarget (medmgmt) (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:recordTarget | | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1015  Patient  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | RCT | |
| @contextControlCode | cs | 0 .. 1 | F | OP | |
| hl7:patientRole | | 1 .. 1 | | | (CDA...ent) |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | PAT | |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1016  Versicherten-ID  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1128  Patienten-ID  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| Beispiel | | eGK Nummer als Patientenidentifikation | | | |
| | | <code><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></code> | | | |
| hl7:addr | AD | 0 .. 1 | | | (CDA...ent) |





| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (CDA...ent) |
| hl7:patient | | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | cs | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| Beispiel | | | | <pre><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient></pre> | |
| Eingefügt | | 1 ... * | R | von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:name | PN | 1 ... * | R | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1234  Name  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| Beispiel | | | | <p>Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg</p> <pre><name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name></pre> | |
| Beispiel | | | | <p>Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB</p> <pre><name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given></pre> | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| | | | | <pre> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name> </pre> | |
| h17:prefix | ENXP | 0 ... * | | Titel | (CDA...ent) |
| wo [@qualifier='AC'] | | | | | |
| | | | | medmgmt-dataelement-1019 Titel Datensatz eMedikation v2019 | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | AC | |
| h17:given | ENXP | 0 ... * | | Vorname | (CDA...ent) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1017 Vorname Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:prefix | ENXP | 0 ... * | | Namenszusatz | (CDA...ent) |
| wo [@qualifier='NB'] | | | | | |
| | | | | medmgmt-dataelement-1021 Namenszusatz Datensatz eMedikation v2019 | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | NB | |
| h17:prefix | ENXP | 0 ... * | | Vorsatzwort | (CDA...ent) |
| wo [@qualifier='VV'] | | | | | |
| | | | | medmgmt-dataelement-1020 Vorsatzwort Datensatz eMedikation v2019 | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | VV | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|------|---------|------|--|-------------|
| hl7:family | ENXP | 0 ... * | | Nachname | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1018  Nachname  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:suffix | ENXP | 0 ... * | | Suffix | (CDA...ent) |
| hl7:administrativeGenderCode | CE | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1024  Geschlecht  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC) | | | | | |
| Eingefügt | | 0 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1189  Kennzeichen BMP  Datensatz eMedikation v2019  medmgmt-dataelement-1334  Erweiterung Druckkennzeichen  Datensatz eMedikation v2019  medmgmt-dataelement-1209  Druckkennzeichen Geschlecht  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @url | url | 1 ... 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 ... 1 | M | | (CDA...ent) |
| @value | bl | 1 ... 1 | R | | |
| hl7:birthTime | TS | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1022  Geburtsdatum  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| Eingefügt | | 0 ... * | R | von 1.2.276.0.76.10.90034 Erweiterung Vorhabenerweiterung (2019-02-09) | |



| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|--------|------|---|-------------|
| medmgmt:extension | | 0 .. * | R | | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1220  Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019  medmgmt-dataelement-1226  Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019  medmgmt-dataelement-1223  Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | |
| medmgmt:extension | | | | | (CDA...ent) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1227  Identifikation  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| medmgmt:extension | | | | | (CDA...ent) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1228  Wert  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| Eingefügt | | 1 .. 1 | M | von 1.2.276.0.76.10.2029 CDA author (pmp) (DYNAMIC) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-------------|---|------|----------------------|----------|
| hl7:author | | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1001 🟡 Leistungserbringer 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | AUT | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| @root | | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.2029 | |
| hl7:time | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| hl7:assignedAuthor | | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | hauthpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1011 🟡 LANR 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| Beispiel | | Autor mit lebenslanger Arztnummer (LANR) <code><id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/></code> | | | |
| hl7:addr | AD | 0 .. 1 | R | | hauthpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1236 🟡 Adresse 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | R | | hauthpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1008 🟡 Telefonnummer 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1009 🟡 E-Mail 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |













| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|----|--------|------|---|----------|
| | | | | medmgmt-dataelement-1237  Kontaktdaten  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:assignedPerson | | 0 .. 1 | | | hauthpmp |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1235  Name  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| h17:name | PN | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| h17:representedOrganization | | 0 .. 1 | | | hauthpmp |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1238  Organisation  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Beispiel | | | | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name <pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/> <name>Internistische Praxis Dr. Abt</name> </representedOrganization></pre> | |
| Beispiel | | | | Apotheke mit IDF Nummer <pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.197" extension="3379589"/> <name>Sonnen-Apotheke</name> </representedOrganization></pre> | |
| Beispiel | | | | Krankenhaus mit Institutionskennzeichen <pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.5" extension="260641243"/> <name>Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH</name> </representedOrganization></pre> | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|--------|------|--|-----------|
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 .. * | | | hauthpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ medmgmt-dataelement-1013 ● Institutskennzeichen Apotheke ● Datensatz eMedikation v2019 ● medmgmt-dataelement-1010 ● BSNR ● Datensatz eMedikation v2019 ● medmgmt-dataelement-1208 ● Apotheken-IDF ● Datensatz eMedikation v2019 ● medmgmt-dataelement-1012 ● Institutskennzeichen Krankenhaus ● Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:name | ON | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ medmgmt-dataelement-1014 ● Name Institution ● Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | hauthpmp |
| hl7:addr | AD | 0 .. 1 | | | hauthpmp |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.2031 CDA author software (pmp) (DYNAMIC) | |
| hl7:author | | 0 .. 1 | R | | hhsoftpmp |
| wo [hl7:templateId/@root='1.2.276.0.76.10.2031'] | | | | | |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ medmgmt-dataelement-1110 ● Angaben zum erstellenden Software-System ● Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | AUT | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | hhsoftpmp |







| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------------------|-------------|--|------|---|-----------|
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.2031 | |
| hl7:time | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | M | | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthor | | 1 .. 1 | M | | hhsoftpmp |
| @classCode | CS | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthoringDevice | | 1 .. 1 | R | | hhsoftpmp |
| @classCode | CS | 0 .. 1 | F | DEV | |
| @determinerCode | CS | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:manufacturerModelName | SC | 0 .. 1 | | | hhsoftpmp |
| hl7:softwareName | SC | 1 .. 1 | R | Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | hhsoftpmp |
| Eingefügt | | 1 .. 1 | M | von 1.2.276.0.76.10.2030 CDA custodian (pmp) (DYNAMIC) | |
| hl7:custodian | | 1 .. 1 | M | | hcustpmp |
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | CST | |
| hl7:assignedCustodian | | 1 .. 1 | M | | hcustpmp |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:representedCustodianOrganization | | 0 .. 1 | | | hcustpmp |
| | Beispiel | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name | | | |














| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------------|-----|--------|------|--|-------------|
| | | | | <pre><representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/> <name>Internistische Praxis Dr. Abt</name> </representedCustodianOrganization></pre> | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| h17:id | II | 0 .. * | | | hcustpmp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 1 .. 1 | M | | hcustpmp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 .. * | | | hcustpmp |
| h17:addr | AD | 0 .. 1 | | | hcustpmp |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | | von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC) | |
| h17:legalAuthenticator | | 0 .. 1 | | | (CDA...ent) |
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | LA | |
| @contextControlCode | | 0 .. 1 | F | OP | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|------|--------|------|--|-------------|
| hl7:time | TS | 1 .. 1 | R | | (CDA...ent) |
| hl7:signatureCode | CS | 1 .. 1 | R | | (CDA...ent) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC) | |
| hl7:assignedEntity | | 1 .. 1 | R | | (CDA...ent) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) | |
| hl7:id | II | 1 .. * | R | | (CDA...ent) |
| hl7:addr | AD | 0 .. 1 | R | | (CDA...ent) |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | R | | (CDA...ent) |
| hl7:assignedPerson | | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 .. 1 | M | | (CDA...ent) |
| hl7:representedOrganization | | 0 .. 1 | | | (CDA...ent) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------|------|---------|------|--|-------------|
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (CDA...ent) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | (CDA...ent) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (CDA...ent) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | (CDA...ent) |
| Eingefügt | | 0 ... 1 | | von 1.2.276.0.76.10.2019 CDA authenticator (DYNAMIC) | |
| hl7:authenticator | | 0 ... 1 | | | (CDA...ent) |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | AUTHEN | |
| hl7:time | TS | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
| hl7:signatureCode | CS | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC) | |
| hl7:assignedEntity | | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|------|---|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| hl7:id | II | 1 ... * | R | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | R | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | R | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| hl7:assignedPerson | | 1 ... 1 | M | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | | | | | | | | | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | | | | | | | | | | | | | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | | | | | | | | | | | | | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | | | | | | | | | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | | | | | | | | | | | | | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | | | | | | | | | | | | | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>☉ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>● Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>● BSNR</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>● Apotheken-IDF</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td>● Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> | | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| ☉ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | (CDA...ent) | | | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--------|--|------|--------------|-------------|
|  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (CDA...ent) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | (CDA...ent) |
| Eingefügt von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 <i>Pflegearzt (Kurator)</i> (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:participant | | 0 ... * | | | (CDA...ent) |
|  medmgmt-dataelement-1313  Kurator  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10901 <i>ParticipationType</i> (DYNAMIC) | | | |
| @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP | |
| hl7:functionCode | CE | 0 ... 1 | | | (CDA...ent) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:time | IVL_TS | 0 ... 1 | | | (CDA...ent) |
| hl7:associatedEntity | | 1 ... 1 | R | | (CDA...ent) |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19313 <i>RoleClassAssociative</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (CDA...ent) |












| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------|--|--------|------|--|--|
| |  medmgmt-dataelement-1328 medmgmt-dataelement-1314 | | |  Institutskennzeichen Krankenhaus  LANR |  Datensatz eMedikation v2019  Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:code | CE | 0 .. 1 | | | (CDA...ent) |
| | CONF | | | muss aus der Konzeptdomäne "RoleCode" gewählt werden oder @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.5.111" sein | |
| hl7:addr | AD | 0 .. * | | | (CDA...ent) |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | (CDA...ent) |
| |  medmgmt-dataelement-1324 medmgmt-dataelement-1325 | | |  Telefonnummer  E-Mail |  Datensatz eMedikation v2019  Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:associatedPerson | | 0 .. 1 | | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 CDA Person (DYNAMIC) | (CDA...ent) |
| hl7:scopingOrganization | | 0 .. 1 | | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 CDA Organization (DYNAMIC) | (CDA...ent) |
| |  medmgmt-dataelement-1326 | | |  Organisation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:component | | | | | (CDA...ent) |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 0 .. 1 | F | true | |
| hl7:structuredBody | | | | | (CDA...ent) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----|--------|------|---|-----------------|
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | DOCBODY | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:component | | 0 .. 1 | R | Section: Leistungserbringer-Kommentar Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3133 <i>Leistungserbringer-Kommentar</i> (DYNAMIC) | (CDA... ent) |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.3133']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:component | | 0 .. 1 | R | Section: Clinical Information Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 <i>Klinische Parameter (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (CDA... ent) |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:component | | 0 .. 1 | R | Section: Allergien und Unverträglichkeiten Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 <i>Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (CDA... ent) |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:component | | 0 .. 1 | R | Section: Gesundheitsbelange | (CDA... ent) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|----|--------|------|---|-------------|
| | | | | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 <i>Gesundheitsbelange (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:component | | 1 .. 1 | M | Section: Medikationsplan Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 <i>Aktuelle Medikation (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (CDA...ent) |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15']] and hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.3041']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:component | | 0 .. 1 | | Section: Sozialanamnese Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 <i>Sozialanamnese (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (CDA...ent) |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| @contextConductionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:component | | 0 .. 1 | R | Section: Hinweise Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3042 <i>Wichtige Angaben</i> (DYNAMIC) | (CDA...ent) |
| wo [hl7:section [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.3042']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |















| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------|----|---------|------|--------------|-------|
| @contextConductionInd | bl | 1 ... 1 | F | true | |

3.2.11  CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005-09-07 ref ad1bbr-

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.10.12.151 ref ad1bbr- | Gültigkeit | 2005-09-07 |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | |
| Name | CDAOrganization | Anzeigename | CDA Organization |
| Beschreibung | Template CDA Organization (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 5 Konzepten | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1327 |  BSNR |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1329 |  Institutskennzeichen Apotheke |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1330 |  Apotheken-IDF |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1319 |  Adresse |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1331 |  Name Institution |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | | | Version |

















2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 Containment  Pflegearzt (Kurator) 2019-08-22 11:16:37
 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1   CDA Medikationsmanagement 2018-10-13 16:20:07

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------------|-----|--------|------|---|--------------|
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| h17:id | II | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1327  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1329  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1330  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1331  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| h17:addr | AD | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1319  Adresse  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:standardIndustryClassCode | CE | 0 .. 1 | |  SHALL be chosen from domain OrganizationIndustryClass | (CDA ...ion) |
| h17:asOrganizationPartOf | | 0 .. 1 | | | (CDA ...ion) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------------|--------|---|------|--|-----------------|
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PART | |
| hl7:id | II | 0 .. * | R | | (CDA ...ion) |
| hl7:code | CE | 0 .. 1 | | | (CDA ...ion) |
| | CONF | muss aus der Konzeptdomäne "RoleCode" gewählt werden | | | |
| hl7:statusCode | CS | 0 .. 1 | | | (CDA ...ion) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15999 RoleStatus (DYNAMIC) | | | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 0 .. 1 | | | (CDA ...ion) |
| hl7:wholeOrganization | | 0 .. 1 | | | (CDA ...ion) |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| hl7:name | ON | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| hl7:addr | AD | 0 .. * | | | (CDA ...ion) |
| hl7:standardIndustryClassCode | CE | 0 .. 1 | | 🇺🇸 SHALL be chosen from domain OrganizationIndustryClass | (CDA ...ion) |

3.2.12  CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005-09-07 ref ad1bbr-



| Id | 2.16.840.1.113883.10.12.152 ref ad1bbr- | Gültigkeit | 2005-09-07 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|--------------------------|--|---|--|---------------------|--|---|---|---------------------|--|--|
| Status |  Aktiv | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | |
| Name | CDA Person | Anzeigename | CDA Person | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Template CDA Person (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1315</td> <td> Name</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1315 |  Name |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1315 |  Name |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25</td> <td>Containment</td> <td> Pflegearzt (Kurator)</td> <td>2019-08-22 11:16:37</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | Containment |  Pflegearzt (Kurator) | 2019-08-22 11:16:37 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | Containment |  Pflegearzt (Kurator) | 2019-08-22 11:16:37 | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----|---------|------|--------------|-------------|
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| h17:name | PN | 0 ... * | | | (CDA...son) |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------|----|------|------|--------------------------|-----------------------------|
| | 🎯 | | | medmgmt-dataelement-1315 | Name |
| | | | | | Datensatz eMedikation v2019 |

3.2.13  CDA confidentialityCode 1.2.276.0.76.10.90007 - 2012-12-12 ref hl7de-


| | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|--------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90007 ref hl7de- | Gültigkeit | 2012-12-12 | | |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | | | |
| Name | CDAconfidentialityCode | Anzeigename | CDA confidentialityCode | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | | |
| | | | Version | | |
| | | | 2018-10-13 16:20:07 | | |
| Beispiel | Beispiel <pre><confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/></pre> | | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:confidentialityCode | CE | 1 ... 1 | M | | (CDA...ode) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentialityKind (DYNAMIC) | | | |

3.2.14  CDA countryCode (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22 - 2019-06-25 14:11:57

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.22 | Gültigkeit | 2019-06-25 14:11:57 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|---------------|
| | | | | Andere Versionen mit dieser Id: | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> CDAcountryCode vom 2019-06-25 14:11:42 | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | |
| Name | CDAcountryCode | Anzeigename | | CDA countryCode (medmgmt) | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (2012-03-11) ref hl7de- | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><countryCode code="DEU" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.171"/></pre> | | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:countryCode | CV | 1 ... 1 | M | Länderkennzeichen aus dem ISO Standard 3166. Siehe https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html | (CDA ... ode) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.171 Country (DYNAMIC) | | | |

3.2.15 CDA effectiveTime 1.2.276.0.76.10.90006 - 2012-12-12 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90006 ref hl7de- | Gültigkeit | 2012-12-12 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | CDAeffectiveTime | Anzeigename | CDA effectiveTime |
| Beschreibung | Datum an dem das Dokument erzeugt wurde, Angabe bis auf die Sekunde genau | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | |

| Benutzt von | als | Name | Version |
|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

Beispiel

```
<effectiveTime value="20120611083422"/>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|-----------------|---------|------|--------------|------------------|
| hl7:effectiveTime | TS.DATETIME.MIN | 1 ... 1 | M | | (CDA ... ime) |

3.2.16 CDA id 1.2.276.0.76.10.90004 - 2012-12-12 ref hl7de-

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90004 ref hl7de- | Gültigkeit | 2012-12-12 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | CDAid | Anzeigename | CDA id |

Beschreibung

The clinical document `id` element is an instance identifier data type. The root attribute is an OID. The root uniquely identifies the scope of the extension. The root and extension attributes uniquely identify the document. This is not equal to service identification of the serviceEvent

Klassifikation CDA Header Level Template

Offen/Geschlossen Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

Beispiel

```
<id extension="1293878605987" root="2.16.528.1.1007.3.2.1111.21.1"/>
```











Beispiel

```
<id extension="j86574633" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.99.23444.17"/>
```




Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------|----|--------|------|--------------|---------|
| hl7:id | II | 1 .. 1 | M | | (CDAid) |












3.2.17  CDA languageCode 1.2.276.0.76.10.90008 - 2012-03-11 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.90008 ref hl7de- | Gültigkeit | 2012-03-11 | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---------------------|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | |
| Name | CDAlanguageCode | Anzeigename | CDA languageCode | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1109</td> <td> Sprachkennzeichen</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1109 |  Sprachkennzeichen |  Datensatz eMedikation v2019 | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1109 |  Sprachkennzeichen |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><languageCode code="de-DE"/></pre> | | | | | | | | | |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|---------|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:languageCode | CS.LANG | 1 ... 1 | M | | (CDA...ode) |
|  medmgmt-dataelement-1109  Sprachkennzeichen  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |

3.2.18  CDA realmCode 1.2.276.0.76.10.90002 - 2013-07-15 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.90002 ref hl7de- | Gültigkeit | 2013-07-15 | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|------------------------|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | |
| Name | CDArealmCode | Anzeigename | CDA realmCode | | | | | | | |
| Beschreibung |  Country specific context | | | | | | | | | |
| Label | CDArealmCode | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1108</td> <td> Länderkennzeichen (für die Nutzung)</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1108 |  Länderkennzeichen (für die Nutzung) |  Datensatz eMedikation v2019 | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1108 |  Länderkennzeichen (für die Nutzung) |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | |
| Alles ausklappen Alles einklappen | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|---|----------------------|------|--------------|--------------|
| hl7:realmCode | CS | 1 ... 1 | M | | CDAr... Code |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 📍 medmgmt-dataelement-1108 📍 Länderkennzeichen (für die Nutzung) 📍 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @code | cs | 1 ... 1 | R | | |
| | CONF | @code muss "DE" sein | | | |
| Beispiel | <code><realmCode code="DE"/></code> | | | | |

3.2.19 📍 CDA setId and versionNumber 1.2.276.0.76.10.90009 - 2012-12-12 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.90009 ref hl7de- | Gültigkeit | 2012-12-12 | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-----------|--------------------------|---|--|--|------------------------|--|
| Status | 📍 Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | |
| Name | CDAsetIdversionNumber | Anzeigename | CDA setId and versionNumber | | | | | | | |
| Beschreibung | 🇺🇸 setId and versionNumber SHALL both be present, even if the document is the original (first) one | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1107</td> <td>📍 Versionsnummer des Formats</td> <td>📍 Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1107 | 📍 Versionsnummer des Formats | 📍 Datensatz eMedikation v2019 | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1107 | 📍 Versionsnummer des Formats | 📍 Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td>📍 CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion | 📍 CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion | 📍 CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | |
| Beispiel | Beispiel | | | | | | | | | |

```
<art:placeholder>
  <setId extension="32123" root="2.16.528.1.1007.3.2.1111.20.1"/>
  <versionNumber value="1"/>
</art:placeholder>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|---------|--------|------|--------------|-------------|
| hl7:setId | II | 1 .. 1 | M | | (CDA...ber) |
| hl7:versionNumber | INT.POS | 1 .. 1 | M | | (CDA...ber) |

medmgmt-dataelement-1107
 Versionsnummer des Formats
 Datensatz eMedikation v2019

3.2.20 CDA title 1.2.276.0.76.10.90005 - 2012-12-12 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90005 ref hl7de- | Gültigkeit | 2012-12-12 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | CDAtitle | Anzeigename | CDA title |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion | CDA Medikationsmanagement |
| | | | Version 2018-10-13 16:20:07 |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------|----|--------|------|--------------|-------------|
| hl7:title | ST | 0 .. 1 | | | (CDA...tle) |

3.2.21  CDA typeId 1.2.276.0.76.10.90003 - 2013-07-15 ref hl7de-

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90003 ref hl7de- | Gültigkeit | 2013-07-15 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | CDAtypeId | Anzeigename | CDA typeId |

Beschreibung

 The clinical document typeId identifies the constraints imposed by CDA R2 on the content, essentially acting as a version identifier.

The @root and @extension values of this element are specified as shown in the *example* below.

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Label | CDAtypeId | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | |

| Benutzt von | als | Name | Version |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

Beispiel










```
<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
```

Alles ausklappen

Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------|----|---------|------|-----------------------|-----------|
| hl7:typeId | II | 1 ... 1 | M | | CDAtypeId |
| @extension | | 1 ... 1 | F | POCD_HD000040 | |
| @root | | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.1.3 | |

3.2.22  Klinische Parameter (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 - 2019-02-09

| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | Gültigkeit | 2019-02-09 | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------|---|---|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | |
| Name | ClinicalInformationmedmgmt | Anzeigename | Klinische Parameter (medmgmt) | | | | | |
| Beschreibung | Klinische Parameter | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1023</td> <td> Klinische Parameter</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1023 |  Klinische Parameter |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1023 |  Klinische Parameter |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 4 Templates | | | | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version | | | | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | |
| | Benutzt | als | Name | Version | | | | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 | Containment |  Körpergewicht (medmgmt) | DYNAMIC | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3039 <i>Klinische Parameter</i> (2017-07-01) ref pmp- | | | | | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | | | | |
| Beispiel | Beispiel | | | | | | | |

```

<section classCode="DOCSECT">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10"/>
  <code code="55752-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Clinical information"/>
  <title>Klinische Parameter</title>
  <text>




    <list>

      <item ID="gew">Körpergewicht: 89 kg</item>
      <item ID="gro">Körpergröße: 181 cm</item>
      <item ID="skrea">Kreatinin: 1,3 mg/dl</item>
    </list>
  </text>
  <entry typeCode="DRIV">

    <!-- .. -->

  </entry>
</section>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|------|--------|------|---|-------------|
| h17:section | | 0 .. * | | | (Cli...gmt) |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  medmgmt-dataelement-1023  Klinische Parameter  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | DOCSECT | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN | |
| h17:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Cli...gmt) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | |
| h17:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Cli...gmt) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 55752-0 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|---------|---|------|--|-------------|
| @codeSystem | | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:title | ST | 1 ... 1 | M | | (Cli...gmt) |
| | CONF | Elementinhalt muss "Klinische Parameter" sein | | | |
| hl7:text | SD.TEXT | 1 ... 1 | M | | (Cli...gmt) |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 <i>Körpergewicht (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (Cli...gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 <i>Körpergröße (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (Cli...gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 <i>Kreatinin (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (Cli...gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| Eingefügt | | 0 ... * | R | von 1.2.276.0.76.10.90034 <i>Erweiterung Vorhabenerweiterung (2019-02-09)</i> | |
| medmgmt:extension | | 0 ... * | R | | (Cli...gmt) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> Ⓞ medmgmt-dataelement-1220 🟡 Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1226 🟡 Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|-----|--------|------|--|-----------------|
| | | | | medmgmt-dataelement-1223 Vorhabenspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation Datensatz eMedikation v2019 | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | |
| medmgmt:extension | | | | | (Cli... gmt) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Cli... gmt) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1227 Identifikation Datensatz eMedikation v2019 | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| medmgmt:extension | | | | | (Cli... gmt) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Cli... gmt) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1228 Wert Datensatz eMedikation v2019 | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |












3.2.23 Leistungsportler 1.2.276.0.76.10.4297 - 2019-02-09 ref hl7de-

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4297 ref hl7de- | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Competitiveathlete | Anzeigename | Leistungsportler |

| Beschreibung | Leistungssportler | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---------------------------|---------------------|--|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4297 | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1117</td> <td> Leistungssportler</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1117 | Leistungssportler | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1117 | Leistungssportler | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23</td> <td>Containment</td> <td> Sozialanamnese (medmgmt)</td> <td>2019-07-01 18:11:55</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment | Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment | Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 <i>CDA Act (2005-09-07)</i> ref ad1bbr- | | | | | | | | | | | | | |
| | Kopie: Template 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.4 <i>Leistungssportler (2018-09-06)</i> ref hauskomet- | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4297"/> <code code="COMPTATHL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1"/> <text> <reference value="#coal"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low nullFlavor="UNK"/> </effectiveTime> <value xsi:type="BL" value="false"/> </observation></pre> | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Alles ausklappen Alles einklappen </div> | | | | | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|--------|------|--|-------------|
| hl7:observation | | | | | (Com...ete) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> medmgmt-dataelement-1117 Leistungssportler Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Com...ete) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4297 | |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Com...ete) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | COMPTATHL | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 (hauskomet-codesystem-1) | |
| hl7:text | ED | 1 .. 1 | M | Reference in den Text der Section | (Com...ete) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | M | | (Com...ete) |
| @value | | 1 .. 1 | F | #coal | |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Com...ete) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 .. 1 | R | | (Com...ete) |
| hl7:value | BL | 1 .. 1 | R | | (Com...ete) |

3.2.24  Kreatinin (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 - 2019-02-09

| | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | Gültigkeit | 2019-02-09 | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | |
| Name | Creatininemedgmt | Anzeigename | Kreatinin (medmgmt) | |
| Beschreibung | Kreatinin | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 3 Konzepte | | | |
| | Id | Name | Datensatz | |
| | medmgmt-dataelement-1131 |  Datum |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1130 |  Wert |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| medmgmt-dataelement-1129 |  Kreatinin |  Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | Containment |  Klinische Parameter (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion |  Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4017 <i>Kreatinin</i> (2014-11-01) ref pmp- | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | |

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9"/>
  <code code="2160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Creatinine"/>
  <text>

    <reference value="#skrea"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime>

    <low value="20190715123453"/>
  </effectiveTime>
  <value xsi:type="PQ" value="1.3" unit="mg/dl"/>
</observation>
```

Alles ausklappen























Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|------|--------|------|--|-----------------|
| hl7:observation | | 0 .. * | | | (Cre... gmt) |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> 📍 medmgmt-dataelement-1129 🟡 Kreatinin 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Cre... gmt) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | |
| hl7:id | II | 0 .. * | R | | (Cre... gmt) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Cre... gmt) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 2160-0 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|---|-----------------------------|------|---|-------------|
| @codeSystem | | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | | (Cre...gmt) |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | Reference in den Text der Section | (Cre...gmt) |
| | Beispiel | <reference value="#skrea"/> | | | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | (Cre...gmt) |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 ... 1 | M | | (Cre...gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1131 Datum Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| hl7:value | PQ | 1 ... 1 | R | | (Cre...gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1130 Wert Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| | CONF | @unit ist "mg/dl" | | | |
| | CONF | @unit ist "µmol/l" | | | |
| | CONF | @unit ist "mmol/l" | | | |
| Eingefügt | | 0 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 ... 1 | R | | (Cre...gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1189 Kennzeichen BMP Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1334 Erweiterung Druckkennzeichen Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1209 Druckkennzeichen Geschlecht Datensatz eMedikation v2019 | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|-----|--------|------|---|-------------|
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 .. 1 | M | | (Cre...gmt) |
| @value | bl | 1 .. 1 | R | | |

















3.2.25  **Kritikalität 1.2.276.0.76.10.4259 - 2017-06-04** ref hl7de-




| Id | 1.2.276.0.76.10.4259 ref hl7de- | Gültigkeit | 2017-06-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------|---------|----------------------|-------------|---|------------|----------------------|---|--|------------|---|---|---|------------|--|---|---|------------------------|--|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Criticality | Anzeigenname | Kritikalität | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kritikalität der Allergie/Unverträglichkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4257</td> <td>Containment</td> <td> Allergie/Unverträglichkeit Observation</td> <td>2017-06-04</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4256</td> <td></td> <td> Allergie/Unverträglichkeit Concern Act</td> <td>2017-06-04</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16</td> <td></td> <td> Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt)</td> <td>2019-02-10</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.4257 | Containment |  Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 | 1.2.276.0.76.10.4256 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |  |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4257 | Containment |  Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4256 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |  |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alles ausklappen | | Alles einklappen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|------|--------|------|---|-------------|
| hl7:observation | | 1 .. 1 | | | (Cri...ity) |
| @classCode | CS | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | CS | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | | | (Cri...ity) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4259 | |
| hl7:id | | 0 .. 1 | | | (Cri...ity) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | R | | (Cri...ity) |
| @code | | 0 .. 1 | F | 82606-5 | |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| @displayName | | 0 .. 1 | F | Allergy or intolerance criticality | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Cri...ity) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | | | (Cri...ity) |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Cri...ity) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | TS | 0 .. 1 | | | (Cri...ity) |
| hl7:value | CD | 1 .. 1 | R | | (Cri...ity) |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------|------|------|------|---|-------|
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.20549 <i>CriticalityObservationValue</i> (DYNAMIC) | |

3.2.26 Datenübermittlung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 - 2019-08-22 10:32:07

| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 | Gültigkeit | 2019-08-22 10:32:07 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|--|---------------------|--|---|---|---------------------|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | |
| Name | DataTransferFlagMedmgmt | Anzeigename | Datenübermittlung | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gibt Auskunft darüber, ob der Patient der Übermittlung der Daten zugestimmt hat oder nicht. | | | | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1336</td> <td> Übermittlung Sozialanamnese</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1336 |  Übermittlung Sozialanamnese |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1336 |  Übermittlung Sozialanamnese |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23</td> <td>Containment</td> <td> Sozialanamnese (medmgmt)</td> <td>2019-07-01 18:11:55</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24"/> <hl7:code code="Transfer"/> <hl7:statusCode code="completed"/> </hl7:observation></pre> | | | | | | | | | | | | | |

| <pre><hl7:value value="false"/> </hl7:observation></pre> | | | | | |
|--|------|---------|------|---|-------------|
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:observation | | 1 ... 1 | R | | (Dat...gmt) |
|  medmgmt-dataelement-1336  Übermittlung Sozialanamnese  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Dat...gmt) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 | |
| hl7:code | CE | 1 ... 1 | M | | (Dat...gmt) |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | Transfer | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | (Dat...gmt) |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:value | BL | 1 ... 1 | M | | (Dat...gmt) |

3.2.27 Datenerfassung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.2 - 2018-11-02

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.2 | Gültigkeit | 2018-11-02 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Datenerfassung | Anzeigename | Datenerfassung |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Beschreibung | Angaben zur Datenerfassung: Ersterfassungsdatum, Datum letzte Änderung | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 2 Konzepte | | | |
| | Id | Name | Datensatz | |
| | medmgmt-dataelement-1092 | Datum des Eintrags | Datensatz eMedikation v2019 | |
| medmgmt-dataelement-1192 | Änderungsdatum | Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.321 <i>CDA Participant (Body)</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><participant typeCode="ENT"> <time> <low value="20181101"/> <high value="20181102"/> </time> <participantRole nullFlavor="NA"/> </participant></pre> | | | |
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> Alles ausklappen Alles einklappen </div> | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|---|---------|------|-----------------------|-------------|
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | ENT | |
| @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP | |
| hl7:time | IVL_TS | 0 ... 1 | | | (Dat...ung) |
| hl7:low | IVXB_TS | | | Ersterfassungsdatum | (Dat...ung) |
| | medmgmt-dataelement-1092 Datum des Eintrags Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| hl7:high | IVXB_TS | | | Datum letzte Änderung | (Dat...ung) |
| | medmgmt-dataelement-1192 Änderungsdatum Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| hl7:participantRole | | 1 ... 1 | | | (Dat...ung) |
| @nullFlavor | cs | 1 ... 1 | F | NA | |

3.2.28 Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2017-06-04 ref pmp-

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90023 ref pmp- | Gültigkeit | 2017-06-04 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status | Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Einnahmedauer vom 2011-12-19 |
| Name | Einnahmedauer | Anzeigename | Einnahmedauer |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | |

| Id | Name | Datensatz |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1153 | Einnahmedauer | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |


Beziehung Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90023 *Einnahmedauer* (2011-12-19) [ref](#) [pmp-](#)

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-------------------|---------|------|---|--------------|
| <i>Auswahl</i> | | ... 1 | | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> hl7:effectiveTime[hl7:low hl7:high] hl7:effectiveTime[hl7:width] hl7:effectiveTime[@nullFlavor='NI'] | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | ... 1 | C | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer, hier spezifisches Intervall von bis | (Ein... uer) |
| wo [hl7:lowoder hl7:high] | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1153 Einnahmedauer Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @xsi:type | | 0 ... 1 | F | IVL_TS | |
| Beispiel | Intervall bekannt | | | | |









| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|-------------|---|------|---|--------------|
| | | | | <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20130321"/> <high value="20140321"/> </effectiveTime></pre> | |
| | Beispiel | | | unbekanntes Ende-Datum <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20130321"/> <high value="UNK"/> </effectiveTime></pre> | |
| | Beispiel | | | Dauermedikation <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20130321"/> <high value="NA"/> </effectiveTime></pre> | |
| hl7:low | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | R | | (Ein... uer) |
| hl7:high | TS.DATE.MIN | 0 .. 1 | R | | (Ein... uer) |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | ... 1 | C | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer, hier Dauer | (Ein... uer) |
| wo [hl7:width] | | | | | |
| | Beispiel | | | Einnahme für zwei Wochen <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <width value="2" unit="wk"/> </effectiveTime></pre> | |
| hl7:width | PQ | 1 .. 1 | R | | (Ein... uer) |
| @unit | | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC) | | | |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------------|----|--|------|--------------|-----------------|
| h17:effectiveTime | TS | ... 1 | C | | (Ein... uer) |
| wo [<i>@nullFlavor='NI'</i>] | | | | | |
| @nullFlavor | | 1 ... 1 | F | NI | |
| Beispiel | | Keine Informationen über die Einnahmedauer <effectiveTime nullFlavor="NI"/> | | | |

3.2.29  Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023 - 2011-12-19 ref pmp-

| Id | 1.2.276.0.76.10.90023 ref pmp- | Gültigkeit | 2011-12-19 Andere Versionen mit dieser Id: | | |
|--|--|-----------------------|--|---|-----------------|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Einnahmedauer vom 2017-06-04 | | |
| Name | Einnahmedauer | Anzeigename | Einnahmedauer | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">Alles ausklappen</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Alles einklappen</div> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| h17:effectiveTime | IVL_TS | | | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer | (Ein... uer) |
| wo [1] | | | | | |
| h17:low | TS.DATE.MIN | 1 ... 1 | R | | (Ein... uer) |
| h17:high | TS.DATE.MIN | 1 ... 1 | R | | (Ein... uer) |

3.2.30  Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2018-11-01 (mpp 2018) ref pmp-

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4023 ref pmp- | Gültigkeit | 2018-11-01 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input type="radio"/> MedicationStatementSplitDose vom 2017-06-04 ▪ <input type="radio"/> MedicationStatementSplitDose vom 2014-11-01 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | mpp 2018 |
| Name | Einzeldosierungen | Anzeigename | Einzeldosierungen |
| Beschreibung | | | |
| Einzeldosierungen, Dosierschema: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt ▪ Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Ereignis (z. B: morgens, mittags, abends, zur Nacht), ggf. mit Offset ▪ Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase, ggf. mit Wiederholungsintervall ▪ Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase und Ereignis, ggf. mit Wiederholungsintervall | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4023 | | |
| Label | medssdpmp | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 1 Template | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  | |  Medikation Gruppierung (medmgmt) 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  | |  Aktuelle Medikation (medmgmt) 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | |  CDA Medikationsmanagement 2018-10-13 16:20:07 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|---------|
| Benutzt | als | Name | Version |
| 1.2.276.0.76.10.90028 | Inklusion |  Medikation Vorbedingung | DYNAMIC |

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 *CDA SubstanceAdministration* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)
 Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 (DYNAMIC) [ref ?](#)

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|-----|---------|------|---|-----------|
| hl7:substanceAdministration | | 0 ... * | | | medssdpmp |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4023 | |
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | #dosxx-{generierteID}, xx ist cm, cd, cv oder hs, z.B.: #doscm-1 | |
| Auswahl | | ... 1 | | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> hl7:effectiveTime[@value or @nullFlavor] hl7:effectiveTime[@xsi:type='EIVL_TS'] hl7:effectiveTime[@xsi:type='PIVL_TS'] hl7:effectiveTime[@xsi:type='SXPR_TS'] | |
| hl7:effectiveTime | TS | | C | Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt | medssdpmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------------------|----------|--|------|--|-----------|
| wo [<i>@value or @nullFlavor</i>] | | | | | |
| | Beispiel | Einnahme einmalig <code><effectiveTime value="20170404"/></code> | | | |
| | Beispiel | Einnahmezeitpunkt unbekannt <code><effectiveTime nullFlavor="UNK"/></code> | | | |
| h17:effectiveTime | EIVL_TS | | C | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Ereignis, ggf. mit Offset | medssdpmp |
| wo [<i>@xsi:type='EIVL_TS'</i>] | | | | | |
| | Beispiel | mittags 10 mg <code><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"></code> <code><event code="CD"/></code> <code></effectiveTime></code> <code><doseQuantity value="10" unit="mg"/></code> | | | |
| | Beispiel | morgens 1 (Stück) <code><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"></code> <code><event code="CM"/></code> <code></effectiveTime></code> <code><doseQuantity value="1" unit="{Stück}"/></code> | | | |
| | Beispiel | abends 1-2 (Hübe) <code><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"></code> <code><event code="CV"/></code> <code></effectiveTime></code> <code><doseQuantity></code> <code><low value="1" unit="{Hübe}"/></code> <code><high value="2" unit="{Hübe}"/></code> <code></doseQuantity></code> | | | |
| | Beispiel | 30 Minuten nach dem Abendessen 1 Stück <code><effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"></code> <code><event code="PCV"/></code> <code><offset value="30" unit="min"/></code> <code></effectiveTime></code> <code><doseQuantity value="1" unit="{Stück}"/></code> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|-----------------------------------|----------|--|------|---|-----------|--|
| hl7:event | CS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp | |
| @code | cs | 1 .. 1 | R | | | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.2 <i>TimingEvent</i> (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:offset | CS | 0 .. 1 | | | medssdpmp | |
| @unit | cs | 1 .. 1 | R | | | |
| | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 <i>Zeiteinheiten (UCUM)</i> (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:effectiveTime | PIVL_TS | | C | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase, ggf. mit Wiederholungsintervall | medssdpmp | |
| wo [<i>@xsi:type='PIVL_TS'</i>] | | | | | | |
| | Beispiel | <p>Jeden Donnerstag 1 Stück</p> <pre> <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS"> <phase value="20180913"/> <!-- Jeden Donnerstag (der 13.9.2018 ist der erste Donnerstag innerhalb der Gebrauchsperiode) --> --> <period value="1" unit="wk"/> <!-- Wiederholperiode 1 Woche --> </effectiveTime> <doseQuantity value="1" unit="{Stück}"/> </pre> | | | | |
| hl7:phase | IVL_TS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp | |
| hl7:period | PQ | 0 .. 1 | | | medssdpmp | |
| @unit | cs | 1 .. 1 | R | | | |







| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----------|--|------|--|-----------|
| | CONF | | | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC) | |
| h17:effectiveTime | SXPR_TS | | C | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ausgedrückt als Phase und Ereignis, ggf. mit Wiederholungsintervall | medssdpmp |
| wo [@xsi:type='SXPR_TS'] | | | | | |
| | Beispiel | <p>Jeden Donnerstag 30 Minuten vor dem Frühstück</p> <pre> <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS"> <comp xsi:type="PIVL_TS"> <phase value="20180913"/> <!-- Jeden Donnerstag (der 13.9.2018 ist der erste Donnerstag innerhalb der Gebrauchsperiode) --> <period value="1" unit="wk"/> <!-- Wiederholperiode 1 Woche --> </comp> <comp xsi:type="EIVL_TS" operator="A"> <!-- 30 Minuten vor dem Frühstück --> <event code="ACM"/> <offset value="30" unit="min"/> </comp> </effectiveTime> </pre> | | | |
| h17:comp | PIVL_TS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| wo [@xsi:type='PIVL_TS'] | | | | | |
| h17:phase | IVL_TS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| h17:period | PQ | 0 .. 1 | | | medssdpmp |
| @unit | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | | | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 Zeiteinheiten (UCUM) (DYNAMIC) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|---|--|------|--------------|-----------|
| hl7:comp | EIVL_TS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| wo [@xsi:type='EIVL_TS'] | | | | | |
| @operator | cs | 1 .. 1 | F | A | |
| hl7:event | CS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| @code | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.463 <i>TimingEvent</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:offset | CS | 0 .. 1 | | | medssdpmp |
| @unit | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 <i>Zeiteinheiten (UCUM)</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:doseQuantity | IVL_PQ | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| Beispiel | 25 mg <code><doseQuantity value="25" unit="mg"/></code> | | | | |
| Beispiel | 1 bis 2 Tabletten <code><doseQuantity></code> <code><low value="1" unit="{tablet}"/></code> <code><high value="2" unit="{tablet}"/></code> <code></doseQuantity></code> | | | | |
| Beispiel | 1 Tablette (mit Translation) <code><doseQuantity value="1" unit="{tablet}"></code> <code><translation code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.4" displayName="Stück"/></code> <code></doseQuantity></code> | | | | |
| Beispiel | Nur textliche Beschreibung der Dosis | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|------|--------|------|---|-----------|
| | | | | <pre><doseQuantity nullFlavor="OTH"> <translation> <originalText> <reference value="#text-ref-1"/> </originalText> </translation> </doseQuantity></pre> | |
| hl7:translation | CE | 0 .. 1 | R | | medssdpmp |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.23 <i>BMP Dosiereinheit</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:consumable | | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:manufacturedProduct | | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | | | medssdpmp |
| @nullFlavor | cs | 1 .. 1 | F | NA | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90028 <i>Medikation Vorbedingung</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:precondition | | 0 .. 1 | R | | medssdpmp |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | PRCN | |
| hl7:criterion | | 1 .. 1 | R | | medssdpmp |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN.CRT | |
| hl7:code | CD | 0 .. 1 | | | medssdpmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|------------------|------|---|------|-------------------------------------|-----------|--|
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.453 <i>Vorbedingungen Medikation</i> (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | R | | medssdpmp | |
| hl7:text | ED | 0 ... 1 | | | medssdpmp | |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | medssdpmp | |
| @value | | 1 ... 1 | R | #prec-{generierteID}, z.B.: #prec-1 | | |

3.2.31  Erwarteter Geburtstermin 1.2.276.0.76.10.4255 - 2017-06-04 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4255 ref hl7de- | Gültigkeit | 2017-06-04 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | ExpectedDeliveryDate | Anzeigename | Erwarteter Geburtstermin |
| Beschreibung | Erwarteter Geburtstermin | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4255 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| | Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von | als | Name Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | Containment  | Status Schwangerschaft (medmgmt) 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11  |  | Gesundheitsbelange (medmgmt) 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |  | CDA Medikationsmanagement 2018-10-13 16:20:07 |

Beziehung
 Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)
 Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 *Pregnancy Observation* (DYNAMIC) [ref epsos-](#)

Beispiel









```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4255"/>
  <code code="11778-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Delivery date Estimated"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="TS" value="20170801"/>
</observation>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|------|--------|------|---|-----------------|
| hl7:observation | | 1 .. 1 | | | (Exp ...ate) |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | | | (Exp ...ate) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4255 | |
| hl7:id | | 0 .. 1 | | | (Exp ...ate) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Exp ...ate) |
| @code | | 1 .. 1 | F | 11778-8 | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Exp ...ate) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | | | (Exp ...ate) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|------|---------|------|--------------|-----------------|
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | (Exp ...ate) |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | TS | 0 ... 1 | | | (Exp ...ate) |
| hl7:value | TS | 1 ... 1 | R | | (Exp ...ate) |

3.2.32 Erweiterung Druckkennzeichen 1.2.276.0.76.10.90033 - 2019-02-09

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90033 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Extensionprintflag | Anzeigename | Erweiterung Druckkennzeichen |
| Beschreibung | Erweiterung Druckkennzeichen | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 3 Konzepten | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1189 |  Kennzeichen BMP |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1334 |  Erweiterung Druckkennzeichen |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1209 |  Druckkennzeichen Geschlecht |  Datensatz eMedikation v2019 |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 12 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | Inklusion  | Gesundheitsbelange (medmgmt) |
| | | | Version |
| | | | 2019-02-09 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | Inklusion | Status Schwangerschaft (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | Inklusion | Stillzeit (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | Inklusion | CDA recordTarget (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.7 | Inklusion | Körpergewicht (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | | Klinische Parameter (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.8 | Inklusion | Körpergröße (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.9 | Inklusion | Kreatinin (medmgmt) | 2019-02-09 |

Beispiel

```
<medmgmt:extension url="http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2">
  <medmgmt:valueBoolean value="false"/>
</medmgmt:extension>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen












| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|----|------|------|--------------|-------------|
| medmgmt:extension | | | | | (Ext...lag) |

- medmgmt-dataelement-1189 Kennzeichen BMP Datensatz eMedikation v2019
- medmgmt-dataelement-1334 Erweiterung Druckkennzeichen Datensatz eMedikation v2019
- medmgmt-dataelement-1209 Druckkennzeichen Geschlecht Datensatz eMedikation v2019

@url url 1 .. 1 F http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|----|--------|------|--------------|-------------|
| medmgmt:valueBoolean | | 1 .. 1 | M | | (Ext...lag) |
| @value | bl | 1 .. 1 | R | | |

3.2.33 Erweiterung Vorhabenerweiterung 1.2.276.0.76.10.90034 - 2019-02-09

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90034 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Extensionprojectspec | Anzeigename | Erweiterung Vorhabenerweiterung |
| Beschreibung | Erweiterung Druckkennzeichen | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 5 Konzepte | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1228 |  Wert |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1227 |  Identifikation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1220 |  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1226 |  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1223 |  Vorhabenspezifische Erweiterung/Zusatzinformation |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 7 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | | | Version |

| | | | | |
|---|-----------|--|---|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.10 | Inklusion | | Klinische Parameter (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | Inklusion | | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | Inklusion | | CDA recordTarget (medmgmt) | 2019-02-09 |

Beispiel






Beispiel

```
<medmgmt:extension url="http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2">
  <medmgmt:extension url="http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2">
    <medmgmt:valueString value="Typ der vorhabenspezifischen Zusatzinformation"/>
  </medmgmt:extension>
  <medmgmt:extension url="http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2">
    <medmgmt:valueString value="Wert der vorhabenspezifischen Zusatzinformation"/>
  </medmgmt:extension>
</medmgmt:extension>
```


Alles ausklappen








































Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----|------|------|---|-----------------------------|
| medmgmt:extension | | | | | (Ext...pec) |
| medmgmt-dataelement-1220 | | | | Vorhabenspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1226 | | | | Vorhabenspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1223 | | | | Vorhabenspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|--------|------|---|-------------|
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | |
| medmgmt:extension | | | | | (Ext...pec) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Ext...pec) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">  medmgmt-dataelement-1227  Identifikation  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| medmgmt:extension | | | | | (Ext...pec) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Ext...pec) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">  medmgmt-dataelement-1228  Wert  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |

3.2.34  Hauskomet Kategorie 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 - 2018-11-20 ref hauskomet-

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 ref hauskomet- | Gültigkeit | 2018-11-20 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | HauskometKategorie | Anzeigenname | Hauskomet Kategorie |
| Beschreibung | Hauskomet Kategorie für diesen Eintrag | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |

| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|-----------|--------------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|------------|--|---|---|------------------------|
| Assoziiert mit | <p>Assoziiert mit 3 Konzepte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 264 936 304">Id</th> <th data-bbox="943 264 1778 304">Name</th> <th data-bbox="1785 264 2067 304">Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 309 936 368">medmgmt-dataelement-1184</td> <td data-bbox="943 309 1778 368"> Letztes Änderungsdatum</td> <td data-bbox="1785 309 2067 368"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 373 936 432">medmgmt-dataelement-1182</td> <td data-bbox="943 373 1778 432"> Kategorie</td> <td data-bbox="1785 373 2067 432"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 437 936 496">medmgmt-dataelement-1183</td> <td data-bbox="943 437 1778 496"> Kategorie</td> <td data-bbox="1785 437 2067 496"> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1184 |  Letztes Änderungsdatum |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1182 |  Kategorie |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1183 |  Kategorie |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1184 |  Letztes Änderungsdatum |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1182 |  Kategorie |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1183 |  Kategorie |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | <p>Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 641 1095 681">Benutzt von</th> <th data-bbox="1102 641 1240 681">als</th> <th data-bbox="1247 641 1861 681">Name</th> <th data-bbox="1868 641 2067 681">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 686 1095 726">2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3</td> <td data-bbox="1102 686 1240 726">Containment</td> <td data-bbox="1247 686 1861 726"> Medikation (medmgmt)</td> <td data-bbox="1868 686 2067 726">2018-11-02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 730 1095 770">2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14</td> <td data-bbox="1102 730 1240 770"></td> <td data-bbox="1247 730 1861 770"> Medikation Gruppierung (medmgmt)</td> <td data-bbox="1868 730 2067 770">2019-02-09</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 775 1095 815">2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15</td> <td data-bbox="1102 775 1240 815"></td> <td data-bbox="1247 775 1861 815"> Aktuelle Medikation (medmgmt)</td> <td data-bbox="1868 775 2067 815">2019-02-09</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 820 1095 860">2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td data-bbox="1102 820 1240 860"></td> <td data-bbox="1247 820 1861 860"> CDA Medikationsmanagement</td> <td data-bbox="1868 820 2067 860">2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel: Kategorie "Bestand"</p> <pre data-bbox="663 1050 2067 1249"><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12"/> <code code="HKKAT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1" displayName="Hauskomet Kategorie"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201803120934"/> <value xsi:type="CE" code="STK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2"/> </observation></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel: Kategorie "Löschung"</p> <pre data-bbox="663 1318 2067 1423"><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12"/> <code code="HKKAT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1" displayName="Hauskomet Kategorie"/></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="201810181213"/>
<value xsi:type="CE" code="DEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.2"/>
</observation>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----------------|--------|------|--|-------------|
| hl7:observation | | | | | (Hau...rie) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1182 🌟 Kategorie 🌟 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Hau...rie) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 | |
| hl7:id | II | 0 .. * | | | (Hau...rie) |
| hl7:code | CE (preferred) | 1 .. 1 | R | | (Hau...rie) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1183 🌟 Kategorie 🌟 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @code | | 0 .. 1 | F | HKKAT | |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1 (hauskomet-codesystem-1) | |
| @displayName | | 0 .. 1 | F | Hauskomet Kategorie | |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Hau...rie) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|---|---|------|--------------|-------------|
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | TS | 1 ... 1 | R | | (Hau...rie) |
| | medmgmt-dataelement-1184 Letztes Änderungsdatum Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| hl7:value | CE | 1 ... 1 | M | | (Hau...rie) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.11.3 Hauskomet Kategorie (DYNAMIC) | | | |

3.2.35 Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 - 2018-09-07 ref hauskomet-

| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 ref | Gültigkeit | 2018-09-07 | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|--------------------------|---------|-----------------------------|--|--|
| Status | Entwurf | Versions-Label | | | | | | | |
| Name | Hauskometkurator | Anzeigenname | Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) | | | | | | |
| Beschreibung | Der Arzt, der den jeweiligen Medikationseintrag kuratiert hat, also eine Überführung des Eintrags in den Bestand der kuratierten Medikationseinträge übernommen hat. Zum Zeitpunkt der Kuration hat sich dieser Arzt als zuständig für die Pflege der Hauskomet Medikationsinformation und Stammdaten des Patienten erklärt. | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1188</td> <td> Kurator</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1188 | Kurator | Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1188 | Kurator | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | |

Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 1 Template

| Benutzt von | als | Name | Version |
|---|-----------|----------------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

| Benutzt | als | Name | Version |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------|
| 1.2.276.0.76.10.90010 | Containment | CDA Person Elements | DYNAMIC |

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel


```
<participant typeCode="VRF" contextControlCode="OP">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2"/>
  <time value="201803120934"/>
  <participantRole classCode="ROL">
    <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="999999901"/>
    <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <name>
        <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix>
        <given>Hans</given>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
    </playingEntity>
    <scopingEntity classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/>
    </scopingEntity>
  </participantRole>
</participant>
```



Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----------|--|------|--|-------------|
| hl7:participant | | | | | (Hau...tor) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  medmgmt-dataelement-1188  Kurator  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | VRF | |
| @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Hau...tor) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 | |
| hl7:time | IVL_TS | 0 ... 1 | | | (Hau...tor) |
| hl7:participantRole | | 1 ... 1 | R | | (Hau...tor) |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | ROL | |
| | Beispiel | <pre> <participantRole classCode="ROL"> <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="999999901"/> <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix> <given>Hans</given> <family>Hausarzt</family> </name> </playingEntity> <scopingEntity classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/> </scopingEntity> </participantRole> </pre> | | | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | Lebenslange Arztnummer (LANR) des kuratierenden Arztes | (Hau...tor) |













| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------|------|---------|------|--|--------------|
| hl7:code | CE | 0 ... 1 | | | (Hau ...tor) |
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) | |
| hl7:addr | AD | 0 ... * | | | (Hau ...tor) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Hau ...tor) |
| hl7:playingEntity | | 1 ... 1 | M | Angabe des kuratierenden Arztes Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | (Hau ...tor) |
| wo [not(@nullFlavor)] | | | | | |
| hl7:scopingEntity | | 1 ... 1 | M | Angabe der Betriebsstätte des kuratierenden Arztes | (Hau ...tor) |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | cs | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| Beispiel | | | | <pre><scopingEntity classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/> </scopingEntity></pre> | |
| hl7:id | II | 1 ... 1 | M | Angabe der Betriebsstättennummer (BSNR) des kuratierenden Arztes | (Hau ...tor) |
| hl7:desc | ED | 0 ... 1 | | | (Hau ...tor) |

3.2.36  CDA authenticator 1.2.276.0.76.10.2019 - 2014-08-25 ref hl7de-

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.2019 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-08-25 |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | |
| Name | HeaderAuthenticator | Anzeigename | CDA authenticator |










| | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------|
| Beschreibung | Unterzeichner des Dokumentes (weitere neben dem vor dem Gesetz verantwortlichen Unterzeichner) | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement |
| | Version | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt | als | Name | Version |
| 1.2.276.0.76.10.90012 | Inklusion  | CDA Assigned Entity Elements | DYNAMIC |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.107 <i>CDA authenticator</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| Beispiel | Beispiel | | |
| | <pre> <authenticator typeCode="AUTHEN"> <time value="20130327130000"/> <signatureCode code="S"/> <assignedEntity> <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.1.244.2"/> <assignedPerson> <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix> <given>Hugo</given> <family>Reinhardt</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <name>Oberlinklinik</name> <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/> <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/> <addr> <streetName>Rudolf-Breitscheid-Straße</streetName> <houseNumber>24</houseNumber> <postalCode>14482</postalCode> <city>Potsdam</city> </addr> </representedOrganization> </assignedEntity> </pre> | | |



| </authenticator> | | | | | |
|---|-------------|--|------|--------------|-------------|
| Alles ausklappen | | Alles einklappen | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:authenticator | | 0 ... * | | | (Hea...tor) |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | AUTHEN | |
| hl7:time | TS | 1 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| hl7:signatureCode | CS | 1 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC) | | | |
| hl7:assignedEntity | | 1 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:id | II | 1 ... * | R | | (Hea...tor) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | R | | (Hea...tor) |
| hl7:assignedPerson | | 1 ... 1 | M | | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Hea...tor) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (Hea...tor) |
| Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (Hea...tor) |
| <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | (Hea...tor) |
| <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Hea...tor) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Hea...tor) |


















3.2.37  CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031 - 2014-12-17 ref pmp-













| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.2031 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-12-17 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | HeaderAuthorSoftwarepmp | Anzeigename | CDA author software (pmp) |
| Beschreibung | Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | | |

| Label | hhsoftpmp | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----------|--------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|--|
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1110</td> <td> Angaben zum erstellenden Software-System</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1110 |  Angaben zum erstellenden Software-System |  Datensatz eMedikation v2019 | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1110 |  Angaben zum erstellenden Software-System |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion </td> <td>CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 <i>CDA author</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | | | | | | |
| | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2002 <i>CDA author</i> (2013-07-10) ref hl7de- | | | | | | | | | |
| | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2008 <i>CDA author Device</i> (2013-10-11) ref hl7de- | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <author> <templateId root="1.2.276.0.76.10.2031"/> <time value="20141031123456"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id nullFlavor="NA"/> <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <softwareName>Medplan X Software v2.45</softwareName> </assignedAuthoringDevice> </assignedAuthor> </author> </pre> | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Alles ausklappen Alles einklappen </div> | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-------------|--------|------|---|-----------|
| hl7:author | | | | | hhsoftpmp |
| wo [hl7:templateId/@root='1.2.276.0.76.10.2031'] | | | | | |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;">  medmgmt-dataelement-1110  Angaben zum erstellenden Software-System  Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | AUT | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | hhsoftpmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.2031 | |
| hl7:time | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | M | | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthor | | 1 .. 1 | M | | hhsoftpmp |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | hhsoftpmp |
| hl7:assignedAuthoringDevice | | 1 .. 1 | R | | hhsoftpmp |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | DEV | |
| @determinerCode | cs | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:manufacturerModelName | SC | 0 .. 1 | | | hhsoftpmp |
| hl7:softwareName | SC | 1 .. 1 | R | Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | hhsoftpmp |













3.2.38  CDA author (pmp) 1.2.276.0.76.10.2029 - 2014-09-17 ref pmp-

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.2029 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-09-17 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | HeaderAuthorpmp | Anzeigename | CDA author (pmp) |
| Beschreibung | Autor des Dokuments | | |
| Label | hauthpmp | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 8 Konzepte | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1001 |  Leistungserbringer |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1008 |  Telefonnummer |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1238 |  Organisation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1236 |  Adresse |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1011 |  LANR |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1009 |  E-Mail |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1237 |  Kontaktdaten |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1235 |  Name |  Datensatz eMedikation v2019 | |

| Benutzt von / Benutzt | <p>Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 2 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3133</td> <td>Containment</td> <td> Leistungserbringer-Kommentar</td> <td>2018-11-02</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.90010</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Person Elements</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.90011</td> <td>Inklusion</td> <td> CDA Organization Elements</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | 1.2.276.0.76.10.3133 | Containment |  Leistungserbringer-Kommentar | 2018-11-02 | Benutzt | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.90010 | Inklusion |  CDA Person Elements | DYNAMIC | 1.2.276.0.76.10.90011 | Inklusion |  CDA Organization Elements | DYNAMIC |
|--|--|--|------------------------|------|---------|--|-----------|---|------------------------|----------------------|-------------|--|------------|---------|-----|------|---------|-----------------------|-----------|---|---------|-----------------------|-----------|---|---------|
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.3133 | Containment |  Leistungserbringer-Kommentar | 2018-11-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.90010 | Inklusion |  CDA Person Elements | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.90011 | Inklusion |  CDA Organization Elements | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | <p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 <i>CDA author</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-</p> <p>Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2002 <i>CDA author</i> (2013-07-10) ref hl7de-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <author> <templateId root="1.2.276.0.76.10.2029"/> <time value="20131020"/> <assignedAuthor> <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/> <addr> <postalCode>52428</postalCode> <city>Jülich</city> <streetName>Marktstraße</streetName> <houseNumber>1</houseNumber> </addr> <telecom value="tel:+49.2461.56162"/> <telecom value="mailto:praxis-abt@example.de"/> </assignedPerson> <name> <prefix>Dr. med. </prefix> <given>Martin</given> <family>Abt</family> </name> </assignedPerson> </representedOrganization> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| <pre><!-- .. --> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author></pre> | | | | | |
|--|-------------|---|------|----------------------|----------|
| Alles ausklappen Alles einklappen | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:author | | | | | hauthpmp |
| <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6ffe6; padding: 5px;"> 🕒 medmgmt-dataelement-1001 🟡 Leistungserbringer 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | AUT | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| @root | | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.2029 | |
| hl7:time | TS.DATE.MIN | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| hl7:assignedAuthor | | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | hauthpmp |
| <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6ffe6; padding: 5px;"> 🕒 medmgmt-dataelement-1011 🟡 LANR 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| Beispiel | | <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> Autor mit lebenslanger Arztnummer (LANR) <pre><id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/></pre> </div> | | | |
| hl7:addr | AD | 0 .. 1 | R | | hauthpmp |
| <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6ffe6; padding: 5px;"> 🕒 medmgmt-dataelement-1236 🟡 Adresse 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |













| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|-----|---------|------|---|----------|
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | R | | hauthpmp |
| | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1008 ☉ Telefonnummer ☉ Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1009 ☉ E-Mail ☉ Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1237 ☉ Kontaktdaten ☉ Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:assignedPerson | | 0 ... 1 | | | hauthpmp |
| | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1235 ☉ Name ☉ Datensatz eMedikation v2019 | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| h17:name | PN | 1 ... 1 | M | | hauthpmp |
| h17:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | hauthpmp |
| | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1238 ☉ Organisation ☉ Datensatz eMedikation v2019 | |
| Beispiel | | | | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name <pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/> <name>Internistische Praxis Dr. Abt</name> </representedOrganization></pre> | |
| Beispiel | | | | Apotheke mit IDF Nummer <pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.197" extension="3379589"/> <name>Sonnen-Apotheke</name> </representedOrganization></pre> | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----------|--------|------|--|----------|
| | Beispiel | | | Krankenhaus mit Institutionskennzeichen <pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.5" extension="260641243"/> <name>Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH</name> </representedOrganization></pre> | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| h17:id | II | 0 .. * | | | hauthpmp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 1 .. 1 | M | | hauthpmp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 .. * | | | hauthpmp |
| h17:addr | AD | 0 .. 1 | | | hauthpmp |




3.2.39  CDA custodian (pmp) 1.2.276.0.76.10.2030 - 2014-09-17 ref pmp-

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.2030 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-09-17 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------|--------------|
| Name | HeaderCustodianpmp | Anzeigename | CDA custodian (pmp) | | |
| Beschreibung | Die das Dokument verwaltende Organisation | | | | |
| Label | hcustpmp | | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| | Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90011 | Inklusion |  CDA Organization Elements | DYNAMIC | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.104 <i>CDA custodian</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | |
| Beispiel | <pre> Beispiel <custodian> <assignedCustodian> <representedCustodianOrganization> <!-- .. --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian> </pre> | | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| h17:custodian | | | | | hcustpmp |
| @typeCode | | 0 ... 1 | F | CST | |
| h17:assignedCustodian | | 1 ... 1 | M | | hcustpmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------------------|-----|---------|------|--|----------|
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:representedCustodianOrganization | | 0 ... 1 | | | hcustpmp |
| Beispiel | | | | Organisation mit Betriebsstättennummer (BSNR) und Name <pre><representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="218099900"/> <name>Internistische Praxis Dr. Abt</name> </representedCustodianOrganization></pre> | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | hcustpmp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | hcustpmp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | hcustpmp |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | hcustpmp |

3.2.40 CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020 - 2014-08-25 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|--|---|------------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.2020 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-08-25 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | HeaderLegalAuthenticator | Anzeigename | CDA legalAuthenticator |
| Beschreibung | Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion  | CDA Medikationsmanagement |
| | Benutzt | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.90012 | Inklusion  | CDA Assigned Entity Elements |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 CDA legalAuthenticator (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| Beispiel | <pre> Beispiel <legalAuthenticator typeCode="LA"> <time value="20130327130000"/> <signatureCode code="S"/> <assignedEntity> <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.9.8.7.6"/> <assignedPerson> <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix> <given>Hugo</given> <family>Reinhardt</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <name>Klinik am Zempiner Steig</name> <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/> <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/> </pre> | | |

```













<addr>
  <streetName>Zempiner Steig</streetName>
  <houseNumber>4</houseNumber>
  <postalCode>15266</postalCode>
  <city>Berlin</city>
</addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-------------|--|------|--------------|-------------|
| hl7:legalAuthenticator | | 0 ... 1 | | | (Hea...tor) |
| @typeCode | | 0 ... 1 | F | LA | |
| @contextControlCode | | 0 ... 1 | F | OP | |
| hl7:time | TS | 1 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| hl7:signatureCode | CS | 1 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC) | | | |
| hl7:assignedEntity | | 1 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:id | II | 1 ... * | R | | (Hea...tor) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | R | | (Hea...tor) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | R | | (Hea...tor) |
| hl7:assignedPerson | | 1 ... 1 | M | | (Hea...tor) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Hea...tor) |
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (Hea...tor) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (Hea...tor) |
| | | | | <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1013 🟡 Institutskennzeichen Apotheke 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010 🟡 BSNR 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208 🟡 Apotheken-IDF 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012 🟡 Institutskennzeichen Krankenhaus 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | (Hea...tor) |
| | | | | <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1014 🟡 Name Institution 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Hea...tor) |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Hea...tor) |

3.2.41  CDA recordTarget (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 - 2019-02-09

| | | | | |
|------------------------------|--|---|---|------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | Gültigkeit | 2019-02-09 | |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | |
| Name | HeaderRecordTargetmedmgmt | Anzeigename | CDA recordTarget (medmgmt) | |
| Beschreibung | Patient | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 3 Konzepte | | | |
| | Id | Name | Datensatz | |
| | medmgmt-dataelement-1022 |  Geburtsdatum |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1015 |  Patient |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| medmgmt-dataelement-1024 |  Geschlecht |  Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 4 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| | Benutzt | als | Name | Version |
| | 1.2.276.0.76.10.90024 | Inklusion |  Patientenidentifikation | DYNAMIC |
| | 1.2.276.0.76.10.90030 | Inklusion |  Personennamenname | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion |  Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 | |
| 1.2.276.0.76.10.90034 | Inklusion |  Erweiterung Vorhabenerweiterung | 2019-02-09 | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2028 CDA recordTarget (pmp) (2017-06-04) ref pmp- | | | |

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 CDA recordTarget (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2001 CDA recordTarget (2013-07-10) [ref hl7de-](#)

Beispiel







Beispiel

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
    <addr use="H">
      <streetAddressLine>Raiffeisenstr. 30</streetAddressLine>
      <postalCode>39112</postalCode>
      <city>Magdeburg</city>
    </addr>
    <telecom value="tel:++493916367866"/>
  </patientRole>
  <patient>
    <name>
      <given>Jan</given>
      <family>Schmitz</family>
    </name>
    <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
    <birthTime value="19620219"/>
  </patient>
</recordTarget>
```

Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|----|---------|------|--|---------------------|
| hl7:recordTarget | | | | | (Hea ... gmt) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1015 Patient Datensatz eMedikation v2019 | |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | RCT | |
| @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|---|------|---|---------------|
| hl7:patientRole | | 1 .. 1 | | | (Hea ... gmt) |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | PAT | |
| Eingefügt | | 1 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | (Hea ... gmt) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1016 🟡 Versicherten-ID 🟡 Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1128 🟡 Patienten-ID 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| Beispiel | | eGK Nummer als Patientenidentifikation <pre><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></pre> | | | |
| hl7:addr | AD | 0 .. 1 | | | (Hea ... gmt) |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | (Hea ... gmt) |
| hl7:patient | | 1 .. 1 | R | | (Hea ... gmt) |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | cs | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| Beispiel | | <pre><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient></pre> | | | |








| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|---------|------|---|---------------|
| | | | | </patient> | |
| Eingefügt | | 1 ... * | R | von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:name | PN | 1 ... * | R | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. | (Hea ... gmt) |
|  medmgmt-dataelement-1234  Name  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| Beispiel | | | | Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name> | |
| Beispiel | | | | Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name> | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Titel | (Hea ... gmt) |
| wo [<i>@qualifier=AC</i>] | | | | | |
|  medmgmt-dataelement-1019  Titel  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | AC | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--------|---------|------|--------------|---------------|
| hl7:given | ENXP | 0 ... * | | Vorname | (Hea ... gmt) |
|  medmgmt-dataelement-1017  Vorname  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Namenszusatz | (Hea ... gmt) |
| wo [@qualifier='NB'] | | | | | |
|  medmgmt-dataelement-1021  Namenszusatz  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | NB | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Vorsatzwort | (Hea ... gmt) |
| wo [@qualifier='VV'] | | | | | |
|  medmgmt-dataelement-1020  Vorsatzwort  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | VV | |
| hl7:family | ENXP | 0 ... * | | Nachname | (Hea ... gmt) |
|  medmgmt-dataelement-1018  Nachname  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:suffix | ENXP | 0 ... * | | Suffix | (Hea ... gmt) |
| hl7:administrativeGenderCode | CE | 1 ... 1 | R | | (Hea ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|----------------------------|----------------|----------|--|-------------------------------|
| | ⊙ medmgmt-dataelement-1024 | | | ● Geschlecht | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC) | |
| <i>Eingefügt</i> | | 0 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 ... 1 | R | | (Hea ... gmt) |
| | ⊙ medmgmt-dataelement-1189 | | | ● Kennzeichen BMP | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1334 | | | ● Erweiterung Druckkennzeichen | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1209 | | | ● Druckkennzeichen Geschlecht | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| @url | url | 1 ... 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 ... 1 | M | | (Hea ... gmt) |
| @value | bl | 1 ... 1 | R | | |
| hl7:birthTime | TS | 1 ... 1 | R | | (Hea ... gmt) |
| | ⊙ medmgmt-dataelement-1022 | | | ● Geburtsdatum | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| <i>Eingefügt</i> | | 0 ... * | R | von 1.2.276.0.76.10.90034 Erweiterung Vorhabenerweiterung (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 ... * | R | | (Hea ... gmt) |
| | ⊙ medmgmt-dataelement-1220 | | | ● Vorhabenspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | ● Datensatz eMedikation v2019 |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|--------------------------|--------|------|---|-----------------------------|
| | medmgmt-dataelement-1226 | | | Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1223 | | | Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | |
| medmgmt:extension | | | | | (Hea ... gmt) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Hea ... gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1227 | | | Identifikation | Datensatz eMedikation v2019 |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| medmgmt:extension | | | | | (Hea ... gmt) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Hea ... gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1228 | | | Wert | Datensatz eMedikation v2019 |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |

3.2.42  CDA recordTarget (pmp) 1.2.276.0.76.10.2028 - 2017-06-04 ref pmp-

| Id | 1.2.276.0.76.10.2028 ref pmp- | Gültigkeit | 2017-06-04 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> HeaderRecordTargetpmp vom 2014-09-17 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---------|-----|------|---------|-----------------------|-----------|---|---------|-----------------------|-----------|---|---------|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | |
| Name | HeaderRecordTargetpmp | Anzeigename | CDA recordTarget (pmp) | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Patient | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 2 Templates | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.90024</td> <td>Inklusion</td> <td> Patientenidentifikation</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.90030</td> <td>Inklusion</td> <td> Personennamenname</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table> | | | Benutzt | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.90024 | Inklusion |  Patientenidentifikation | DYNAMIC | 1.2.276.0.76.10.90030 | Inklusion |  Personennamenname | DYNAMIC |
| Benutzt | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.90024 | Inklusion |  Patientenidentifikation | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.90030 | Inklusion |  Personennamenname | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2028 CDA recordTarget (pmp) (2014-09-17) ref pmp- Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 CDA recordTarget (2005-09-07) ref ad1bbr- Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2001 CDA recordTarget (2013-07-10) ref hl7de- | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <pre> Beispiel <recordTarget> <patientRole> <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/> <addr use="H"> <streetAddressLine>Raiffeisenstr. 30</streetAddressLine> <postalCode>39112</postalCode> <city>Magdeburg</city> </addr> <telecom value="tel:++493916367866"/> </patientRole> </recordTarget> </pre> | | | | | | | | | | | | | | |

```




<name>
  <given>Jan</given>
  <family>Schmitz</family>
</name>
<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
<birthTime value="19620219"/>
<languageCommunication>

  <languageCode code="EN"/>
  <modeCode code="ESP"/>
  <proficiencyLevelCode code="G"/>
  <preferenceInd value="true"/>
</languageCommunication>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>
    
```







Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|----|---------|------|---|---------------------|
| hl7:recordTarget | | | | | (Hea ... pmp) |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | RCT | |
| @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP | |
| hl7:patientRole | | 1 ... 1 | | | (Hea ... pmp) |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | PAT | |
| Eingefügt | | 1 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) | |
| hl7:id | II | 1 ... 1 | R | | (Hea ... pmp) |

| | | |
|--|---|---|
|  medmgmt-dataelement-1016 |  Versicherten-ID |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1128 |  Patienten-ID |  Datensatz eMedikation v2019 |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|-----------------|----------|---|------|---|---------------|--|
| | Beispiel | eGK Nummer als Patientenidentifikation <code><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></code> | | | | |
| h17:addr | AD | 0 .. 1 | | | (Hea ... pmp) | |
| h17:telecom | TEL | 0 .. * | | | (Hea ... pmp) | |
| h17:patient | | 1 .. 1 | R | | (Hea ... pmp) | |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | PSN | | |
| @determinerCode | cs | 0 .. 1 | F | INSTANCE | | |
| | Beispiel | <code><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"></code> <code> <name></code> <code> <!-- ... --></code> <code> </name></code> <code> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/></code> <code> <birthTime value="19620219"/></code> <code></patient></code> | | | | |
| Eingefügt | | 1 .. * | R | von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC) | | |
| h17:name | PN | 1 .. * | R | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. | (Hea ... pmp) | |
| | |  medmgmt-dataelement-1234  Name  Datensatz eMedikation v2019 | | | | |
| | Beispiel | Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <code><name></code> <code> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix></code> | | | | |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|----------|---------|------|--|---------------|
| | | | | <pre><given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name></pre> | |
| | Beispiel | | | <pre>Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name></pre> | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Titel | (Hea ... pmp) |
| wo [@qualifier='AC'] | | | | | |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1019  Titel  Datensatz eMedikation v2019 | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | AC | |
| hl7:given | ENXP | 0 ... * | | Vorname | (Hea ... pmp) |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1017  Vorname  Datensatz eMedikation v2019 | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Namenszusatz | (Hea ... pmp) |
| wo [@qualifier='NB'] | | | | | |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1021  Namenszusatz  Datensatz eMedikation v2019 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|--------|------|--------------|---------------|
| @qualifier | set_cs | 1 .. 1 | F | NB | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 .. * | | Vorsatzwort | (Hea ... pmp) |
| wo [@qualifier='VV'] | | | | | |
|  medmgmt-dataelement-1020  Vorsatzwort  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @qualifier | set_cs | 1 .. 1 | F | VV | |
| hl7:family | ENXP | 0 .. * | | Nachname | (Hea ... pmp) |
|  medmgmt-dataelement-1018  Nachname  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:suffix | ENXP | 0 .. * | | Suffix | (Hea ... pmp) |
| hl7:administrativeGenderCode | CE | 1 .. 1 | R | | (Hea ... pmp) |
| CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC) | | | | | |
| hl7:birthTime | TS | 1 .. 1 | R | | (Hea ... pmp) |
| hl7:languageCommunication | | 0 .. * | | | (Hea ... pmp) |
| hl7:languageCode | CS | 0 .. 1 | | | (Hea ... pmp) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|------|---------|------|--|---------------------|
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 <i>HumanLanguage</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:modeCode | CE | 0 ... 1 | | | (Hea ... pmp) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12249 <i>LanguageAbilityMode</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:proficiencyLevelCode | CE | 0 ... 1 | | | (Hea ... pmp) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.12199 <i>LanguageAbilityProficiency</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:preferenceInd | BL | 0 ... 1 | | | (Hea ... pmp) |

3.2.43  CDA recordTarget (pmp) 1.2.276.0.76.10.2028 - 2014-09-17 ref pmp-

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.2028 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-09-17 Andere Versionen mit dieser Id: ▪ <input type="radio"/> HeaderRecordTargetpmp vom 2017-06-04 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | HeaderRecordTargetpmp | Anzeigename | CDA recordTarget (pmp) |
| Beschreibung | Patient | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt | als | Name |
| | | | Version |

1.2.276.0.76.10.90024 Inklusion  Patientenidentifikation DYNAMIC

Beziehung
 Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 *CDA recordTarget* (2005-09-07) ref ad1bbr-
 Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2001 *CDA recordTarget* (2013-07-10) ref hl7de-

Beispiel

```

<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/>
    <addr use="H">
      <streetAddressLine>Raiffeisenstr. 30</streetAddressLine>
      <postalCode>39112</postalCode>
      <city>Magdeburg</city>
    </addr>
    <telecom value="tel:++493916367866"/>
  </patient>
  <name>
    <given>Jan</given>
    <family>Schmitz</family>
  </name>
  <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
  <birthTime value="19620219"/>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>
    
```


Alles ausklappen | Alles einklappen





| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|----|--------|------|--------------|--------------|
| hl7:recordTarget | | | | | (Hea... pmp) |
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | RCT | |
| @contextControlCode | | 0 .. 1 | F | OP | |
| hl7:patientRole | | 1 .. 1 | | | (Hea... pmp) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PAT | |
| Eingefügt | | 1 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) | |
| hl7:id | II | 1 ... 1 | R | | (Hea...pmp) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1016 Versicherten-ID Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1128 Patienten-ID Datensatz eMedikation v2019 | |
| Beispiel | | | | eGK Nummer als Patientenidentifikation <pre><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></pre> | |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Hea...pmp) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Hea...pmp) |
| hl7:patient | | 1 ... 1 | R | | (Hea...pmp) |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| Beispiel | | | | <pre><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient></pre> | |
| hl7:name | PN | 1 ... * | R | | (Hea...pmp) |
| hl7:administrativeGenderCode | CE | 1 ... 1 | R | | (Hea...pmp) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------|------|--------|------|--|-------------|
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 <i>AdministrativeGender</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:birthTime | TS | 1 .. 1 | R | | (Hea...pmp) |

3.2.44 Gesundheitsbelange (medgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 - 2019-02-09

| | | | |
|---|---|--|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | HealthConcernsSectionmedgmt | Anzeigename | Gesundheitsbelange (medgmt) |
| Beschreibung | | | |
| Gesundheitsbelange. Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung über einen Gesundheitszustand oder -prozess, der möglicherweise Aufmerksamkeit, Intervention oder Management erfordern könnte. "Gesundheitsbelange" beschreiben einen Gesundheitszustand oder -prozess, der bedeutsam oder wichtig für den Patienten, die Familie des Patienten oder den behandelnden Arzt/Gesundheitsdienstleister ist oder Anlass zur Besorgnis liefert. | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | | |
| Label | scondpmp | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | | | |
| Assoziiert mit 1 Konzept | | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medgmt-dataelement-1239 |  Gesundheitsbelange |  Datensatz eMedikation v2019 |
| Benutzt von / Benutzt | | | |
| Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 3 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | | | Version |

| | | | | |
|------------------|--|-------------|--|------------------------|
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| | Benutzt | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | Containment |  Status Schwangerschaft (medmgmt) | DYNAMIC |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | Containment |  Stillzeit (medmgmt) | DYNAMIC |
| | 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion |  Erweiterung Druckkennzeichen | DYNAMIC |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3043 <i>Gesundheitsbelange</i> (2015-03-03) ref pmp- | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11"/> <code code="75310-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Health Concerns"/> <title>Gesundheitsbelange</title> <text> <list> <item ID="preg">Patientin schwanger</item> <item ID="mbf">Patientin stillend</item> </list> </text> <entry typeCode="COMP"> <!-- .. --> </entry> </section> </pre> | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11"/> <code code="75310-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Health Concerns"/> <title>Gesundheitsbelange</title> <text> <list> </pre> | | | |

```

<item ID="preg">Patientin schwanger</item>
<item ID="mbf">Patientin stillend</item>
</list>
</text>
<entry typeCode="COMP">

  <!-- .. -->

</entry>
</section>

```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|--|---------|--|------|---|----------|--|
| h17:section | | | | | scondpmp | |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> medmgmt-dataelement-1239 Gesundheitsbelange Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | | |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | DOCSECT | | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN | | |
| h17:templateId | II | 1 .. 1 | | | scondpmp | |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | | |
| h17:code | CE | 1 .. 1 | M | | scondpmp | |
| @code | | 1 .. 1 | F | 75310-3 | | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | | |
| h17:title | ST | 1 .. 1 | M | | scondpmp | |
| | CONF | Elementinhalt muss "Gesundheitsbelange" sein | | | | |
| h17:text | SD.TEXT | 1 .. 1 | M | | scondpmp | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|---------|------|--|----------|
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 <i>Status Schwangerschaft (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | scondpmp |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 <i>Stillzeit (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | scondpmp |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| Eingefügt | | 0 ... 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 <i>Erweiterung Druckkennzeichen</i> (DYNAMIC) | |
| medmgmt:extension | | 0 ... 1 | R | | scondpmp |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1189 Kennzeichen BMP Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1334 Erweiterung Druckkennzeichen Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1209 Druckkennzeichen Geschlecht Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @url | url | 1 ... 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 ... 1 | M | | scondpmp |
| @value | bl | 1 ... 1 | R | | |


3.2.45 **Wichtige Angaben 1.2.276.0.76.10.3042 - 2014-11-01** ref pmp-



| | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.3042 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-11-01 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Instructions | Anzeigenname | Wichtige Angaben |

| Beschreibung | Wichtige Angaben/Hinweise für den Patienten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|------------------------|---------|------|----|------|------|--------------|-------|-------------|--|---------|--|--|---------|------------|--|---------|---|---------|--|-----------|--|---------|---|-----|--|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Label | instpmp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section (2005-09-07)</i> ref ad1bbr- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.21.2.45.2 (DYNAMIC) ref ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3042"/> <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Instructions"/> <title>Wichtige Angaben</title> <text> Bitte messen Sie Ihren Blutdruck täglich! Nächster Impftermin: 24.12.2014 Bei Rissen in der Hornhaut bitte Desinfektion auftragen. </text> </section></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Alles ausklappen Alles einklappen </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:section</td> <td></td> <td>0 ... *</td> <td></td> <td></td> <td>instpmp</td> </tr> <tr> <td>@classCode</td> <td></td> <td>0 ... 1</td> <td>F</td> <td>DOCSECT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>@moodCode</td> <td></td> <td>0 ... 1</td> <td>F</td> <td>EVN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | h17:section | | 0 ... * | | | instpmp | @classCode | | 0 ... 1 | F | DOCSECT | | @moodCode | | 0 ... 1 | F | EVN | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:section | | 0 ... * | | | instpmp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | DOCSECT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @moodCode | | 0 ... 1 | F | EVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------|---------|--|------|-------------------------------|---------|
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | | | instpmp |
| @root | | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.3042 | |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | instpmp |
| @code | | 1 .. 1 | F | 69730-0 | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| Beispiel | | <pre><code code="69730-0" displayName="Instructions" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/></pre> | | | |
| hl7:title | ST | 1 .. 1 | M | | instpmp |
| | CONF | Elementinhalt muss "Wichtige Angaben" sein | | | |
| hl7:text | SD.TEXT | 1 .. 1 | M | | instpmp |

3.2.46  Laborergebnis 1.2.276.0.76.10.4254 - 2017-03-21 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4254 ref hl7de- | Gültigkeit | 2017-03-21 | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | |
| Name | LaboratoryResultObservation | Anzeigename | Laborergebnis | | | | | | |
| Beschreibung | Dieses Template enthält Laborergebnisse. | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4254 | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

medmgmt-dataelement-1039  Laborparameter  Datensatz eMedikation v2019

Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template

| Benutzt | als | Name | Version |
|----------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.276.0.76.10.4015 | Containment |  Annotation Comment | DYNAMIC |




Beziehung

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2 *Result Observation (V3)* (2015-08-01) [ref ccda-](#)

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.22.4.13 *IPS Laboratory Result Observation* (2017-03-21) [ref hl7ips-](#)


Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|------|--|------|----------------------|-----------------|
| hl7:observation | | | | | (Lab ...ion) |
|  medmgmt-dataelement-1039  Laborparameter  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Lab ...ion) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4254 | |
| hl7:id | II | 0 ... * | R | | (Lab ...ion) |
| hl7:code | CE | 1 ... 1 | M | | (Lab ...ion) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.431 <i>Laborparameter</i> (DYNAMIC) | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------------|------------|---|------|--|-----------------|
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Lab ...ion) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <i>ActStatus</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 .. 1 | R | | (Lab ...ion) |
| Auswahl | | 1 .. 1 | | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> hl7:value[@xsi:type='CE'] hl7:value[@xsi:type='PQ'] | |
| hl7:value | CE | ... 1 | R | Kodierter Laborbefund wie Blutgruppen, Qualitative Indikatoren, Mikroorganismen etc. | (Lab ...ion) |
| wo [@xsi:type='CE'] | | | | | |
| hl7:value | PQ | ... 1 | R | | (Lab ...ion) |
| wo [@xsi:type='PQ'] | | | | | |
| | Constraint | Messwert ist eine physikalische Quantität (xsi:type="PQ"), die verwendete Einheit MUSS eine UCUCM Einheit (UnitsOfMeasureCaseSensitive) sein. | | | |
| hl7:interpretationCode | CE | 0 .. 1 | R | | (Lab ...ion) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.78 <i>ObservationInterpretation</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:methodCode | CE | 0 .. 1 | | | (Lab ...ion) |
| hl7:targetSiteCode | CD | 0 .. 1 | | | (Lab ...ion) |
| hl7:referenceRange | | 0 .. * | R | Normalwertebereich | (Lab ...ion) |
| hl7:observationRange | | 1 .. 1 | M | | (Lab ...ion) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|------|---------|------|---|-----------------|
| hl7:code | CD | | NP | | (Lab ...ion) |
| hl7:value | | 1 ... 1 | M | | (Lab ...ion) |
| hl7:interpretationCode | CE | 0 ... 1 | | | (Lab ...ion) |
| @code | CONF | 0 ... 1 | F | N | |
| @codeSystem | | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.83 (Observation Interpretation) | |
| @displayName | | 0 ... 1 | F | Normal | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4015 <i>Annotation Comment</i> (DYNAMIC) | (Lab ...ion) |
| wo [hl7:act [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4015']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | COMP | |

3.2.47 Leistungserbringer-Kommentar 1.2.276.0.76.10.3133 - 2018-11-02

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.3133 | Gültigkeit | 2018-11-02 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | LeistungserbringerKommentar | Anzeigename | Leistungserbringer-Kommentar |
| Beschreibung | An Leistungserbringer gerichteter Kommentar (Hinweise), der im Zusammenhang mit dem gesamten Dokument steht, im Gegensatz zu den zeilenbezogenen Kommentaren. | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3133 | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | |

| Id | Name | Datensatz |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1206 | übergeordneter Kommentar | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template

| Benutzt von | als | Name | Version |
|--|-------------|---------------------------|---------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

| Benutzt | als | Name | Version |
|----------------------|-------------|------------------|---------|
| 1.2.276.0.76.10.2029 | Containment | CDA author (pmp) | DYNAMIC |

Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 *CDA Section* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.21.2.45.2 (DYNAMIC) [ref ?](#)

Beispiel


```
<section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.3133"/>
  <effectiveTime value="20190820"/>
  <code code="86467-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Report comment"/>
  <title>Hinweise</title>
  <text>Bitte um Blutbildkontrolle</text>
</section>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| hl7:section | | | | | (Lei...tar) |
| | medmgmt-dataelement-1206 | | übergeordneter Kommentar | Datensatz eMedikation v2019 | |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | DOCSECT | |
| @moodCode | cs | 0 ... 1 | F | EVN | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----------|---|------|---|-------------|
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | | | (Lei...tar) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.3133 | |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Lei...tar) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 86467-8 | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| | Beispiel | <code code="86467-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Report comment" codeSystemName="LOINC"/> | | | |
| hl7:title | ST | 1 .. 1 | M | | (Lei...tar) |
| | CONF | Elementinhalt muss "Hinweise" sein | | | |
| hl7:text | SD.TEXT | 1 .. 1 | M | | (Lei...tar) |
| hl7:author | | 0 .. 1 | | Verfasser des Kommentars inklusive des Erstellungszeitpunkts. Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.2029 CDA author (pmp) (DYNAMIC) | (Lei...tar) |
| wo [hl7:author [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.2029']]] | | | | | |

3.2.48  Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2018-12-04 ref pmp-

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90022 ref pmp- | Gültigkeit | 2018-12-04 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input type="radio"/> Material vom 2017-06-04 ▪ <input type="radio"/> Material vom 2014-11-01 |
| Name | Material | Anzeigename | Material |

| Beschreibung | Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|------|---------|----------------------|-----------|------------|------------|--|--|----------------------|------------|---|--|----------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|------------|--|--|---------------------------|------------------------|
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | <p>Benutzt von 0 Transactions und 5 Templates, Benutzt 0 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4025</td> <td>Inklusion</td> <td>Medikament</td> <td>2017-06-04</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3</td> <td></td> <td>Medikation (medmgmt)</td> <td>2018-11-02</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14</td> <td></td> <td>Medikation Gruppierung (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15</td> <td></td> <td>Aktuelle Medikation (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td>CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.4025 | Inklusion | Medikament | 2017-06-04 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4025 | Inklusion | Medikament | 2017-06-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | <p>Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.90022 <i>Material</i> (2017-06-04) ref pmp-</p> <p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 <i>CDA Material</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-</p> <p>Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 <i>IHE MedicineEntryContentModule</i> (DYNAMIC) ref ch-pharm-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe</p> <pre> <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> <!-- PZN --> <code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/> <XXX:formCode code="10211000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="Capsule, soft" codeSystemName="EDQM"/> <XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"> <XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"> <!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--> <XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="WHO ATC"/> </XXX:generalizedMaterialKind> </XXX:asSpecializedKind> <XXX:ingredient classCode="ACTI"> <XXX:quantity> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


```

<numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/>
<denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/>
</XXX:quantity>
<XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

  <XXX:code code="SUB10248MIG" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="RAMIPRIL" codeSystemName="XEVMPPD
Substance">

    <originalText>Ramipril</originalText>
  </XXX:code>
</XXX:ingredient>
</XXX:ingredient>
</manufacturedMaterial>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----|--------|------|--|-----------------|
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @classCode | CS | 1 .. 1 | F | MMAT | |
| @determinerCode | CS | 1 .. 1 | F | KIND | |
| hl7:code | CD | 1 .. 1 | R | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> NI Arznei hat keine PZN NA Arznei ist eine Rezeptur UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt | (Mat ...ial) |
| @nullFlavor | CS | 0 .. 1 | | | |
| | | | | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> @nullFlavor muss "NA" sein oder @nullFlavor muss "NI" sein oder @nullFlavor muss "UNK" sein </div> | |
| @codeSystem | | 0 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|------|---|------|---|-----------------|
| Beispiel | | Arznei mit PZN | | | |
| | | <code><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL@ 684 mg"/></code> | | | |
| Beispiel | | Arznei hat keine PZN | | | |
| | | <code><code nullFlavor="NI"/></code> | | | |
| Beispiel | | Rezeptur (ohne PZN) | | | |
| | | <code><code nullFlavor="NA"></code> | | | |
| | | <code><originalText></code> | | | |
| | | <code><reference value="#rezeptur-17"/></code> | | | |
| | | <code></originalText></code> | | | |
| | | <code></code></code> | | | |
| Beispiel | | Arznei, unbekannte PZN | | | |
| | | <code><code nullFlavor="UNK"/></code> | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @value | | 1 .. 1 | R | z.B. #rezeptur-{generiertelD}, z.B.: #rezeptur-1 | |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat ...ial) |
| hl7:name | EN | 1 .. 1 | R | Bezeichnung der Arznei Zugelassenes nullFlavor: ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur | (Mat ...ial) |
| @nullFlavor | cs | 0 .. 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NA" sein | |
| Beispiel | | Name der Arznei | | | |
| | | <code><name>Limasin 500mg</name></code> | | | |
| Beispiel | | Rezeptur ohne Handelsname | | | |
| | | <code><name nullFlavor="NA"/></code> | | | |














| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------------|------|--------|------|---|-----------------|
| pharm:formCode | CE | 0 .. 1 | R | Darreichungsform | (Mat ...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 EDQMDoseForm (DYNAMIC) | |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat ...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454 S_BMP_DARREICHUNGSFORM (DYNAMIC) | |
| pharm:asContent | | 0 .. 1 | R | Angaben zur Packung | (Mat ...ial) |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | CONT | |
| pharm:containerPackagedProduct | | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | CONT | |
| @determinerCode | cs | 1 .. 1 | F | INSTANCE | |
| pharm:code | | 1 .. 1 | M | Pharmazentralnummer der Arznei | (Mat ...ial) |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | | | (Mat ...ial) |
| pharm:name | EN | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| pharm:formCode | CE | 0 .. 1 | R | Typ der Packung | (Mat ...ial) |
| pharm:capacityQuantity | PQ | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------------|----------|--|------|--|------------|
| pharm:asSpecializedKind | | 0 .. 1 | R | Angabe des ATC Codes (WHO, DIMDI etc.) | (Material) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | GRIC | |
| | Beispiel | <pre><XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"> <XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"> <!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--> <XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/> </XXX:generalizedMaterialKind> </XXX:asSpecializedKind></pre> | | | |
| pharm:generalizedMaterialKind | | 1 .. 1 | M | | (Material) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | MMAT | |
| h17:code | CD | 1 .. 1 | R | Codes aus Codesystem 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO ATC) oder z. B. einem der DIMDI ATC Kataloge wie 1.2.276.0.76.5.482 (atcgm2019) | (Material) |
| h17:name | ST | 0 .. 1 | R | | (Material) |
| pharm:ingredient | | 0 .. * | R | Angaben zu aktiven Wirkstoffen | (Material) |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | ACTI | |
| pharm:quantity | IVL_PQ | 0 .. 1 | R | | (Material) |
| | Beispiel | <p>Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments</p> <pre><XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/> </XXX:quantity></pre> | | | |
| | Beispiel | <p>Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs</p> <pre><XXX:quantity></pre> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------------|----------|--------|------|---|-------------|
| | | | | <pre><numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="g"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1"/> </XXX:quantity></pre> | |
| h17:numerator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Mat...ial) |
| | Beispiel | | | <pre><numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"> <translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg"/> </numerator></pre> | |
| h17:translation | PQR | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | (Mat...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455 S_BMP_DOSIEREINHEIT (DYNAMIC) | |
| h17:denominator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Mat...ial) |
| pharm:ingredientSubstance | | 0 .. 1 | R | Code und Name des aktiven Wirkstoffs | (Mat...ial) |
| pharm:code | CE | 1 .. 1 | R | | (Mat...ial) |
| | CONF | | | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein oder @codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein | |
| h17:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | (Mat...ial) |
| h17:translation | CE | 0 .. * | R | | (Mat...ial) |
| pharm:name | EN | 1 .. 1 | M | | (Mat...ial) |

3.2.49 Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2017-06-04 ref pmp-

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90022 ref pmp- | Gültigkeit | 2017-06-04 |
|----|--|------------|------------|

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| | | | Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Material vom 2018-12-04 <input type="radio"/> Material vom 2014-11-01 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Material | Anzeigename | Material |
| Beschreibung | Material | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 6 Konzepte | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1166 |  ATC |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1165 |  Darreichungsform |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1159 |  Inhaltsstoff |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1273 |  Rezeptur |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1164 |  Darreichungsform (Freitext) |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1246 |  Arzneimittel-Identifikation |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 <i>CDA Material</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 <i>IHE MedicineEntryContentModule</i> (DYNAMIC) ref ch-pharm- | | |
| Beispiel | Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe <pre><manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"></pre> | | |

```

<!-- PZN -->

<code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/>
<XXX:formCode code="10211000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="Capsule, soft"
codeSystemName="EDQM"/>
<XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC">

  <XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT">

    <!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)-->

    <XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="WHO ATC"/>
  </XXX:generalizedMaterialKind>
</XXX:asSpecializedKind>
<XXX:ingredient classCode="ACTI">

  <XXX:quantity>

    <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/>
    <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/>
  </XXX:quantity>
  <XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">





    <XXX:code code="SUB10248MIG" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="RAMIPRIL" codeSystemName="XEVMPPD
Substance">






      <originalText>Ramipril</originalText>
    </XXX:code>
  </XXX:ingredient>
</XXX:ingredient>
</manufacturedMaterial>

```


Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----|--------|------|--|-----------------|
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | MMAT | |
| @determinerCode | | 1 .. 1 | F | KIND | |
| hl7:code | CD | 1 .. 1 | R | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> NI Arznei hat keine PZN NA Arznei ist eine Rezeptur | (Mat ...ial) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|------|----------|------|---|-----------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1273  Rezeptur  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1246  Arzneimittel-Identifikation  Datensatz eMedikation v2019 | |
| @nullFlavor | | 0 .. 1 | | | |
| | CONF | | | <p>@nullFlavor muss "NA" sein oder @nullFlavor muss "NI" sein oder @nullFlavor muss "UNK" sein</p> | |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 F | | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| Beispiel | | | | Arznei mit PZN <code><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL@ 684 mg"/></code> | |
| Beispiel | | | | Arznei hat keine PZN <code><code nullFlavor="NI"/></code> | |
| Beispiel | | | | Rezeptur (ohne PZN) <code><code nullFlavor="NA"></code> <code><originalText></code> <code><reference value="#rezeptur-17"/></code> <code></originalText></code> <code></code></code> | |
| Beispiel | | | | Arznei, unbekannte PZN <code><code nullFlavor="UNK"/></code> | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 R | | | (Mat ...ial) |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 M | | | (Mat ...ial) |


| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----------|--------|------|---|-------------|
| @value | | 1 .. 1 | R | z.B. #rezeptur-{generiertelD}, z.B.: #rezeptur-1 | |
| h17:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat...ial) |
| h17:name | EN | 1 .. 1 | R | Bezeichnung der Arznei Zugelassenes nullFlavor: ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur | (Mat...ial) |
| @nullFlavor | | 0 .. 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NA" sein | |
| | Beispiel | | | Name der Arznei <name>Limasin 500mg</name> | |
| | Beispiel | | | Rezeptur ohne Handelsname <name nullFlavor="NA"/> | |
| pharm:formCode | CE | 0 .. 1 | R | Darreichungsform | (Mat...ial) |
| | | | |  medmgmt-dataelement-1165  Darreichungsform  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1164  Darreichungsform (Freitext)  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 EDQMDoseForm (DYNAMIC) | |
| h17:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454 S_BMP_DARREICHUNGSFORM (DYNAMIC) | |
| pharm:asContent | | 0 .. 1 | R | Angaben zur Packung | (Mat...ial) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | CONT | |




| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--|--------|------|--|-----------------|
| pharm:containerPackagedProduct | | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | CONT | |
| @determinerCode | | 1 .. 1 | F | INSTANCE | |
| pharm:code | | 1 .. 1 | M | Pharmazentralnummer der Arznei | (Mat ...ial) |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | | | (Mat ...ial) |
| pharm:name | EN | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| pharm:formCode | CE | 0 .. 1 | R | Typ der Packung | (Mat ...ial) |
| pharm:capacityQuantity | PQ | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| pharm:asSpecializedKind | | 0 .. 1 | R | Angabe des WHO ATC Codes | (Mat ...ial) |
|  medmgmt-dataelement-1166  ATC  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | GRIC | |
| Beispiel | <pre> <XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"> <XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"> <!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--> <XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/> </XXX:generalizedMaterialKind> </XXX:asSpecializedKind> </pre> | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--------|--|------|---|------------|
| pharm:generalizedMaterialKind | | 1 .. 1 | M | | (Material) |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | MMAT | |
| h17:code | CD | 1 .. 1 | R | | (Material) |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) | |
| h17:name | ST | 0 .. 1 | R | | (Material) |
| pharm:ingredient | | 0 .. * | R | Angaben zu aktiven Wirkstoffen | (Material) |
|  medmgmt-dataelement-1159  Inhaltsstoff  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | ACTI | |
| pharm:quantity | IVL_PQ | 0 .. 1 | R | | (Material) |
| Beispiel | | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments <pre><XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/> </XXX:quantity></pre> | | | |
| Beispiel | | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs <pre><XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1"/> </XXX:quantity></pre> | | | |
| h17:numerator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Material) |
| Beispiel | | <pre><numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"> <translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg"/></pre> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|------|---------|------|--|------------|
| | | | | </numerator> | |
| hl7:translation | PQR | 0 ... * | R | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | (Material) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455 S_BMP_DOSIEREINHEIT (DYNAMIC) | |
| hl7:denominator | PQ | 1 ... 1 | R | | (Material) |
| pharm:ingredient | | 0 ... 1 | R | Code und Name des aktiven Wirkstoffs | (Material) |
| pharm:code | CE | 1 ... 1 | R | | (Material) |
| | CONF | | | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein oder @codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein | |
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | R | | (Material) |
| hl7:translation | CE | 0 ... * | R | | (Material) |
| pharm:name | EN | 1 ... 1 | M | | (Material) |

3.2.50  Material 1.2.276.0.76.10.90022 - 2014-11-01 ref pmp-

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90022 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-11-01 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input type="radio"/> Material vom 2018-12-04 ▪ <input type="radio"/> Material vom 2017-06-04 |
| Name | Material | Anzeigename | Material |

| Beschreibung | Material | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|------|---------|----------------------|-----------|--|------------|
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4025</td> <td>Inklusion</td> <td> Medikament</td> <td>2014-11-01</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.4025 | Inklusion |  Medikament | 2014-11-01 |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4025 | Inklusion |  Medikament | 2014-11-01 | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 <i>CDA Material</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 <i>IHE MedicineEntryContentModule</i> (DYNAMIC) ref ch-pharm- | | | | | | | | |

Beispiel

```

Arznei mit PZN und Wirkstoffangabe
<manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
  <code code="4213974" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="RAMIPRIL STADA 5 mg"/>
  <XXX:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>
  <XXX:ingredient classCode="ACTI">
    <XXX:quantity>
      <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"/>
      <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="1"/>
    </XXX:quantity>
    <XXX:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
      <XXX:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73">
        <originalText>Ramipril</originalText>
      </XXX:code>
    </XXX:ingredient>
  </XXX:ingredient>
</manufacturedMaterial>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----|--------|------|--------------|-----------------|
| h17:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | MMAT | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|------|--------|------|---|-----------------|
| @determinerCode | | 1 .. 1 | F | KIND | |
| h17:code | CD | 1 .. 1 | R | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI Arznei hat keine PZN ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur ▪ UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt | (Mat ...ial) |
| @nullFlavor | | 0 .. 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NA" sein oder @nullFlavor muss "NI" sein oder @nullFlavor muss "UNK" sein | |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| Beispiel | | | | Arznei mit PZN <pre><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL@ 684 mg"/></pre> | |
| Beispiel | | | | Arznei hat keine PZN <pre><code nullFlavor="NI"/></pre> | |
| Beispiel | | | | Rezeptur (ohne PZN) <pre><code nullFlavor="NA"> <originalText> <reference value="#rezeptur-17"/> </originalText> </code></pre> | |
| Beispiel | | | | Arznei, unbekannte PZN <pre><code nullFlavor="UNK"/></pre> | |
| h17:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----------|--------|------|--|-----------------|
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @value | | 1 .. 1 | R | z.B. #rezeptur-{generiertelD}, z.B.: #rezeptur-1 | |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat ...ial) |
| hl7:name | EN | 1 .. 1 | R | Bezeichnung der Arznei Zugelassenes nullFlavor: ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur | (Mat ...ial) |
| @nullFlavor | | 0 .. 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NA" sein | |
| | Beispiel | | | Name der Arznei <name>Limasin 500mg</name> | |
| | Beispiel | | | Rezeptur ohne Handelsname <name nullFlavor="NA"/> | |
| pharm:formCode | CE | 0 .. 1 | R | Darreichungsform | (Mat ...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14412 <i>DispensableDrugForm</i> (DYNAMIC) oder Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2 <i>epSOSDoseForm</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | (Mat ...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.2 <i>AKdÄ Darreichungsform</i> (DYNAMIC) | |
| pharm:asContent | | 0 .. 1 | R | Angaben zur Packung | (Mat ...ial) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------------------|------|---|------|--|-----------------|
| @classCode | | 1 .. 1 | F | CONT | |
| pharm: containerPackagedMedicine | | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | CONT | |
| @determinerCode | | 1 .. 1 | F | INSTANCE | |
| pharm: code | | 1 .. 1 | M | Pharmazentralnummer der Arznei | (Mat ...ial) |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | | | (Mat ...ial) |
| pharm: name | EN | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| pharm: capacityQuantity | PQ | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |
| pharm: ingredient | | 0 .. * | R | Angaben zu Wirkstoffen | (Mat ...ial) |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | ACTI | |
| pharm: quantity | | 0 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |
| Beispiel | | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments <XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/> </XXX:quantity> | | | |
| Beispiel | | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs <XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1"/> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----------|--------|------|---|-----------------|
| | | | | </XXX:quantity> | |
| hl7:numerator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |
| | Beispiel | | | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"> <translation value="5" code="L" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4" displayName="Milligramm"/> </numerator> | |
| hl7:translation | PQR | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | (Mat ...ial) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4 <i>AKdÄ Dosiereinheit</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:denominator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |
| pharm:ingredient | | 0 .. 1 | R | Code und Name des Wirkstoffs | (Mat ...ial) |
| pharm:code | CE | 1 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | (Mat ...ial) |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | | (Mat ...ial) |
| pharm:name | EN | 1 .. 1 | M | | (Mat ...ial) |

3.2.51  Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 - 2019-02-18 10:07:21 ref hauskomet-

| | | | |
|--------|---|----------------|---------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 ref | Gültigkeit | 2019-02-18 10:07:21 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |

| | | | |
|---|--|--------------------|---|
| Name | MedicationGoalHealthConcernAct | Anzeigename | Medikation Therapie-Intention (Hauskomet) |
| Beschreibung | Die Therapie-Intention (als eindeutige ID) einer Medikation. | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment | Medikation (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement |
| | Benutzt | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 | Containment | Entry Reference (2.1) |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.132 <i>Health Concern Act (V2)</i> (2015-08-01) ref ccda- | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 <i>CDA Act</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| | Version: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.132 <i>Health Concern Act (V2)</i> (DYNAMIC) ref ccda- | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17"/> <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.132" extension="2015-08-01"/> <id root="1.2.276.0.76.3645.239" extension="F1F4598B-5D71-4B20-B7F4-68DAF7A4D06D"/> <code code="75310-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <statusCode code="completed"/> </act> </pre> | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Alles ausklappen Alles einklappen </div> | | | |




| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|-----|--------|------|--|---------------------|
| <code>cda:act</code> | | | | | (Med ...Act) |
| <code>@classCode</code> | CS | 1 .. 1 | F | ACT SHALL contain exactly one [1..1] <code>@classCode="ACT"</code> (CodeSystem: HL7ActClass urn:oid:2.16.840.1.113883.5.6) (CONF:1198-30750). | CONF ... 0750 |
| <code>@moodCode</code> | CS | 1 .. 1 | F | EVN SHALL contain exactly one [1..1] <code>@moodCode="EVN"</code> (CodeSystem: ActMood urn:oid:2.16.840.1.113883.5.1001) (CONF:1198-30751). | CONF ... 0751 |
| <code>hl7:templateId</code> | II | 1 .. 1 | M | | (Med ...Act) |
| <code>@root</code> | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | |
| <code>cda:templateId</code> | II | 1 .. 1 | M | SHALL contain exactly one [1..1] <code>templateId</code> (CONF:1198-30752) such that it | CONF ... 0752 |
| <code>@root</code> | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.132 SHALL contain exactly one [1..1] <code>@root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.132"</code> (CONF:1198-30753). | CONF ... 0753 |
| <code>@extension</code> | st | 1 .. 1 | F | 2015-08-01 SHALL contain exactly one [1..1] <code>@extension="2015-08-01"</code> (CONF:1198-32861). | CONF ... 2861 |
| <code>cda:id</code> | II | 1 .. * | | SHALL contain at least one [1..*] <code>id</code> (CONF:1198-30754). | CONF ... 0754 |
| <code>cda:code</code> | CD | 1 .. 1 | M | SHALL contain exactly one [1..1] <code>code</code> (CONF:1198-32310). | CONF ... 2310 |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|------|---------|------|--|---------------------|
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | 75310-3 | |
| @codeSystem | | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| cda:statusCode | CS | 1 ... 1 | R | 🇺🇸 SHALL contain exactly one [1..1] statusCode (CONF:1198-30758). | CONF ... 0758 |
| cda:effectiveTime | | 0 ... 1 | | 🇺🇸 MAY contain zero or one [0..1] effectiveTime (CONF:1198-30759). | CONF ... 0759 |
| cda:entryRelationship | | 0 ... * | | 🇺🇸 Where a Health Concern needs to reference another entry already described in the CDA document instance, rather than repeating the full content of the entry, the Entry Reference template may be used to reference this entry. Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122 <i>Entry Reference</i> (2015-08-13) | CONF ... 1549 |
| wo [cda:act [cda:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.10.20.22.4.122']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | REFR 🇺🇸 SHALL contain exactly one [1..1] @typeCode="REFR" Refers to (CodeSystem: HL7ActRelationshipType urn:oid:2.16.840.1.113883.5.1002) (CONF:1198-31550). | CONF ... 1550 |

3.2.52  **Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2017-06-04** ref pmp-

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4025 ref pmp- | Gültigkeit | 2017-06-04 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> MedicationInformation vom 2014-11-01 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | MedicationInformation | Anzeigename | Medikament |
| Beschreibung | Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4025 | | |

| Label | medinfmp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------|---|--|----------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|------------|--|--|---------------------------|---------------------|--|
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1245</td> <td> Arzneimittel</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1245 | Arzneimittel | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1245 | Arzneimittel | Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 1 Template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3</td> <td>Containment</td> <td> Medikation (medmgmt)</td> <td>2018-11-02</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14</td> <td></td> <td> Medikation Gruppierung (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15</td> <td></td> <td> Aktuelle Medikation (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.312 <i>CDA ManufacturedProduct</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2 <i>IHE Product Entry</i> (DYNAMIC) ref IHE-PCC- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.53 <i>Product</i> (DYNAMIC) ref ccd1- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4025"/> <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> <!-- .. --> </manufacturedMaterial> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| </manufacturedProduct> | | | | | |
|---|------|------------------|------|---|----------|
| Alles ausklappen | | Alles einklappen | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:manufacturedProduct | | 0 ... * | | | medinfmp |
|  medmgmt-dataelement-1245  Arzneimittel  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | MANU | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | medinfmp |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4025 | |
| Eingefügt | | 1 ... 1 | M | von 1.2.276.0.76.10.90022 Material (DYNAMIC) | |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 ... 1 | M | | medinfmp |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | MMAT | |
| @determinerCode | cs | 1 ... 1 | F | KIND | |
| hl7:code | CD | 1 ... 1 | R | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI Arznei hat keine PZN ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur ▪ UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt | medinfmp |
| @nullFlavor | cs | 0 ... 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NA" sein oder @nullFlavor muss "NI" sein oder @nullFlavor muss "UNK" sein | |



| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------|-------------|---|----------|---|----------|
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| | Beispiel | Arznei mit PZN <code><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/></code> | | | |
| | Beispiel | Arznei hat keine PZN <code><code nullFlavor="NI"/></code> | | | |
| | Beispiel | Rezeptur (ohne PZN) <code><code nullFlavor="NA"></code> <code><originalText></code> <code><reference value="#rezeptur-17"/></code> <code></originalText></code> <code></code></code> | | | |
| | Beispiel | Arznei, unbekannte PZN <code><code nullFlavor="UNK"/></code> | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | R | | medinfmp |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | medinfmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | z.B. #rezeptur-{generierteID}, z.B.: #rezeptur-1 | |
| hl7:translation | CE | 0 ... * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | medinfmp |
| hl7:name | EN | 1 ... 1 | R | Bezeichnung der Arznei Zugelassenes nullFlavor: ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur | medinfmp |
| @nullFlavor | cs | 0 ... 1 | | | |
| | CONF | | | @nullFlavor muss "NA" sein | |
| | Beispiel | Name der Arznei <code><name>Limasin 500mg</name></code> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|--------------------------------|----------|---|------|---|-----------|--|
| | Beispiel | Rezeptur ohne Handelsname <name nullFlavor="NA"/> | | | | |
| pharm:formCode | CE | 0 ... 1 | R | Darreichungsform | medinfpmp | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.27 EDQMDoseForm (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:translation | CE | 0 ... * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | medinfpmp | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.454 S_BMP_DARREICHUNGSFORM (DYNAMIC) | | | | |
| pharm:asContent | | 0 ... 1 | R | Angaben zur Packung | medinfpmp | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | CONT | | |
| pharm:containerPackagedProduct | | 1 ... 1 | M | | medinfpmp | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | CONT | | |
| @determinerCode | cs | 1 ... 1 | F | INSTANCE | | |
| pharm:code | | 1 ... 1 | M | Pharmazentralnummer der Arznei | medinfpmp | |
| @codeSystem | CONF | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | | |
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | | | medinfpmp | |
| pharm:name | EN | 1 ... 1 | M | | medinfpmp | |
| pharm:formCode | CE | 0 ... 1 | R | Typ der Packung | medinfpmp | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------------|----------|--|------|--|------------|
| pharm:capacityQuantity | PQ | 1 .. 1 | M | | medinfmpmp |
| pharm:asSpecializedKind | | 0 .. 1 | R | Angabe des ATC Codes (WHO, DIMDI etc.) | medinfmpmp |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | GRIC | |
| | Beispiel | <pre> <XXX:asSpecializedKind classCode="GRIC"> <XXX:generalizedMaterialKind classCode="MMAT"> <!-- Pharmaceutical Substance (ATC Code)--> <XXX:code code=" " codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName=" " codeSystemName="WHO ATC"/> </XXX:generalizedMaterialKind> </XXX:asSpecializedKind> </pre> | | | |
| pharm:generalizedMaterialKind | | 1 .. 1 | M | | medinfmpmp |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | MMAT | |
| hl7:code | CD | 1 .. 1 | R | Codes aus Codesystem 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO ATC) oder z. B. einem der DIMDI ATC Kataloge wie 1.2.276.0.76.5.482 (atcgm2019) | medinfmpmp |
| hl7:name | ST | 0 .. 1 | R | | medinfmpmp |
| pharm:ingredient | | 0 .. * | R | Angaben zu aktiven Wirkstoffen | medinfmpmp |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | ACTI | |
| pharm:quantity | IVL_PQ | 0 .. 1 | R | | medinfmpmp |
| | Beispiel | <pre> Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments <XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/> </XXX:quantity> </pre> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---------------------------|----------|--|------|--|----------|--|
| | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs <XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%" /> <denominator xsi:type="PQ" value="1" /> </XXX:quantity> | | | | |
| hl7:numerator | PQ | 1 .. 1 | R | | medinfmp | |
| | Beispiel | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"> <translation value="5" code="v" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41" displayName="mg" /> </numerator> | | | | |
| hl7:translation | PQR | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | medinfmp | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.455 S_BMP_DOSIEREINHEIT (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:denominator | PQ | 1 .. 1 | R | | medinfmp | |
| pharm:ingredientSubstance | | 0 .. 1 | R | Code und Name des aktiven Wirkstoffs | medinfmp | |
| pharm:code | CE | 1 .. 1 | R | | medinfmp | |
| | CONF | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein oder @codeSystem muss "0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" sein | | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | medinfmp | |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | | medinfmp | |
| pharm:name | EN | 1 .. 1 | M | | medinfmp | |

3.2.53  Medikament 1.2.276.0.76.10.4025 - 2014-11-01 ref pmp-

| | | | |
|--|--|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4025 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-11-01 Andere Versionen mit dieser Id: ▪ <input type="radio"/> MedicationInformation vom 2017-06-04 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | MedicationInformation | Anzeigename | Medikament |
| Beschreibung | Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4025 | | |
| Label | medinfpmp | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.90022 | Inklusion  | Material 2014-11-01 |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.312 <i>CDA ManufacturedProduct</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2 <i>IHE Product Entry</i> (DYNAMIC) ref IHE-PCC- | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.53 <i>Product</i> (DYNAMIC) ref ccd1- | | |
| Beispiel | Beispiel <pre style="margin: 0; padding: 5px;"> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4025"/> <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> <!-- .. --> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct></pre> | | |
| Alles ausklappen Alles einklappen | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----|---------|------|---|------------|
| hl7:manufacturedProduct | | 0 ... * | | | medinfmpmp |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | MANU | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | medinfmpmp |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4025 | |
| Eingefügt | | 1 ... 1 | M | von 1.2.276.0.76.10.90022 Material (2014-11-01) | |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 ... 1 | M | | medinfmpmp |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | MMAT | |
| @determinerCode | | 1 ... 1 | F | KIND | |
| hl7:code | CD | 1 ... 1 | R | Pharmazentralnummer der Arznei, zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI Arznei hat keine PZN ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur ▪ UNK Arznei hat eine PZN, diese ist jedoch unbekannt | medinfmpmp |
| @nullFlavor | | 0 ... 1 | | | |
| | | | | @nullFlavor muss "NA" sein oder @nullFlavor muss "NI" sein oder @nullFlavor muss "UNK" sein | |
| @codeSystem | | 0 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| Beispiel | | | | Arznei mit PZN <code><code code="10333719" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" displayName="Ibu-LysinHEXAL® 684 mg"/></code> | |












| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|------------------|----------|--|------|---|----------|--|
| | Beispiel | Arznei hat keine PZN <code nullFlavor="NI"/> | | | | |
| | Beispiel | Rezeptur (ohne PZN) <code nullFlavor="NA"> <originalText> <reference value="#rezeptur-17"/> </originalText> </code> | | | | |
| | Beispiel | Arznei, unbekannte PZN <code nullFlavor="UNK"/> | | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | medinfmp | |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | medinfmp | |
| @value | | 1 .. 1 | R | z.B. #rezeptur-{generierteID}, z.B.: #rezeptur-1 | | |
| hl7:translation | CE | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | medinfmp | |
| hl7:name | EN | 1 .. 1 | R | Bezeichnung der Arznei Zugelassenes nullFlavor: ▪ NA Arznei ist eine Rezeptur | medinfmp | |
| @nullFlavor | | 0 .. 1 | | | | |
| | CONF | @nullFlavor muss "NA" sein | | | | |
| | Beispiel | Name der Arznei <name>Limasin 500mg</name> | | | | |
| | Beispiel | Rezeptur ohne Handelsname <name nullFlavor="NA"/> | | | | |
| pharm:formCode | CE | 0 .. 1 | R | Darreichungsform | medinfmp | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------------------|------|---------|------|--|----------|
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14412 <i>DispensableDrugForm</i> (DYNAMIC) oder Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2 <i>epSOSDoseForm</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:translation | CE | 0 ... * | R | Optionale Übersetzung des Codes in ein anderes Codesystem | medinfmp |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.2 <i>AKdÄ Darreichungsform</i> (DYNAMIC) | |
| pharm:asContent | | 0 ... 1 | R | Angaben zur Packung | medinfmp |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | CONT | |
| pharm:containerPackagedMedicine | | 1 ... 1 | M | | medinfmp |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | CONT | |
| @determinerCode | | 1 ... 1 | F | INSTANCE | |
| pharm:code | | 1 ... 1 | M | Pharmazentralnummer der Arznei | medinfmp |
| @codeSystem | CONF | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.4.6 (Pharmazentralnummer) | |
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | | | medinfmp |
| pharm:name | EN | 1 ... 1 | M | | medinfmp |
| pharm:capacityQuantity | PQ | 1 ... 1 | M | | medinfmp |
| pharm:ingredient | | 0 ... * | R | Angaben zu Wirkstoffen | medinfmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----------|--|------|---|------------|
| @classCode | | 1 .. 1 | F | ACTI | |
| pharm:quantity | | 0 .. 1 | R | | medinfmpmp |
| | Beispiel | Wirkstärke von 10 mg Inhaltsstoff per ml des Medikaments <XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="10" unit="mg"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="ml"/> </XXX:quantity> | | | |
| | Beispiel | Wirkstärke des Inhaltsstoffs in 1 Einheit der verabreichten Medikation: 2% des Inhaltsstoffs <XXX:quantity> <numerator xsi:type="PQ" value="2" unit="%"/> <denominator xsi:type="PQ" value="1"/> </XXX:quantity> | | | |
| hl7:numerator | PQ | 1 .. 1 | R | | medinfmpmp |
| | Beispiel | <numerator xsi:type="PQ" value="5" unit="mg"> <translation value="5" code="L" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4" displayName="Milligramm"/> </numerator> | | | |
| hl7:translation | PQR | 0 .. * | R | Optionale Übersetzung der Einheiten in ein anderes Einheitensystem | medinfmpmp |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.4 <i>AkdÄ Dosiereinheit</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:denominator | PQ | 1 .. 1 | R | | medinfmpmp |
| pharm:ingredient | | 0 .. 1 | R | Code und Name des Wirkstoffs | medinfmpmp |
| pharm:code | CE | 1 .. 1 | R | | medinfmpmp |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.73 (WHO Anatomical Therapeutic Chemical classification) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----|---------|------|--------------|------------|
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | R | | medinfmpmp |
| hl7:translation | CE | 0 ... * | R | | medinfmpmp |
| pharm:name | EN | 1 ... 1 | M | | medinfmpmp |

3.2.54  Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028 - 2017-06-04 ref pmp-

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90028 ref pmp- | Gültigkeit | 2017-06-04 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | MedicationPrecondition | Anzeigename | Medikation Vorbedingung |
| Beschreibung | Medikation Vorbedingung (codiert oder nur Text) | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 6 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name Version |
| | 1.2.276.0.76.10.4023 | Inklusion  | Einzel dosierungen (mpp 2018) 2018-11-01 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3  |  | Medikation (medmgmt) 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  |  | Medikation Gruppierung (medmgmt) 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  |  | Aktuelle Medikation (medmgmt) 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  |  | CDA Medikationsmanagement 2018-10-13 16:20:07 |
| | 1.2.276.0.76.10.4023 | Inklusion  | Einzel dosierungen (mpp 2017) 2017-06-04 |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.329 CDA Precondition (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| Beispiel | Vorbedingung 'bei Bedarf' | | |








| | |
|-----------------|---|
| | <pre> <precondition> <critereion> <code code="PRN" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="bei Bedarf"/> <text> <reference value="#prec-1"/> </text> </critereion> </precondition> </pre> |
| <p>Beispiel</p> | <p>Vorbedingung (ohne Code, nur Text)</p> <pre> <precondition> <critereion> <code nullFlavor="OTH"> <originalText>bei Sonnenaufgang</originalText> </code> <text> <reference value="#prec-1"/> </text> </critereion> </precondition> </pre> |






















Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----|---------|------|--------------|-----------------|
| hl7:precondition | | | | | (Med ...ion) |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | PRCN | |
| hl7:criterion | | 1 ... 1 | R | | (Med ...ion) |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 0 ... 1 | F | EVN.CRT | |
| hl7:code | CD | 0 ... 1 | | | (Med ...ion) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|------|--------|------|---|--------------|
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.453 <i>Vorbedingungen Medikation</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | (Med ...ion) |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | | (Med ...ion) |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | (Med ...ion) |
| @value | | 1 .. 1 | R | #prec-{generierteID}, z.B.: #prec-1 | |

3.2.55  Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024 - 2014-11-01 ref pmp-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4024 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-11-01 | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|--------------------------|--|---|--|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | |
| Name | MedicationStatementDoseInstruction | Anzeigename | Dosierung Freitext | | | | | | |
| Beschreibung | Beschreibung Dosierung Freitext: freitextliche Dosierungen werden in der zugehörigen Section.text aufgenommen und entsprechend mit einem Tag versehen (siehe Beispiel). Die freitextliche Dosierung wird hier nur unter text.reference referenziert | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4024 | | | | | | | | |
| Label | medsdipmp | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1251</td> <td> Dosierung (Freitext)</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1251 |  Dosierung (Freitext) |  Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1251 |  Dosierung (Freitext) |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | |

| <p>Benutzt von / Benutzt</p> | <p>Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3</td> <td>Containment</td> <td> Medikation (medmgmt)</td> <td>2018-11-02</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14</td> <td></td> <td> Medikation Gruppierung (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15</td> <td></td> <td> Aktuelle Medikation (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
|---|---|--|------------------------|------|---------|--|-------------|--|------------|---|---|--|------------|---|---|---|------------|--|---|---|------------------------|
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beziehung</p> | <p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) ref ad1bbr-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beispiel</p> | <p>Beispiel</p> <pre><substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4024"/> <text> <reference value="#dosinst-23"/> </text> <consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beispiel</p> | <p>Zusammenschau section.text und freitextliche Dosierung</p> <pre><section> <!-- .. --> <text> ... <content ID="dosinst-23">2 bis 3 Stck tgl.</content> </text> </section> <entry> <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"></pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```

<templateId root="1.2.276.0.76.10.4024"/>
<text>

  <reference value="#dosinst-23"/>
</text>
<consumable>

  <manufacturedProduct>

















    <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
</entry>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|---------|------|---|-----------|
| hl7:substanceAdministration | | 0 ... * | | | medsdipmp |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> 📍 🟡 🟡 medmgmt-dataelement-1251 Dosierung (Freitext) Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | medsdipmp |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4024 | |
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | | medsdipmp |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | medsdipmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | #dosinst-{generierteID}, z.B.: #dosinst-1 | |
| hl7:consumable | | 1 ... 1 | M | | medsdipmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|----|--------|------|--------------|-----------|
| hl7:manufacturedProduct | | 1 .. 1 | M | | medsdipmp |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | | | medsdipmp |
| @nullFlavor | | 1 .. 1 | F | NA | |

3.2.56  Ohne Medikation 1.2.276.0.76.10.4295 - 2019-01-27 ref pmp-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4295 ref pmp- | Gültigkeit | 2019-01-27 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|------------|--|---|---|------------------------|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | |
| Name | MedicationStatementNotOnDrugs | Anzeigename | Ohne Medikation | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Medikations-Eintrag (Medication Statement), der angibt, dass zurzeit keine medikamentöse Therapie stattfindet | | | | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4295 | | | | | | | | | | | | | |
| Label | nomedpmp | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1241</td> <td> Status medikamentöse Therapie</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1241 |  Status medikamentöse Therapie |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1241 |  Status medikamentöse Therapie |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15</td> <td>Containment</td> <td> Aktuelle Medikation (medmgmt)</td> <td>2019-02-09</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | Containment |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | Containment |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | |

Beziehung

Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4295 (2018-11-01) [ref ?](#)

Adaptation: Template 1.2.40.0.34.11.8.1.3.2 *Medikation Verordnung Entry No Drug Therapy* (2014-05-14) [ref elgabbr-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 *CDA SubstanceAdministration* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel

```
<h17:substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">




  <h17:templateId root="1.2.276.0.76.10.4295"/>
  <h17:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/>
  <h17:code code="no-medication-info" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1150.1"/>
  <h17:text>

    <h17:reference value="#nomed-1"/>
  </h17:text>
  <h17:statusCode code="completed"/>
  <h17:consumable>

    <h17:manufacturedProduct>

      <h17:manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
    </h17:manufacturedProduct>
  </h17:consumable>
</h17:substanceAdministration>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|--------|------|----------------------|----------|
| h17:substanceAdministration | | | | | nomedpmp |
|  medmgmt-dataelement-1241  Status medikamentöse Therapie  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | INT | |
| h17:templateId | II | 1 .. 1 | M | | nomedpmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4295 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|------|---------|------|---|----------|
| hl7:id | II | 0 ... * | R | | nomedpmp |
| hl7:code | CV | 1 ... 1 | M | | nomedpmp |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | no-medication-info | |
| @codeSystem | | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.1150.1 (IPS CodeSystem - Absent and Unknown Data) | |
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | | nomedpmp |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | nomedpmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | #nomed-{generierteID}, z.B.: #nomed-1 | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | nomedpmp |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:consumable | | 1 ... 1 | M | | nomedpmp |
| hl7:manufacturedProduct | | 1 ... 1 | M | | nomedpmp |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 ... 1 | | | nomedpmp |
| @nullFlavor | cs | 1 ... 1 | F | NA | |

3.2.57  Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2017-06-04 (mpp 2017) ref pmp-

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4023 pmp- ref | Gültigkeit | 2017-06-04 |
|----|---|------------|------------|

| | | | Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Einzeldosierungen vom 2018-11-01 <input type="radio"/> MedicationStatementSplitDose vom 2014-11-01 | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--|--|
| Status | Entwurf | Versions-Label | mpp 2017 | | | | | | | | |
| Name | MedicationStatementSplitDose | Anzeigename | Einzeldosierungen | | | | | | | | |
| Beschreibung | Einzeldosierungen, Einnahme: morgens, mittags, abends, zur Nacht | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4023 | | | | | | | | | | |
| Label | medssdpmp | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1138</td> <td> Dosierung</td> <td> Datensatz eMedikation - alt v2018</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1138 | Dosierung | Datensatz eMedikation - alt v2018 | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1138 | Dosierung | Datensatz eMedikation - alt v2018 | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.90028</td> <td>Inklusion</td> <td> Medikation Vorbedingung</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt | als | Name | Version | 1.2.276.0.76.10.90028 | Inklusion | Medikation Vorbedingung | DYNAMIC | | |
| Benutzt | als | Name | Version | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.90028 | Inklusion | Medikation Vorbedingung | DYNAMIC | | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 (DYNAMIC) ref ? | | | | | | | | | | |
| Beispiel | mittags 10 mg <pre> <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4023"/> <text> <reference value="#doscm-3"/> </text> </pre> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| | <pre> <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"> <event code="CD"/> </effectiveTime> <doseQuantity value="10" unit="mg"/> <consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration> </pre> |
| Beispiel | <p>morgens 1 (Stück)</p> <pre> <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4023"/> <text> <reference value="#doscm-3"/> </text> <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"> <event code="CM"/> </effectiveTime> <doseQuantity value="1" unit="{Stück}"/> <consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration> </pre> |
| Beispiel | <p>abends 1-2 (Hübe)</p> <pre> <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4023"/> <text> <reference value="#doscm-3"/> </text> <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS"> <event code="CV"/> </effectiveTime> </pre> |

```

<doseQuantity>
  <low value="1" unit="{Hübe}"/>
  <high value="2" unit="{Hübe}"/>
</doseQuantity>
<consumable>

  <manufacturedProduct>

    <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
</substanceAdministration>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen








| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|---------|------|---|-----------|
| hl7:substanceAdministration | | 0 ... * | | | medssdpmp |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> medmgmt-dataelement-1138 Dosierung Datensatz eMedikation - alt v2018 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4023 | |
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | #dosxx-{generierteID}, xx ist cm, cd, cv oder hs, z.B.: #doscm-1 | |
| Auswahl | | ... 1 | | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> ▪ hl7:effectiveTime[@value or @nullFlavor] ▪ hl7:effectiveTime[@xsi:type='EIVL_TS'] | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------------------|----------|---|------|--|-----------|
| hl7:effectiveTime | TS | | C | Einnahme einmalig / Einnahmezeitpunkt unbekannt | medssdpmp |
| wo [@value or @nullFlavor] | | | | | |
| | Beispiel | Einnahme einmalig <effectiveTime value="20170404"/> | | | |
| | Beispiel | Einnahmezeitpunkt unbekannt <effectiveTime nullFlavor="UNK"/> | | | |
| hl7:effectiveTime | EIVL_TS | | C | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts, ggf. mit Offset | medssdpmp |
| wo [@xsi:type='EIVL_TS'] | | | | | |
| hl7:event | CS | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| @code | | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20 <i>Einnahmezeitpunkte</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:offset | CS | 0 .. 1 | | | medssdpmp |
| @unit | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 <i>Zeiteinheiten (UCUM)</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:doseQuantity | IVL_PQ | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| | Beispiel | 25 mg <doseQuantity value="25" unit="mg"/> | | | |
| | Beispiel | 1 bis 2 Tabletten <doseQuantity> <low value="1" unit="{tablet}"/> <high value="2" unit="{tablet}"/> </doseQuantity> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|--------------------------|----------|---|------|--|-----------|--|
| | Beispiel | Nur textliche Beschreibung der Dosis <pre><doseQuantity nullFlavor="OTH"> <translation> <originalText> <reference value="#text-ref-1"/> </originalText> </translation> </doseQuantity></pre> | | | | |
| hl7:consumable | | 1 .. 1 | M | | medssdpmp | |
| hl7:manufacturedProduct | | 1 .. 1 | M | | medssdpmp | |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | | | medssdpmp | |
| @nullFlavor | cs | 1 .. 1 | F | NA | | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90028 <i>Medikation Vorbedingung</i> (DYNAMIC) | | |
| hl7:precondition | | 0 .. 1 | R | | medssdpmp | |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | PRCN | | |
| hl7:criterion | | 1 .. 1 | R | | medssdpmp | |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | OBS | | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN.CRT | | |
| hl7:code | CD | 0 .. 1 | | | medssdpmp | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.453 <i>Vorbedingungen Medikation</i> (DYNAMIC) | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|-----|--------|------|-------------------------------------|-----------|
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | medssdpmp |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | | medssdpmp |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | medssdpmp |
| @value | | 1 .. 1 | R | #prec-{generierteID}, z.B.: #prec-1 | |

3.2.58  Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023 - 2014-11-01 (pmp 2014) ref pmp-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4023 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-11-01 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input type="radio"/> Einzeldosierungen vom 2018-11-01 ▪ <input type="radio"/> MedicationStatementSplitDose vom 2017-06-04 | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----------|--------------------------|--|---|--|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | pmp 2014 | | | | | | |
| Name | MedicationStatementSplitDose | Anzeigename | Einzeldosierungen | | | | | | |
| Beschreibung | Einzeldosierungen, Einnahme: morgens, mittags, abends, zur Nacht | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4023 | | | | | | | | |
| Label | medssdpmp | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1253</td> <td> Dosierung (strukturiert)</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1253 |  Dosierung (strukturiert) |  Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1253 |  Dosierung (strukturiert) |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | |

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 *CDA SubstanceAdministration* (2005-09-07) [ref](#) [ad1bbr-](#)

Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 (DYNAMIC) [ref](#) [?](#)

Beispiel


```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4023"/>
  <text>
    <reference value="#doscm-3"/>
  </text>
  <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS">
    <event code="CM"/>
  </effectiveTime>
  <doseQuantity value="1"/>
  <consumable>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
</substanceAdministration>
```





















Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|----|---------|------|----------------------|-----------|
| h17:substanceAdministration | | 0 ... * | | | medssdpmp |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1253 🟡 Dosierung (strukturiert) 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |
| h17:templateId | II | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4023 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------------|---------|---------|------|--|-----------|
| hl7:text | ED | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | #dosxx-{generierteID}, xx ist cm, cd, cv oder hs, z.B.: #doscm-1 | |
| hl7:effectiveTime | EIVL_TS | 1 ... 1 | M | Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts | medssdpmp |
| hl7:event | CS | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| @code | | 1 ... 1 | R | | |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.20 Einnahmezeitpunkte (DYNAMIC) | |
| hl7:doseQuantity | IVL_PQ | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:consumable | | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:manufacturedProduct | | 1 ... 1 | M | | medssdpmp |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 ... 1 | | | medssdpmp |
| @nullFlavor | | 1 ... 1 | F | NA | |

3.2.59  Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 - 2018-11-02

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Gültigkeit | 2018-11-02 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | MedicationStatementmedmgmt | Anzeigenname | Medikation (medmgmt) |
| Beschreibung | Medikations-Eintrag (Medication Statement) | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--|------------------------|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 6 Konzepte | | | |
| | Id | Name | Datensatz | |
| | medmgmt-dataelement-1152 |  Tageshöchstdosis |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1244 |  Status |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1186 |  Verfasser des Eintrags |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1242 |  Identifikation der Therapie-Intention |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1124 |  Medikationseintrag |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| medmgmt-dataelement-1243 |  Identifikation |  Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 18 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | Containment |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| | Benutzt | als | Name | Version |
| | 1.2.276.0.76.10.90023 | Inklusion |  Einnahmedauer | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4025 | Containment |  Medikament | DYNAMIC | |
| 1.2.276.0.76.10.90028 | Inklusion |  Medikation Vorbedingung | DYNAMIC | |

| | | | |
|---|-------------|--|------------|
| 1.2.276.0.76.10.90025 | Inklusion |  Author (Body) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90020 | Inklusion |  RelatedEntity (Body) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 | Inklusion |  Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.2 | Inklusion |  Datenerfassung | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4023 | Containment |  Einzeldosierungen (mpp 2018) | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4024 | Containment |  Dosierung Freitext | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4026 | Containment |  Patienteninstruktionen | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4027 | Containment |  Grund für Medikation | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4292 | Containment |  Grund für Nichtgabe Medikation | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 | Containment |  Medikation Therapie-Intention (Hauskommet) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | Containment |  AMTS Prüfung | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.4015 | Containment |  Annotation Comment | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 | Containment |  Hauskommet Kategorie | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion |  Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 |
| 1.2.276.0.76.10.90034 | Inklusion |  Erweiterung Vorhabenerweiterung | 2019-02-09 |

BeziehungAdaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4022 *Medikation* (2017-06-04) [ref](#) [pmp-](#)Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 *CDA SubstanceAdministration* (2005-09-07) [ref](#) [ad1bbr-](#)**Beispiel****Beispiel**

```

<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3"/>
  <id root="1.2.3.999"/>
  <code code="DRUG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
  <text>

    <reference value="#med-1"/>
  </text>
  <statusCode code="active"/>

```

```
<effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
  <!-- Einnahmeperiode, optional -->
</effectiveTime>
<!-- Art der Anwendung -->
<routeCode code="20053000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" displayName="Oral use" codeSystemName="EDQM"/>
<consumable typeCode="CSM">
  <!-- Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur -->
</consumable>
<precondition>
  <!-- z. B. Bedarfsmedikation -->
</precondition>
<author>
  <!-- Autor des Medikationseintrags: verschreibender Gesundheitsdienstleister -->
</author>
<informant typeCode="INF">
  <!-- Informant dieser Information ist eine Kontaktperson/Angehöriger des Patienten -->
</informant>
<participant typeCode="AUT">
  <!-- Selbstmedikation (Quelle: Patient) -->
</participant>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <!-- Einnahme: morgens, mittags, abends, nachts -->
  <!-- Freitextliche Dosierinstruktionen -->
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
  <!-- Patienteninstruktionen (template 2.16.840.1.113883.10.20.1.49) -->
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="RSON">
  <!-- Grund der Einnahme (template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.19) -->
</entryRelationship>
```

```




<entryRelationship typeCode="COMP">
  <!-- Freitext für beliebige Kommentare oder Hinweise zwischen Leistungserbringern, ohne inhaltliche Vorgaben, mit
  Bezug auf die Medikation -->
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
    
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|------|---------|------|--|---------------|
| hl7:substanceAdministration | | 0 ... * | | | (Med ... gmt) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> medmgmt-dataelement-1124 Medikationseintrag Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | R | Vorschläge zur Änderung, Hinzufügung oder Löschung (kuratiertes Medikationsmanagement) werden ab sofort mittels der 'Hauskomet Kategorie' angegeben! | |
| | CONF | | | @moodCode muss "EVN" sein oder @moodCode muss "PRP" sein | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | |
| hl7:id | II | 0 ... * | R | | (Med ... gmt) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> medmgmt-dataelement-1243 Identifikation Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:code | CV | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|--|------|---|------------------|
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | DRUG | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code) | |
| hl7:text | ED | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) |
| @value | | 1 .. 1 | R | #med-{generierteID}, z.B.: #med-1 | |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1244 🟡 Status 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.25 ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended (DYNAMIC) | | | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90023 Einnahmedauer (DYNAMIC) | |
| Auswahl | | 0 .. 1 | | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> ▪ hl7:effectiveTime[hl7:low hl7:high] ▪ hl7:effectiveTime[hl7:width] ▪ hl7:effectiveTime[@nullFlavor='NI'] | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | ... 1 | C | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer, hier spezifisches Intervall von bis | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:lowoder hl7:high] | | | | | |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> 🎯 medmgmt-dataelement-1153 🟡 Einnahmedauer 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|-------------|---|------|---|------------------|
| @xsi:type | | 0 ... 1 | F | IVL_TS | |
| | Beispiel | Intervall bekannt <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20130321"/> <high value="20140321"/> </effectiveTime></pre> | | | |
| | Beispiel | unbekanntes Ende-Datum <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20130321"/> <high value="UNK"/> </effectiveTime></pre> | | | |
| | Beispiel | Dauermedikation <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="20130321"/> <high value="NA"/> </effectiveTime></pre> | | | |
| hl7:low | TS.DATE.MIN | 1 ... 1 | R | | (Med ... gmt) |
| hl7:high | TS.DATE.MIN | 0 ... 1 | R | | (Med ... gmt) |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | ... 1 | C | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer, hier Dauer | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:width] | | | | | |
| | Beispiel | Einnahme für zwei Wochen <pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <width value="2" unit="wk"/> </effectiveTime></pre> | | | |
| hl7:width | PQ | 1 ... 1 | R | | (Med ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----------|--|------|------------------------------|---------------|
| @unit | | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.452 <i>Zeiteinheiten (UCUM)</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:effectiveTime | TS | ... 1 | C | | (Med ... gmt) |
| wo [@nullFlavor='NI'] | | | | | |
| @nullFlavor | | 1 .. 1 | F | NI | |
| | Beispiel | Keine Informationen über die Einnahmedauer <effectiveTime nullFlavor="NI"/> | | | |
| hl7:routeCode | CE | 0 .. 1 | R | Art der Anwendung der Arznei | (Med ... gmt) |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.26 <i>EDQMRouteofAdministration</i> (DYNAMIC) | | | |
| hl7:maxDoseQuantity | RTO_PQ_PQ | 0 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
|  medmgmt-dataelement-1152  Tageshöchstdosis  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:numerator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| hl7:denominator | PQ | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| @unit | cs | 0 .. 1 | F | 1 | |
| @value | st | 0 .. 1 | F | d | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|--|------|---|------|--|---------------------|--|
| hl7:consumable | | 0 .. 1 | R | Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4025 <i>Medikament</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) | |
| wo [hl7:manufacturedProduct [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4025']]] | | | | | | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90028 <i>Medikation Vorbedingung</i> (DYNAMIC) | | |
| hl7:precondition | | 0 .. 1 | R | | (Med ... gmt) | |
| @typeCode | cs | 0 .. 1 | F | PRCN | | |
| hl7:criterion | | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) | |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | OBS | | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN.CRT | | |
| hl7:code | CD | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.453 <i>Vorbedingungen Medikation</i> (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 .. 1 | R | | (Med ... gmt) | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) | |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) | |
| @value | | 1 .. 1 | R | #prec-{generierteID}, z.B.: #prec-1 | | |




| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|----|---------|------|---|---------------|
| Auswahl | | 0 ... 1 | | Autor/Informant, entweder: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verschreibender Gesundheitsdienstleister ▪ Selbstmedikation (Quelle: Patient) ▪ Informant dieser Information ist eine Kontaktperson/Angehöriger des Patienten Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> ▪ hl7:author[hl7:assignedAuthor] ▪ hl7:informant[hl7:relatedEntity[@classCode]] ▪ hl7:participant[@typeCode='AUT'] | |
| hl7:author | | | | Autor dieser Information ist ein Gesundheitsdienstleister | (Med ... gmt) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1186 ● Verfasser des Eintrags ● Datensatz eMedikation v2019 | |
| Beispiel | | | | Autor der Information ist ein Gesundheitsdienstleister <pre> <author> <time value="20131221"/> <assignedAuthor> <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="123456701"/> <assignedPerson> <name> <given qualifier="IN">Jan H.</given> <family>Auszuz</family> </name> </assignedPerson> </assignedAuthor> </author> </pre> | |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90025 Author (Body) (DYNAMIC) | |
| @typeCode | | 0 ... 1 | F | AUT | |
| @contextControlCode | | 0 ... 1 | F | OP | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--------------------|------|--------|------|---|------------------|
| hl7:functionCode | CE | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMIC) | |
| hl7:time | TS | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| hl7:assignedAuthor | | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 .. * | R | | (Med ... gmt) |
| hl7:code | CE | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) | |
| hl7:addr | AD | 0 .. * | | | (Med ... gmt) |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | (Med ... gmt) |
| hl7:assignedPerson | | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PSN | |







| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | | | | | | | | | | | | | |
| h17:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) | | | | | | | | | | | | |
| h17:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (Med ... gmt) | | | | | | | | | | | | |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | | | | | | | | | | | | | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | | | | | | | | | | | | | |
| h17:id | II | 0 ... * | | | (Med ... gmt) | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>☉ medmgmt-dataelement-1013</td> <td>● Institutskennzeichen Apotheke</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1010</td> <td>● BSNR</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1208</td> <td>● Apotheken-IDF</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1012</td> <td>● Institutskennzeichen Krankenhaus</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> | | | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 |
| ☉ medmgmt-dataelement-1013 | ● Institutskennzeichen Apotheke | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1010 | ● BSNR | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1208 | ● Apotheken-IDF | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1012 | ● Institutskennzeichen Krankenhaus | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:name | ON | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>☉ medmgmt-dataelement-1014</td> <td>● Name Institution</td> <td>● Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </table> | | | | | | ☉ medmgmt-dataelement-1014 | ● Name Institution | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | |
| ☉ medmgmt-dataelement-1014 | ● Name Institution | ● Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Med ... gmt) | | | | | | | | | | | | |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Med ... gmt) | | | | | | | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|------|---------|------|---|---------------|
| hl7:informant | | 0 ... 1 | | Informant dieser Information ist eine Kontaktperson/Angehöriger des Patienten | (Med ... gmt) |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | INF | |
| @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP | |
| Beispiel | | | | Informant dieser Information ist eine Kontaktperson/Angehöriger des Patienten <pre> <informant> <relatedEntity classCode="CON"> <relatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> ... </name> </relatedPerson> </relatedEntity> </informant> </pre> | |
| hl7:relatedEntity | | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90020 RelatedEntity (Body) (DYNAMIC) | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | R | | |
| | CONF | | | Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 RoleClassMutualRelationship (DYNAMIC) | |
| hl7:code | CE | 0 ... 1 | | | (Med ... gmt) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 PersonalRelationshipRoleType (DYNAMIC) | |
| hl7:addr | AD | 0 ... * | | | (Med ... gmt) |




| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|----------|--|------|---|------------------|
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Med ... gmt) |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 0 ... 1 | | | (Med ... gmt) |
| hl7:relatedPerson | | 0 ... 1 | | | (Med ... gmt) |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) |
| hl7:participant | | | | Autor dieser Information ist der Patient | (Med ... gmt) |
| wo [<i>@typeCode=AUT</i>] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | AUT | |
| | Beispiel | Autor der Information ist der Patient <pre><participant typeCode="AUT"> <participantRole classCode="PAT"/> </participant></pre> | | | |
| hl7:time | TS | 0 ... 1 | R | | (Med ... gmt) |
| hl7:participantRole | | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|--------|---|------|---|---------------|
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | PAT | |
| <i>Eingefügt</i> | | 0 .. 1 | | von 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) (DYNAMIC) Kurator des Medikationseintrags - zum Zeitpunkt der Kuration war dies der Hauskomet Pflegearzt. | |
| hl7:participant | | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) |
|  medmgmt-dataelement-1188  Kurator  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | VRF | |
| @contextControlCode | cs | 0 .. 1 | F | OP | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 | |
| hl7:time | IVL_TS | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) |
| hl7:participantRole | | 1 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | ROL | |
| Beispiel | | <pre><participantRole classCode="ROL"> <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="999999901"/> <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"></pre> | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------|------|---------|------|---|---------------|
| | | | | <pre> <name> <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix> <given>Hans</given> <family>Hausarzt</family> </name> </playingEntity> <scopingEntity classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/> </scopingEntity> </participantRole> </pre> | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | Lebenslange Arztnummer (LANR) des kuratierenden Arztes | (Med ... gmt) |
| hl7:code | CE | 0 ... 1 | | | (Med ... gmt) |
| @codeSystem | CONF | 0 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) | |
| hl7:addr | AD | 0 ... * | | | (Med ... gmt) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Med ... gmt) |
| hl7:playingEntity | | 1 ... 1 | M | Angabe des kuratierenden Arztes Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [not(@nullFlavor)] | | | | | |
| hl7:scopingEntity | | 1 ... 1 | M | Angabe der Betriebsstätte des kuratierenden Arztes | (Med ... gmt) |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | cs | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---|----------|--|------|--|------------------|--|
| | Beispiel | <pre><scopingEntity classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/> </scopingEntity></pre> | | | | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | M | Angabe der Betriebsstättennummer (BSNR) des kuratierenden Arztes | (Med ... gmt) | |
| hl7:desc | ED | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) | |
| hl7:participant | | | | | (Med ... gmt) | |
| wo [@typeCode='ENT'] | | | | | | |
| Eingefügt von 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.2 Datenerfassung (DYNAMIC) | | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | ENT | | |
| @contextControlCode | cs | 0 .. 1 | F | OP | | |
| hl7:time | IVL_TS | 0 .. 1 | | | (Med ... gmt) | |
| hl7:low | IVXB_TS | | | Ersterfassungsdatum | (Med ... gmt) | |
|  medmgmt-dataelement-1092  Datum des Eintrags  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | |
| hl7:high | IVXB_TS | | | Datum letzte Änderung | (Med ... gmt) | |
|  medmgmt-dataelement-1192  Änderungsdatum  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | |







| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|---------|--------|------|---|------------------|
| hl7:participantRole | | 1 .. 1 | | | (Med ... gmt) |
| @nullFlavor | cs | 1 .. 1 | F | NA | |
| hl7:entryRelationship | | 0 .. * | R | Dosierungsangaben (Dosierschema), z. B. morgens, mittags, abends, zur Nacht Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4023 <i>Einzeldosierungen</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4023']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| hl7:sequenceNumber | INT.POS | 0 .. 1 | | Reihenfolge in der Liste der Dosierungsangaben | (Med ... gmt) |
| hl7:entryRelationship | | 0 .. 1 | R | Freitextliche Dosierinstruktionen Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4024 <i>Dosierung Freitext</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4024']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| hl7:sequenceNumber | INT.POS | 0 .. 1 | | Reihenfolge in der Liste der Dosierungsangaben | (Med ... gmt) |
| hl7:entryRelationship | | 0 .. * | R | Patienteninstruktionen Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4026 <i>Patienteninstruktionen</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:act [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4026']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | SUBJ | |
| @inversionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|----|---------|------|--|---------------|
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | R | Grund für die Medikation Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4027 <i>Grund für Medikation</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4027']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | RSON | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | R | Grund für Nichtgabe der Medikation Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4292 <i>Grund für Nichtgabe Medikation</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4292']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | COMP | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | R | Bezug zur medikamentösen Therapie-Intention Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17 <i>Medikation Therapie-Intention (Hauskomet)</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [cda:act [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.17'] and cda:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.10.20.22.4.132'] [@extension = '2015-08-01']]] | | | | | |
|  medmgmt-dataelement-1242  Identifikation der Therapie-Intention  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | REFR | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | R | Letzte AMTS-Prüfung der Medikation Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 <i>AMTS Prüfung</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:act [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | RSON | |
| hl7:entryRelationship | | 0 ... * | R | Freitext für beliebige Kommentare oder Hinweise zwischen Leistungserbringern, ohne inhaltliche Vorgaben, mit Bezug auf die Medikation Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4015 <i>Annotation Comment</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|--------|------|--|---------------|
| wo [hl7:act [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4015']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| hl7:entryRelationship | | 0 .. 1 | R | Hauskomet Kategorie Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12 Hauskomet Kategorie (DYNAMIC) | (Med ... gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.12']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| | | | | <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1189 Kennzeichen BMP Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1334 Erweiterung Druckkennzeichen Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1209 Druckkennzeichen Geschlecht Datensatz eMedikation v2019 </div> | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) |
| @value | bl | 1 .. 1 | R | | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90034 Erweiterung Vorhabenerweiterung (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | (Med ... gmt) |
| | | | | <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1220 Vorhabenspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation Datensatz eMedikation v2019 </div> | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|--------------------------|--------|------|---|-----------------------------|
| | medmgmt-dataelement-1226 | | | Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1223 | | | Vorhabensspezifische Erweiterung/ Zusatzinformation | Datensatz eMedikation v2019 |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | |
| medmgmt:extension | | | | | (Med ... gmt) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-typ/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1227 | | | Identifikation | Datensatz eMedikation v2019 |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |
| medmgmt:extension | | | | | (Med ... gmt) |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung-wert/0.2 | |
| medmgmt:valueString | | 1 .. 1 | M | | (Med ... gmt) |
| | medmgmt-dataelement-1228 | | | Wert | Datensatz eMedikation v2019 |
| @value | st | 1 .. 1 | R | | |

3.2.60  Aktuelle Medikation (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 - 2019-02-09

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Medicationcurrentmedmgmt | Anzeigename | Aktuelle Medikation (medmgmt) |
| Beschreibung | Aktuelle Medikation | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | |
| Label | amedpmp | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1044 |  Medikation |  Datensatz eMedikation v2019 |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 2 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement |
| | | | 2018-10-13 16:20:07 |
| | Benutzt | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | Containment |  Medikation Gruppierung (medmgmt) |
| | 1.2.276.0.76.10.4295 | Containment |  Ohne Medikation |
| | | | DYNAMIC |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3041 <i>Aktuelle Medikation</i> (2017-06-04) ref pmp- | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| Beispiel | Beispiel <pre><section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"></pre> | | |

```

<templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15"/>
<code code="19009-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Medication.current"/>
<title>Medikationsplan</title>
<text>

  <table>

    <thead>

      <tr>

        <th>Wirkstoff/Arzneimittel</th>
        <th>Handelsname</th>
        <th>Stärke</th>
        <th>Form</th>
        <th>Mo</th>
        <th>Mi</th>
        <th>Ab</th>
        <th>zN</th>
        <th>Einheit</th>
        <th>Hinweise</th>
        <th>Grund</th>

      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <tr ID="med-1">

        <!-- .. -->

      </tr>
    </tbody>
  </table>
</text>
<entry typeCode="DRIV">



  <!-- .. -->

</entry>
</section>

```

Alles ausklappen | Alles einklappen








| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------|----|---------|------|--------------|---------|
| hl7:section | | 0 ... * | | | amedpmp |



 medmgmt-dataelement-1044
  Medikation
  Datensatz eMedikation v2019

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------|---------|--------|------|---|---------|
| @classCode | cs | 0 .. 1 | F | DOCSECT | |
| @moodCode | cs | 0 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | amedpmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | R | | amedpmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.3041 | |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | amedpmp |
| @code | | 1 .. 1 | F | 19009-0 | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:title | ST | 1 .. 1 | M | | amedpmp |
| | CONF | | | Elementinhalt muss "Medikationsplan" sein | |
| hl7:text | SD.TEXT | 1 .. 1 | M | | amedpmp |
| Auswahl | | 1 .. * | | <p>Auswahl aus "Medikationsliste" (Template <i>Medicationstatementlist</i>) oder "zurzeit ohne Medikation" (Template <i>Ohne Medikation</i>)</p> <p>Elemente in der Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> hl7:entry welches enthält Template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 <i>Medikation Gruppierung (medmgmt)</i> (DYNAMIC) hl7:entry welches enthält Template 1.2.276.0.76.10.4295 <i>Ohne Medikation</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:entry | | 0 .. 1 | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 <i>Medikation Gruppierung (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | amedpmp |



| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----|---------|------|---|---------|
| wo [hl7:organizer [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| hl7:entry | | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4295 Ohne Medikation (DYNAMIC) | amedpmp |
| wo [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4295']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |



3.2.61 Medikation Gruppierung (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 - 2019-02-09

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Medicationstatementlistmedmgmt | Anzeigename | Medikation Gruppierung (medmgmt) |
| Beschreibung | Organizer zur Gruppierung von Medikationseinträgen | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 4 Konzepte | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1045 |  Zeilen-ID |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1126 |  Medikationsliste |  Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1048 |  Titel |  Datensatz eMedikation v2019 | |

medmgmt-dataelement-1047  Code  Datensatz eMedikation v2019

Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 2 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | Containment  | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |




| Benutzt | als | Name | Version |
|--|---|----------------------|---------|
| 1.2.276.0.76.10.90025 | Containment  | Author (Body) | DYNAMIC |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment  | Medikation (medmgmt) | DYNAMIC |

Beziehung

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4261 *Medikation Gruppierung* (2017-07-05) [ref pmp-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.305 *CDA Organizer* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------|--|---------|------|---|---------------|
| hl7:organizer | | | | | (Med ... gmt) |
| |  medmgmt-dataelement-1126 | | |  Medikationsliste  Datensatz eMedikation v2019 | |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | CLUSTER | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Med ... gmt) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|--|
| hl7:code | CD | 0 ... 1 | R | (codierte) Zwischenüberschriften | (Med ... gmt) | |
| | ☉ medmgmt-dataelement-1047 | ☀ Code | ☀ Datensatz eMedikation v2019 | | | |
| | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.451 <i>S_BMP_ZWISCHENUEBERSCHRIFT</i> (DYNAMIC) | | | | |
| hl7:originalText | ED | 0 ... 1 | R | Freitextliche Zwischenüberschrift | (Med ... gmt) | |
| | ☉ medmgmt-dataelement-1048 | ☀ Titel | ☀ Datensatz eMedikation v2019 | | | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | R | | (Med ... gmt) | |
| @code | CONF | 0 ... 1 | F | completed | | |
| hl7:author | | 0 ... * | | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90025 <i>Author (Body)</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) | |
| wo [hl7:assignedAuthor] | | | | | | |
| hl7:component | | 0 ... * | R | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 <i>Medikation (medmgmt)</i> (DYNAMIC) | (Med ... gmt) | |
| wo [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3']]] | | | | | | |
| @typeCode | cs | 0 ... 1 | F | COMP | | |
| @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true | | |
| hl7:sequenceNumber | INT.POS | 0 ... 1 | | Reihenfolge in der Liste | (Med ... gmt) | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------|--------------------------|------|------|--------------|-----------------------------|
| | medmgmt-dataelement-1045 | | | Zeilen-ID | Datensatz eMedikation v2019 |

3.2.62 AMTS Prüfung 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 - 2019-02-12


| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | Gültigkeit | 2019-02-12 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Medicationtherapysafetychecks | Anzeigename | AMTS Prüfung |
| Beschreibung | AMTS Prüfung | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt von | als | Name |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment | Medikation (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement |
| | Benutzt | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.90014 | Containment | Performer (Body) |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 CDA Act (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------|----|------|------|--------------|---------------|
| h17:act | | | | | (Med ... cks) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--------|--------|------|--|--------------|
| @classCode | CS | 1 .. 1 | F | ACT | |
| @moodCode | CS | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Med ...cks) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Med ...cks) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | AMTSCHK | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.5.1 (medmgmt-codesystem-1) | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 .. 1 | R | | (Med ...cks) |
| @value | ts | 1 .. 1 | R | | |
| hl7:performer | | 0 .. * | | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.90014 Performer (Body) (DYNAMIC) | (Med ...cks) |
| wo [@typeCode = 'PRF'] [hl7:assignedEntity] | | | | | |

3.2.63 Stillzeit (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 - 2019-02-09

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Mothercurrentlybreastfeedingmedgmt | Anzeigename | Stillzeit (medmgmt) |
| Beschreibung | Mutter stillt momentan | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| Label | mbfpmp | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | Containment | Gesundheitsbelange (medmgmt) | 2019-02-09 | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt | als | Name | Version | | |
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion | Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4021 <i>Stillzeit</i> (2016-01-02) ref pmp- | | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13"/> <code code="63895-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Breast feeding"/> <text> <reference value="#mbf"/> </text> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="BL" value="true"/> </observation></pre> | | | | |
| <div style="display: flex; gap: 10px;"> Alles ausklappen Alles einklappen </div> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:observation | | 0 ... * | | | mbfpmp |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | OBS | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|------|--------|------|---|--------|
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | mbfpmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.13 | |
| hl7:id | II | 0 .. * | | | mbfpmp |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | mbfpmp |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 63895-7 | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:text | ED | 1 .. 1 | M | Reference in den Text der Section | mbfpmp |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | M | | mbfpmp |
| @value | | 1 .. 1 | F | #mbf | |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | mbfpmp |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:value | BL | 1 .. 1 | M | | mbfpmp |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | mbfpmp |

- ⦿ medmgmt-dataelement-1189
 ● Kennzeichen BMP
● Datensatz eMedikation v2019
- ⦿ medmgmt-dataelement-1334
 ● Erweiterung Druckkennzeichen
● Datensatz eMedikation v2019

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|-----|---------|------|--|--------|
| | | | | medmgmt-dataelement-1209 Druckkennzeichen Geschlecht Datensatz eMedikation v2019 | |
| @url | url | 1 ... 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 ... 1 | M | | mbfpmp |
| @value | bl | 1 ... 1 | R | | |

3.2.64 CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011 - 2011-12-19 ref hl7de-

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90011 ref hl7de- | Gültigkeit | 2011-12-19 |
| Status | Aktiv | Versions-Label | |
| Name | OrganizationElements | Anzeigename | CDA Organization Elements |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 5 Konzepten | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1013 | Institutskennzeichen Apotheke | Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1010 | BSNR | Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1208 | Apotheken-IDF | Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1012 | Institutskennzeichen Krankenhaus | Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1014 | Name Institution | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 0 Transactions und 19 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|---|---|---|------------------------|
| 1.2.276.0.76.10.2029 | Inklusion |  CDA author (pmp) | 2014-09-17 |
| 1.2.276.0.76.10.3133 |  |  Leistungserbringer-Kommentar | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| 1.2.276.0.76.10.2030 | Inklusion |  CDA custodian (pmp) | 2014-09-17 |
| 1.2.276.0.76.10.90012 | Inklusion |  CDA Assigned Entity Elements | 2011-12-19 |
| 1.2.276.0.76.10.2019 |  |  CDA authenticator | 2014-08-25 |
| 1.2.276.0.76.10.2020 |  |  CDA legalAuthenticator | 2014-08-25 |
| 1.2.276.0.76.10.90014 |  |  Performer (Body) | 2014-03-12 10:18:42 |
| Benutzt von / Benutzt | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4029 |  |  Bezug zu Abgabe des Medikaments | 2014-12-21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 |  |  AMTS Prüfung | 2019-02-12 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 |  |  Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 |  |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 1.2.276.0.76.10.90025 | Inklusion |  Author (Body) | 2014-12-21 |
| 1.2.276.0.76.10.4028 |  |  Bezug zu Verordnung des Medikaments | 2014-12-21 |
| 1.2.276.0.76.10.4257 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 |
| 1.2.276.0.76.10.4256 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |  |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.18 | Containment |  Pflegearzt (Kurator) | 2019-02-11 |

Alles ausklappen

Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|-----|--------|------|--|-------------|
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| h17:id | II | 0 .. * | | | (Org...nts) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1013 Institutskennzeichen Apotheke Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010 BSNR Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208 Apotheken-IDF Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012 Institutskennzeichen Krankenhaus Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 1 .. 1 | M | | (Org...nts) |
| | | | | medmgmt-dataelement-1014 Name Institution Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 .. * | | | (Org...nts) |
| h17:addr | AD | 0 .. 1 | | | (Org...nts) |

3.2.65 Patientenidentifikation 1.2.276.0.76.10.90024 - 2014-12-17 ref hl7de-

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90024 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-12-17 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | PatientIdentifier | Anzeigename | Patientenidentifikation |
| Beschreibung | Patientenidentifikation, z. B. eGK Nummer | | |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 2 Konzepten | | |

| Id | Name | Datensatz |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1016 | Versicherten-ID | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1128 | Patienten-ID | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|--|-----------|----------------------------|------------------------|
| 1.2.276.0.76.10.2028 | Inklusion | CDA recordTarget (pmp) | 2017-06-04 |
| 1.2.276.0.76.10.2028 | Inklusion | CDA recordTarget (pmp) | 2014-09-17 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | Inklusion | CDA recordTarget (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |










Benutzt von / Benutzt

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--|------|------|--------------|-------------|
| hl7:id | II | | | | (Pat...ier) |
| medmgmt-dataelement-1016 Versicherten-ID Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1128 Patienten-ID Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| Beispiel | eGK Nummer als Patientenidentifikation <id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/> | | | | |

3.2.66 Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026 - 2014-11-01 ref pmp-

| | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4026 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-11-01 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | PatientInstructions | Anzeigename | Patienteninstruktionen |

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------|
| Beschreibung | Patienteninstruktionen | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4026 | | | |
| Label | patinfofmp | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | |
| | Id | Name | Datensatz | |
| | medmgmt-dataelement-1079 |  Einnahmehinweis |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment |  Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14  | |  Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15  | |  Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1  | |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 <i>CDA Act</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.49 <i>Patient instructions</i> (DYNAMIC) ref ccd1- | | | |
| | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 <i>epsOS Patient Medication Instructions</i> (DYNAMIC) ref epsos- | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><act classCode="ACT" moodCode="INT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4026"/> <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/> <text> <reference value="#patinfo-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> </act></pre> | | | |


```
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <!-- .. -->
</entryRelationship>
</act>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|------|--------|------|--|-----------------|
| hl7:act | | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> 📍 medmgmt-dataelement-1079 🟡 Einnahmehinweis 🟡 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | ACT | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | INT | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4026 | |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| @code | | 1 .. 1 | F | PINSTRUCT | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary) | |
| hl7:text | ED | 1 .. 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die Zusatzinformationen für den Patienten, Informationen zur alternativen Einnahme und Informationen zur Arznei angeführt sind) | pati... opmp |
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| @value | | 1 .. 1 | R | #patinfo-{generierteID}, z.B.: #patinfo-1 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------|---------------|--------|------|---|-----------------|
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:entryRelationship | | 0 .. * | R | Codierter Hinweis | pati... opmp |
| wo [hl7:act] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | SUBJ | |
| @inversionInd | bl | 1 .. 1 | F | true | |
| hl7:act | | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | INFRM | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | RQO | |
| Beispiel | | | | <pre><act classCode="INFRM" moodCode="RQO"> <code code="E2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.6.60.4.5.5" displayName="während der Mahlzeiten"/> </act></pre> | |
| hl7:code | CE (Beispiel) | 1 .. 1 | M | | pati... opmp |
| | CONF | | | Beispiele von der Wert von @code stehen in den Value Set 2.16.840.1.113883.2.6.60.4.11.5 AKdÄ Hinweise (DYNAMIC) | |

3.2.67  Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014 - 2014-03-12 10:18:42 ref hl7de-

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90014 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-03-12 10:18:42 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | PerformerBody | Anzeigename | Performer (Body) |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Beschreibung | Verantwortliche ausführende Organisation (performer) | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 6 Templates, Benutzt 1 Template | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 1.2.276.0.76.10.4029 | Inklusion | Bezug zu Abgabe des Medikaments | 2014-12-21 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 | Containment | AMTS Prüfung | 2019-02-12 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90012 | Inklusion | CDA Assigned Entity Elements | DYNAMIC | |






















Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|--------|---------|------|--------------|-------------|
| @typeCode | | 1 ... 1 | F | PRF | |
| h17:time | IVL_TS | 0 ... 1 | | | (Per...ody) |
| h17:assignedEntity | | 1 ... 1 | M | | (Per...ody) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| h17:id | II | 1 ... * | R | | (Per...ody) |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | R | | (Per...ody) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|-----|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | R | | (Per...ody) |
| hl7:assignedPerson | | 1 ... 1 | M | | (Per...ody) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Per...ody) |
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | (Per...ody) |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (Per...ody) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1013 Institutskennzeichen Apotheke Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010 BSNR Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208 Apotheken-IDF Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012 Institutskennzeichen Krankenhaus Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | (Per...ody) |
| <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1014 Name Institution Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Per...ody) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------|----|---------|------|--------------|-------------|
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | (Per...ody) |

3.2.68  CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010 - 2011-12-19 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90010 ref hl7de- | Gültigkeit | 2011-12-19 |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | |
| Name | PersonElements | Anzeigename | CDA Person Elements |
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| | Benutzt von 0 Transactions und 20 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von | als | Name Version |
| | 1.2.276.0.76.10.2029 | Inklusion |  CDA author (pmp) 2014-09-17 |
| | 1.2.276.0.76.10.3133 |  |  Leistungserbringer-Kommentar 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement 2018-10-13 16:20:07 |
| | 1.2.276.0.76.10.90012 | Inklusion |  CDA Assigned Entity Elements 2011-12-19 |
| | 1.2.276.0.76.10.2019 |  |  CDA authenticator 2014-08-25 |
| | 1.2.276.0.76.10.2020 |  |  CDA legalAuthenticator 2014-08-25 |
| | 1.2.276.0.76.10.90014 |  |  Performer (Body) 2014-03-12 10:18:42 |
| | 1.2.276.0.76.10.4029 |  |  Bezug zu Abgabe des Medikaments 2014-12-21 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.20 |  |  AMTS Prüfung 2019-02-12 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 |  |  Medikation (medmgmt) 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 |  |  Medikation Gruppierung (medmgmt) 2019-02-09 |

| | | | | |
|---|-------------|--|---|------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 1.2.276.0.76.10.90020 | Inklusion | | RelatedEntity (Body) | 2014-08-25 |
| 1.2.276.0.76.10.4257 | | | Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 |
| 1.2.276.0.76.10.4256 | | | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | | | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 |
| 1.2.276.0.76.10.90025 | Inklusion | | Author (Body) | 2014-12-21 |
| 1.2.276.0.76.10.4028 | | | Bezug zu Verordnung des Medikaments | 2014-12-21 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.10.2 | Containment | | Kuratierender Arzt (Medikationseintrag) | 2018-09-07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.18 | Containment | | Pflegearzt (Kurator) | 2019-02-11 |

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----|---------|------|--------------|-----------------|
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| h17:name | PN | 1 ... 1 | M | | (Per ...nts) |

3.2.69 **Personenname 1.2.276.0.76.10.90030 - 2018-04-11** ref hl7de-

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90030 ref hl7de- | Gültigkeit | 2018-04-11 |
| Status | Aktiv | Versions-Label | |
| Name | Personenname | Anzeigename | Personenname |
| Beschreibung | Template Personenname | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |

Assoziiert mit 6 Konzepte

| Id | Name | Datensatz |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| medmgmt-dataelement-1017 | Vorname | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1020 | Vorsatzwort | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1019 | Titel | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1018 | Nachname | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1234 | Name | Datensatz eMedikation v2019 |
| medmgmt-dataelement-1021 | Namenszusatz | Datensatz eMedikation v2019 |

Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 0 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|--|-----------|----------------------------|------------------------|
| 1.2.276.0.76.10.2028 | Inklusion | CDA recordTarget (pmp) | 2017-06-04 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.4 | Inklusion | CDA recordTarget (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |


Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----|---------|------|---|---------------|
| h17:name | PN | 1 ... * | R | Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. | (Per ... ame) |
| medmgmt-dataelement-1234 Name Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
















| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|----------------------|----------|---|------|--|---------------|--|
| | Beispiel | Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name> | | | | |
| | Beispiel | Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>, MdB</suffix> </name> | | | | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Titel | (Per ... ame) | |
| wo [@qualifier='AC'] | | | | | | |
| | | | | medmgmt-dataelement-1019 Titel Datensatz eMedikation v2019 | | |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | AC | | |
| hl7:given | ENXP | 0 ... * | | Vorname | (Per ... ame) | |
| | | | | medmgmt-dataelement-1017 Vorname Datensatz eMedikation v2019 | | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Namenszusatz | (Per ... ame) | |
| wo [@qualifier='NB'] | | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|--------------------------|---------|------|--------------|-----------------------------|
| | medmgmt-dataelement-1021 | | | Namenszusatz | Datensatz eMedikation v2019 |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | NB | |
| hl7:prefix | ENXP | 0 ... * | | Vorsatzwort | (Per ... ame) |
| wo [@qualifier='VV'] | | | | | |
| | medmgmt-dataelement-1020 | | | Vorsatzwort | Datensatz eMedikation v2019 |
| @qualifier | set_cs | 1 ... 1 | F | VV | |
| hl7:family | ENXP | 0 ... * | | Nachname | (Per ... ame) |
| | medmgmt-dataelement-1018 | | | Nachname | Datensatz eMedikation v2019 |
| hl7:suffix | ENXP | 0 ... * | | Suffix | (Per ... ame) |

3.2.70 Pflegearzt (Kurator) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 - 2019-08-22 11:16:37

| | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.25 | Gültigkeit | 2019-08-22 11:16:37 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | PflegearztKuratorParticipantHeader | Anzeigename | Pflegearzt (Kurator) |
| Beschreibung | | | |
| Der Arzt, der sich gegenüber der Zentralen Infrastruktur (ZI) als zuständig für die Pflege der Hauskomet Medikationsinformation und Stammdaten des Patienten ausgibt. | | | |

Im Standardfall ist dieser personenidentisch mit dem HZV-Betreuarzt. Der Hauskomet-Pflegearzt ist der Arzt, dessen BSNR von der ZI bei Änderungen benachrichtigt wird. Daher muss der HK-Pflegearzt Gesamtvertragsteilnehmer sein. Im Rahmen der Stellvertreterregelung der HZV können auch nicht Vertragsteilnehmende Ärzte Leistungen im Rahmen von Hauskomet erbringen, die VSW seitig aber dem HK-Pflegearzt technisch zuzuordnen sind.

| | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Klassifikation | CDA Header Level Template | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 6 Konzepte | | | |
| | Id | Name | Datensatz | |
| | medmgmt-dataelement-1328 |  Institutskennzeichen Krankenhaus |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1324 |  Telefonnummer |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1314 |  LANR |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1326 |  Organisation |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| | medmgmt-dataelement-1313 |  Kurator |  Datensatz eMedikation v2019 | |
| medmgmt-dataelement-1325 |  E-Mail |  Datensatz eMedikation v2019 | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 2 Templates | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Inklusion |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| | Benutzt | als | Name | Version |
| 2.16.840.1.113883.10.12.152 | Containment |  CDA Person | DYNAMIC | |
| 2.16.840.1.113883.10.12.151 | Containment |  CDA Organization | DYNAMIC | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.108 <i>CDA participant</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | |

Beispiel

Beispiel

```
<participant typeCode="VRF" contextControlCode="OP">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.18"/>
  <time>

    <low value="20181120094810"/>
  </time>
  <associatedEntity classCode="CAREGIVER">

    <id root="1.2.276.0.76.4.16" extension="999999901"/>
    <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

      <name>

        <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix>
        <given>Max</given>
        <family>Mustermann</family>
      </name>
    </associatedPerson>
    <scopingOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">

      <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="521111100"/>
      <name>Hausarztpraxis Mustermann</name>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>
```

Alles ausklappen

Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|---|--------|------|--------------|-----------------|
| h17:participant | | 0 .. * | | | (Pfl... der) |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> 📍 medmgmt-dataelement-1313 👤 Kurator 📁 Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;"> CONF Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10901 ParticipationType (DYNAMIC) </div> | | | | |
| @contextControlCode | cs | 0 .. 1 | F | OP | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|----------------------|--------|---------|------|--|----------------|
| hl7:functionCode | CE | 0 ... 1 | | | (Pf... der) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:time | IVL_TS | 0 ... 1 | | | (Pf... der) |
| hl7:associatedEntity | | 1 ... 1 | R | | (Pf... der) |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | R | | |
| | CONF | | | Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19313 <i>RoleClassAssociative</i> (DYNAMIC) | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | (Pf... der) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ⊙ medmgmt-dataelement-1328 ● Institutskennzeichen Krankenhaus ● Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1314 ● LANR ● Datensatz eMedikation v2019 | |
| hl7:code | CE | 0 ... 1 | | | (Pf... der) |
| | CONF | | | muss aus der Konzeptdomäne "RoleCode" gewählt werden oder @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.5.111" sein | |
| hl7:addr | AD | 0 ... * | | | (Pf... der) |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | (Pf... der) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ⊙ medmgmt-dataelement-1324 ● Telefonnummer ● Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1325 ● E-Mail ● Datensatz eMedikation v2019 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------------|----|---------|------|---|-----------------|
| hl7:associatedPerson | | 0 ... 1 | | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 CDA Person (DYNAMIC) | (Pfl... der) |
| hl7:scopingOrganization | | 0 ... 1 | | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 CDA Organization (DYNAMIC) | (Pfl... der) |


🎯 medmgmt-dataelement-1326
🟡 Organisation
🟡 Datensatz eMedikation v2019

3.2.71 🟡 Bezug zur Therapie-Intention 1.2.276.0.76.10.4296 - 2019-01-27 ref pmp-

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4296 ref pmp- | Gültigkeit | 2019-01-27 |
| Status | 🟡 Entwurf | Versions-Label | |
| Name | PlanofCareActivityReferenceSubstanceAdministration | Anzeigename | Bezug zur Therapie-Intention |
| Beschreibung | Dieses Template referenziert (über die ID) eine medikamentöse Therapie Intention (Behandlungsplan) | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.42 <i>Planned Medication Activity (V2)</i> (2014-06-09) ref ccda- | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre><hl7:substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"> <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.10.4296"/> <hl7:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/> <hl7:consumable> <hl7:manufacturedProduct> <hl7:manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/> </hl7:manufacturedProduct> </hl7:consumable> </hl7:substanceAdministration></pre> | | |
| Alles ausklappen Alles einklappen | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|-----|---------|------|---|--------------|
| hl7:substanceAdministration | | | | | (Pla... ion) |
| @classCode | cs | 1 ... 1 | F | SBADM | |
| @moodCode | cs | 1 ... 1 | F | INT | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Pla... ion) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4296 | |
| hl7:id | II | 0 ... * | R | Referenz zu einer medikamentösen Therapie-Intention (Behandlungsplan) | (Pla... ion) |
| hl7:consumable | | 1 ... 1 | M | | (Pla... ion) |
| hl7:manufacturedProduct | | 1 ... 1 | M | | (Pla... ion) |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 ... 1 | | | (Pla... ion) |
| @nullFlavor | cs | 1 ... 1 | F | NA | |

3.2.72 Status Schwangerschaft (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 - 2019-02-09

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | Gültigkeit | 2019-02-09 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Pregnancystatusmedmgmt | Anzeigename | Status Schwangerschaft (medmgmt) |
| Beschreibung | Status Schwangerschaft | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |

Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 2 Templates

| Benutzt von | als | Name | Version |
|---|-------------|------------------------------|------------------------|
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.11 | Containment | Gesundheitsbelange (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

| Benutzt | als | Name | Version |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 1.2.276.0.76.10.4255 | Containment | Erwarteter Geburtstermin | DYNAMIC |
| 1.2.276.0.76.10.90033 | Inklusion | Erweiterung Druckkennzeichen | 2019-02-09 |

Beziehung

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4020 *Status Schwangerschaft* (2017-06-04) [ref](#) [pmp-](#)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4020 *Status Schwangerschaft* (2015-01-31) [ref](#) [pmp-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 *CDA Observation* (2005-09-07) [ref](#) [ad1bbr-](#)

Kopie: Template 1.2.276.0.76.10.4043 *Status Schwangerschaft* (DYNAMIC) [ref](#) [aktin-](#)

Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 *Pregnancy Observation* (DYNAMIC) [ref](#) [epsos-](#)

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12"/>
  <code code="11449-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Pregnancy status"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="CV" code="0" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.46" displayName="Patient nicht schwanger"/>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <!-- Erwarteter Geburtstermin (1.2.276.0.76.10.4255) -->
  </entryRelationship>
</observation>
```

Alles ausklappen | Alles einklappen









| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|----|--------|------|--------------|---------------------|
| hl7:observation | | 1 .. 1 | | | (Pre ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|------|--------|------|---|---------------------|
| @classCode | CS | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | CS | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | | | (Pre ... gmt) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.12 | |
| hl7:id | | 0 .. 1 | | | (Pre ... gmt) |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | (Pre ... gmt) |
| @code | | 1 .. 1 | F | 11449-6 | |
| @codeSystem | CONF | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Pre ... gmt) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | | | (Pre ... gmt) |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Pre ... gmt) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | TS | 0 .. 1 | | | (Pre ... gmt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|------|--------|------|--|---------------|
| hl7:value | CV | 1 .. 1 | R | | (Pre ... gmt) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.46 Schwangerschafts-Status (DYNAMIC) | |
| hl7:entryRelationship | | 0 .. 1 | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4255 Erwarteter Geburtstermin (DYNAMIC) | (Pre ... gmt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4255']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 .. 1 | F | COMP | |
| Eingefügt | | 0 .. 1 | R | von 1.2.276.0.76.10.90033 Erweiterung Druckkennzeichen (2019-02-09) | |
| medmgmt:extension | | 0 .. 1 | R | | (Pre ... gmt) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ⊙ medmgmt-dataelement-1189 ● Kennzeichen BMP ● Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1334 ● Erweiterung Druckkennzeichen ● Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1209 ● Druckkennzeichen Geschlecht ● Datensatz eMedikation v2019 | |
| @url | url | 1 .. 1 | F | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | |
| medmgmt:valueBoolean | | 1 .. 1 | M | | (Pre ... gmt) |
| @value | bl | 1 .. 1 | R | | |

3.2.73 ● Reaktion/Manifestation 1.2.276.0.76.10.4258 - 2017-06-04 ref hl7de-

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4258 ref hl7de- | Gültigkeit | 2017-06-04 |
|----|---|------------|------------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------|-----------------|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | |
| Name | ReactionManifestation | Anzeigename | Reaktion/Manifestation | | |
| Beschreibung | Reaktion/Manifestation der Allergie/Unverträglichkeit | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4258 | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version | |
| | 1.2.276.0.76.10.4257 | Containment |  Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 | |
| | 1.2.276.0.76.10.4256 |  |  Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 |  |  Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 <i>CDA Observation</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> | | <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| h17:observation | | 1 .. 1 | | | (Rea ...ion) |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| h17:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Rea ...ion) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4258 | |
| h17:id | | 0 .. 1 | | | (Rea ...ion) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|------|--------|------|---|-------------|
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | R | | (Rea...ion) |
| @code | | 0 .. 1 | F | 75326-9 | |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| @displayName | | 0 .. 1 | F | Problem | |
| hl7:text | ED | 0 .. 1 | | Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section | (Rea...ion) |
| hl7:reference | URL | 1 .. 1 | | | (Rea...ion) |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Rea...ion) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | TS | 0 .. 1 | | | (Rea...ion) |
| hl7:value | CD | 1 .. 1 | R | Code für die Art der Reaktion | (Rea...ion) |

3.2.74  Grund für Medikation 1.2.276.0.76.10.4027 - 2016-01-31 ref pmp-






| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4027 ref pmp- | Gültigkeit | 2016-01-31 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | Reasonformedication | Anzeigename | Grund für Medikation |
| Beschreibung | Grund für die Medikation, in diesem Kontext ausgedrückt in patientenverständlicher Sprache. | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4027 | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Label | reapmp | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | |
| | Benutzt von | als | Name | Version | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 | |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | |
| | Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 <i>IHE Problem Entry</i> (DYNAMIC) ref IHE-PCC- | | | | |
| | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.28 <i>Problem observation</i> (DYNAMIC) ref ccd1- | | | | |
| Beispiel | <p>Beispiel</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4026"/> <code code="75326-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Problem"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#rea-1"/> </originalText> </value> </observation> </pre> | | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| hl7:observation | | 1 .. 1 | | | reapmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----------|--|------|--|--------|
| @classCode | | 1 ... 1 | F | OBS | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | reapmp |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4027 | |
| hl7:id | | 0 ... * | | | reapmp |
| hl7:code | CE | 1 ... 1 | M | | reapmp |
| @code | | 1 ... 1 | F | 75326-9 | |
| @codeSystem | CONF | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:statusCode | CS | 1 ... 1 | M | | reapmp |
| @code | CONF | 1 ... 1 | F | completed | |
| hl7:value | CD | 1 ... 1 | R | Zunächst nur freitextlich formuliert, ausgedrückt in patientenverständlicher Sprache | reapmp |
| @nullFlavor | cs | 1 ... 1 | F | OTH | |
| | Beispiel | Freitextlich formulierter Grund für die Medikation (als Referenz zum Text in der section) <pre> <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#rea-1"/> </originalText> </value> </pre> | | | |
| hl7:originalText | ED | 1 ... 1 | M | | reapmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------|-----|--------|------|-----------------------------------|--------|
| hl7:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | reapmp |
| @value | | 1 .. 1 | R | #rea-{generierteID}, z.B.: #rea-1 | |

3.2.75 Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 - 2019-07-16 12:58:04

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4292 | Gültigkeit | 2019-07-16 12:58:04 Andere Versionen mit dieser Id: |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Reasonmedicationnotgiven vom 2018-11-07 |
| Name | Reasonmedicationnotgiven | Anzeigename | Grund für Nichtgabe Medikation |
| Beschreibung | Grund für die Nichtgabe (Absetzen etc.) Medikation. | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4292 | | |
| Label | endreapmp | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 2 Konzepten | | |
| | Id | Name | Datensatz |
| | medmgmt-dataelement-1190 |  Kennzeichen historisiert |  Datensatz eMedikation v2019 |
| | medmgmt-dataelement-1191 |  Historisierungsbegründung |  Datensatz eMedikation v2019 |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates | | |
| | Benutzt von | als | Name Version |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Containment | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |

Beziehung

Version: Template 1.2.276.0.76.10.4292 *Grund für Nichtgabe Medikation* (2018-11-07) [ref](#) [pmp-](#)

Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4027 *Grund für Medikation* (2016-01-31) [ref](#) [pmp-](#)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 *CDA SubstanceAdministration* (2005-09-07) [ref](#) [ad1bbr-](#)

Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 *IHE Problem Entry* (DYNAMIC) [ref](#) [IHE-PCC-](#)

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.28 *Problem observation* (DYNAMIC) [ref](#) [ccd1-](#)

Beispiel

```

<observation>

  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4292"/>
  <code code="72113-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="CE">

    <originalText>

      <reference value="#endrea"/>
    </originalText>
  </value>
</observation>
    
```














Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|-----------------|----|--------------------------|------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| h17:observation | | 1 .. 1 | | | endreapmp | |
| | | medmgmt-dataelement-1190 | | Kennzeichen historisiert | | Datensatz eMedikation v2019 |
| | | medmgmt-dataelement-1191 | | Historisierungsbegründung | | Datensatz eMedikation v2019 |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----------|---|------|--------------------------------------|-----------|
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4292 | |
| hl7:id | | 0 .. * | | | endreapmp |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 72113-4 | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:value | CD | 1 .. 1 | R | Zunächst nur freitextlich formuliert | endreapmp |
| @nullFlavor | cs | 1 .. 1 | F | OTH | |
| | Beispiel | Freitextlich formulierter Grund für die Nichtgabe der Medikation (als Referenz zum Text in der section) <pre> <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#endrea-1"/> </originalText> </value> </pre> | | | |
| hl7:originalText | ED | 1 .. 1 | M | | endreapmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------|-----|---------|------|--------------------------------------|-----------|
| h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M | | endreapmp |
| @value | | 1 ... 1 | R | #rea-{generierteID}, z.B.: #endrea-1 | |

3.2.76  Grund für Nichtgabe Medikation 1.2.276.0.76.10.4292 - 2018-11-07 ref pmp-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4292 ref pmp- | Gültigkeit | 2018-11-07 Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Reasonmedicationnotgiven vom 2019-07-16 12:58:04 | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|-----------|--------------------------|--|---|--------------------------|---|---|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | |
| Name | Reasonmedicationnotgiven | Anzeigename | Grund für Nichtgabe Medikation | | | | | | | |
| Beschreibung | Grund für die Nichtgabe (Absetzen etc.) Medikation. | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4292 | | | | | | | | | |
| Label | endreapmp | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 2 Konzepte | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1190</td> <td> Kennzeichen historisiert</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1191</td> <td> Historisierungsbegründung</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1190 |  Kennzeichen historisiert |  Datensatz eMedikation v2019 | medmgmt-dataelement-1191 |  Historisierungsbegründung |  Datensatz eMedikation v2019 |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1190 |  Kennzeichen historisiert |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1191 |  Historisierungsbegründung |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Beziehung | Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4027 <i>Grund für Medikation</i> (2016-01-31) ref pmp- Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 <i>CDA SubstanceAdministration</i> (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | | | | | | |

Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 *IHE Problem Entry* (DYNAMIC) [ref IHE-PCC-](#)

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.28 *Problem observation* (DYNAMIC) [ref ccd1-](#)

Beispiel

Beispiel

```
<observation>

  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4292"/>
  <code code="72113-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="CE">

    <originalText>


      <reference value="#endrea"/>
    </originalText>
  </value>
</observation>
```

Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|-----|--------|------|--|-----------|
| hl7:observation | | 1 .. 1 | | | endreapmp |
| | | | | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>🎯 medmgmt-dataelement-1190 ● Kennzeichen historisiert ● Datensatz eMedikation v2019</p> <p>medmgmt-dataelement-1191 ● Historisierungsbegründung ● Datensatz eMedikation v2019</p> </div> | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4292 | |
| hl7:id | | 0 .. * | | | endreapmp |
| hl7:code | CE | 1 .. 1 | M | | endreapmp |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|------------------|----------|---|------|--------------------------------------|-----------|
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 72113-4 | |
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| h17:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| h17:value | CD | 1 .. 1 | R | Zunächst nur freitextlich formuliert | endreapmp |
| @nullFlavor | cs | 1 .. 1 | F | OTH | |
| | Beispiel | Freitextlich formulierter Grund für die Medikation (als Referenz zum Text in der section) <pre> <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#endrea-1"/> </originalText> </value> </pre> | | | |
| h17:originalText | ED | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| h17:reference | TEL | 1 .. 1 | M | | endreapmp |
| @value | | 1 .. 1 | R | #rea-{generierteID}, z.B.: #endrea-1 | |

3.2.77  Bezug zu Abgabe des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4029 - 2014-12-21 ref pmp-

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4029 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-12-21 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | RelatedDispense | Anzeigename | Bezug zu Abgabe des Medikaments |
| Beschreibung | Bezug zur zugehörigen Abgabe | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|--------------|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4029 | | | | |
| Label | reldismp | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template | | | | |
| | Benutzt | als | Name | Version | |
| | 1.2.276.0.76.10.90014 | Inklusion |  Performer (Body) | DYNAMIC | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.309 CDA Supply (2005-09-07) ref ad1bbr- | | | | |
| <input type="button" value="Alles ausklappen"/> <input type="button" value="Alles einklappen"/> | | | | | |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
| h17:supply | | 1 ... 1 | M | | reldismp |
| @classCode | | 1 ... 1 | F | SPLY | |
| @moodCode | | 1 ... 1 | F | EVN | |
| | | Beispiel Bezug zur zugehörigen Abgabe (id) <pre><supply classCode="SPLY" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4029"/> <id extension="eea5778a-4206-4917-95f7-9a9543841783" root="1.2.276.0.76.3.1.26574.3.6"/> </supply></pre> | | | |
| h17:templateId | II | 1 ... 1 | M | | reldismp |
| @root | | 1 ... 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4029 | |
| h17:id | II | 1 ... 1 | R | | reldismp |
| @nullFlavor | | 0 ... 1 | F | NI | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------------|--------|---------|------|--|----------|
| | | | | Wenn keine zugehörige Abgabe bekannt ist, kann @nullFlavor="NI" angegeben werden | |
| h17:performer | | 0 ... * | | Abgabe durchgeführt von Gesundheitsdienstleister, falls bekannt | reldismp |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90014 <i>Performer (Body)</i> (DYNAMIC) | |
| @typeCode | | 1 ... 1 | F | PRF | |
| h17:time | IVL_TS | 0 ... 1 | | | reldismp |
| h17:assignedEntity | | 1 ... 1 | M | | reldismp |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC) | |
| h17:id | II | 1 ... * | R | | reldismp |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | R | | reldismp |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | R | | reldismp |
| h17:assignedPerson | | 1 ... 1 | M | | reldismp |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| h17:name | PN | 1 ... 1 | M | | reldismp |
| h17:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | reldismp |
| <i>Eingefügt</i> | | | | von 1.2.276.0.76.10.90011 <i>CDA Organization Elements</i> (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------|-----|---------|------|--|----------|
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| h17:id | II | 0 ... * | | | reldismp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1013 Institutskennzeichen Apotheke Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010 BSNR Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208 Apotheken-IDF Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012 Institutskennzeichen Krankenhaus Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:name | ON | 1 ... 1 | M | | reldismp |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> medmgmt-dataelement-1014 Name Institution Datensatz eMedikation v2019 | |
| h17:telecom | TEL | 0 ... * | | | reldismp |
| h17:addr | AD | 0 ... 1 | | | reldismp |

3.2.78 RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020 - 2014-08-25 ref hl7de-

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.90020 ref hl7de- | Gültigkeit | 2014-08-25 |
| Status | Entwurf | Versions-Label | |
| Name | RelatedEntityBody | Anzeigename | RelatedEntity (Body) |
| Beschreibung | Template CDA RelatedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 7 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt von | als | Name Version |

| | | | | |
|---|------------|-------------|---|------------------------|
| 1.2.276.0.76.10.4257 | Inklusion | | Allergie/Unverträglichkeit Observation | 2017-06-04 |
| 1.2.276.0.76.10.4256 | | | Allergie/Unverträglichkeit Concern Act | 2017-06-04 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.16 | | | Allergien und Unverträglichkeiten (medmgmt) | 2019-02-10 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | | | CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.3 | Inklusion | | Medikation (medmgmt) | 2018-11-02 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.14 | | | Medikation Gruppierung (medmgmt) | 2019-02-09 |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.15 | | | Aktuelle Medikation (medmgmt) | 2019-02-09 |
| Benutzt | als | Name | Version | |
| 1.2.276.0.76.10.90010 | Inklusion | | CDA Person Elements | DYNAMIC |



Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.316 *CDA RelatedEntity* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Alles ausklappen | Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|-------------|--------|------|---|-------------|
| @classCode | cs | 1 .. 1 | R | | |
| | CONF | | | Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 <i>RoleClassMutualRelationship</i> (DYNAMIC) | |
| h17:code | CE | 0 .. 1 | | | (Rel...ody) |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 <i>PersonalRelationshipRoleType</i> (DYNAMIC) | |
| h17:addr | AD | 0 .. * | | | (Rel...ody) |
| h17:telecom | TEL | 0 .. * | | | (Rel...ody) |
| h17:effectiveTime | IVL_TS | 0 .. 1 | | | (Rel...ody) |












| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|----|--------|------|---|-------------|
| h17:relatedPerson | | 0 .. 1 | | | (Rel...ody) |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PSN | |
| @determinerCode | | 0 .. 1 | F | INSTANCE | |
| h17:name | PN | 1 .. 1 | M | | (Rel...ody) |

3.2.79  Bezug zu Verordnung des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4028 - 2014-12-21 ref pmp-

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4028 ref pmp- | Gültigkeit | 2014-12-21 |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | |
| Name | RelatedPrescription | Anzeigename | Bezug zu Verordnung des Medikaments |
| Beschreibung | Bezug zur zugehörigen Verordnung | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4028 | | |
| Label | relprepmp | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template | | |
| | Benutzt | als | Name |
| | 1.2.276.0.76.10.90025 | Inklusion  | Author (Body) |
| | | | Version |
| | | | DYNAMIC |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 CDA SubstanceAdministration (2005-09-07) ref ad1bbr- | | |
| Alles ausklappen Alles einklappen | | | |























| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|--|----------|--|------|----------------------|-----------|--|
| hl7:substanceAdministration | | 1 .. 1 | M | | relprepmp | |
| @classCode | | 1 .. 1 | F | SBADM | | |
| @moodCode | | 1 .. 1 | F | INT | | |
| | Beispiel | Bezug zur zugehörigen Verordnung (id) <pre> <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4028"/> <id extension="605d8dba-894b-4d09-84b1-f75b5ae8bc8f" root="1.2.276.0.76.3.1.10652.1.9"/> <consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration> </pre> | | | | |
| hl7:templateId | II | 1 .. 1 | M | | relprepmp | |
| @root | | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4028 | | |
| hl7:id | II | 1 .. 1 | R | | relprepmp | |
| @nullFlavor | | 0 .. 1 | F | NI | | |
| Wenn keine zugehörige Verordnung bekannt ist, kann @nullFlavor="NI" angegeben werden | | | | | | |
| hl7:consumable | | 1 .. 1 | M | | relprepmp | |
| hl7:manufacturedProduct | | 1 .. 1 | M | | relprepmp | |
| hl7:manufacturedMaterial | | 1 .. 1 | | | relprepmp | |
| @nullFlavor | | 1 .. 1 | F | NA | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---------------------|------|--------|------|---|----------|
| hl7:author | | 0 .. 1 | | Verordnender Gesundheitsdienstleister, falls bekannt | relpremp |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90025 Author (Body) (DYNAMIC) | |
| @typeCode | | 0 .. 1 | F | AUT | |
| @contextControlCode | | 0 .. 1 | F | OP | |
| hl7:functionCode | CE | 0 .. 1 | | | relpremp |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMIC) | |
| hl7:time | TS | 1 .. 1 | R | | relpremp |
| hl7:assignedAuthor | | 1 .. 1 | R | | relpremp |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | ASSIGNED | |
| hl7:id | II | 1 .. * | R | | relpremp |
| hl7:code | CE | 0 .. 1 | | | relpremp |
| @codeSystem | CONF | 0 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code) | |
| hl7:addr | AD | 0 .. * | | | relpremp |
| hl7:telecom | TEL | 0 .. * | | | relpremp |
| hl7:assignedPerson | | 0 .. 1 | | | relpremp |
| Eingefügt | | | | von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) | |
| @classCode | | 0 .. 1 | F | PSN | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|--|-----|---------|------|--------------|-----------|
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:name | PN | 1 ... 1 | M | | relprepmp |
| hl7:representedOrganization | | 0 ... 1 | | | relprepmp |
| <i>Eingefügt</i> von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) | | | | | |
| @classCode | | 0 ... 1 | F | ORG | |
| @determinerCode | | 0 ... 1 | F | INSTANCE | |
| hl7:id | II | 0 ... * | | | relprepmp |
| <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1013  Institutskennzeichen Apotheke  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1010  BSNR  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1208  Apotheken-IDF  Datensatz eMedikation v2019 medmgmt-dataelement-1012  Institutskennzeichen Krankenhaus  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | | relprepmp |
| <ul style="list-style-type: none">  medmgmt-dataelement-1014  Name Institution  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | |
| hl7:telecom | TEL | 0 ... * | | | relprepmp |
| hl7:addr | AD | 0 ... 1 | | | relprepmp |

3.2.80  Sozialanamnese (medmgmt) 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 - 2019-07-01 18:11:55

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|
| Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Gültigkeit | 2019-07-01 18:11:55 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|

| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-----------|-------------------------|--|---|---|---------------------|----------------------|-------------|---|---------|----------------------|-------------|---|---------|----------------------|-------------|--|---------|--|--|
| Name | SozialanamneseSectionMedmgt | Anzeigename | Sozialanamnese (medmgt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | <p>Die Section Sozialanamnese enthält eine Beschreibung der gesundheitsbezogenen "Lifestyle-Faktoren" oder "Lebensstil-Beobachtungen" der Person (z. B. Rauchgewohnheiten; Alkoholkonsum; Diäten, riskante Gewohnheiten).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Section level template | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgt-dataelement-1112</td> <td> Sozialanamnese</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgt-dataelement-1112 |  Sozialanamnese |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medmgt-dataelement-1112 |  Sozialanamnese |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 4 Templates | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td>Containment</td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 | Containment |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24</td> <td>Containment</td> <td> Datenübermittlung</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4290</td> <td>Containment</td> <td> Tabakgebrauch</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4291</td> <td>Containment</td> <td> Alkoholgebrauch</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4297</td> <td>Containment</td> <td> Leistungsportler</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 | Containment |  Datenübermittlung | DYNAMIC | 1.2.276.0.76.10.4290 | Containment |  Tabakgebrauch | DYNAMIC | 1.2.276.0.76.10.4291 | Containment |  Alkoholgebrauch | DYNAMIC | 1.2.276.0.76.10.4297 | Containment |  Leistungsportler | DYNAMIC | | |
| Benutzt | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 | Containment |  Datenübermittlung | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4290 | Containment |  Tabakgebrauch | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4291 | Containment |  Alkoholgebrauch | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.276.0.76.10.4297 | Containment |  Leistungsportler | DYNAMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | <p>Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3132 <i>Sozialanamnese</i> (2018-09-13 13:05:20) ref hl7de-</p> <p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.22.3.10 <i>IPS Social History Section</i> (2017-04-13) ref hl7ips-</p> <p>Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16 <i>IHE Social History Section</i> (DYNAMIC) ref IHE-PCC-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.15 *Social history section* (DYNAMIC) [ref ccd1-](#)

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.17 *Social History Section (V3)* (DYNAMIC) [ref bccdapilot-](#)

Beispiel

```
<hl7:section classCode="DOCSECT">

  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23"/>
  <hl7:code code="29762-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
  <hl7:title>Sozialanamnese</hl7:title>
  <hl7:text>

    <hl7:content ID="transfer">Übermittlung Sozialanamnese: ja</hl7:content>
    <hl7:content ID="smok">Raucher*in: Current every day smoker</hl7:content>
    <hl7:content ID="alk">Trinker*in: 1 Drink / Tag</hl7:content>
    <hl7:content ID="coal">Leistungssportler*in: nein</hl7:content>
  </hl7:text>
  <hl7:entry typeCode="DRIV" contextConductionInd="true">

    <!-- template 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 'Datenübermittlung' (2019-08-22T10:32:07) -->

    <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

      <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24"/>
      <hl7:code code="Transfer"/>
      <hl7:text>

        <hl7:reference value="#transfer"/>
      </hl7:text>
      <hl7:statusCode code="completed"/>
      <hl7:value value="true"/>
    </hl7:observation>
  </hl7:entry>
  <hl7:entry typeCode="DRIV" contextConductionInd="true">

    <!-- template 1.2.276.0.76.10.4290 'Tabakgebrauch' (2018-09-13T13:52:42) -->

    <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

      <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.10.4290"/>
      <hl7:code code="72166-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
      <hl7:text>

        <hl7:reference value="#smok"/>
      </hl7:text>
      <hl7:statusCode code="completed"/>
      <hl7:effectiveTime>

        <hl7:low value="20190822103248"/>
      </hl7:effectiveTime>
    </hl7:observation>
  </hl7:entry>
</hl7:section>
```

Beispiel

```
<hl7:value xsi:type="CD" code="LA18976-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Current every day smoker"/>
</hl7:observation>
</hl7:entry>
<hl7:entry typeCode="DRIV" contextConductionInd="true">

  <!-- template 1.2.276.0.76.10.4291 'Alkoholgebrauch' (2018-09-13T13:55:58) -->

  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

    <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.10.4291"/>
    <hl7:code code="74013-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1">

      <hl7:translation/>
    </hl7:code>
    <hl7:text>

      <hl7:reference value="#alk"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <hl7:effectiveTime>

      <hl7:low value="20190822103248"/>
    </hl7:effectiveTime>
    <hl7:value xsi:type="PQ" unit="/d" value="1"/>
  </hl7:observation>
</hl7:entry>
<hl7:entry typeCode="DRIV" contextConductionInd="true">

  <!-- template 1.2.276.0.76.10.4297 'Leistungsportler' (2019-02-09T00:00:00) -->

  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

    <hl7:templateId root="1.2.276.0.76.10.4297"/>
    <hl7:code code="COMPTATHL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.777.27.5.1"/>
    <hl7:text>

      <hl7:reference value="#coal"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <hl7:effectiveTime>

      <hl7:low value="20190822103248"/>
    </hl7:effectiveTime>
    <hl7:value value="false"/>
  </hl7:observation>
</hl7:entry>
</hl7:section>
```

Alles ausklappen

















Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|---------|--|------|--|---------------|
| hl7:section | | | | | (Soz ... mgt) |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> medmgmt-dataelement-1112 Sozialanamnese Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 0 ... 1 | F | DOCSECT | |
| hl7:templateId | II | 1 ... 1 | M | | (Soz ... mgt) |
| @root | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | |
| hl7:id | II | 0 ... * | R | | (Soz ... mgt) |
| hl7:code | CE | 1 ... 1 | M | | (Soz ... mgt) |
| @code | | 1 ... 1 | F | 29762-2 | |
| @codeSystem | CONF | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:title | ST | 1 ... 1 | M | Sozialanamnese | (Soz ... mgt) |
| | CONF | Elementinhalt muss "Sozialanamnese" sein | | | |
| hl7:text | SD.TEXT | 1 ... 1 | M | | (Soz ... mgt) |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Gibt Auskunft darüber, ob der Patient der Übermittlung der Daten zugestimmt hat oder nicht. Wenn der Patient der Übermittlung nicht zugestimmt hat, so ist innerhalb der entry-Elemente jeweils das NullFlavor-Attribut "NI" anzugeben. | (Soz ... mgt) |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|----|---------|------|---|---------------|
| | | | | Wenn der Patient der Übermittlung zugestimmt hat, wird erwartet dass die Felder alle bekannte Werte enthalten. Beinhaltet 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24 <i>Datenübermittlung</i> (DYNAMIC) | |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.24']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true | |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4290 <i>Tabakgebrauch</i> (DYNAMIC) | (Soz ... mgt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4290']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true | |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4291 <i>Alkoholgebrauch</i> (DYNAMIC) | (Soz ... mgt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4291']]] | | | | | |
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true | |
| hl7:entry | | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4297 <i>Leistungssportler</i> (DYNAMIC) | (Soz ... mgt) |
| wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root = '1.2.276.0.76.10.4297']]] | | | | | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-----------------------|----|---------|------|--------------|-------|
| @typeCode | cs | 1 ... 1 | F | DRIV | |
| @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true | |

3.2.81  Tabakgebrauch 1.2.276.0.76.10.4290 - 2018-09-13 13:52:42 ref hl7de-

| Id | 1.2.276.0.76.10.4290 ref hl7de- | Gültigkeit | 2018-09-13 13:52:42 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|--|---------------------|--|---|---|---------------------|--|--|
| Status |  Entwurf | Versions-Label | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Tabakgebrauch | Anzeigename | Tabakgebrauch | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4290 | | | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | | | | | | | | | | | | | | |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziiert mit | Assoziiert mit 1 Konzept | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>medmgmt-dataelement-1113</td> <td> Rauchen</td> <td> Datensatz eMedikation v2019</td> </tr> </tbody> </table> | Id | Name | Datensatz | medmgmt-dataelement-1113 |  Rauchen |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | |
| Id | Name | Datensatz | | | | | | | | | | | | | |
| medmgmt-dataelement-1113 |  Rauchen |  Datensatz eMedikation v2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Benutzt von / Benutzt | Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23</td> <td>Containment</td> <td> Sozialanamnese (medmgmt)</td> <td>2019-07-01 18:11:55</td> </tr> <tr> <td>2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1</td> <td></td> <td> CDA Medikationsmanagement</td> <td>2018-10-13 16:20:07</td> </tr> </tbody> </table> | Benutzt von | als | Name | Version | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | |
| Benutzt von | als | Name | Version | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.23 | Containment |  Sozialanamnese (medmgmt) | 2019-07-01 18:11:55 | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.840.1.113883.3.1937.99.61.48.10.1 |  |  CDA Medikationsmanagement | 2018-10-13 16:20:07 | | | | | | | | | | | | |
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.22.4.34 <i>IPS Social History Tobacco Use</i> (2017-06-20) ref hl7ips- | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.38 <i>Social History Observation (V3)</i> (2015-08-01) ref ccda- | | | | | | | | | | | | | | |

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 CDA Observation (2005-09-07) ref ad1bbr-

Beispiel

Beispiel

```
<observation>

  <templateId/>
  <id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/>
  <code code="72166-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Tobacco smoking status NHIS"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime>

    <low value="20171214094510"/>
  </effectiveTime>
  <value code="LA18976-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Current every day smoker"/>
</observation>
```

Alles ausklappen Alles einklappen

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|------|--------|------|----------------------|-------------|
| h17:observation | | | | | (Tab...uch) |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> medmgmt-dataelement-1113 Rauchen Datensatz eMedikation v2019 </div> | | | | | |
| @classCode | cs | 1 .. 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 .. 1 | F | EVN | |
| h17:templateId | II | 1 .. 1 | M | | (Tab...uch) |
| @root | uid | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4290 | |
| h17:id | II | 0 .. * | | | (Tab...uch) |
| h17:code | CD | 1 .. 1 | M | | (Tab...uch) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | 72166-2 | |

| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|-------------------|--------|--------|------|---|-----------------|
| @codeSystem | | 1 .. 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) | |
| hl7:statusCode | CS | 1 .. 1 | M | | (Tab... uch) |
| @code | CONF | 1 .. 1 | F | completed | |
| hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 .. 1 | R | | (Tab... uch) |
| hl7:value | CD | 1 .. 1 | R | | (Tab... uch) |
| @xsi:type | cs | 1 .. 1 | F | CD | |
| | CONF | | | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.11.22.59 <i>IPS Current Smoking Status</i> (DYNAMIC) | |